

živite svoj život.



Dokument koji sadrži informacije za upotrebu, namijenjen pacijentu:

Uske duge hlače, nogavice i kratke hlače DMO® prilagođene korisniku



www.dmorthotics.com

Naši proizvodi

U izradi naših proizvoda Dynamic Movement Orthoses® prilagođenih korisniku koristi se mekim, fleksibilnim elastomernim tkaninama kojima se pruža čvrsto prijanjanje i stvaraju tlačne sile za poboljšanje proprioceptivnih povratnih informacija. Ta je osnovna tkanina lagana, prozračna i jaka.

To se kombinira s pločama za ojačanje izrađenim od materijala nalik mreži da bi se omogućile čvrstoća i stabilnost tamo gdje je to potrebno, uz poboljšanje držanja i biomehaničkog poravnanja.

Naše ortoze izrađene po mjeri djeluju uz pomoć strateški postavljenih ojačanja kojima se tijelo postavlja u poboljšano posturalno poravnanje. Ovim novim biomehaničkim stanjem, u kombinaciji s poboljšanom propriocepcijom, potiče se i prilagođava neurosenzorni sustav, trenirajući mišiće za rad uz poboljšanje tonusa, snage i performansi.

DMO® pomaže i odraslima i djeci u nošenju s fizičkim posljedicama njihovih neuroloških, mišićno-koštanih i genetskih stanja.

Proizvodi DMO® prilagođeni korisniku izrađuju se individualno po mjeri, a sva pričvršćivanja, otvori i ojačanja propisuju se individualno prema funkcionalnim potrebama i željama svakog pojedinog pacijenta.

Obratite nam se

Da biste doznali više o našim asortimanima proizvoda DMO®, obratite se lokalnom zastupniku ili distributeru proizvoda DMO® ili izravno tvrtki DM Orthotics da biste doznali tko je to.

E-pošta: admin@dmorthotics.com posjetite: www.dmorthotics.com
nazovite: +44 (0) 1209 219205

Kako bi se našim proizvodima pacijenti trebali koristiti

Ortoze izrađene po mjeri, proizvođača DM Orthotics, namijenjene su **da ih upotrebljava isključivo samo jedan određeni pacijent** za potporu držanju i njegovo ispravljanje te za poravnanje zglobova. Ortozu ne smije nositi nijedna druga osoba za koju nije pojedinačno izmjerena i propisana.

Sve ortoze izrađene po narudžbi koje proizvodi tvrtka DM Orthotics jesu medicinski proizvodi kako je to definirano Uredbom (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i objavljeno je da su u skladu s pravilima prema Dodatku II. i III. Uredbi i obuhvaćene su definicijom ortotičkog medicinskog proizvoda: držač, udlaga ili druga umjetna vanjska naprava kojom se služi za podupiranje udova ili kralježnice ili za sprječavanje relativnog kretanja ili pomoć pri takvom kretanju.

Proizvodi su prilagođeni korisniku (u skladu s Prilogom XIII Uredbe o medicinskim proizvodima) i u skladu su s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima (MDR): Proizvod prilagođen korisniku

Datum izdavanja

Naši proizvodi prilagođeni korisniku proizvedeni su prema konkretnom receptu i izdat će im se datum proizvodnje na popratnom obrascu izjave koji se šalje s vašim proizvodom. Ovo je namijenjeno krajnjem korisniku za evidenciju.

Sadržaj

●Upute za nošenje	3
●Upute za pranje	4
●Kontraindikacije i mjere opreza	5

Uske duge hlače, nogavice i kratke hlače prilagođene korisniku

●Namjena	6
●Ciljana populacija pacijenata	7
●Predviđeni korisnici	7
●Učinkovito za pacijente	8
●Upotreba s drugim ortotičkim proizvodima	7

Uske duge hlače prilagođene korisniku

●Način stavljanja i skidanja	9
------------------------------	---

Nogavica prilagođena korisniku

●Način stavljanja i skidanja	9
------------------------------	---

Kratke hlače prilagođene korisniku

●Način stavljanja i skidanja	9
------------------------------	---

●Izjava o zbrinjavanju proizvoda	14
●Izjava o ozbiljnom štetnom događaju	14
●Objašnjenje upotrijebljenih simbola	15

— živite svoj život.

Upute za nošenje

Pažljivo slijedite upute za održavanje. Brigom o ortozi **produljit ćete vrijeme nošenja i spriječiti oštećenja.**

ŠTO BISTE TREBALI RADITI

- Ortozu stavljate i skidate prema savjetu svojeg terapeuta/dobavljača. Posjetite mrežno mjesto: www.dmorthotics.com/productcare
- Pazite kad je stavljate i skidate, pažljivo se pridržavajte uputa u ovoj knjižici – možete je oštetiti grubim navlačenjem i skidanjem i dugim noktima na rukama.
- Važno je postupno povećavati vrijeme nošenja u skladu s individualiziranim uputama.
- Pažljivo slijedite upute za pranje ili se proizvod može oštetiti.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- Nemojte grubo stavljati ili skidati proizvod po mjeri – time možete uzrokovati oštećenje proizvoda: rasporene očice ili razderotine ili rupe u tkanini.
- Nemojte stavljati ili skidati proizvod kad imate duge nokte na rukama, time također možete oštetiti tkaninu.

PROBLEMI S PRISTAJANJEM ILI SIGURNOŠĆU

ODMAH **se obratite** svojem terapeutu/dobavljaču ako proizvod postane uistinu tijesan pa počne ostavljati crvene tragove na koži ili ako se raspore očice i/ili nastanu rupe.

Proizvodi DMO® dizajnirani su na način da se njima nadopunjuju terapija i tjelovježba, stoga ih ne smijete skidati za vrijeme vježbanja, osim ako vam to ne savjetuje terapeut ili imate drugih pitanja glede kojih vam može pomoći.

Vrijeme nošenja

ŠTO BISTE TREBALI RADITI

- Postupno produljujte vrijeme nošenja tijekom prvog tjedna, kao što se navodi u nastavku, svakodnevno udvostručujući količinu vremena dok ortozi ne budete nosili tijekom cijelog radnog dana.

npr. 1. dan – 1 sat

2. dan – 2 sata

3. dan – 4 sata

4. dan – 8 sati

5. dan – cijeli dan tijekom dana. Nakon toga nosite cijeli dan i svaki dan tijekom dana.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- Odmah nositi cijeli dan. Potrebno je postupno povećavati vrijeme nošenja kako bi se zajamčilo praćenje senzornog podražaja, biomehaničkih promjena i prikladnosti.
- Ne nosite uske duge hlače / kratke hlače DMO noću, osim ako vam to ne preporuča liječnik ili kliničar, npr. u slučaju pacijenata s EDS-om kojima to može biti korisno.

Upute za pranje

Pažljivo slijedite upute za održavanje. Brigom o ortozi **produljit ćete vrijeme nošenja i spriječiti oštećenja.**

ŠTO BISTE TREBALI RADITI


- Ortozu trebate prati najmanje svaka 2 – 3 dana.
- Ortoza se može oprati ručno, hladnom vodom, ili u perilici, na 30 stupnjeva.
- Za uklanjanje prekomjerne vlage, osušite u sušilici kratkim programom ili je zamotajte u suhi ručnik.
- Objesite je u zatvorenom prostoru i pustite da se potpuno osuši tijekom noći.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- NE sušite na jakoj, izravnoj sunčevoj svjetlosti ni na radijatoru.
- NEMOJTE CIJEDITI ZAVRTANJEM – rastegnut će se i izgubiti oblik te će se prouzročiti oštećenje materijala.
- NE GLAČAJTE.
- NE KORISTITE IZBJELJIVAČ ILI SREDSTVA ZA IZBJELJIVANJE.
- NE KORISTITE OMEKŠIVAČ
- NE ČISTITE KEMIJSKI.
- NE SUŠITE U SUŠILICI – materijal će se skupiti.

Ako vam trebaju daljnja pomoć i podrška, na svojem mrežnom mjestu dodali smo i upute za stavljanje i skidanje ortoze; posjetite: www.dmorthotics.com/productcare.

Redovitim i pravilnom brigom o ortozi spriječit će se razvijanje neugodnih mirisa i očuvati podatnost materijala. Ako vam je ortoza obrađena srebrom, ono će se morati ponovno nanijeti nakon 100 pranja jer se srebrni ioni počinju razgrađivati nakon 50 pranja.

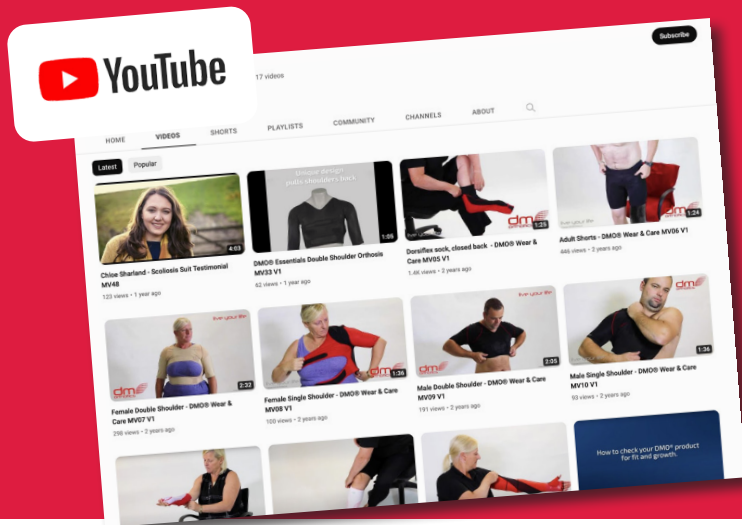

Nošenje naših proizvoda

Izradili smo niz uputa u obliku videozapisa da bismo svojim korisnicima pomogli da se proizvodima služe na najbolji mogući način. Ti vodiči sadrže korisne savjete i preporuke za nošenje naših proizvoda i načine na koje se najbolje možete brinuti o njima kad ih stavljate ili skidate.

Da biste ih pregledali, posjetite: www.dmorthotics.com/productcare

Proizvodi DMO® trebaju se nositi uz kožu. Važno je polako povećavati vrijeme nošenja tijekom prvog tjedna, udvostručujući količinu vremena svaki dan dok ih ne počnete nositi tijekom cijelog dana. npr.

— živite svoj život. KONTRAINDIKACIJE I MJERE OPREZA / RAZMATRANJA

Kontraindikacije

Nema poznatih kontraindikacija za upotrebu proizvoda DMO®. Procjenu proizvoda DMO® prilagođenog korisniku trebao bi provoditi ovlašteni medicinski stručnjak s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama.

Mjere opreza / razmatranja

U nastavku je popis mogućih mjera opreza koje treba uzeti u obzir prije nego što nastavite s propisivanjem proizvoda DMO® prilagođenog korisniku. O tome treba razgovarati sa stručno kvalificiranim medicinskim stručnjakom koji može predložiti alternativni proizvod DMO® ili izmjenu željenog proizvoda DMO®.

Loša regulatorna kontrola temperature

DMO neće utjecati na regulatorni centar za temperaturu u tijelu. Međutim, DMO treba tretirati kao sloj odjeće i slojevi odjeće trebaju se prilagoditi toplom ili hladnom vremenu u skladu s tim. Prilagoditi se mogu elementi kao što su kratke noge i ruke kako bi se poboljšala kontrola topline.

Primarni poremećaji cirkulacije

Određeni primarni respiratorni problemi kod kojih mišići postaju slabiji zbog propadanja živaca/mišića trebat će se pažljivo razmotriti i može biti potreban razgovor s pacijentovim liječnikom – iako se specifikacija odijela može izmijeniti kako bi se to prilagodilo. Problemi sekundarne cirkulacije povezani s cerebralnom paralizom mogu se ublažiti zahvaljujući poboljšanom držanju trupa/tijela i poboljšanom položaju rebara.

Stanja kože

Stanja kože koja se mogu pogoršati bliskim kontaktom sa sintetičkim materijalima tijekom duljeg razdoblja mogu zahtijevati daljnje savjetovanje sa zdravstvenim radnikom koji nadgleda pacijentovo dermatološko liječenje, ali to je rijetko kontraindikacija.

Krhkost skeleta / lomljive kosti

Neka stanja mogu biti dobro podržana proizvodom DMO®, ali o tome treba razgovarati s liječnikom. Na željenom proizvodu mogu se napraviti izmjene kao što su dodavanje patentnih zatvarača ili kopči ili upotreba kratkih ruku ili nogu umjesto dugih ruku ili nogu.

Gastrostoma, stoma i drugi medicinski zahtjevi

Proizvod prilagođen korisniku možemo proizvesti s posebnim otvorom za klin za gastrostomu, stomu, suprapubični kateter itd. To će se dodati u fazi postavljanja kako bi se zajamčilo precizno postavljanje. Razgovarajte o tome sa svojim liječnikom koji može potražiti dodatne savjete od iskusnog kliničkog tima u društvu DMO®.

Uske duge hlače, nogavice i kratke hlače DMO® prilagođene korisniku

Namjena

Namjena uskih dugih hlača DM28, nogavica DM30/31 i kratkih hlača DM32 jest poravnanje donjeg dijela trupa, zdjelice, kukova i donjih udova. Točno mjesto djelovanja određuje se odabirom proizvoda. Poboljšava simetriju i pomaže stabilizaciji. Uske duge hlače DM28, nogavice DM30/31 i kratke hlače DM32 pružaju nerestriktivnu i vrlo učinkovitu razinu potpore za maksimalnu stabilnost zdjelice i donjih udova. Proizvod pomaže i distalnoj kontroli i pozitivno utječe na mišićni tonus radi poboljšanja funkcije.

Indikacije

Djeca ili odrasli s malim ili velikim mišićnim tonusom, senzornim ili proprioceptivnim problemima, nedostatkom stabilnosti mišića središta tijela, zdjelice ili donjih udova. Djeca ili odrasli koji imaju bolove povezane s lošim poravnanjem ili umorom uzrokovanim nemogućnošću održavanja ispravljenog držanja zdjelice ili donjih udova.

Razmatranja

Ovisno o visini nosača trupa odabranog proizvoda, mora se uzeti u obzir sljedeće.

Određeni primarni respiratorni problemi kod kojih mišići postaju slabiji zbog propadanja živaca/mišića iako se specifikacija ortoze može promijeniti kako bi se to prilagodilo.

Sekundarni respiratorni problemi povezani s cerebralnom paralizom mogu se ublažiti zahvaljujući poboljšanom držanju trupa/tijela i poboljšanom položaju rebara. Pogledajte prethodnu stranicu za druge kontraindikacije/razmatranja.



Ciljana populacija pacijenata

Pacijenti muškog i ženskog spola obično u dobi od dvije godine ili stariji, iako djeca mlađa od dvije godine mogu imati koristi od uskih dugih hlača DM28, nogavica DM30/31 i kratkih hlača DM32. Niži dobni prag postavljen je zbog povećanog rasta u toj fazi koji bi zahtijevao prilagodbu ili preinaku, a ne zbog nemogućnosti postizanja željene svrhe. Ne postoji gornja dobna granica za uske duge hlače DM28, nogavice DM30/31 i kratke hlače DM32.

Razna medicinska stanja koja se javljaju sa simptomima kod kojih uske duge hlače DM28, nogavice DM30/31 i kratke hlače DM32 mogu pomoći, uključuju pogledajte stranicu 8 (nije sveobuhvatno).

Razumno visok stupanj spretnosti i mišićnog tonusa potreban je onima koji će sami oblačiti i svlačiti ortoza. Njegovatelj će morati pomoći u oblačenju i svlačenju ortoza u situacijama kad to nije slučaj.

Predviđeni korisnici

Za uske duge hlače DM28, nogavice DM30/31 i kratke hlače DM32 potrebni su recept i specifikacija koje izdaje kompetentni zdravstveni radnik, obično kvalificirani ortoped ili fizioterapeut koji je završio odgovarajuću obuku o propisivanju i upotrebi ortoza za dinamičko kretanje. Takav kompetentni zdravstveni djelatnik također će morati procijeniti pristajanje proizvoda i dati dodatne savjete o specifikacijama za poboljšanje pristajanja proizvoda tamo gdje je potrebno.

Nositelj ortoza obično će biti laik.

Nositeljev njegovatelj može biti uključen u stavljanje i skidanje. Pranje i prijavljivanje bilo kakvih problema s ortozom obično će izvoditi laik.

Dotični proizvod izrađen je po mjeri i zahtijeva specifikaciju zdravstvenog radnika osposobljenog za upotrebu ortoza za dinamičko kretanje. Za to će biti potreban skup mjerenja za obavljanje kojih će tvrtka DM Orthotics prethodno osposobiti zdravstvenog radnika.

Osposobljeni zdravstveni djelatnik također mora propisati niz različitih ploča za ojačanje prema potrebi.



Uske duge hlače DMO® prilagođene korisniku

Učinkovito za:

- cerebralnu paralizu
- oštećenja donjih ekstremiteta
- multiplu sklerozu
- Ehlers-Danlosov sindrom
- hipertonus i hipotonus
- i više

Proizvodom se pruža:

- stabilnost zdjelice
- poboljšanje u poravnanju kuka i koljena
- poboljšanje vanjske/unutarnje rotacije kuka
- povećanu senzornu svjesnost
- poboljšano držanje
- poboljšana funkcija mišića
- otklanjanje boli
- čvrstoća i stabilnost uz pomoć ploča za ojačanje

Dodatne značajke:

- neobvezni otvor preko prepona
- kompresijska tkanina za udobnost i kretanje
- poboljšano pozicioniranje nogu
- nosi se ispod odjeće

Kratke hlače DMO® prilagođene korisniku

Učinkovito za:

- cerebralnu paralizu
- multiplu sklerozu
- ataksiju
- mišićni hipotonus
- stečenu i traumatsku ozljeda mozga
- Ehlers-Danlosov sindrom
- poremećaje u obrascima hodanja
- moždani udar
- Parkinsonovu bolest
- Huntingtonovu koreu
- i više

Proizvodom se pruža:

- stabilnost zdjelice
- ekstenzija kuka i koljena
- smanjenje vanjske/unutarnje rotacije kuka
- povećanu senzornu svjesnost
- poboljšano držanje
- poboljšana funkcija mišića
- smanjenje boli

Dodatne značajke:

- kompresijska tkanina za udobnost i kretanje
- neobvezni otvor preko prepona
- čvrstoća i stabilnost uz pomoć ploča za ojačanje
- nosi se ispod odjeće

Nogavica DMO®

Učinkovito za:

- cerebralnu paralizu
- oštećenja donjih ekstremiteta
- multiplu sklerozu
- Ehlers-Danlosov sindrom
- hipertonus i hipotonus
- i više

Proizvodom se pruža:

- stabilnost zdjelice
- poboljšanje u poravnanju kuka i koljena
- poboljšanje vanjske/unutarnje rotacije kuka
- povećanu senzornu svjesnost
- poboljšano držanje
- poboljšana funkcija mišića
- otklanjanje boli
- čvrstoća i stabilnost uz pomoć ploča za ojačanje

Dodatne značajke:

- kompresijska tkanina za udobnost i kretanje
- čvrstoća i stabilnost uz pomoć ploča za ojačanje
- nosi se ispod odjeće

Nogavica DMO® s dodatkom

Učinkovito za:

- cerebralnu paralizu
- oštećenja donjih ekstremiteta
- multiplu sklerozu
- Ehlers-Danlosov sindrom
- hipertonus i hipotonus
- i više

Proizvodom se pruža:

- stabilnost zdjelice
- poboljšanje u poravnanju kuka i koljena
- poboljšanje vanjske/unutarnje rotacije kuka
- povećanu senzornu svjesnost
- poboljšano držanje
- poboljšana funkcija mišića
- otklanjanje boli
- čvrstoća i stabilnost uz pomoć ploča za ojačanje


Dodatne značajke:

- kompresijska tkanina za udobnost i kretanje
- čvrstoća i stabilnost uz pomoć ploča za ojačanje
- nosi se ispod odjeće

— živite svoj život.

Mjere opreza:

- Skinite satove i nakit prije stavljanja ortoze.
- Ako uske kratke hlače imaju i patentni zatvarač, provjerite jesu li patentni zatvarači postavljeni preko kože prije njihova povlačenja i da nisu okrenuti unatrag.
- Uske kratke hlače potrebno je skinuti ako je pacijent bolestan ili ima temperaturu.
- Ako postoji bilo kakva nedoumica u vezi s odgovarajućom veličinom, tj. ako ekstremiteti poplave ili su iznimno hladni na dodir, u tom slučaju skinite proizvod i o tomu smijesta obavijestite svoj klinički tim, u svrhu daljnje procjene.

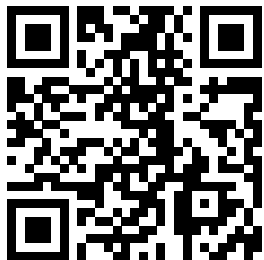

Upotrijebite gore navedeni kôd QR da biste pristupili našim videozapisima za nošenje proizvoda ili brigu o njemu; ili posjetite mrežno mjesto: www.dmorthotics.com/productcare

Upute za primjenu kratkih hlača DMO® prilagođenih korisniku

Način primjene kratkih hlača DMO® prilagođenih korisniku.

Pacijent će trebati sjesti kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost te da bi se jamčilo da su se uske kratke hlače ispravno odjenule.



Ako uske kratke hlače sadrže patentni zatvarač na struku, rastvorite ga prije nego što ih navučete. Uzmite kratke hlače (oznaka neka im bude na stražnjoj strani) i povucite ih prema gore, uz noge (kao što biste i par uskih dugih hlača). Vodite računa o tomu da ih, prije povlačenja preko kukova, prvo povučete preko koljena i duž bedara.




Uske kratke hlače povucite do struka i zatvorite patentni zatvarač ako ga proizvod sadrži.

— živite svoj život.

Način uklanjanja kratkih hlača DMO® prilagođenih korisniku.

Pacijent će trebati sjesti kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost te da bi se jamčilo da su se uske kratke hlače ispravno skinule.

Kako bi uske kratke hlače trebale izgledati kada se odjenu:

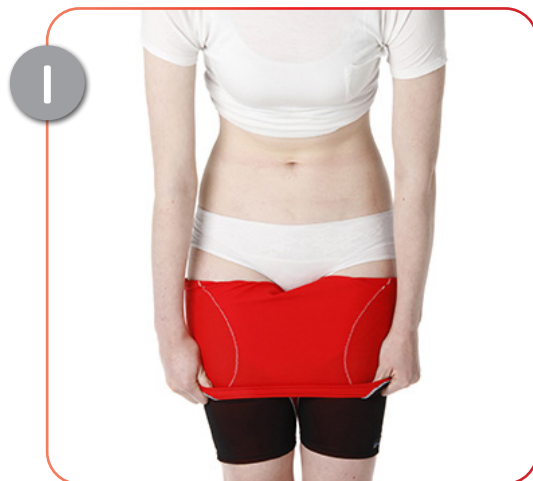

Zavrните kratke hlače niz noge, prema stopalima, lagano povlačeći iznutra prema van. .



Svaku nogu pojedinačno izvucite iz ortoze.

Kako provjeriti pristaju li:

- Uske kratke hlače trebale bi čvrsto pristajati uz tijelo, ali kažiprst biste trebali moći uvući ispod donjeg ruba nogavica te oko struka.
- Šavovi/obrubi ortoze mogu ostaviti lagana udubljenja na koži kad se hlače skinu, ali ako su bilo kakvi tragovi pretjerano crveni i 25 – 30 minuta nakon skidanja, hlače su možda pretijesne.
- Ako ste u bilo kakvoj nedoumici u vezi s odgovarajućim pristajanjem ortoza, o tomu smjesta obavijestite svojeg terapeuta jer se ortoza besplatno preinačuje samo u roku od prvih šest tjedana.

Upute za primjenu uskih dugih hlača DMO® prilagođenih korisniku

Način primjene uskih dugih hlača DMO®.

Pacijent će trebati sjesti ili leći kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost.

Mjere opreza:

- Skinite satove i nakit prije stavljanja ortoze.
- Provjerite jesu li patentni zatvarači postavljeni preko kože prije njihova povlačenja i da nisu okrenuti unatrag.
- Uske duge hlače ne smiju se nositi noću (osim ako se o tome ne razgovora s liječnikom ili fizioterapeutom. Neke osobe kojima je dijagnosticiran EDS mogu imati koristi od nošenja tijekom noći, ali to se mora potvrditi prije nego što to učine). ili ako je korisnik bolestan ili ima temperaturu.
- Ako postoji bilo kakva nedoumica u vezi s odgovarajućom veličinom, tj. ako ekstremiteti poplave ili su iznimno hladni na dodir, u tom slučaju skinite proizvod i o tomu smjesta obavijestite svoj klinički tim, u svrhu daljnje procjene.

Kako provjeriti pristaju li:

- Uske duge hlače trebale bi čvrsto pristajati uz tijelo, ali kažiprst biste trebali moći uvući ispod donjeg ruba nogavica te oko struka.



Izvadite ortozu iz ambalaže.



Ako proizvod sadrži patentne zatvarače za tijelo ili gležanj, rastvorite ih prije odijevanja uskih dugih hlača.



Stavite stopalo u svileni aplikator. Ako je potreban i ako se isporučio uz proizvod.



Uvucite desnu nogu kroz desnu nogavicu ortoze.



Nježno povucite desnu nogavicu ortoze prema koljenu.



Nastavite nježno povlačiti prema koljenu dok donji obrub ortoze desne noge ne bude iznad gležnja.




Skinite svileni aplikator s desnog stopala.



Stavite lijevo stopalo u svileni aplikator. Za rukav za noge pogledajte sliku 10

9

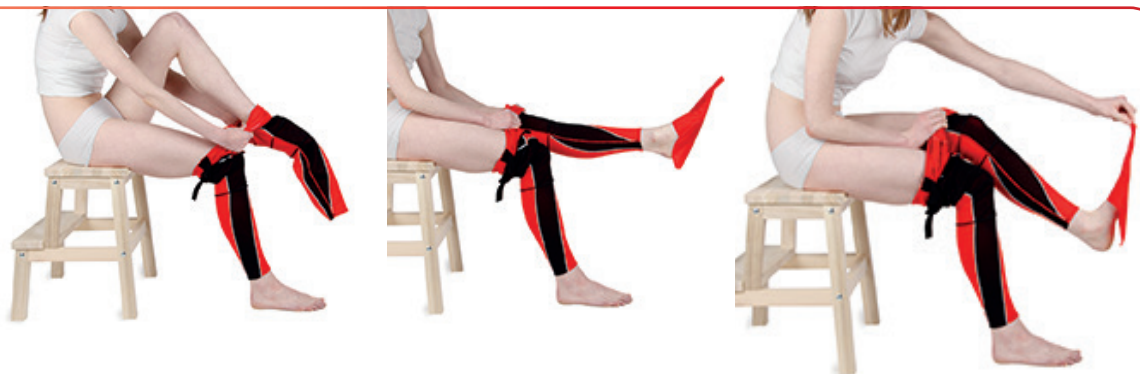

Ponovite korake 4. – 7. Zatim sa stopala skinite svileni aplikator. Vodite računa o tomu da uske duge hlače, prije pokušaja njihova povlačenja preko kukova i tijela, prvo povučete do bedara.

10




Uske duge hlače nježno povucite prema gore, prema bokovima.

11




Provjerite je li silikon u dodiru s kožom na vrhu ortoze i zatvorite sve patentne zatvarače na nogavicama.

12

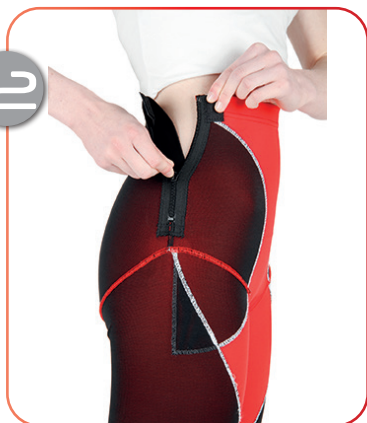

Zatvorite bočni patentni zatvarač ako ga proizvod sadrži.

13

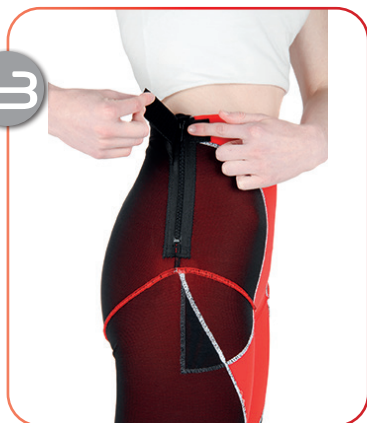

Pričvrstite jezičak prema naprijed. Dostavlja se samo gdje je potreban patentni zatvarač.

14



Na slici se prikazuje jezičak pričvršćen na prednjoj strani ortoze.

15



Kako bi uske duge hlače trebale izgledati kada se pravilno odjenu.

Za provjeru pristajanja Nastavak:

- Šavovi/obrubi uskih dugih hlača mogu ostaviti lagana udubljenja na koži kad se hlače skinu, ali ako su bilo kakvi tragovi pretjerano crveni i 25 – 30 minuta nakon skidanja, hlače su možda pretijesne.
- Ako ste u bilo kakvoj nedoumici u vezi s odgovarajućim pristajanjem ortoze, o tomu smjesta obavijestite svojeg terapeuta jer se ortoza besplatno preinačuje samo u roku od prvih šest tjedana.


živite svoj život.

Upute za primjenu uskih dugih hlača DMO® prilagođenih korisniku


Način uklanjanja uskih dugih hlača DMO®.

Pacijent će trebati sjesti ili leći kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost.

Kako bi uske duge hlače trebale izgledati kada se odjenu:

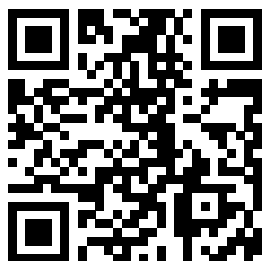


Upotrijebite gore navedeni kôd QR da biste pristupili našim videozapisima za nošenje proizvoda ili brigu o njemu; ili posjetite mrežno mjesto: www.dmorthotics.com/productcare

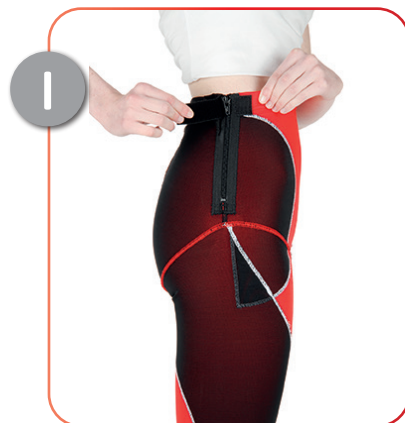

Oslobodite jezičak ako je postavljen.



Rastvorite patentni zatvarač na tijelu ako ga proizvod sadrži. Rastvorite patentne zatvarače na gležnjevima ako ih proizvod sadrži.

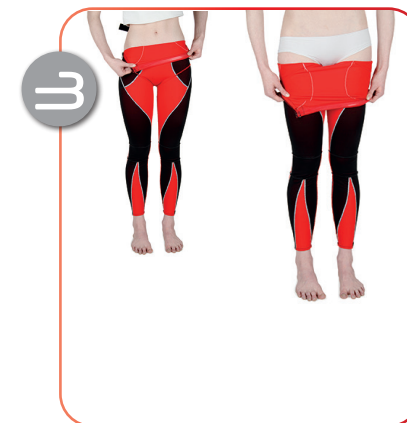

Zavrните gornji dio uskih dugih hlača prema koljenima, lagano povlačeći iznutra prema van.



Sjedeći, uske duge hlače nastavite zavrtati prema dolje, prema koljenima.



Sjedeći, uske duge hlače nastavite zavrtati prema dolje, prema koljenima.



Uske duge hlače zavrните do gležnjeva na objema nogama.



Izvadite stopala iz nogavica uskih dugih hlača.

Upute za primjenu nogavice DMO® prilagođene korisniku

Način primjene nogavice DMO® – s dodatkom ili bez njega.

Pacijent će trebati sjesti ili leći kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost.

Mjere opreza:

- Skinite satove i nakit prije stavljanja ortoze.
- Provjerite jesu li patentni zatvarači postavljeni preko kože prije njihova povlačenja i da nisu okrenuti unatrag.
- Uske duge hlače ne smiju se nositi noću (osim ako se o tome ne razgovora s liječnikom ili fizioterapeutom. Neke osobe kojima je dijagnosticiran EDS mogu imati koristi od nošenja tijekom noći, ali to se mora potvrditi prije nego što to učine). ili ako je korisnik bolestan ili ima temperaturu.
- Ako postoji bilo kakva nedoumica u vezi s odgovarajućom veličinom, tj. ako ekstremiteti poplave ili su iznimno hladni na dodir, u tom slučaju skinite proizvod i o tomu smjesta obavijestite svoj klinički tim, u svrhu daljnje procjene.

Kako provjeriti pristaju li:

- Uske duge hlače trebale bi čvrsto pristajati uz tijelo, ali kažiprst biste trebali moći uvući ispod donjeg ruba nogavice te oko struka.



Izvadite ortozu iz ambalaže.



Stavite stopalo u svileni aplikator. Ako je potreban i ako se isporučio uz proizvod.



Nježno povucite desnu nogavicu prema koljenu.




Zatim sa stopala skinite svileni aplikator.



Za nogavicu bez dodatka, nježno podignite nogavicu do bedra i provjerite je li gornja silikonska traka na ispravnom mjestu na vrhu nogavice.




Provjerite je li silikon u dodiru s kožom na vrhu ortoze.

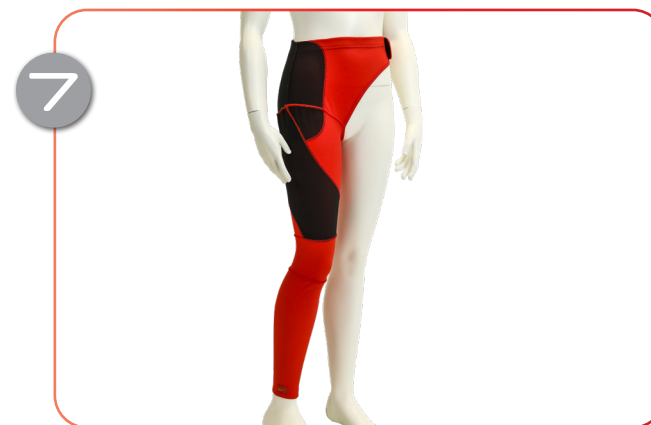

Za nogavicu s dodatkom, nježno povucite nogavicu prema kuku. Vodite računa o tomu da uske duge hlače, prije pokušaja njihova povlačenja preko kuka i tijela, prvo povučete do bedara. Sada pričvrstite dodatak u obliku čička na drugom kuku.

živite svoj život.

Kako nogavice s dodatkom ili bez njega izgledaju kad se odjenu.

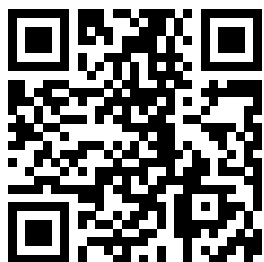

Upotrijebite gore navedeni kôd QR da biste pristupili našim videozapisima za nošenje proizvoda ili brigu o njemu; ili posjetite mrežno mjesto: www.dmorthotics.com/productcare

Upute za primjenu nogavice DMO® prilagođene korisniku

Način uklanjanja nogavice DMO® – s dodatkom ili bez njega.

Pacijent će trebati sjesti ili leći kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost.



Otpustite jezičak u obliku čička na drugom kuku.



Za nogavicu, nježno spustite nogavicu niz nogu prema koljenu lagano povlačeći iznutra prema van.



Nastavite nježno spuštati nogavicu, preko koljena i sa stopala.

Izjava o zbrinjavanju proizvoda

Proizvodi proizvođača DM Orthotics jesu ortoze 1. razreda / prilagođene korisniku. Nisu potrebne mjere opreza za zbrinjavanje proizvoda DMO®. Materijale kojima se koristi za proizvodnju možete zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za odlaganje odjeće/materijala. Operite proizvod prije njegova odlaganja.

Izjava o ozbiljnom štetnom događaju

Ako dođe do ozbiljnog štetnog događaja u vezi s vašim proizvodom DMO®, smjesta biste ga trebali prijaviti proizvođaču (DM Orthotics) i nadležnom tijelu odgovornom za medicinske proizvode u svojoj državi članici; primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu, to bi bila Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (engl. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency; MHRA).

Proizvođač



Identifikacija pacijenta



ID proizvoda/modela




Proizvedeno u Britaniji



Zastupnik




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 Den Haag
Nizozemska

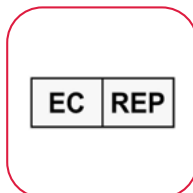

Ime i prezime kliničara



Broj narudžbe

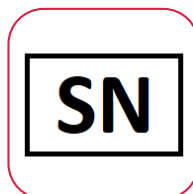

Medicinski proizvod



Imajte na umu da se korisnicima ne preporučuje izvođenje preinaka, a samom izmjenom ortoze možete utjecati na jamstvo ili se ono može smatrati nevažećim. Obratite se kliničkom stručnjaku ili tvrtki DM Orthotics ako vam trebaju informacije o izmjenama i preinakama proizvoda.



Proizvođač:
DM Orthotics Ltd.
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Dizajnirano i proizvedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu

© Autorsko pravo 2024., DM Orthotics Ltd. Primjenjuju se prijave патената i dizajna

DM28 – 5054522000142 (UDI-DI)
DM30 – 5054522000166 (UDI-DI)
DM31 – 5054522000173 (UDI-DI)
DM32 – 5054522000180 (UDI-DI)



Proizvođač: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 Den Haag
Nizozemska

DM-002703-MK (Issue 2)