

živite svoj život.



Dokument koji sadrži informacije za upotrebu, namijenjen pacijentu:

Ortoza DMO® Essentials / unaprijed određene veličine za jedno rame i dva ramena



www.dmorthotics.com

Naši proizvodi

DM Orthotics vodeća je tvrtka u svijetu u dizajnu i proizvodnji vlastitih patentiranih ortoza Dynamic Movement Orthoses® (DMO®).

Proizvodi DMO® služe se biomehaničkim oblogama i strateškim pojačanjima za poboljšanje posturalnog poravnanja i povećanje propriocepcije. Ti čimbenici zatim stimuliraju i prilagođavaju mišiće za treniranje neurosenzornog sustava za rad pa se postižu poboljšani tonus, snaga i učinak.

Ortoze DMO® Essentials za jedno rame i dva ramena set su ortoza unaprijed određene veličine od tkanine i dobra isplativa mogućnost ako želite testirati hoće li ortoza prilagođena korisniku biti od koristi pacijentu. Učinkovito djeluju kao početni proizvod za jedno mjerenje.

Proizvod je napravljen da bi korisniku pružio poboljšanu udobnost, poboljšano držanje i poboljšan raspon pokreta. Dizajniran je za nošenje uz kožu; poboljšane proprioceptivne povratne informacije i biomehaničko pozicioniranje tih dizajna pomažu treniranju mišića za rad; što dovodi do poboljšanog tonusa, snage i učinka.

Sve te prednosti imaju jedan cilj – poboljšanje rada i poticanje neovisnosti korisnika.

Proizvodi DMO® Essentials unaprijed određene veličine napravljeni su prema postavljenim veličinama i za djecu i odrasle i kombinacija su naše kompresijske/senzorne tkanine i kombinirani s brojnim pločama za ojačanje koje su strateški postavljene radi koristi za pacijenta. Ne mogu se mijenjati i daljnja pojačanja nisu dopuštena. Može ih preporučiti kliničar gdje standardni proizvod iz redovne ponude može biti od koristi ili se mogu naručiti izravno s našeg mrežnog mjesta uz samo jedno mjerenje.

Obratite nam se

Da biste doznali više o našim asortimanima proizvoda DMO®, obratite se lokalnom zastupniku ili distributeru proizvoda DMO® ili izravno tvrtki DM Orthotics da biste doznali tko je to.

E-pošta: admin@dmorthotics.com posjetite: www.dmorthotics.com
nazovite: +44 (0) 1209 219205

Kako bi se našim proizvodima pacijenti trebali koristiti

Proizvodi DMO Orthotic Essential namijenjeni su podupiranju i ispravljanju držanja tijela i poravnanja zglobova tamo gdje nisu potrebni daljnje individualno namještanje ili dodatna pojačanja.

Sve su ortoze tvrtke DM Orthotics medicinski proizvodi kako je to definirano Uredbom (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i izjavljeno je da su u skladu s pravilima prema Dodatku II. i III. Uredbi i obuhvaćene su definicijom ortotičkog medicinskog proizvoda: držač, udaga ili druga umjetna vanjska naprava kojom se služi za podupiranje udova ili kralježnice ili za sprječavanje relativnog kretanja ili pomoć pri takvom kretanju.

Proizvodi su dizajnirani i proizvedeni u skladu s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i izjavljeno je da su u skladu s propisima u skladu s Dodatkom II. i III. toj uredbi.

Datum izdavanja

Naši medicinski proizvodi proizvedeni su i izdani s datumom proizvodnje na priloženom obrascu izjave koji se šalje s vašim proizvodom. Ovo je namijenjeno krajnjem korisniku za evidenciju.

Sadržaj

●Upute za nošenje	3
●Upute za pranje	4
●Kontraindikacije i mjere opreza	5
Essentials unaprijed određene veličine za jedno rame	6
●Namjena	6
●Ciljana populacija pacijenata	6
●Predviđeni korisnici	6
●Učinkovito za pacijente	6
●Način stavljanja i skidanja	8
Essentials unaprijed određene veličine za dva ramena	7
●Namjena	7
●Ciljana populacija pacijenata	7
●Predviđeni korisnici	7
●Učinkovito za pacijente	7
●Način stavljanja i skidanja	10

— živite svoj život.

Upute za nošenje

Pažljivo slijedite upute za održavanje. Brigom o ortozi **produljit ćete vrijeme nošenja i spriječiti oštećenja.**

ŠTO BISTE TREBALI RADITI

- Ortozu stavljate i skidate prema savjetu svojeg terapeuta/ dobavljača. Posjetite mrežno mjesto: www.dmorthotics.com/productcare
- Pazite kad je stavljate i skidate, pažljivo se pridržavajte uputa u ovoj knjižici – možete je oštetiti grubim navlačenjem i skidanjem i dugim noktima na rukama.
- Važno je postupno povećavati vrijeme nošenja u skladu s individualiziranim uputama.
- Pažljivo slijedite upute za pranje ili se proizvod može oštetiti.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- Nemojte grubo stavljati ili skidati proizvod – time možete uzrokovati oštećenje proizvoda: rasporene očice ili razderotine ili rupe u tkanini.
- Nemojte stavljati ili skidati proizvod kad imate duge nokte na rukama, time također možete oštetiti tkaninu.

PROBLEMI S PRISTAJANJEM ILI SIGURNOŠĆU

ODMAH **se obratite** svojem terapeutu/dobavljaču ako proizvod postane uistinu tijesan pa počne ostavljati crvene tragove na koži ili ako se raspore očice i/ili nastanu rupe.

Proizvodi DMO® dizajnirani su na način da se njima nadopunjuju terapija i tjelovježba, stoga ih ne smijete skidati za vrijeme vježbanja, osim ako vam to ne savjetuje terapeut ili imate drugih pitanja glede kojih vam može pomoći.

Vrijeme nošenja

ŠTO BISTE TREBALI RADITI

- Postupno produljujte vrijeme nošenja tijekom prvog tjedna, kao što se navodi u nastavku, svakodnevno udvostručujući količinu vremena dok ortozi ne budete nosili tijekom cijeloga radnog dana.

npr. 1. dan – 1 sat
2. dan – 2 sata
3. dan – 4 sata
4. dan – 8 sati
5. dan – cijeli dan tijekom dana. Nakon toga nosite cijeli dan i svaki dan tijekom dana.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- Odmah nositi cijeli dan. Potrebno je postupno povećavati vrijeme nošenja kako bi se zajamčilo praćenje senzornog podražaja, biomehaničkih promjena i prikladnosti.
- Ne nosite DMO noću, osim ako vam to ne preporuči liječnik ili kliničar, npr. u slučaju pacijenata s EDS-om nošenje noću može biti korisno.

Upute za pranje

Pažljivo slijedite upute za održavanje. Brigom o ortozi **produljit ćete vrijeme nošenja i spriječiti oštećenja.**

ŠTO BISTE TREBALI RADITI


- Ortozu trebate prati najmanje svaka 2 – 3 dana.
- Ortoza se može oprati ručno, hladnom vodom, ili u perilici, na 30 stupnjeva.
- Za uklanjanje prekomjerne vlage, osušite u sušilici kratkim programom ili je zamotajte u suhi ručnik.
- Objesite je u zatvorenom prostoru i pustite da se potpuno osuši tijekom noći.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- NE sušite na jakoj, izravnoj sunčevoj svjetlosti ni na radijatoru.
- NEMOJTE CIJEDITI ZAVRTANJEM – rastegnuto će se i izgubiti oblik te će se prouzročiti oštećenje materijala.
- NE GLAČAJTE.
- NE KORISTITE IZBJELJIVAČ ILI SREDSTVA ZA IZBJELJIVANJE.
- NE KORISTITE OMEKŠIVAČ
- NE ČISTITE KEMIJSKI.
- NE SUŠITE U SUŠILICI – materijal će se skupiti.

Ako vam trebaju daljnja pomoć i podrška, na svojem mrežnom mjestu dodali smo i upute za stavljanje i skidanje ortoze; posjetite: www.dmorthotics.com/productcare.

Redovitim i pravilnom brigom o ortozi spriječit će se razvijanje neugodnih mirisa i očuvati podatnost materijala. Ako vam je ortoza obrađena srebrom, ono će se morati ponovno nanijeti nakon 100 pranja jer se srebrni ioni počinju razgrađivati nakon 50 pranja.

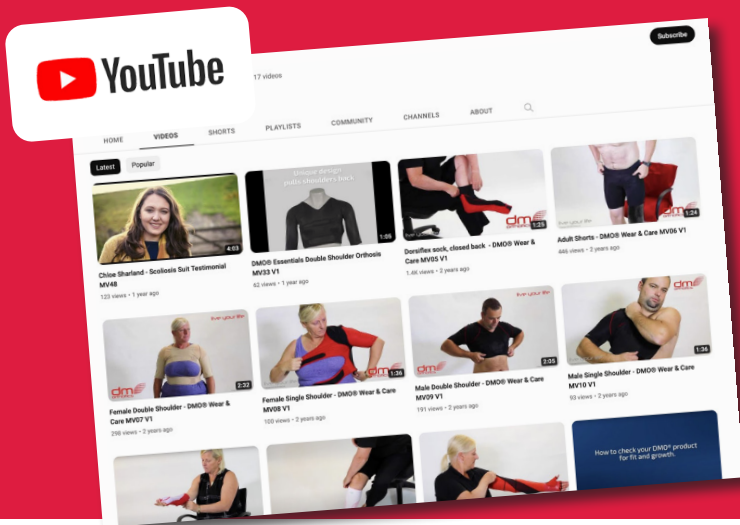

Nošenje naših proizvoda

Izradili smo niz uputa u obliku videozapisa da bismo svojim korisnicima pomogli da se proizvodima služe na najbolji mogući način. Ti vodiči sadrže korisne savjete i preporuke za nošenje naših proizvoda i načine na koje se najbolje možete brinuti o njima kad ih stavljate ili skidate.

Da biste ih pregledali, posjetite: www.dmorthotics.com/productcare

Proizvodi DMO® trebaju se nositi uz kožu. Važno je polako povećavati vrijeme nošenja tijekom prvog tjedna, udvostručujući količinu vremena svaki dan dok ih ne počnete nositi tijekom cijelog dana. npr.

— živite svoj život. KONTRAINDIKACIJE I MJERE OPREZA / RAZMATRANJA

Kontraindikacije

Nema poznatih kontraindikacija za upotrebu proizvoda DMO®. Procjenu proizvoda DMO® trebao bi provoditi ovlašteni medicinski stručnjak s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama.

Mjere opreza / razmatranja

U nastavku je popis mogućih mjera opreza koje treba uzeti u obzir prije nego što nastavite s propisivanjem proizvoda DMO®. O tome treba razgovarati sa stručno kvalificiranim medicinskim stručnjakom koji može predložiti alternativni proizvod DMO®.

Loša regulatorna kontrola temperature

DMO neće utjecati na regulatorni centar za temperaturu u tijelu. Međutim, DMO treba tretirati kao sloj odjeće i slojevi odjeće trebaju se prilagoditi toplom ili hladnom vremenu u skladu s tim.

Primarni poremećaji cirkulacije

Određeni primarni respiratorni problemi kod kojih mišići postaju slabiji zbog propadanja živaca/mišića trebat će se pažljivo razmotriti i može biti potreban razgovor s pacijentovim liječnikom. Problemi sekundarne cirkulacije povezani s cerebralnom paralizom mogu se ublažiti zahvaljujući poboljšanom držanju trupa/tijela i poboljšanom položaju rebra.

Stanja kože

Stanja kože koja se mogu pogoršati bliskim kontaktom sa sintetičkim materijalima tijekom duljeg razdoblja mogu zahtijevati daljnje savjetovanje sa zdravstvenim radnikom koji nadgleda pacijentovo dermatološko liječenje, ali to je rijetko kontraindikacija.

Krhkost skeleta / lomljive kosti

Neka stanja mogu biti dobro podržana proizvodom DMO®, ali o tome treba razgovarati s liječnikom.

Ortoza DMO® Essentials unaprijed određene veličine za jedno rame

Namjena

Ortoze ramena DMO® i to i pojedinačne i dvostruke ortoze, napravljene su za liječenje oštećenja ramena te pružanje stabilizacije i ponovnog poravnanja trupa, ramena i gornjih udova.

Razvijenim opsežnim istraživanjima, njihovim jedinstvenim dizajnom ramena se povlače unatrag, podupiru lopatice i stabiliziraju zglobovi ramena, pružajući time veću udobnost te poboljšano držanje tijela i raspon pokreta.

Ciljana populacija pacijenata

Djeca ili odrasli s malim ili velikim mišićnim tonusom zbog kojeg su potrebni stabilizacija zahvaćenih zglobova i ponovno poravnanje trupa, ramena i gornjih udova.

To ponovno poravnanje može pomoći s funkcijom, smanjenjem bola te liječenju umora. Razumno visok stupanj spretnosti i mišićnog tonusa potreban je onima koji će sami oblačiti i svlačiti ortožu. Njegovatelj će morati pomoći u oblačenju i svlačenju ortože u situacijama kad to nije slučaj.

Predviđeni korisnici

Može ga propisati nadležni zdravstveni radnik ili ga mogu odabrati nositelj, njegovatelj ili roditelj. Nositelj će obično biti laik.

Nositeljev njegovatelj koji može biti uključen u stavljanje i skidanje proizvoda, pranje proizvoda i prijavljivanje bilo kakvih problema s proizvodom obično će biti laik.

Učinkovito za:

- subluksaciju ramena
- dislokaciju ramena
- nestabilnost ramena
- neurološku bol u ramenu
- ozljedu brahijalnog pleksusa (Erbova paraliza)
- cerebralnu paralizu
- Ehlers-Danlosov sindrom
- multiplu sklerozu
- moždani udar
- ozljedu kralježnice

Proizvodom se pruža:

- ponovno poravnanje mišića ramenog zgloba
- poboljšanu distalnu funkciju
- poboljšan raspon pokreta
- poboljšano držanje
- otklanjanje boli

Ortoza DMO® Essentials za jedno rame (za žene)



Ortoza DMO® Essentials za jedno rame (za muškarce)



Ortoza DMO® Essentials unaprijed određene veličine za dva ramena

Namjena

Ortoze ramena DMO® i to i pojedinačne i dvostruke ortoze, napravljene su za liječenje oštećenja ramena te pružanje stabilizacije i ponovnog poravnanja trupa, ramena i gornjih udova.

Razvijenim opsežnim istraživanjima, njihovim jedinstvenim dizajnom ramena se povlače unatrag, podupiru lopatice i stabiliziraju zglobovi ramena, pružajući time veću udobnost te poboljšano držanje tijela i raspon pokreta.

Ciljana populacija pacijenata

Djeca ili odrasli s malim ili velikim mišićnim tonusom zbog kojeg su potrebni stabilizacija zahvaćenih zglobova i ponovno poravnanje trupa, ramena i gornjih udova.

To ponovno poravnanje može pomoći s funkcijom, smanjenjem bola te liječenju umora. Razumno visok stupanj spretnosti i mišićnog tonusa potreban je onima koji će sami oblačiti i svlačiti ortozu. Njegovatelj će morati pomoći u oblačenju i svlačenju ortoze u situacijama kad to nije slučaj.

Predviđeni korisnici

Može ga propisati nadležni zdravstveni radnik ili ga mogu odabrati nositelj, njegovatelj ili roditelj. Nositelj će obično biti laik.

Nositeljev njegovatelj koji može biti uključen u stavljanje i skidanje proizvoda, pranje proizvoda i prijavljivanje bilo kakvih problema s proizvodom obično će biti laik.

Učinkovito za:

- subluksaciju ramena
- dislokaciju ramena
- nestabilnost ramena
- neurološku bol u ramenu
- ozljedu brahijalnog pleksusa (Erbova paraliza)
- cerebralnu paralizu
- Ehlers-Danlosov sindrom
- multiplu sklerozu
- moždani udar
- ozljedu kralježnice

Proizvodom se pruža:

- ponovno poravnanje mišića ramenog zgloba
- poboljšanu distalnu funkciju
- poboljšan raspon pokreta
- poboljšano držanje
- otklanjanje boli

Ortoza DMO® Essentials za dva ramena (za žene)



Ortoza DMO® Essentials za dva ramena (za muškarce)



Upute za primjenu ortoze DMO® za jedno rame

Način nošenja ortoze DMO® za jedno rame. (U ilustrativne svrhe upotrijebljena je prilagođena ortoza DMO® za jedno rame)

Mjere opreza:

- Skinite satove i nakit prije stavljanja ortoze.
- Ortozu za jedno rame potrebno je skinuti ako je pacijent bolestan ili ima temperaturu.
- Ako postoji bilo kakva nedoumica u vezi s odgovarajućom veličinom, tj. ako ekstremiteti poplave ili su iznimno hladni na dodir, u tom slučaju skinite proizvod i o tomu odmah obavijestite svoj klinički tim u svrhu daljnje procjene ili, ako ste proizvod kupili na našem mrežnom mjestu, obratite se administrativnom odjelu i vratite ga tvrtki DM Orthotics

Kako provjeriti pristaju li:


- Šavovi/obrubi ortoze mogu ostaviti lagana udubljenja na koži kad se ortoza skine, ali ako su bilo kakvi tragovi pretjerano crveni i 20 – 30 minuta nakon skidanja, ortoza je možda pretijesna.
- Ako imate ikakvih nedoumica u vezi s odgovarajućom veličinom, uklonite proizvode i razgovarajte sa svojim terapeutom ako ga imate. Ili ako su kupljeni na našem mrežnom mjestu, obratite se našem administrativnom odjelu i vratite ih tvrtki DM Orthotics.




1 Stavite ruku povrijeđene strane u rukav vodeći pritom računa da se ortoza dobro povuče na rame.



2 Ako ste u stanju to učiniti, povrijeđenu ruku stavite preko ortoze kao što se prikazuje na slici. Time se ortoza drži nepomičnom dok se okrećete unatrag i dohvaćate široku traku.

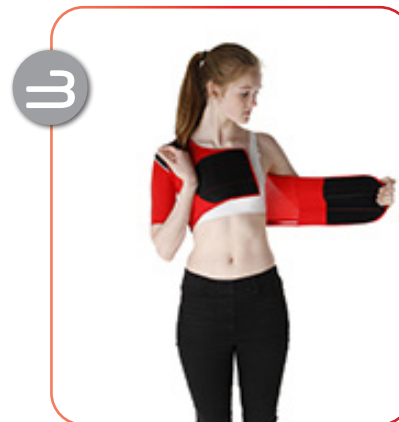

3 Stražnji dio ortoze povucite ustranu dok se elastični materijal u cijelosti ne rastegne (ovakvo je povlačenje presudno da bi se jamčila funkcionalnost ortoze u skladu s njezinom namjenom). Držeći ruku ispruženom prema naprijed, pomaknite šaku prema naprijed i preklopni dio prebacite preko trupa sve dok se dijelovi čičak-trake ne spoje. Nastavite u cijelosti pričvršćivati čičak-traku na prednjem dijelu.

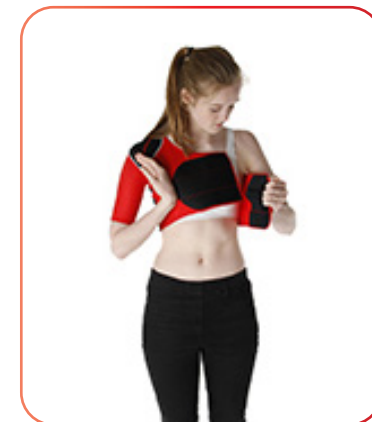

4 Kako ortoza za jedno rame izgleda kada je djeca i muškarci pravilno odjenu.



Ortoza za jedno rame namijenjena ženama imat će dva remena umjesto jednog. Slijedite upute kao na slici br. 3, povlačenjem gornjeg remena kako biste spojili čičak-trake, a zatim povucite donji remen. Pri pričvršćivanju čičak-trake, vodite računa o tomu da vam bude udobno.

— živite svoj život.


Način skidanja ortoze DMO® za jedno rame.

Kako bi ortoza za jedno rame trebala izgledati kada se odjene:


Muškarac/dijete:




Za žene:

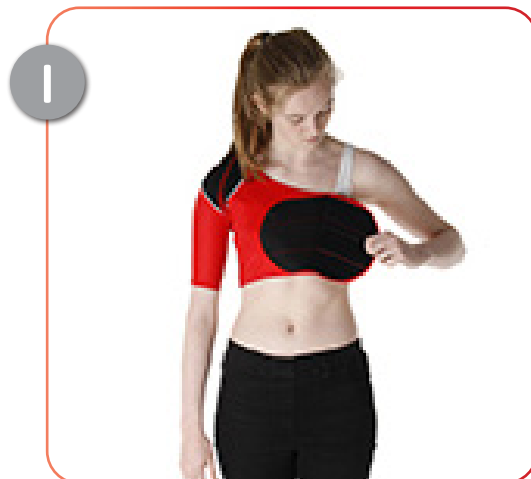


Za ortozu namijenjenu djeci i muškarcima, odvojite dijelove čičak-trake i pustite da remenje padne. Za ortozu namijenjenu ženama, odvojite dva remena pričvršćena čičak-trakama i pustite da remenje padne.

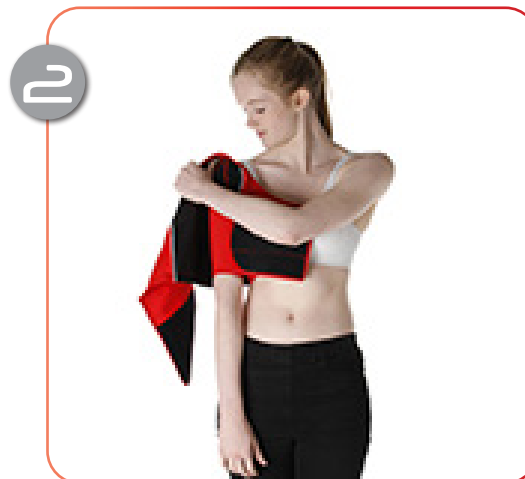

Skinite ortozu s povrijeđene strane.

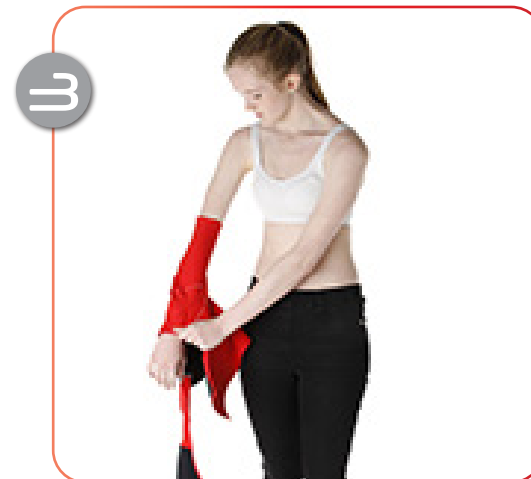

Izvucite ruku iz rukava ortoze.

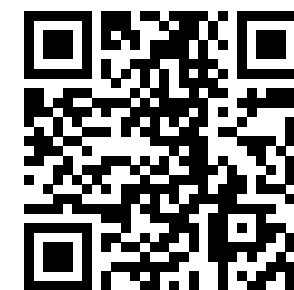

Upotrijebite gore navedeni kôd QR da biste pristupili našim videozapisima za nošenje proizvoda ili brigu o njemu; ili posjetite mrežno mjesto:

www.dmorthotics.com/productcare

— živite svoj život.

Upute za primjenu ortoze DMO® za dva ramena

Način primjene ortoze DMO® za dva ramena.

Mjere opreza:

- Upute u nastavku odnose se na ortozu za stabilnost ramena namijenjenu muškarcima i na onu namijenjenu ženama.
- Za stavljanje ortoze za rame preporučujemo sjedeći položaj.
- Da bi se izbjeglo naprezanje zglobova ramena, ortozu za dva ramena stavlja se s prednje strane.

Kako provjeriti pristaju li:

- Šavovi/obrubi ortoze mogu ostaviti lagana udubljenja na koži kad se ortozu skine, ali ako su bilo kakvi tragovi pretjerano crveni i 20 – 30 minuta nakon skidanja, ortozu je možda pretijesna.
- Ako ste u bilo kakvoj nedoumici u vezi s odgovarajućim pristajanjem ortoze, uklonite je i razgovarajte s terapeutom ako ga imate. Ili ako ste proizvode kupili na našem mrežnom mjestu, obratite se našem administrativnom odjelu i vratite ih tvrtki DM Orthotics

Ortoze za dva ramena DMO® namijenjene djeci

Upute za stavljanje inačice ovog proizvoda namijenjene djeci jednake su uputama za proizvod namijenjen odraslim muškarcima.



1 Odvojite sve čičak-trake na ortozu za rame.



2 Stavite ruke u rukave ortoze za rame i suprotnom je rukom nježno povucite preko svakog ramena, rukav po rukav, tako da ortozu bude u cijelosti preko ramenā kao što se prikazuje na slici. *Napomena.* Kada stavljate ortozu namijenjenu ženama, vodite računa o tomu da se prednjim otvorom grudi obuhvaćaju s gornje i donje strane kao što se prikazuje na slici. Ortoza namijenjena muškarcima i djeci na prednjem dijelu nema otvor za grudi. Vodite računa o tomu da se materijal na prednjoj strani lagano povuče prema dolje kako bi bio udoban na rebrima.



3 Primite dva remena na desnoj strani ortoze kao što se prikazuje na slici. Obavijte ih oko leđa i provucite ih kroz otvor na lijevoj strani ortoze, ispod dijela za ruku.



4 Zatim držite remen/remenje koji/e ste provukli kroz otvor te donji remen čvrsto, ali nježno, povucite prema van i dolje, dalje od tijela. Pričvrstite na donju čičak-traku, na prednjoj strani ortoze.



5 Držite gornji remen i nježno povucite prema van i dolje, dalje od tijela, a zatim ga pričvrstite na gornju čičak-traku na prednjoj strani ortoze.

Možda ćete radije prvo pričvrstiti gornji remen jer se time nekim pacijentima može pomoći u boljem premještanju ramena u nov položaj. Zatim pričvrstite donji remen.

— živite svoj život.

Kako bi ortoza za dva ramena trebala izgledati kada se odjene:

Za muškarce:



Za žene:



Dijete:



6



Ponovite radnju na preostalom remenju na desnoj strani tijela. Donji remen lagano povucite prema dolje i dalje od tijela te ga pričvrstite na donju čičak-traku na prednjem dijelu tijela.

7




Ponovite radnju remenom za ortozu (kao na slici 6). Pobrinite se za to da, na prednjoj i stražnjoj strani, dio kojim se obuhvaća rame povučete prema dolje, a kako biste mogli iskoristiti blagodat pobožšanog položaja koji vam se time može pružiti. Vodite računa o tomu da vam se, povlačenjem preko ramenâ i rebra, ne stvara osjećaj neugode.

8



Vodite računa o tomu da je dio koji sadrži rukav na svojem mjestu.

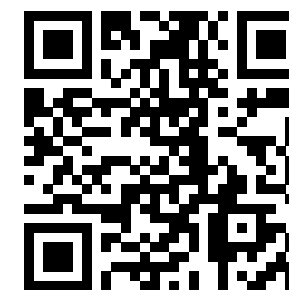

Upotrijebite gore navedeni kôd QR da biste pristupili našim videozapisima za nošenje proizvoda ili brigu o njemu; ili posjetite mrežno mjesto:
www.dmorthotics.com/productcare

— živite svoj život.

Kako bi ortoza za dva ramena trebala izgledati kada se odjene:

Za muškarce:



Za žene:



Dijete:



Način skidanja ortoze DMO® za dva ramena.



Odvojite čičak-traku na objema stranama.



Nježno stavite suprotnu ruku na dio kojim se obuhvaća rame i počnite ga povlačiti prema dolje, preko ruke.



Ponovite radnju i na drugoj strani ortoze za rame.



Uklonite remen/remenje kada se otpusti/e i nježno skinite ortozu.

Izjava o zbrinjavanju proizvoda

Proizvodi proizvođača DM Orthotics jesu ortoze 1. razreda / prilagođene korisniku. Nisu potrebne mjere opreza za zbrinjavanje proizvoda DMO®. Materijale kojima se koristi za proizvodnju možete zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za odlaganje odjeće/materijala. Operite proizvod prije njegova odlaganja.

Izjava o ozbiljnom štetnom događaju

Ako dođe do ozbiljnog štetnog događaja u vezi s vašim proizvodom DMO®, smjesta biste ga trebali prijaviti proizvođaču (DM Orthotics) i nadležnom tijelu odgovornom za medicinske proizvode u svojoj državi članici; primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu, to bi bila Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (engl. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency; MHRA).

Proizvođač



Identifikacija pacijenta



ID proizvoda/modela




Proizvedeno u Britaniji



Zastupnik




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 Den Haag
Nizozemska

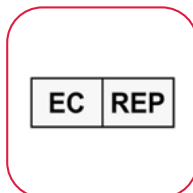

Ime i prezime kliničara



Broj narudžbe

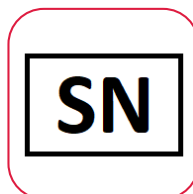

Medicinski proizvod



Imajte na umu da se korisnicima ne preporučuje izvođenje preinaka, a samom izmjenom ortoze možete utjecati na jamstvo ili se ono može smatrati nevažećim. Obratite se kliničkom stručnjaku ili tvrtki DM Orthotics ako vam trebaju informacije o izmjenama i preinakama proizvoda.



Proizvođač:
DM Orthotics Ltd.
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Dizajnirano i proizvedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu

Osnovni UDI-DI: 5054522UPPERLIMBQS

UDI-DI:

5054522001231 Dječja ortoza za dva ramena – 1
5054522001248 Dječja ortoza za dva ramena – 2
5054522001255 Dječja ortoza za dva ramena – 3
5054522001262 Dječja ortoza za dva ramena – 4
5054522001279 Dječja ortoza za dva ramena – 5
5054522001286 Dječja ortoza za dva ramena – 6

5054522000708 Ortoza za dva ramena, za odrasle – XS
5054522000715 Ortoza za dva ramena, za odrasle – S
5054522000722 Ortoza za dva ramena, za odrasle – M
5054522000739 Ortoza za dva ramena, za odrasle – L
5054522000746 Ortoza za dva ramena, za odrasle – XL
5054522001224 Ortoza za dva ramena, za odrasle – XXL

5054522001415 Dječja ortoza za jedno rame, lijevo – 1
5054522001422 Dječja ortoza za jedno rame, lijevo – 2
5054522001439 Dječja ortoza za jedno rame, lijevo – 3
5054522001446 Dječja ortoza za jedno rame, lijevo – 4
5054522001453 Dječja ortoza za jedno rame, lijevo – 5
5054522001460 Dječja ortoza za jedno rame, lijevo – 6
5054522001477 Dječja ortoza za jedno rame, desno – 1
5054522001484 Dječja ortoza za jedno rame, desno – 2
5054522001491 Dječja ortoza za jedno rame, desno – 3
5054522001507 Dječja ortoza za jedno rame, desno – 4
5054522001514 Dječja ortoza za jedno rame, desno – 5
5054522001521 Dječja ortoza za jedno rame, desno – 6

5054522001293 Ortoza za jedno rame, lijevo, za odrasle – XS
5054522001309 Ortoza za jedno rame, lijevo, za odrasle – S
5054522001316 Ortoza za jedno rame, lijevo, za odrasle – M
5054522001323 Ortoza za jedno rame, lijevo, za odrasle – L
5054522001330 Ortoza za jedno rame, lijevo, za odrasle – XL
5054522001347 Ortoza za jedno rame, lijevo, za odrasle – XXL
5054522001354 Ortoza za jedno rame, desno, za odrasle – XS
5054522001361 Ortoza za jedno rame, desno, za odrasle – S
5054522001378 Ortoza za jedno rame, desno, za odrasle – M
5054522001385 Ortoza za jedno rame, desno, za odrasle – L
5054522001392 Ortoza za jedno rame, desno, za odrasle – XL
5054522001408 Ortoza za jedno rame, desno, za odrasle – XXL



Manufacturer: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 Den Haag
Nizozemska