

živite svoj život.



Dokument koji sadrži informacije za upotrebu, namijenjen pacijentu:

Uske duge hlače i kratke hlače DMO® Essentials



www.dmorthotics.com

Naši proizvodi

DM Orthotics vodeća je tvrtka u svijetu u dizajnu i proizvodnji vlastitih patentiranih ortoza Dynamic Movement Orthoses® (DMO®).

Proizvodi DMO® služe se biomehaničkim oblogama i strateškim pojačanjima za poboljšanje posturalnog poravnanja i povećanje propriocepcije. Ti čimbenici zatim stimuliraju i prilagođavaju mišiće za treniranje neurosenzornog sustava za rad pa se postižu poboljšani tonus, snaga i učinak.

Uske duge hlače i kratke hlače DMO® Essentials set su ortoza unaprijed određene veličine od tkanine i dobra isplativa mogućnost ako želite testirati hoće li ortoza prilagođena korisniku biti od koristi pacijentu. Učinkovito djeluju kao početni proizvod za jedno mjerenje.

Proizvod je napravljen da bi korisniku pružio poboljšanu udobnost, poboljšano držanje i poboljšan raspon pokreta. Dizajniran je za nošenje uz kožu; poboljšane proprioceptivne povratne informacije i biomehaničko pozicioniranje tih dizajna pomažu treniranju mišića za rad; što dovodi do poboljšanog tonusa, snage i učinka.

Sve te prednosti imaju jedan cilj – poboljšanje rada i poticanje neovisnosti korisnika.

Proizvodi DMO® Essentials unaprijed određene veličine napravljeni su prema postavljenim veličinama i za djecu i odrasle i kombinacija su naše kompresijske/senzorne tkanine i kombinirani s brojnim pločama za ojačanje koje su strateški postavljene radi koristi za pacijenta. Ne mogu se mijenjati i daljnja pojačanja nisu dopuštena. Može ih preporučiti kliničar gdje standardni proizvod iz redovne ponude može biti od koristi ili se mogu naručiti izravno s našeg mrežnog mjesta uz samo jedno mjerenje.

Obratite nam se

Da biste doznali više o našim asortimanima proizvoda DMO®, obratite se lokalnom zastupniku ili distributeru proizvoda DMO® ili izravno tvrtki DM Orthotics da biste doznali tko je to.

E-pošta: admin@dmorthotics.com posjetite: www.dmorthotics.com
nazovite: +44 (0) 1209 219205

Kako bi se našim proizvodima pacijenti trebali koristiti

Proizvodi DMO Orthotic Essential namijenjeni su podupiranju i ispravljanju držanja tijela i poravnanja zglobova tamo gdje nisu potrebni daljnje individualno namještanje ili dodatna pojačanja.

Sve su ortoze tvrtke DM Orthotics medicinski proizvodi kako je to definirano Uredbom (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i izjavljeno je da su u skladu s pravilima prema Dodatku II. i III. Uredbi i obuhvaćene su definicijom ortotičkog medicinskog proizvoda: držač, udloga ili druga umjetna vanjska naprava kojom se služi za podupiranje udova ili kralježnice ili za sprječavanje relativnog kretanja ili pomoć pri takvom kretanju.

Proizvodi su dizajnirani i proizvedeni u skladu s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i izjavljeno je da su u skladu s propisima u skladu s Dodatkom II. i III. toj uredbi.

Datum izdavanja

Naši medicinski proizvodi proizvedeni su i izdani s datumom proizvodnje na priloženom obrascu izjave koji se šalje s vašim proizvodom. Ovo je namijenjeno krajnjem korisniku za evidenciju.

Sadržaj

●Upute za nošenje	3
●Upute za pranje	4
●Kontraindikacije i mjere opreza	5

Uske duge hlače i kratke hlače Essentials	6
●Namjena	6
●Ciljana populacija pacijenata	7
●Predviđeni korisnici	7
●Učinkovito za pacijente	8
●Upotreba s drugim ortotičkim proizvodima	7
●Način stavljanja i skidanja	9
●Izjava o zbrinjavanju proizvoda	14
●Izjava o ozbiljnom štetnom događaju	14
●Objašnjenje upotrijebljenih simbola	15

— živite svoj život.

Upute za nošenje

Pažljivo slijedite upute za održavanje. Brigom o ortozi **produljit ćete vrijeme nošenja i spriječiti oštećenja.**

ŠTO BISTE TREBALI RADITI

- Ortozu stavljate i skidate prema savjetu svojeg terapeuta/dobavljača. Posjetite mrežno mjesto: www.dmorthotics.com/productcare
- Pazite kad je stavljate i skidate, pažljivo se pridržavajte uputa u ovoj knjižici – možete je oštetiti grubim navlačenjem i skidanjem i dugim noktima na rukama.
- Važno je postupno povećavati vrijeme nošenja u skladu s individualiziranim uputama.
- Pažljivo slijedite upute za pranje ili se proizvod može oštetiti.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- Nemojte grubo stavljati ili skidati proizvod – time možete uzrokovati oštećenje proizvoda: rasporene očice ili razderotine ili rupe u tkanini.
- Nemojte stavljati ili skidati proizvod kad imate duge nokte na rukama, time također možete oštetiti tkaninu.

PROBLEMI S PRISTAJANJEM ILI SIGURNOŠĆU

ODMAH se obratite svojem terapeutu/dobavljaču ako proizvod postane uistinu tijesan pa počne ostavljati crvene tragove na koži ili ako se raspore očice i/ili nastanu rupe.

Proizvodi DMO® dizajnirani su na način da se njima nadopunjuju terapija i tjelovježba, stoga ih ne smijete skidati za vrijeme vježbanja, osim ako vam to ne savjetuje terapeut ili imate drugih pitanja glede kojih vam može pomoći.

Vrijeme nošenja

ŠTO BISTE TREBALI RADITI

- Postupno produljujte vrijeme nošenja tijekom prvog tjedna, kao što se navodi u nastavku, svakodnevno udvostručujući količinu vremena dok ortozi ne budete nosili tijekom cijeloga radnog dana.

npr. 1. dan – 1 sat

2. dan – 2 sata

3. dan – 4 sata

4. dan – 8 sati

5. dan – cijeli dan tijekom dana. Nakon toga nosite cijeli dan i svaki dan tijekom dana.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- Odmah nositi cijeli dan. Potrebno je postupno povećavati vrijeme nošenja kako bi se zajamčilo praćenje senzornog podražaja, biomehaničkih promjena i prikladnosti.
- Ne nosite uske duge hlače / kratke hlače DMO noću, osim ako vam to ne preporuči liječnik ili kliničar, npr. u slučaju pacijenata s EDS-om kojima to može biti korisno.

Upute za pranje

Pažljivo slijedite upute za održavanje. Brigom o ortozi **produljit ćete vrijeme nošenja i spriječiti oštećenja.**

ŠTO BISTE TREBALI RADITI


- Ortozu trebate prati najmanje svaka 2 – 3 dana.
- Ortoza se može oprati ručno, hladnom vodom, ili u perilici, na 30 stupnjeva.
- Za uklanjanje prekomjerne vlage, osušite u sušilici kratkim programom ili je zamotajte u suhi ručnik.
- Objesite je u zatvorenom prostoru i pustite da se potpuno osuši tijekom noći.

ŠTO NE BISTE TREBALI RADITI

- NE sušite na jakoj, izravnoj sunčevoj svjetlosti ni na radijatoru.
- NEMOJTE CIJEDITI ZAVRTANJEM – rastegnut će se i izgubiti oblik te će se prouzročiti oštećenje materijala.
- NE GLAČAJTE.
- NE KORISTITE IZBJELJIVAČ ILI SREDSTVA ZA IZBJELJIVANJE.
- NE KORISTITE OMEKŠIVAČ
- NE ČISTITE KEMIJSKI.
- NE SUŠITE U SUŠILICI – materijal će se skupiti.

Ako vam trebaju daljnja pomoć i podrška, na svojem mrežnom mjestu dodali smo i upute za stavljanje i skidanje ortoze; posjetite: www.dmorthotics.com/productcare.

Redovitim i pravilnom brigom o ortozi spriječit će se razvijanje neugodnih mirisa i očuvati podatnost materijala. Ako vam je ortoza obrađena srebrom, ono će se morati ponovno nanijeti nakon 100 pranja jer se srebrni ioni počinju razgrađivati nakon 50 pranja.

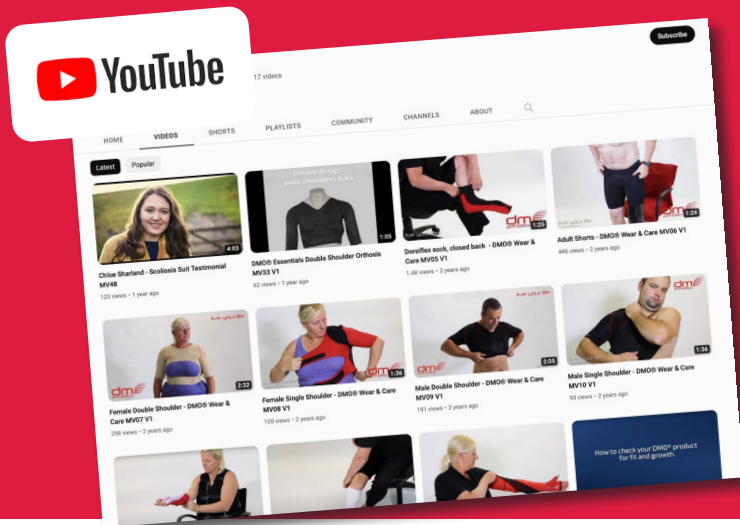

Nošenje naših proizvoda

Izradili smo niz uputa u obliku videozapisa da bismo svojim korisnicima pomogli da se proizvodima služe na najbolji mogući način. Ti vodiči sadrže korisne savjete i preporuke za nošenje naših proizvoda i načine na koje se najbolje možete brinuti o njima kad ih stavljate ili skidate.

Da biste ih pregledali, posjetite: www.dmorthotics.com/productcare

Proizvodi DMO® trebaju se nositi uz kožu. Važno je polako povećavati vrijeme nošenja tijekom prvog tjedna, udvostručujući količinu vremena svaki dan dok ih ne počnete nositi tijekom cijelog dana. npr.

— živite svoj život. KONTRAINDIKACIJE I MJERE OPREZA / RAZMATRANJA

Kontraindikacije

Nema poznatih kontraindikacija za upotrebu proizvoda DMO®. Procjenu proizvoda DMO® trebao bi provoditi ovlašteni medicinski stručnjak s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama.

Mjere opreza / razmatranja

U nastavku je popis mogućih mjera opreza koje treba uzeti u obzir prije nego što nastavite s propisivanjem proizvoda DMO®. O tome treba razgovarati sa stručno kvalificiranim medicinskim stručnjakom koji može predložiti alternativni proizvod DMO®.

Loša regulatorna kontrola temperature

DMO® neće utjecati na regulatorni centar za temperaturu u tijelu. Međutim, DMO® treba tretirati kao sloj odjeće i slojevi odjeće trebaju se prilagoditi toplom ili hladnom vremenu u skladu s tim.

Primarni poremećaji cirkulacije

Određeni primarni respiratorni problemi kod kojih mišići postaju slabiji zbog propadanja živaca/mišića trebat će se pažljivo razmotriti i može biti potreban razgovor s pacijentovim liječnikom. Problemi sekundarne cirkulacije povezani s cerebralnom paralizom mogu se ublažiti zahvaljujući poboljšanom držanju trupa/tijela i poboljšanom položaju rebra.

Stanja kože

Stanja kože koja se mogu pogoršati bliskim kontaktom sa sintetičkim materijalima tijekom duljeg razdoblja mogu zahtijevati daljnje savjetovanje sa zdravstvenim radnikom koji nadgleda pacijentovo dermatološko liječenje, ali to je rijetko kontraindikacija.

Krhkost skeleta / lomljive kosti

Neka stanja mogu biti dobro podržana proizvodom DMO®, ali o tome treba razgovarati s liječnikom.

Uske duge hlače i kratke hlače DMO® Essentials

Namjena

Predviđena je svrha poravnati donji dio trupa, zdjelicu, kukove i donje udove. Točno mjesto djelovanja određuje se odabirom proizvoda. Poboljšava simetriju i pomaže stabilizaciji. Uske duge hlače i kratke hlače pružaju nerestriktivnu i vrlo učinkovitu razinu potpore za maksimalnu stabilnost zdjelice i donjih udova. Proizvod pomaže i distalnoj kontroli i pozitivno utječe na mišićni tonus radi poboljšanja funkcije.

Indikacije

Djeca ili odrasli s malim ili velikim mišićnim tonusom, senzornim ili proprioceptivnim problemima, nedostatkom stabilnosti mišića središta tijela, zdjelice ili donjih udova. Djeca ili odrasli koji imaju bolove povezane s lošim poravnanjem ili umorom uzrokovanim nemogućnošću održavanja ispravljenog držanja zdjelice ili donjih udova.

Ciljana populacija pacijenata

Pacijenti muškog i ženskog spola obično u dobi od dvije godine ili stariji, iako djeca mlađa od dvije godine mogu imati koristi od uskih dugih hlača i kratkih hlača.

Razna medicinska stanja koja imaju simptome kod kojih uske duge hlače i kratke hlače mogu pomoći uključuju (nije iscrpno) pogledajte u nastavku:

Razumno visok stupanj spretnosti i mišićnog tonusa potreban je onima koji će sami oblačiti i svlačiti ortoza. Njegovatelj će morati pomoći u oblačenju i svlačenju ortoza u situacijama kad to nije slučaj.

Predviđeni korisnici

Nositelj ortoza obično će biti laik.

Nositelj njegovatelj može biti uključen u stavljanje i skidanje. Pranje i prijavljivanje bilo kakvih problema s ortozom obično će izvoditi laik.



Uske duge hlače DMO® Essentials

Učinkovito za:

- cerebralnu paralizu
- oštećenja donjih ekstremiteta
- multiplu sklerozu
- Ehlers-Danlosov sindrom
- hipertonus i hipotonus
- i više

Proizvodom se pruža:

- stabilnost zdjelice
- poboljšanje u poravnanju kuka i koljena
- poboljšanje vanjske/unutarnje rotacije kuka
- povećana senzorna svjesnost
- poboljšano držanje
- poboljšana funkcija mišića
- otklanjanje boli
- čvrstoća i stabilnost uz pomoć ploča za ojačanje

Dodatne značajke:

- neobvezni otvor preko prepona
- kompresijska tkanina za udobnost i kretanje
- poboljšano pozicioniranje nogu
- nosi se ispod odjeće

Kratke hlače DMO® Essentials

Učinkovito za:

- cerebralnu paralizu
- multiplu sklerozu
- ataksiju
- mišićni hipotonus
- stečenu i traumatsku ozljeda mozga
- Ehlers-Danlosov sindrom
- poremećaje u obrascima hodanja
- moždani udar
- Parkinsonovu bolest
- Huntingtonovu koreu
- i više

Proizvodom se pruža:

- stabilnost zdjelice
- ekstenzija kuka i koljena
- smanjenje vanjske/unutarnje rotacije kuka
- povećana senzorna svjesnost
- poboljšano držanje
- poboljšana funkcija mišića
- smanjenje boli

Dodatne značajke:


- kompresijska tkanina za udobnost i kretanje
- neobvezni otvor preko prepona
- čvrstoća i stabilnost uz pomoć ploča za ojačanje
- nosi se ispod odjeće



— živite svoj život.

Mjere opreza:

- Skinite satove i nakit prije postavljanja ortoze.
- Uske kratke hlače potrebno je skinuti ako je pacijent bolestan ili ima temperaturu.
- Ako postoji bilo kakva nedoumica u vezi s odgovarajućom veličinom, tj. ako ekstremiteti poplave ili su iznimno hladni na dodir, u tom slučaju skinite proizvod i o tomu smjesta obavijestite svoj klinički tim, u svrhu daljnje procjene. (ako je imate) ili ako ste proizvode kupili na našem mrežnom mjestu, obratite se našem administrativnom odjelu i vratite ih tvrtki DM Orthotics.

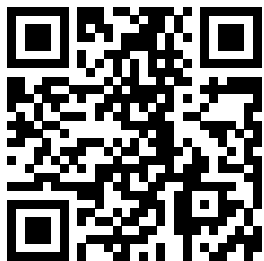

Upotrijebite gore navedeni kôd QR da biste pristupili našim videozapisima za nošenje proizvoda ili brigu o njemu; ili posjetite mrežno mjesto:

www.dmorthotics.com/productcare

Upute za primjenu kratkih hlača DMO® Essentials

Način primjene kratkih hlača DMO® Essentials.

Pacijent će trebati sjesti kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost te da bi se jamčilo da su se uske kratke hlače ispravno odjenule.

Kratke hlače DMO® Essentials oblače se i skidaju na isti način kao prilagođene kratke hlače DMO, koje su upotrijebljene u ilustrativne svrhe.



Uzmite kratke hlače (oznaka neka im bude na stražnjoj strani) i povucite ih prema gore, uz noge (kao što biste i par uskih dugih hlača). Vodite računa o tomu da ih, prije povlačenja preko kukova, prvo povučete preko koljena i duž bedara.




Povucite kratke hlače do struka.

— živite svoj život.

Način skidanja kratkih hlača DMO® Essentials.

Pacijent će trebati sjesti kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost te da bi se jamčilo da su se uske kratke hlače ispravno skinule.

Kako bi kratke hlače Essentials trebale izgledati kad ih korisnik obuče:

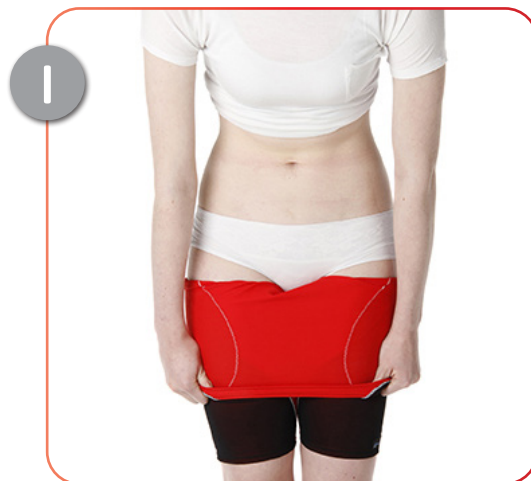

Zavrните kratke hlače niz noge, prema stopalima.



Svaku nogu pojedinačno izvucite iz ortoze.

Kako provjeriti pristaju li:

- Uske kratke hlače trebale bi čvrsto pristajati uz tijelo, ali kažiprst biste trebali moći uvući ispod donjeg ruba nogavica te oko struka.
- Šavovi/obrubi ortoze mogu ostaviti lagana udubljenja na koži kad se ortoza skine, ali ako su bilo kakvi tragovi pretjerano crveni i 25 – 30 minuta nakon skidanja, ortoza je možda pretijesna.
- Ako postoji bilo kakva sumnja u pogledu odgovarajućeg pristajanja. Ako ste hlače kupili na našem mrežnom mjestu, obratite se našem administrativnom odjelu i vratite ih tvrtki DM Orthotics

Upute za primjenu uskih dugih hlača DMO® Essentials

Način primjene uskih dugih hlača DMO® Essentials.

Pacijent će trebati sjesti kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost te da bi se jamčilo da su se uske kratke hlače ispravno skinule.

Tajice DMO® Essentials oblače se i skidaju na isti način kao prilagođene tajice DMO, koje su upotrijebljene u ilustrativne svrhe.

Mjere opreza:

- Skinite satove i nakit prije postavljanja ortoze.
- Uske duge hlače nikada se ne smiju nositi noću (osim ako se o tomu ne raspravi s liječnikom ili fizioterapeutom. Neke osobe kojima je dijagnosticiran EDS mogu imati koristi od nošenja tijekom noći, ali to se mora potvrditi prije nego što to učine). ili ako je korisnik bolestan ili ima temperaturu.
- Ako postoji bilo kakva nedoumica u vezi s odgovarajućom veličinom, tj. ako ekstremiteti poplave ili su iznimno hladni na dodir, u tom slučaju skinite proizvod i o tomu smjesta obavijestite svoj klinički tim, u svrhu daljnje procjene. (ako je imate) ili ako ste proizvode kupili na našem mrežnom mjestu, obratite se našem administrativnom odjelu i vratite ih tvrtki DM Orthotics

Kako provjeriti pristaju li:

- Uske duge hlače trebale bi čvrsto pristajati uz tijelo, ali kažiprst biste trebali moći uvući ispod donjeg ruba nogavica te oko struka.



Izvadite ortožu iz ambalaže.



Stavite stopalo u svileni aplikator. Ako je potreban i ako se isporučio uz proizvod.



Uvucite desnu nogu kroz desnu nogavicu ortože.



Nježno povucite desnu nogavicu ortože prema koljenu.



Nastavite nježno povlačiti prema koljenu dok donji obrub ortože desne noge ne bude iznad gležnja.




Skinite svileni aplikator s desnog stopala.




Stavite lijevo stopalo u svileni aplikator. Za rukav za noge pogledajte sliku 10

8

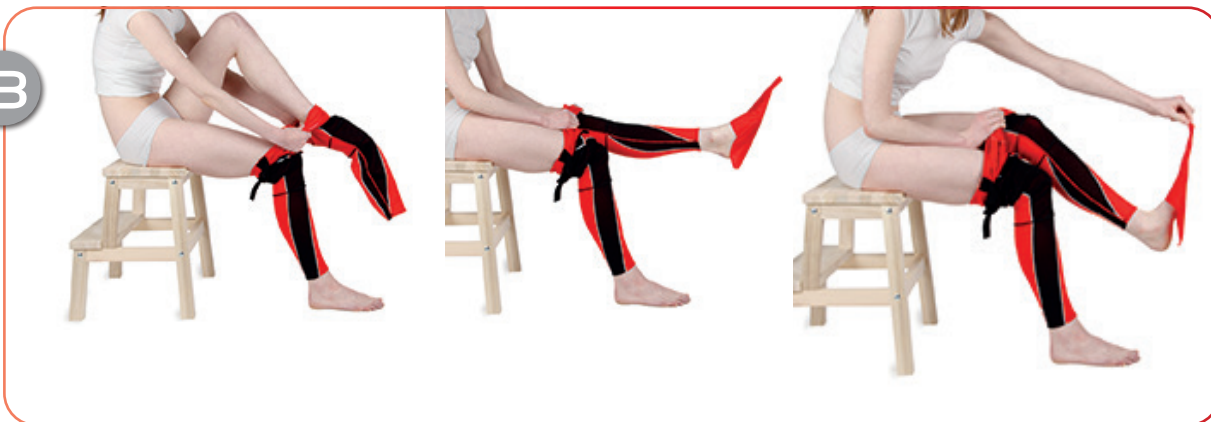


Ponovite korake 4. – 7. Zatim sa stopala skinite svileni aplikator. Vodite računa o tomu da uske duge hlače, prije pokušaja njihova povlačenja preko kukova i tijela, prvo povučete do bedara.

9

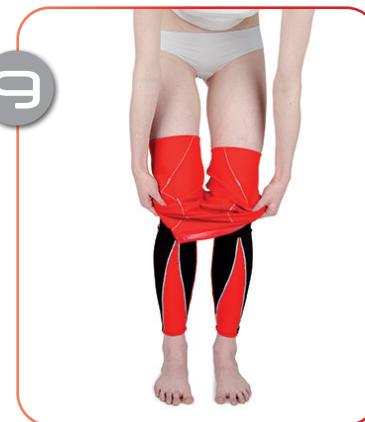

Uske duge hlače nježno povucite prema gore, prema bokovima.

10

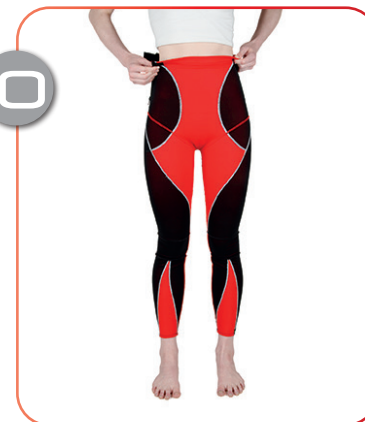

Provjerite je li silikon u dodiru s kožom na vrhu ortoze.

II




Kako bi uske duge hlače trebale izgledati kada se pravilno odjenu.

Kako provjeriti pristaju li:

- Šavovi/obrubi uskih dugih hlača mogu ostaviti lagana udubljenja na koži kad se hlače skinu, ali ako su bilo kakvi tragovi pretjerano crveni i 25 – 30 minuta nakon skidanja, hlače su možda pretijesne.
- Ako postoji bilo kakva sumnja u pogledu odgovarajućeg pristajanja. Ako ste hlače kupili na našem mrežnom mjestu, obratite se našem administrativnom odjelu i vratite ih tvrtki DM Orthotics

živite svoj život.

Kako bi tajice Essentials trebale izgledati kad ih korisnik obuče:

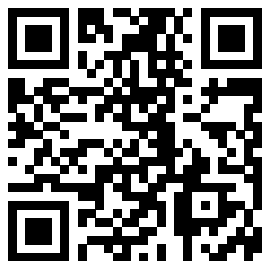

Upotrijebite gore navedeni kôd QR da biste pristupili našim videozapisima za nošenje proizvoda ili brigu o njemu; ili posjetite mrežno mjesto:

www.dmorthotics.com/productcare

Upute za primjenu uskih dugih hlača DMO® Essentials

Način skidanja uskih dugih hlača DMO® Essentials.

Pacijent će trebati sjesti kako bi se jamčile ravnoteža i sigurnost te da bi se jamčilo da su se uske kratke hlače ispravno skinule.



Vrh uskih dugih hlača zavrните prema dolje, prema koljenima.



Sjedeći, uske duge hlače nastavite zavrćati prema dolje, prema koljenima.



Sjedeći, uske duge hlače nastavite zavrćati prema dolje, prema koljenima.



Uske duge hlače zavrните do gležnjeva na objema nogama.



Izvadite stopala iz nogavica uskih dugih hlača.

Izjava o zbrinjavanju proizvoda

Proizvodi proizvođača DM Orthotics jesu ortoze 1. razreda / prilagođene korisniku. Nisu potrebne mjere opreza za zbrinjavanje proizvoda DMO®. Materijale kojima se koristi za proizvodnju možete zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za odlaganje odjeće/materijala. Operite proizvod prije njegova odlaganja.

Izjava o ozbiljnom štetnom događaju

Ako dođe do ozbiljnog štetnog događaja u vezi s vašim proizvodom DMO®, smjesta biste ga trebali prijaviti proizvođaču (DM Orthotics) i nadležnom tijelu odgovornom za medicinske proizvode u svojoj državi članici; primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu, to bi bila Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (engl. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency; MHRA).

Proizvođač



Identifikacija pacijenta



ID proizvoda/modela




Proizvedeno u Britaniji



Zastupnik




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 Den Haag
Nizozemska

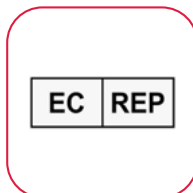

Ime i prezime kliničara



Broj narudžbe

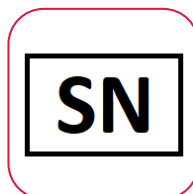

Medicinski proizvod



Imajte na umu da se korisnicima ne preporučuje izvođenje preinaka, a samom izmjenom ortoze možete utjecati na jamstvo ili se ono može smatrati nevažećim. Obratite se kliničkom stručnjaku ili tvrtki DM Orthotics ako vam trebaju informacije o izmjenama i preinakama proizvoda.



Proizvođač:
DM Orthotics Ltd.
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Dizajnirano i proizvedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu

Osnovni UDI-DI: 5054522LOWERLIMBMF

UDI-DI:

5054522001675 Uske duge hlače za odrasle – XXS
5054522001682 Uske duge hlače za odrasle – XS
5054522001699 Uske duge hlače za odrasle – S
5054522001705 Uske duge hlače za odrasle – M
5054522001712 Uske duge hlače za odrasle – L
5054522001729 Uske duge hlače za odrasle – XL
5054522001736 Uske duge hlače za odrasle – XXL

5054522001743 Dječje uske duge hlače – 1
5054522001750 Dječje uske duge hlače – 2
5054522001767 Dječje uske duge hlače – 3
5054522001774 Dječje uske duge hlače – 4
5054522001781 Dječje uske duge hlače – 5
5054522001798 Dječje uske duge hlače – 6
5054522001804 Dječje uske duge hlače – 7
5054522001811 Dječje uske duge hlače – 8

5054522000555 Kratke hlače za odrasle – XXS
5054522000562 Kratke hlače za odrasle – XS
5054522000579 Kratke hlače za odrasle – S
5054522000586 Kratke hlače za odrasle – M
5054522000593 Kratke hlače za odrasle – L
5054522000609 Kratke hlače za odrasle – XL
5054522000616 Kratke hlače za odrasle – XXL

5054522000623 Dječje kratke hlače – 1
5054522000630 Dječje kratke hlače – 2
5054522000647 Dječje kratke hlače – 3
5054522000654 Dječje kratke hlače – 4
5054522000661 Dječje kratke hlače – 5
5054522000678 Dječje kratke hlače – 6
5054522000685 Dječje kratke hlače – 7
5054522000692 Dječje kratke hlače – 8



Manufacturer: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 Den Haag
Nizozemska