

žijte svůj život.



Uživatelská příručka pro pacienty:

Jednostranné a oboustranné ramenní ortézy DMO® Essentials různých velikostí



www.dmorthotics.com

Naše výrobky

DM Orthotics je ve světě přední firmou v designu a výrobě patentovaných ortéz značky Dynamic Movement Orthoses® (DMO®).

V ortézách DMO® se využívají biomechanické panely a strategické výztuže k zlepšení postavení těla a zvýšení propriocepce. Tyto faktory pak stimulují a nastavují neurosenzorický systém cvičení svalů tak, aby fungovaly se zlepšeným tonusem, silou a funkčností.

Oboustranné a jednostranné ramenní ortézy DMO® Essentials tvoří soupravu textilních ortéz různých velikostí, které představují finančně příznivou volbu, pokud chcete vyzkoušet, zda bude individuální ortéza na míru pro pacienta přínosem. Fungují účinně, a přitom stačí zadat jediný velikostní údaj.

Byly vyvinuty tak, aby zlepšily uživatelům komfort, držení těla a rozmezí pohybů. Výrobky se nosí na kůži; zvýšená propriocepční zpětná vazba a biomechanická úprava držení těla u tohoto designu pomáhá cvičit svaly v jejich činnosti, což vede ke zlepšenému tonusu, síle a výkonu.

Všechny tyto přínosy směřují k jednomu cíli – zlepšit funkci a podpořit nezávislost uživatele.

Ortézy DMO® Essentials se vyrábějí ve velikostech jak pro dospělé, tak i pro děti. Jsou kombinací naší kompresní a senzorické tkaniny s řadou výztužných panelů strategicky rozmístěných tak, aby pacientovi přinášely užitek. Nedají se upravovat a není povoleno je ještě dále vyztužovat. Bud' je může doporučit lékař tam, kde může dobře posloužit výrobek z běžné produkce, nebo je možno je objednat přímo na našich webových stránkách, kdy se vyžaduje pouze jedno měření.

Spojte se s námi

Chcete-li se dovědět o výrobcích řady DMO® více, spojte se vaším místním prodejcem či distributorem DMO® nebo přímo s firmou DM Orthotics a zjistíte si kdo jsme.

E-mail: admin@dmorthotics.com, internet: www.dmorthotics.com, tel.: +44 (0) 1209 219205

Jak má pacient naše výrobky používat

Výrobky řady DMO Orthotic Essential jsou navrženy tak, aby zlepšily podporu a napomohly správnému držení těla a sestavě kloubů v situacích, kde není zapotřebí individuální nastavení nebo další výztuž.

Všechny ortézy DM Orthotics jsou zdravotnické prostředky ve smyslu nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích a jsou deklarovány jako splňující předpisy podle přílohy II a III uvedeného nařízení: ortéza, dlahy nebo jiný umělý prostředek k podpoře končetin nebo páteře nebo k zamezení nebo nápomoci relativnímu pohybu.

Prostředky jsou navrženy a vyráběny tak, že splňují příslušné požadavky nařízení EU č. 2017/745 o zdravotnických prostředcích (EU MDR) a jsou v souladu s předpisy podle příloh II a III uvedeného nařízení.

Datum vydání

Naše zdravotnické prostředky se vyrábějí a vydávají se dnem výroby uvedeným na průvodním prohlášení, přiloženém k výrobku. To je určeno pro konečného uživatele pro případnou pozdější potřebu.

Obsah

● Pokyny k nošení	S3
● Pokyny pro praní	S4
● Kontraindikace a bezpečnostní opatření	S5
Jednostranné ramenní ortézy Essentials různých velikostí	S6
● Účel	S6
● Pacienti, pro které je výrobek určen	S6
● Pro koho je výrobek určen	S6
● Účinné pro pacienty	S6
● Jak se ortéza navléká a svléká	S8
Oboustranné ramenní ortézy Essentials různých velikostí	S7
● Účel	S7
● Pacienti, pro které je výrobek určen	S7
● Pro koho je výrobek určen	S7
● Účinné pro pacienty	S7
● Jak se ortéza navléká a svléká	S10

Pokyny k nošení

Důsledně dodržujte pokyny pro péči. Správnou péčí o ortézu **prodloužíte její životnost a zamezíte jejímu poškození.**

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Ortézu si nasazujte a snímejte podle pokynů svého terapeuta/dodavatele. Viz webové stránky: www.dmorthotics.com/productcare
- Při nasazování a snímání dbejte opatrnosti a postupujte podle této brožurky; hrubým zacházením a manipulací s dlouhými nehty se může výrobek poškodit.
- Důležité je prodlužovat dobu nošení postupně tak, jak to máte individuálně předepsáno.
- Pečlivě dodržujte pokyny pro praní, jinak se může ortéza poškodit.

NESPRÁVNÝ POSTUP

- Svůj zakázkový výrobek si neoblékejte a nesvlékejte hrubě, výrobek by se mohl poškodit, pustit oka, potřhat se nebo proděravět.
- Nenavlékejte a nesvlékejte výrobek s dlouhými nehty, také tím by se tkanina mohla poškodit.

AŽ VÁM VÝROBEK SPRÁVNĚ SEDÍ

Pokud je vám výrobek opravdu těsný, zanechává zarudlá místa nebo jestliže má puštěná oka či díry, spojte se **IHNED** se svým terapeutem nebo dodavatelem.

Účelem výrobků řady DMO® je doplňovat léčbu a tělesné cvičení, nemají se tedy pro cvičení svlékat, ledaže vám to doporučí váš terapeut nebo máte v tomto ohledu jiné obavy, se kterými vám může pomoci.

Doba nošení

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Během prvního týdne postupně zvyšujte dobu nošení, jak je uvedeno níže, každý den dobu zdvojnásobte, dokud ortézu nebudete mít nasazenou celý pracovní den.

např. 1. den – 1 hodinu

2. den – 2 hodiny

3. den – 4 hodiny

4. den – 8 hodin

5. den – celodenně, během dne. Potom již výrobek noste ve dne po celý den.

NESPRÁVNÝ POSTUP

- Výrobek se nemá nosit celý den hned od začátku. Doba nošení je nutno prodlužovat postupně, aby bylo zajištěno sledování správného smyslového vnímání, biomechanických změn a padnoucího střihu.
- V noci ortézu DMO nenoste, ledaže vám to doporučí váš praktický nebo odborný lékař, jak je tomu například u pacientů s EDS, kde nošení ortézy v noci může být přínosné.

Pokyny k praní

Důsledně dodržujte pokyny k péči. Správnou péčí o ortézu prodloužíte její životnost a předejdete poškození.

DOPORUČENO

- Ortézu perte alespoň každé 2–3 dny.
- Ortézu lze prát v ruce ve studené vodě nebo v pračce na 30 °C.
- Perte odděleně.
- Pouze krátké odstředování, nebo zabalte do suchého ručníku a jemně vymačkejte přebytečnou vlhkost.
- Nechte zcela uschnout přes noc zavěšením uvnitř.

NEDOPORUČENO

- Nevystavujte přímému slunečnímu záření ani nesušte na radiátoru.
- Neždímejte – mohlo by dojít k deformaci a poškození materiálů.
- Nežehlit.
- Nepoužívejte bělidla ani prostředky na bělení.
- Nepoužívejte aviváž.
- Nečistit chemicky.
- Nesušit v sušičce – mohlo by dojít ke sražení.

Pro další pomoc a podporu jsme na naše webové stránky přidali návod, jak si ortézu správně nasazovat a sundávat. Navštivte prosím: www.dmorthotics.com/productcare

Pravidelná a správná péče o ortézu zabrání vzniku zápachu a udrží materiál pružný. Pokud je vaše ortéza ošetřena stříbrem, bude potřeba tuto úpravu obnovit po 100 praních, protože stříbrné ionty se začínají uvolňovat přibližně po 50 praních.




Jak naše výrobky nosit

Vytvořili jsme sadu nových videoprůvodců, které našim zákazníkům pomáhají využívat své ortézy v plné míře. Do průvodců jsme zařadili užitečné tipy a triky, kde ukazujeme, jak naše výrobky nosit a jak s nimi při navlékání a svlékání co nejšetrněji zacházet.

Průvodce najdete na adrese www.dmorthotics.com/productcare

Výrobky DMO® se nosí přímo na kůži. Dobu nošení je třeba během prvního týdne postupně prodlužovat, a to tak, že se každý další den doba prodlouží na dvojnásobek, až nakonec se výrobek nosí ve dne po celý den, například.

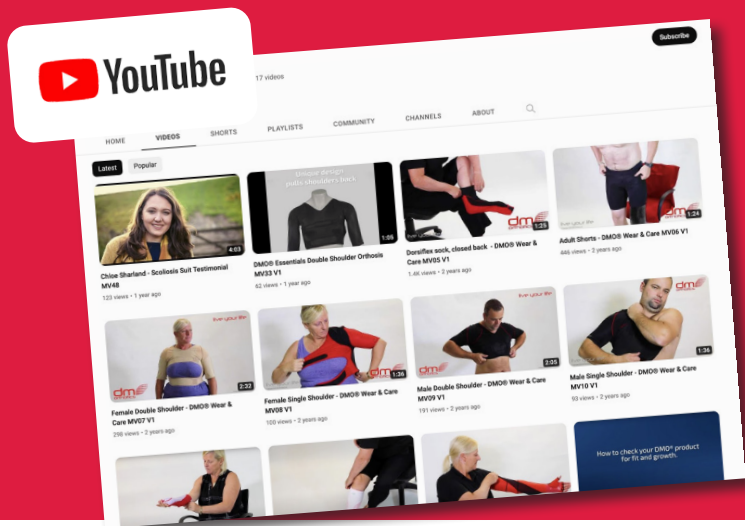

KONTRAINDIKACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kontraindikace

Proti nošení ortéz DMO® nejsou známy žádné kontraindikace. Posouzení individuálně uzpůsobeného výrobku DMO® je věcí příslušně oprávněného odborně kvalifikovaného lékaře.

Bezpečnostní opatření

Předtím, než se výrobek DMO® předepíše, je třeba zvážit níže uvedené okolnosti. Ty je třeba probrat s odborně kvalifikovaným lékařem, který může navrhnout alternativní výrobek řady DMO®.

Nedostatečná regulace teploty

DMO nijak neovlivňuje centrum teplotní regulace v organismu. Je však třeba pamatovat, že DMO představuje vrstvu oděvu a takové vrstvy je třeba upravovat podle toho, zda je venku teplo nebo chladno.

Primární oběhové poruchy

Při některých primární respiračních problémech, kdy svaly kvůli poškození nervů či svalů slábnou, je třeba situaci pečlivě zvážit a může být zapotřebí ji probrat s pacientovým praktickým lékařem. Sekundární oběhové problémy spojené s mozkovou obrnou se mohou zlepšením postavení trupu či těla a lepší polohou žeber zmírnit.

Kožní onemocnění

Pokud má pacient kožní onemocnění, které se může dlouhodobějším přímým stykem se syntetickým materiálem zhoršit, může být zapotřebí porada lékařem, který se stará o pacientovu dermatologickou léčbu, je to však jen zřídka kontraindikace.

Skeletální křehkost / křehké kosti

U některých onemocnění může mít použití výrobků řady DMO® kladný vliv, to je však třeba probrat s pacientovým praktickým lékařem.

Jednostranná ramenní ortéza DMO® Essentials vhodné velikosti

Účel

Ramenní ortézy DMO®, jak jednostranné, tak oboustranné, slouží k nápravě vad ramen a zajišťují stabilizaci a vzájemné vyrovnaní trupu, ramen a horních končetin.

Jejich vývoji předcházely rozsáhlý výzkum a díky své unikátní stavbě táhnou ramena dozadu, poskytují oporu lopatkám a stabilizují ramenní klouby, čímž zprostředkovávají zvýšený komfort i rozsah pohybů.

Pacienti, pro které je výrobek určen

Děti i dospělí, kteří mají nízký nebo vysoký svalový tonus vyžadující stabilizaci postižených kloubů a vzájemné vyrovnaní trupu, ramen a horních končetin.

Toto narovnání může být nápomocné funkcím těla a pomoci snižovat bolesti a zvládat únavu. U osob, které si ortézu navlékají a svlékají samy, je zapotřebí určitá zručnost a svalový tonus. Tam kde tomu tak není, musí při navlékání a svlékání ortézy pomáhat pečovatel.

Pro koho je výrobek určen

Ortézu může předepsat příslušný lékař, nebo ji může zvolit osoba, která ji bude nosit, nebo její pečovatel nebo rodiče. Osoba, která ortézu nosí, bývá obvykle zdravotnický laik.

Totéž platí o pečovateli, který se podílí na navlékání a svlékání ortézy a jejím praní a oznamuje případné problémy s ní.

Účinně působí při:

- subluxaci ramenního kloubu
- dislokaci ramenního kloubu
- nestabilitě ramenního kloubu
- neurologické bolestivosti ramene
- zranění brachiálního plexu (Erbově obrně)
- mozkové obrně
- Ehler-Danlosovu syndromu
- roztroušené skleróze
- mrtvici
- poranění páteře

Poskytují:

- opětovné vyrovnaní pletence ramenního
- zlepšení distální funkce
- zlepšený rozsah pohybů páteře
- zlepšení postury (držení těla)
- úlevu od bolesti

Jednostranná ramenní DMO® Essentials dámská



Jednostranná ramenní DMO® Essentials pánská



Oboustranná ramenní ortéza DMO® Essentials vhodné velikosti

Účel

Ramenní ortézy DMO®, jak jednostranné, tak oboustranné, slouží k nápravě vad ramen a zajišťují stabilizaci a vzájemné vyrovnaní trupu, ramen a horních končetin.

Jejich vývoji předcházely rozsáhlý výzkum a díky své unikátní stavbě táhnou ramena dozadu, poskytují oporu lopatkám a stabilizují ramenní klouby, čímž zprostředkovávají zvýšený komfort i rozsah pohybů.

Pacienti, pro které je výrobek určen

Děti i dospělí, kteří mají nízký nebo vysoký svalový tonus vyžadující stabilizaci postižených kloubů a vzájemné vyrovnaní trupu, ramen a horních končetin.

Toto narovnání může být nápomocné funkcím těla a pomoci snižovat bolesti a zvládat únavu. U osob, které si ortézu navlékají a svlékají samy, je zapotřebí určitá zručnost a svalový tonus. Tam kde tomu tak není, musí při navlékání a svlékání ortézy pomáhat pečovatel.

Pro koho je výrobek určen

Ortézu může předepsat příslušný lékař, nebo ji může zvolit osoba, která ji bude nosit, nebo její pečovatel nebo rodiče. Osoba, která ortézu nosí, bývá obvykle zdravotnický laik.

Totéž platí o pečovateli, který se podílí na navlékání a svlékání ortézy a jejím praní a oznamuje případné problémy s ní.

Účinně působí při:

- subluxaci ramenního kloubu
- dislokaci ramenního kloubu
- nestabilitě ramenního kloubu
- neurologické bolestivosti ramene
- zranění brachiálního plexu (Erbově obrně)
- mozkové obrně
- Ehler-Danlosovu syndromu
- roztroušené skleróze
- mrtvici
- poranění páteře

Poskytují:

- opětovné vyrovnaní pletence ramenního
- zlepšení distální funkce
- zlepšený rozsah pohybů páteře
- zlepšení postury (držení těla)
- úlevu od bolesti

Jednostranná ramenní
DMO® Essentials pánská

Jednostranná ramenní
DMO® Essentials dámská



Jednostranná ramenní ortéza DMO® – pokyny k oblékání

Jak se jednostranná ramenní ortéza DMO® navléká (Jako ilustrace je použita zakázková jednostranná ramenní ortéza DMO®.)

Bezpečnostní upozornění:

- Před navlečením ortézy si sundejte hodinky a šperky.
- Pokud je pacient nemocný nebo má teplotu, je třeba ortézu svléknout.
- V případě jakýchkoli problémů s tím, jak vám ortéza sedí, například jestliže vám končetiny modrají nebo jsou na dotek nepřiměřeně studené, ihned ortézu svléknete a k posouzení problému informujete svůj ošetřující tým, nebo pokud jste ji zakoupili na našich webových stránkách, spojte se s naším administrativním odborem a firmě DM Orthotics ji zašlete zpět.

Kontrola, zda ortéza padne:


- Stehování, resp. konce ortézy, mohou po svléknutí zanechat otlačky; pokud jsou však tyto známky i po 20–30 minutách nadměrně červené, je možné, že je ortéza příliš těsná.
- V případě jakýchkoli pochybností, pokud jde o to, jak vám ortéza sedí, svléknete ji a záležitost proberte se svým terapeutem, pokud ho máte, nebo jestliže jste ortézu zakoupili na našich stránkách, spojte se naším administrativním odborem a firmě DM Orthotics ji zašlete zpět.




Na postižené straně těla provlečte paži rukávem a ortézu vytáhněte nahoru až k rameni.



Pokud to dokážete, položte postiženou paži podle vyobrazení na vrch ortézy. Tím se ortéza udržuje ve své poloze, zatímco se natáhnete dozadu za záda a podáte si široký pás.

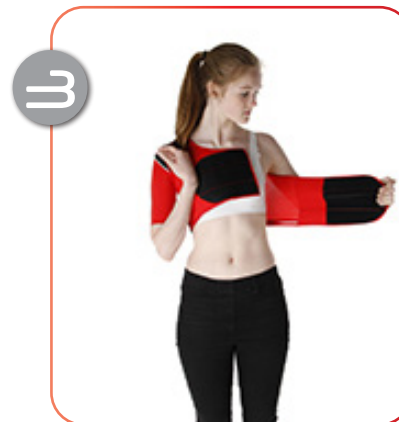

Zadní díl ortézy odtahujte do strany, dokud se elastický pruh plně nenatáhne. (Tento pohyb do boku je rozhodující pro to, aby ortéza působila, jak má.) Nataženou paži držte stále od těla, pohybujte s ní dopředu a ovíjte napnutou klopou kolem trupu, dokud se nepodaří suchý zip zapnout. Suchý zip ještě dále zapínejte tak, aby se po celé ploše vepředu zapnul.

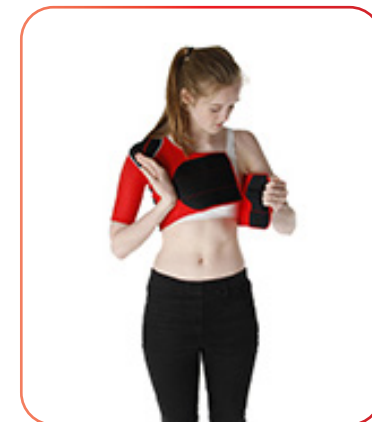

Takto vypadá správně nasazená dětská a pánská jednostranná ramenní ortéza.



Jednostranná dámská ramenní ortéza je vybavena dvěma popruhy místo jednoho. Postupujte podle pokynů v kroku 3 s tím, že nejprve napnete a ovinete kolem těla horní popruh tak, aby se dal suchý zip zapnout, a pak provedete totéž se spodním popruhem. Suchý zip má po zapnutí sedět pohodlně.

žijte svůj život.


Jak se jednostranná ramenní ortéza DMO® svléká

Jak navlečená jednostranná ramenní ortéza vypadá:


Pánská a
chlapecká
verze:




Dámská
verze:

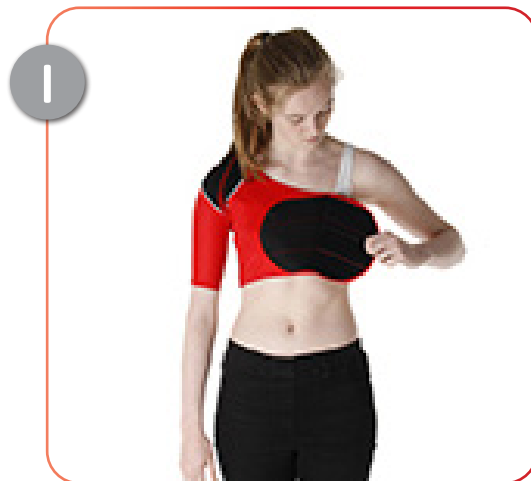


U dětské a pánské verze rozepněte vepředu suchý zip a nechte popruhy viset. U dámské verze rozepněte suché zipy na obou popruzích a nechte popruhy viset.

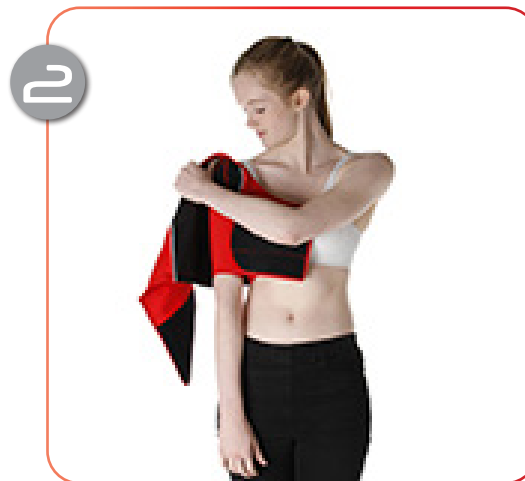

Ortézu z postižené strany sejměte.

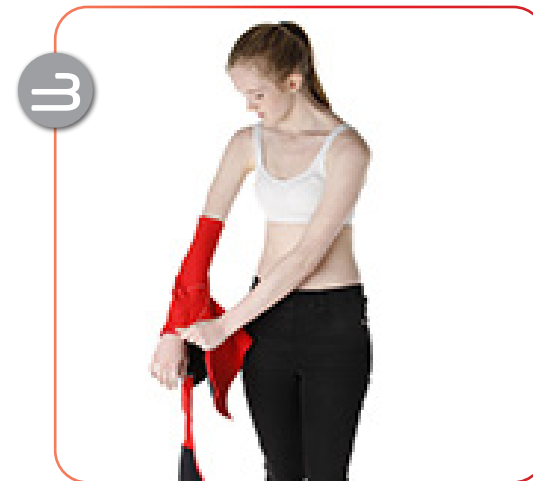

Z rukávu ortézy paži vytáhněte.

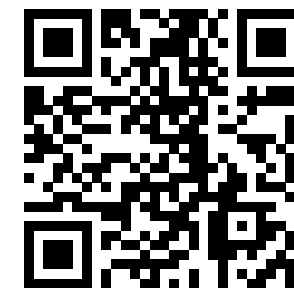

Pro přístup k našim videím
o nošení ortéz a péči o
ně použijte QR kód nebo
navštivte stránku:
www.dmorthotics.com/productcare

Oboustranná ramenní ortéza DMO® – pokyny pro používání

Jak se oboustranná ramenní ortéza DMO® navléká

Bezpečnostní upozornění:

- Následující pokyny platí pro pánskou i dámskou verzi oboustranné ramenní stabilizační ortézy.
- Doporučuje se ramenní ortézu nasazovat v sedě.
- Oboustranná ramenní ortéza se nasazuje směrem dopředu, aby nedošlo k namáhání ramenních kloubů

Kontrola, zda ortéza padne:

- Stehování, resp. konce ortézy, mohou po svléknutí zanechat otlačky; pokud jsou však tyto známky i po 20–30 minutách nadměrně červené, je možné, že je ortéza příliš těsná.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti, zda ortéza správně padne, svlékněte ji a probejte problém se svým terapeutem (pokud nějakého máte). Pokud jste ortézu zakoupili na našich stránkách, spojte se naším administrativním odborem a firmě DM Orthotics je zašlete zpět.

Dětská ortéza na obě ramena

Pokyny pro nasazování dětské verze tohoto výrobku jsou shodné s pokyny pro pánskou verzi.



Na ramenní ortéze rozepte všechny suché zipy.



Zasuňte paže do rukávů ortézy a opatrně ji natáhněte na jedno a pak na druhé rameno, přitom si vždy pomozte protilehlou rukou a dbejte na to, aby byla ortéza navlečena zcela před ramena podle vyobrazení. **Pozn.** Při nasazování dámské ortézy dbejte na to, aby se otvor v předním dílu nacházel nad a pod prsy podle vyobrazení. U pánské a dětské ortézy žádný otvor pro poprsí na předním dílu není. Přední díl opatrně potáhněte směrem dolů tak, aby na žebrech pohodlně seděl.



Na pravé straně ortézy uchopte podle vyobrazení oba popruhy. Vedte je kolem zad a provlékněte je otvorem na levé straně ortézy pod pažním dílem.



Nyní přidržíte popruh(y), který (které) jste zasunuli do otvoru, a opatrně ale pevně napněte spodní popruh, držte ho přitom od těla a přitahujte dolů. Vepředu ho zapněte na spodní suchý zip.



Uchopte horní popruh a opatrně ho napněte, držte ho od těla a přitahujte dolů, a pak ho zapněte na horní suchý zip na přední straně ortézy.

Můžete také nejdříve zapnout horní popruh – u některých pacientů to lépe napomáhá obnovit polohu ramene. Potom zapněte spodní popruh.

— žijte svůj život.

**Jak má vypadat nasazená
ortéza na obě ramena:**

Pánská verze:



**Dámská
verze:**



Dítě:



6



Opakujte tyto kroky u zbývajících popruhů na pravé straně těla. Opatrně napněte spodní popruh, držte ho přitom od těla a přitahujte dolů, a pak ho zapněte na spodní suchý zip na přední straně ortézy.

7




Opakujte s popruhem ortézy (viz vyobr. 6). Dbejte na to, abyste díly ortézy ovinující rameno přitáhli na zádech a na předním dílu směrem dolů, pomůžete tím plně využít zlepšení polohy, které ortéza dokáže poskytnout. Dbejte na to, aby toto přitážení bylo komfortní a vyhovovalo vašim ramenům i žebřům.

8



Dbejte na správné usazení rukávového dílu.

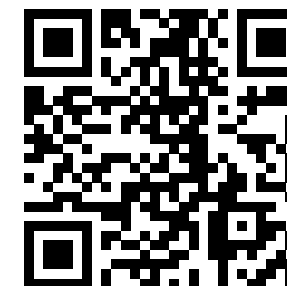

Pro přístup k našim videím
o nošení ortéz a péči o
ně použijte QR kód nebo
navštivte stránku:
www.dmorthotics.com/productcare

žijte svůj život.

Jak má nasazená oboustranná
ortéza vypadat:

Pánská verze:



Dámská
verze:



Dítě:



Jak se oboustranná ramenní ortéza DMO® svléká



Na obou stranách suchý zip rozepněte.



Opatrně položte opačnou ruku na
ramenní díl a začněte ho z paže
stahovat.



Totéž zopakujte na druhé straně
ortézy.



Popruh(y) po rozeptutí sejměte a
ovinutí si opatrně stáhněte.

Pokyny pro likvidaci prostředku

Prostředky vyráběné společností DM Orthotics jsou prvotřídní, resp. zakázkové ortetické prostředky. Při jejich likvidaci není třeba dbát žádných zvláštních bezpečnostní opatření. Materiály používané při jejich výrobě lze likvidovat v souladu s místními předpisy pro likvidaci oděvů a materiálů. Žádáme vás, abyste prostředek před likvidací laskavě vyprali.

Pokyny pro případ závažné nežádoucí příhody

Pokud dojde v souvislosti s vaším prostředkem DMO® k závažné nežádoucí příhodě, neprodleně ji oznamte výrobcí (DM Orthotics) a příslušnému orgánu odpovědnému za zdravotnické prostředky ve vašem členském státě. Ve Velké Británii je tímto orgánem Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Výrobce:



Údaje pacienta



**Výrobek/typové
označení**




**Vyrobeno ve
Velké Británii**



Distributor




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nizozemsko

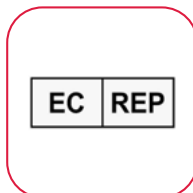

Jméno lékaře



Číslo objednávky

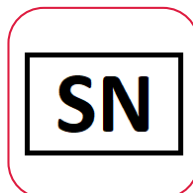

Zdravotnický prostředek



Upozorňujeme, že uživatelské úpravy se nedoporučují, a pokud si ortézu upravíte sami, bude to mít vliv na záruku, která tím může pozbýt platnosti. Ve věci úprav a změn výrobku se laskavě spojte se svým odborným lékařem nebo se společností DM Orthotics.



Výrobce:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Navrženo a vyrobeno v UK

Základní UDI- DI: 5054522UPPERLIMBQS

Základní UDI- DI:

5054522001231 Oboustranná dětská 1
5054522001248 Oboustranná dětská 2
5054522001255 Oboustranná dětská 3
5054522001262 Oboustranná dětská 4
5054522001279 Oboustranná dětská 5
5054522001286 Oboustranná dětská 6

5054522000708 Oboustranná pro dospělé XS
5054522000715 Oboustranná pro dospělé S
5054522000722 Oboustranná pro dospělé M
5054522000739 Oboustranná pro dospělé L
5054522000746 Oboustranná pro dospělé XL
5054522001224 Oboustranná pro dospělé XXL

5054522001415 Jednostranná dětská, levá 1
5054522001422 Jednostranná dětská, levá 2
5054522001439 Jednostranná dětská, levá 3
5054522001446 Jednostranná dětská, levá 4
5054522001453 Jednostranná dětská, levá 5
5054522001460 Jednostranná dětská, levá 6
5054522001477 Jednostranná dětská, pravá 1
5054522001484 Jednostranná dětská, pravá 2
5054522001491 Jednostranná dětská, pravá 3
5054522001507 Jednostranná dětská, pravá 4
5054522001514 Jednostranná dětská, pravá 5
5054522001521 Jednostranná dětská, pravá 6

5054522001293 Jednostranná pro dospělé, levá XS
5054522001309 Jednostranná pro dospělé, levá S
5054522001316 Jednostranná pro dospělé, levá M
5054522001323 Jednostranná pro dospělé, levá L
5054522001330 Jednostranná pro dospělé, levá XL
5054522001347 Jednostranná pro dospělé, levá XXL
5054522001354 Jednostranná pro dospělé, pravá XS
5054522001361 Jednostranná pro dospělé, pravá S
5054522001378 Jednostranná pro dospělé, pravá M
5054522001385 Jednostranná pro dospělé, pravá L
5054522001392 Jednostranná pro dospělé, pravá XL
5054522001408 Jednostranná pro dospělé, pravá XXL



Výrobce: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nizozemsko