

live your life.



Patientens brugsvejledning:

Specialfremstillede DMO® leggings, ben sleeves og shorts



www.dmorthotics.com

Vores produkter

Vores specialfremstillede Dynamic Movement Orthoses® anvender et blødt, fleksibelt elastomerstof, der sikrer en tæt pasform og skaber kompressionskraft for at forbedre proprioceptiv feedback. Dette basisstof er let, åndbart og stærkt.

Det kombineres med forstærkningspaneler fremstillet af et powernet-materiale for at give styrke og stabilitet, hvor det er nødvendigt, hvilket forbedrer kropsholdningen og den biomekaniske tilpasning.

Vores specialfremstillede ortoser virker ved hjælp af strategisk placerede forstærkninger, som sørger for, at kroppen placeres i en forbedret kropsholdning. Denne nye biomekaniske tilstand kombineret med øget proprioception stimulerer og justerer det neurosensoriske system ved at genoptræne muskler til at arbejde med forbedret muskelspænding, styrke og ydeevne.

DMO®'er hjælper både voksne og børn med at håndtere de fysiske virkninger af deres neurologiske, muskuloskeletale og genetiske lidelser.

Specialfremstillede DMO®-produkter fremstilles enkeltvis efter mål, og alle fastgørelser, åbninger og forstærkninger følger individuelle anvisninger i henhold til hver enkelt patients funktionelle behov og præferencer.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om vores DMO® produktsortiment, kan du kontakte din stedlige DMO®-forhandler eller distributør eller DM Orthotics direkte for at finde ud af, hvem det er.

E-mail: admin@dmorthotics.com gå til: www.dmorthotics.com
ring til: +44 (0) 1209 219205

Sådan skal patienter bruge vores produkter

DM Orthotics' specialfremstillede ortoser er beregnet til **udelukkende at blive brugt af en enkelt specifik patient** til støtte og korrektion af kropsholdning og ledjustering. Den bør ikke bæres af andre personer, som den ikke er blevet opmålt og ordineret til.

Alle specialfremstillede DMO-ortoser er medicinsk udstyr i henhold til EU's MDR (forordningen om medicinsk udstyr) (2017/745) og er erklæret at stemme overens med reguleringerne i henhold til bilag II og III til EU's MDR og er omfattet af definitionen af en ortose: En støtte, skinne eller anden kunstig ydre anordning, der tjener til at støtte lemmerne eller rygsøjlen eller til at forhindre eller støtte bestemte bevægelser.

Udstyret er specialfremstillet (i henhold til bilag XIII til MDR) og opfylder de gældende krav i MDR (forordningen om medicinsk udstyr) (2017/745)-: Specialfremstillet produkt

Dato for levering

Vores specialfremstillede udstyr er fremstillet efter en specifik recept og vil blive forsynet med en fremstillingsdato på den medfølgende erklæringsformular, der følger med produktet. Dette skal opbevares af slutbrugeren.

Indholdsfortegnelse

●Brugsanvisning	s. 3
●Vaskeanvisninger	s. 4
●Kontraindikationer og forholdsregler	s. 5

Specialfremstillede leggings, ben sleeves og shorts s. 6

●Anvendelsesformål	s. 6
●Påænkt patientpopulation	s. 7
●Påænkede brugere	s. 7
●Effektiv for patienter	s. 8
●Brug med andre ortoser	s. 7

Specialfremstillede leggings s. 6

●Sådan tager du produktet af og på	s. 9
------------------------------------	------

Specialfremstillede ben sleeves s. 6

●Sådan tager du produktet af og på	s. 9
------------------------------------	------

Specialfremstillede shorts s. 6

●Sådan tager du produktet af og på	s. 9
------------------------------------	------

●Erklæring om bortskaffelse af enheden	s. 14
●Erklæring om alvorlig hændelse	s. 14
●Forklaring af de anvendte symboler	s. 15

Brugsanvisning

Følg plejeanvisningen omhyggeligt. Ved at passe omhyggeligt på din ortose vil du **forlænge holdbarheden og forhindre skader**.

SÅDAN GØR DU

- Tag ortosen på og af som anbefalet af din terapeut/leverandør. Se webstedet: www.dmorthotics.com/productcare
- Vær forsigtig, når du tager den af og på, og følg nøje anvisningerne i dette hæfte. Hvis du trækker den af eller på for hurtigt, eller hvis du har lange negle, kan den blive beskadiget.
- Det er vigtigt at opbygge anvendelsestiden af ortosen i overensstemmelse med dine individuelle instruktioner.
- Følg vaskeanvisningerne omhyggeligt, da ortosen ellers kan blive beskadiget.

UNDLAD

- Undlad at tage dit skræddersyede produkt af eller på med magt - dette kan forårsage skader på produktet, så der løber masker, eller der opstår flænger eller huller i stoffet.
- Undlad at tage den på eller af med lange fingernegle, det kan også beskadige stoffet.

PASFORM ELLER SIKKERHEDSHENSYN

Kontakt **STRAKS** din terapeut/leverandør, hvis ortosen bliver meget stram, forårsager røde mærker, eller hvis maskerne begynder at løbe og/eller får huller.

DMO® produkter er designet som et supplement til terapi og fysisk træning, så de bør ikke fjernes for at træne, medmindre din terapeut anbefaler det, eller du har andre bekymringer, som de kan hjælpe dig med.

Anvendelsestid

SÅDAN GØR DU

- Udvid langsomt anvendelsestiden i løbet af den første uge som angivet nedenfor, så du fordobler varigheden hver dag, indtil ortosen bruges gennem en hel arbejdsdag.

f.eks. 1. dag - 1 time

2. dag - 2 timer

3. dag - 4 timer

4. dag - 8 timer

5. dag - hele dagen i dagtimerne. Herefter anvendes de hele dagen og hver dag i dagtimerne.

UNDLAD

- Bær ortosen hele dagen med det samme. Anvendelsen bør opbygges for at sikre sensorisk tolerance, biomekaniske ændringer og -for at holde øje med pasformen.
- Undlad at bruge dine DMO-leggings/shorts om natten, med mindre det anbefales af din læge eller kliniker, fx i tilfælde af EDS-patienter, hvor det kan være gavnligt.

Vaskeanvisning

Følg vaskeanvisningen nøje. Ved at passe godt på din ortose forlænger du dens levetid og forebygger skader.

GØR

- Ortosen bør vaskes mindst hver 2.-3. dag.
- Ortosen kan håndvaskes i koldt vand eller maskinvaskes ved 30°C.
- Vaskes separat.
- Brug kun kort centrifugering eller rul ortosen ind i et tørt håndklæde for at fjerne overskydende fugt.
- Lad den tørre helt natten over ved at hænge den op indendørs.

GØR IKKE

- TØR IKKE i stærkt direkte sollys eller på en radiator.
- VRED IKKE – det vil strække ortosen og beskadige materialet.
- STRYG IKKE.
- Brug ikke blegemidler eller optisk hvidt.
- Brug ikke skyllemiddel.
- RENS IKKE.
- TØRRETUMBL IKKE – det vil få ortosen til at krympe.

For yderligere hjælp og support har vi tilføjet en vejledning i, hvordan du tager din ortose af og på, på vores hjemmeside. Besøg venligst: www.dmorthotics.com/productcare.

Regelmæssig og korrekt pleje af ortosen forhindrer udvikling af lugt og holder materialet smidigt. Hvis din ortose er sølvbehandlet, skal denne behandling genanvendes efter 100 vaske, da sølvionerne begynder at forsvinde efter 50 vaske.




Anvendelse af vores produkter

Vi har lavet en række videoguides, der skal hjælpe vores kunder med at få det bedste ud af deres produkt. Disse vejledninger indeholder nyttige tips og tricks til brugen af vores produkter, og til, hvordan du bedst passer på dem, når du tager dem af og på.

For at se dem gå til: www.dmorthotics.com/productcare

DMO® produkter bør bæres direkte på huden. Det er vigtigt at opbygge anvendelsestiden langsomt i løbet af den første uge ved at fordoble varigheden hver dag, indtil den bæres dagen igennem, f.eks.

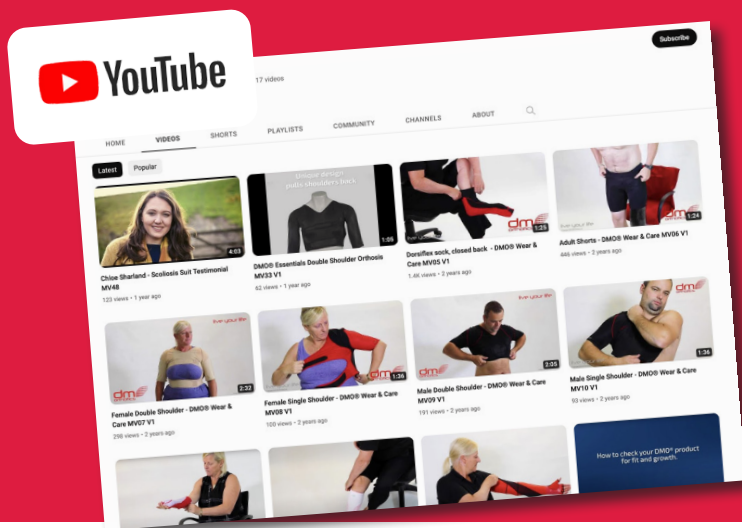

KONTRAINDIKATIONER OG FORHOLDSREGLER/OVERVEJELSER

Kontraindikationer

Der er ingen kendte kontraindikationer for brug af en DMO®. Vurderingen for et specialfremstillet DMO®-produkt skal udføres af en autoriseret læge med de korrekte faglige kvalifikationer.

Forholdsregler/overvejelser

Det følgende er en liste over mulige forholdsregler, der skal tages i betragtning, før du fortsætter med at ordinere et DMO®-produkt. Dette bør drøftes med din fagligt kvalificerede læge, som kan foreslå et alternativt DMO®-produkt eller en ændring af det foretrukne DMO®-produkt.

Dårlig temperaturregulering

En DMO vil ikke have nogen indflydelse på kroppens termoregulatoriske center. DMO bør dog behandles som et lag af tøj, og tøjlæg skal justeres tilsvarende til varmt eller koldt klima. Der kan foretages justeringer af ordinationen, såsom korte ben og ærmer, for at hjælpe med at forbedre varmekontrollen.

Primære kredsløbsforstyrrelser

Visse primære luftvejsproblemer, hvor musklerne bliver svagere på grund af en nedbrydning af nerver/muskler, kræver nøje overvejelser og kan kræve drøftelse med patientens læge - selvom dragtens specifikation kan ændres for at imødekomme dette. Sekundære kredsløbsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grund af forbedret kropsholdning og forbedret position af ribbenene.

Hudlidelser

Hudlidelser, der kan forværres ved tæt kontakt med syntetiske materialer i længere perioder, kan kræve yderligere konsultation med sundhedspersonale, som overvåger patientens dermatologiske behandling, men dette er sjældent en kontraindikation.

Skrøbeligt skelet/knogleskørhed

Nogle tilstande kan godt understøttes af et DMO®-produkt, men dette bør diskuteres med din læge. Der kan foretages ændringer i det foretrukne produkt, såsom tilføjelse af lynlåse eller trykknapper eller brug af korte ærmer eller ben i stedet for lange ærmer eller ben.

Gastrostomi, stomi og andre medicinske behov

Vi kan fremstille det specialfremstillede produkt med en særlig åbning til en gastrostomi, stomi, suprapubisk kateter osv. Dette vil blive tilføjet på tilpasningsstadiet for at sikre præcis placering. Tal om dette med din læge, som kan søge yderligere rådgivning fra det erfarne kliniske team hos DMO®.

Specialfremstillede DMO® leggings, ben sleeves og shorts

Anvendelsesformål

Anvendelsesformålet med DM28 leggings, DM30/31 ben sleeves og DM32 shorts er at justere underkroppen, bækkenet, hofterne og de nedre lemmer. Den nøjagtige placering af effekten bestemmes af valget af produkt. Det forbedrer symmetrien og hjælper med stabilisering. DM28 leggings, DM30/31 ben sleeves og DM32 shorts giver et ikke-begrænsende og yderst effektivt støtteniveau til maksimering af stabiliteten af bækkenet og de nedre lemmer. Produktet bidrager også til distal kontrol og påvirker muskeltonus positivt, så funktionen forbedres.

Indikationer

Børn eller voksne med lav eller høj muskeltonus, sensoriske eller proprioceptionsproblemer, mangel på stabilitet i core, bækken- eller nedre lemmer. Børn eller voksne, der har smerter forbundet med dårlig tilpasning eller træthed forårsaget af deres manglende evne til at opretholde en korrigeret holdning af bækkenet eller de nedre lemmer.

Overvejelser

Afhængigt af højden på kropsstøtten for det valgte produkt, skal følgende tage i betragtning.

Visse primære luftvejsproblemer, hvor musklerne bliver svagere på grund af en nedbrydning af nerver/muskler, selvom dragtens specifikation kan ændres for at imødekomme dette.

Sekundære luftvejsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grund af forbedret kropsholdning og forbedret position af ribbenene. Se forrige side for andre kontraindikationer/overvejelser.



På tænkt patientpopulation

Mandlige og kvindelige patienter er normalt to år eller ældre, selvom børn under to kan have gavn af DM28 leggings, DM30/31 ben sleeves og DM32 shorts. Den lavere alderstærskel blev sat på grund af øget vækst på dette stadium, der ville kræve en justering eller ændring, der ikke skyldes manglende evne til at opnå det tilsigtede formål. Der er ingen øvre aldersgrænse for hverken DM28 leggings, DM30/31 ben sleeves eller DM32 shorts.

Forskellige medicinske tilstande med symptomer, som DM28 leggings, DM30/31 ben sleeves og DM32 shorts kan hjælpe med, bl.a. se side 8 (ikke udtømmende).

En rimelig høj grad af fingerfærdighed og muskelstyrke er påkrævet for dem, der selv skal tage og tage ortosen af. Der vil være brug for en omsorgsperson til at hjælpe med at tage ortosen på og af, hvor dette ikke er tilfældet.

På tænkte brugere

DM28 leggings, DM30/31 ben sleeves og DM32 shorts kræver ordination og specifikation fra en kompetent sundhedsmedarbejder, typisk en kvalificeret orto- eller fysioterapeut, som har modtaget passende træning i ordination og brug af ortoser til dynamisk bevægelse. En sådan kompetent sundhedsperson vil også være forpligtet til at vurdere pasformen af produktet og til at yde yderligere rådgivning til om nødvendigt at yde mere rådgivning til forbedring af produktets pasform.

Ortosens bærer vil typisk være en lægperson.

Bærerens omsorgsperson, som eventuelt inddrages i af- og påtagning, vask og indberetning af problemer med ortosen, vil typisk være en lægperson.

Den pågældende enhed er lavet efter mål og kræver specifikation af en sundhedsmedarbejder, der er uddannet i brugen af ortoser til dynamiske bevægelser. Dette kræver, at der tages en række målinger, hvilket sundhedspersonalet er blevet oplært i af DM Orthotics.

En række forskellige forstærkningspaneler skal også ordineres efter behov af den uddannede sundhedsmedarbejder.



DMO® specialfremstillede leggings

Effektiv ved:

- cerebral parese
- funktionsnedsættelser i nedre lemmer
- multipel sklerose
- Ehlers-Danlos-syndrom
- høj og lav muskeltonus
- med mere

Giver:

- bækken-stabilitet
- forbedret hofte- og knæstilling
- forbedret eksternt/intern hofterotation
- øget sensorisk bevidsthed
- forbedret kropsholdning
- forbedret muskelfunktion
- smertelindring
- forstærkningspaneler giver styrke og stabilitet

Yderligere egenskaber:

- valgfrit åbent skridt
- kompressionsmateriale for komfort og bevægelse
- forbedret benpositionering
- bruges under tøjet

DMO® specialfremstillede shorts

Effektiv ved:

- cerebral parese
- multipel sklerose
- ataksi
- lav muskeltonus
- erhvervet hjerneskade og hjernetraume
- Ehlers-Danlos-syndrom
- gangforstyrrelser
- slagtilfælde
- Parkinsons
- Huntingtons Chorea
- med mere

Giver:

- bækken-stabilitet
- hofte- og knæforlængelse
- reduceret eksternt/intern hofterotation
- øget sensorisk bevidsthed
- forbedret kropsholdning
- forbedret muskelfunktion
- smertereduktion

Yderligere egenskaber:

- kompressionsmateriale for komfort og bevægelse
- valgfrit åbent skridt
- forstærkningspaneler giver styrke og stabilitet
- bruges under tøjet

DMO® ben sleeve

Effektiv ved:

- cerebral parese
- funktionsnedsættelser i nedre lemmer
- multipel sklerose
- Ehlers-Danlos-syndrom
- høj og lav muskeltonus
- med mere

Giver:

- bækken-stabilitet
- forbedret hofte- og knæstilling
- forbedret eksternt/intern hofterotation
- øget sensorisk bevidsthed
- forbedret kropsholdning
- forbedret muskelfunktion
- smertelindring
- forstærkningspaneler giver styrke og stabilitet

Yderligere egenskaber:

- kompressionsmateriale for komfort og bevægelse
- forstærkningspaneler giver styrke og stabilitet
- bruges under tøjet

DMO® ben sleeve med fiksering

Effektiv ved:

- cerebral parese
- funktionsnedsættelser i nedre lemmer
- multipel sklerose
- Ehlers-Danlos-syndrom
- høj og lav muskeltonus
- med mere

Giver:


- bækken-stabilitet
- forbedret hofte- og knæstilling
- forbedret eksternt/intern hofterotation
- øget sensorisk bevidsthed
- forbedret kropsholdning
- forbedret muskelfunktion
- smertelindring
- forstærkningspaneler giver styrke og stabilitet

Yderligere egenskaber:

- kompressionsmateriale for komfort og bevægelse
- forstærkningspaneler giver styrke og stabilitet
- bruges under tøjet

Forholdsregler:

- Fjern ure og smykker, inden du tager ortosen på.
- Hvis shortsene har en lynlås, skal du sørge for, at lynlåsene er på plads over huden, før du lukker dem, og at de ikke er rullet bagover.
- Shortsene skal tages af, hvis patienten er syg eller har feber.
- Hvis der er problemer med pasformen, f.eks. hvis ekstremiteterne bliver blå eller føles meget kolde at røre ved, skal du straks tage shortsene af og informere behandlerteamet, så der kan foretages yderligere undersøgelser.

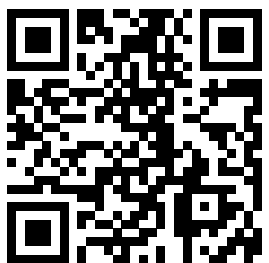

Brug QR-koden ovenfor for at få adgang til vores videoer om brug og pleje, eller gå til:

www.dmorthotics.com/productcare

DMO® specialfremstillede shorts – påføringsvejledning

Sådan tager du specialfremstillede DMO® shorts på.

Patienten skal sidde ned for at sikre balance og sikkerhed og for at sikre, at shortsene sidder korrekt.



Hvis shortsene leveres med en lynlås i taljen, skal du åbne den, inden du tager dem på. Tag shortsene (med etiketten bagpå) og træk dem op over benene (som du ville gøre med et par strømpebukser). Sørg for at trække dem over knæene og op over lårene, før du begynder at trække dem op over hofterne.




Træk shortsene op til taljen og luk lynlåsen, hvis der er en sådan.

live your life.

Sådan tager du de specialfremstillede DMO® shorts af.

Patienten skal sidde ned for at sikre balance og sikkerhed og for at sikre, at shortsene tages af korrekt.

Sådan skal shortsene se ud, når du har den på:

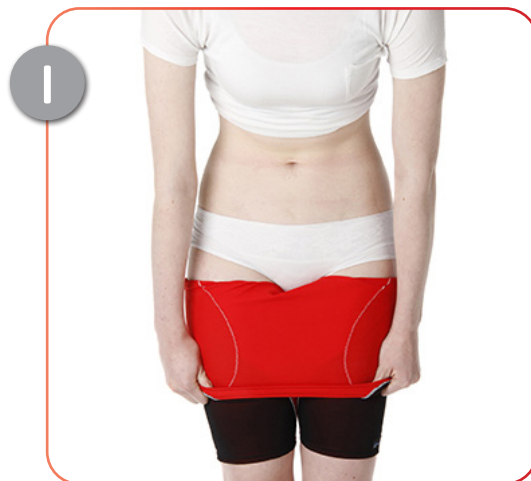

Rul shortsene ned over benene mod fødderne, og træk forsigtigt vrangen ud. .



Træk benene ud af ortosen ét ad gangen.

Sådan kontrolleres pasformen:

- Shortsene skal sidde stramt, men du skal kunne føre din pegefinger ind under shortsenes nedre kant og i taljen.
- Syningerne/enderne på ortosen kan efterlade små mærker på huden, når den fjernes, men hvis mærkerne er meget røde 25-30 minutter efter, at den er fjernet, kan den være for stram.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt ortosen sidder korrekt, skal du straks underrette din terapeut, da ortosen kun kan ændres gratis inden for de første seks uger.

DMO® specialfremstillede leggings - påføringsanvisninger

Sådan tager du DMO® leggings på.

Patienten skal ligge ned for at sikre balance og sikkerhed.

Forholdsregler:

- Fjern ure og smykker, inden du tager ortosen på.
- Sørg for, at lynlåsene er på plads over huden, før du lukker dem, og at de ikke er rullet tilbage.
- Leggings bør aldrig bæres om natten (med mindre det diskuteres med en læge eller fysioterapeut. Nogle EDS-patienter kan have gavn af nattøj, men dette skal bekræftes, før de gør det), eller når brugeren er syg eller har feber.
- Hvis der er problemer med pasformen, f.eks. hvis ekstremiteterne bliver blå eller føles meget kolde at røre ved, skal du straks tage shortsene af og informere behandlerteamet, så der kan foretages yderligere undersøgelser.

Sådan kontrolleres pasformen:

- Leggings skal sidde stramt, men du skal kunne føre din pegefinger ind under den nedre kant og i taljen.



Tag ortosen ud af emballagen.



Hvis der er monteret lynlås på kroppen eller ved anklerne, skal du først åbne disse, inden du tager leggings på.



Påfør silkefodsapplikatoren. Hvis den er bestilt og leveret.



Før højre ben gennem ortosens højre ben.



Træk forsigtigt ortosens højre ben op mod knæet.



Bliv ved med at trække forsigtigt mod knæet, indtil bunden af ortosens højre ben befinder sig over anklen.




Fjern silkeapplikatoren fra højre fod.



Tag silkeapplikatoren på venstre fod. For leg sleeveen se venligst billede 10

9

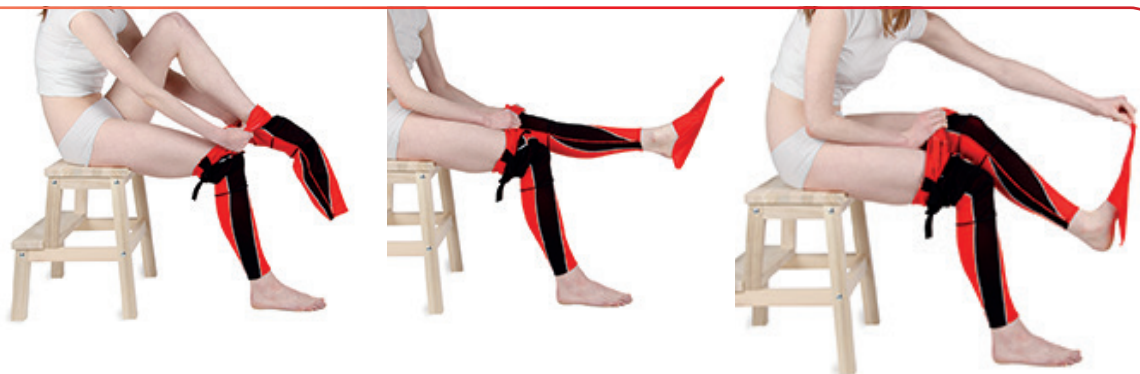

Gentag trin 4 til 7. Fjern derefter silkeapplikatoren fra foden. Sørg for, at du har trukket leggings forsigtigt op til låret, før du forsøger at trække dem op over hofterne og kroppen.

10




Træk leggings forsigtigt op mod hofterne.

11




Sørg for, at silikonen er i kontakt med huden øverst på ortosen, og luk eventuelle lynlåse i benene.

12

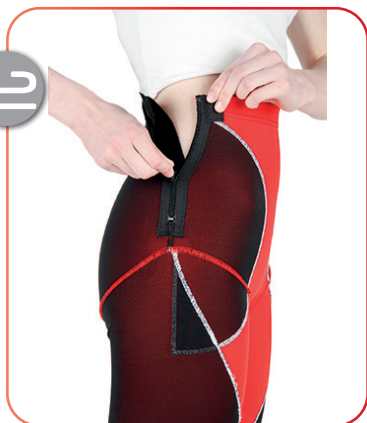

Luk lynlåsen i siden, hvis der er en.

13

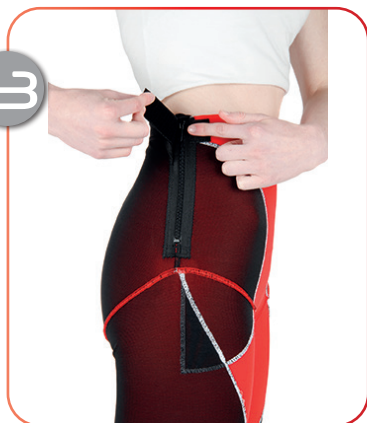

Sæt stroppen fast foran. Leveres kun, hvor der anmodes om en lynlås.

14



Billedet viser stroppen, der er fastgjort på forsiden af ortosen.

15



Sådan skal leggings se ud, når de er taget på korrekt.

Sådan kontrolleres pasformen forts.:

- Syninger/enderne på leggings kan efterlade små mærker i huden, når de fjernes, men hvis mærkerne er meget røde efter 25-30 minutter efter at den er fjernet, kan den være for stram.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt ortosen sidder korrekt, skal du straks underrette din terapeut, da ortosen kun kan ændres gratis inden for de første seks uger.


live your life.

DMO® specialfremstillede leggings - påføringsanvisninger

Sådan tager du DMO®-leggings af.


Patienten skal ligge ned for at sikre balance og sikkerhed.

Sådan skal leggings se ud, når du har den på:

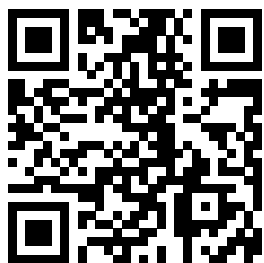

Brug QR-koden ovenfor for at få adgang til vores videoer om brug og pleje, eller gå til:


www.dmorthotics.com/productcare

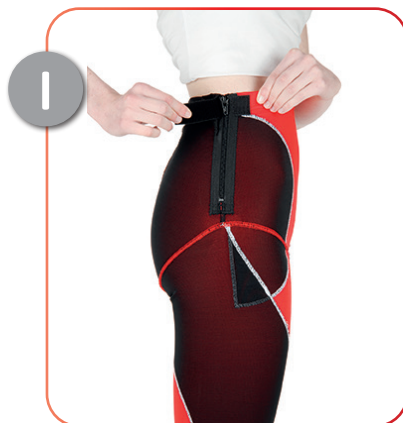

Løsn stroppen, hvis den er sat på.



Åbn en eventuel lynlås. Løsn eventuelle ankellynlåse.

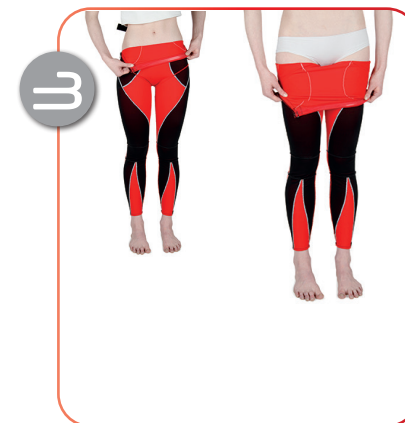

Rul leggings øvre del ned mod knæene, og træk forsigtigt vrangen ud.



Sid ned, og fortsæt med at rulle leggings ned mod knæene.



Sid ned, og fortsæt med at rulle leggings ned mod knæene.



Rul leggings ned til anklerne på begge ben.



Fjern fødderne fra leggings, én ad gangen.

DMO® specialfremstillet ben sleeve – påføringsvejledning

Sådan tager du DMO® ben sleeves på - med og uden fiksering.

Patienten skal ligge ned for at sikre balance og sikkerhed.

Forholdsregler:

- Fjern ure og smykker, inden du tager ortosen på.
- Sørg for, at lynlåsene er på plads over huden, før du lukker dem, og at de ikke er rullet tilbage.
- Leggings bør aldrig bæres om natten (med mindre det diskuteres med en læge eller fysioterapeut. Nogle EDS-patienter kan have gavn af nattøj, men dette skal bekræftes, før de gør det), eller når brugeren er syg eller har feber.
- Hvis der er problemer med pasformen, f.eks. hvis ekstremiteterne bliver blå eller føles meget kolde at røre ved, skal du straks tage shortsene af og informere behandlerteamet, så der kan foretages yderligere undersøgelser.

Sådan kontrolleres pasformen:

- Leggings skal sidde stramt, men du skal kunne føre din pegefinger ind under den nedre kant og i taljen.



Tag ortosen ud af emballagen.



Påfør silkefodsapplikatoren. Hvis den er bestilt og leveret.



Træk forsigtigt ben sleeveen op mod knæet.




Fjern derefter silkeapplikatoren fra foden.



For ben sleeves uden fiksering skal du forsigtigt bringe ben sleeveen op til låret og sikre, at det øverste silikonebånd sidder på det rigtige sted øverst på benet.




Sørg for, at silikonen er i kontakt med huden øverst på ortosen.

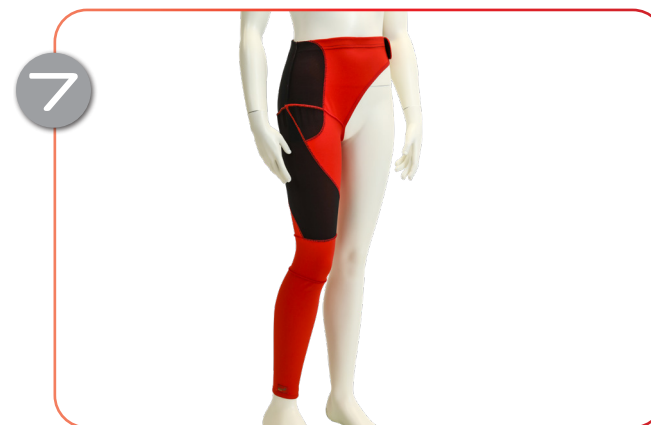

For ben sleeves med fiksering skal du forsigtigt trække sleeveen op mod hoften. Sørg for, at du har trukket leggings forsigtigt op til låret, før du forsøger at trække dem op over hoften og kroppen. Fastgør nu velcrostykket på den modsatte hofte.

live your life.

Sådan ser ben sleeves med og uden fiksering ud, når de er taget på.

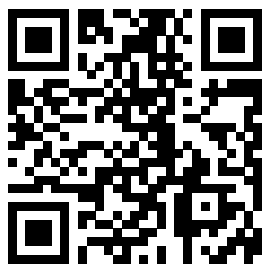

Brug QR-koden ovenfor for at få adgang til vores videoer om brug og pleje, eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare

DMO® specialfremstillet ben sleeve – påføringsvejledning

Sådan tager du DMO® ben sleeves af - med og uden fiksering.

Patienten skal ligge ned for at sikre balance og sikkerhed.



Løsn velcrostroppen på den modsatte hofte.



Ben sleeves skal forsigtigt trækkes ned mod knæet, så vrangen vendes udad.



Fortsæt med at rulle ben sleeveen forsigtigt ned af benet, over knæet og af foden.

Erklæring om bortskaffelse af enheden

De produkter, der fremstilles af DM Orthotics, er klasse 1 / specialfremstillede ortopædiske enheder. Der skal ikke træffes nogen forholdsregler ved bortskaffelse af DMO®-enheder. De materialer, der er anvendt til fremstillingen, kan bortskaffes i overensstemmelse med dine lokale ordninger for bortskaffelse af tøj/materialer. Vi beder dig dog om at vaske enheden, før du bortskaffer det.

Erklæring om alvorlig hændelse

Hvis der sker en alvorlig hændelse i forbindelse med din DMO®-enhed, skal du straks indberette den til producenten (DM Orthotics) og den kompetente myndighed med ansvar for medicinsk udstyr i din medlemsstat, f.eks. i Storbritannien til MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency).

Producent



Patient-id



Produkt-/model-id




Fremstillet i Storbritannien



Distributør




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederlandene

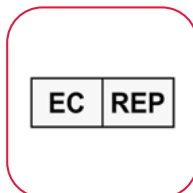

Klinikerens navn



Ordrenummer

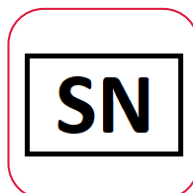

Medicinsk udstyr



Bemærk venligst, at ændringer fra brugerens side ikke anbefales, og at din garanti kan påvirkes eller ugyldiggøres, hvis du selv foretager ændringer på ortosen. Kontakt din kliniske specialist eller DM Orthotics vedrørende oplysninger om ændringer og produktmodifikationer.



Producent:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Storbritannien
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Designet og fremstillet i Storbritannien

© Ophavsrettighed 2024 DM Orthotics Ltd. Patent- og designregistrering gælder.

DM28 – 5054522000142 (UDI-DI)
DM30 – 5054522000166 (UDI-DI)
DM31 – 5054522000173 (UDI-DI)
DM32 – 5054522000180 (UDI-DI)



Producent: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederlandene

DM-002726-MK (Issue 2)