

live your life.



Patientens brugsvejledning:

DMO® Sensory-trøje i faste størrelser



www.dmorthotics.com

Vores produkter

DMO® Sensory-serien

DM Orthotics udviklede DMO® Sensory-serien efter anmodninger fra klinikere om et kompressionsprodukt uden forstærkningspaneler, der forbedrer den sensoriske proprioceptive feedback og core-stabiliteten. Som navnet antyder, er den udviklet til at støtte personer med sensoriske vanskeligheder.

Kompressionskræfterne i stofortosens design kan forbedre den proprioceptive feedback modtaget af hjernen gennem det neuro-sensoriske system. Dette påvirker igen muskeltonus og kropsbevidsthed, hvilket kan føre til en forbedring af kroppens evne til at mærke sin placering, bevægelse og handlinger.

Den dybe trykeffekt kan hjælpe med at reducere symptomer på både overaktiv og lav sensoriske udholdenhed, føre til en positiv effekt på core stabilitet, kropsjustering samt forbedret rumlig bevidsthed. Som kombination kan dette hjælpe på fin- og grovmotorikken.

Sensory-trøjen i faste størrelser fås i en række sætstørrelser til både børn og voksne og kan ikke ændres for at imødekomme individuelle patientbehov.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om vores DMO® produktsortiment, kan du kontakte din stedlige DMO®-forhandler eller distributør eller DM Orthotics direkte for at finde ud af, hvem det er.

E-mail: admin@dmorthotics.com gå til: www.dmorthotics.com ring til: +44 (0) 1209 219205

Sådan skal patienter bruge vores produkter

DM Orthotics' ortoser i faste størrelser er beregnet til **udelukkende at blive brugt af en enkelt specifik patient** til støtte og korrektion af kropsholdning og ledjustering. Den bør ikke bæres af andre personer, som den ikke er blevet opmålt og ordineret til.

Alle DMO-ortoser i faste størrelser er medicinsk udstyr i henhold til EU's MDR (forordningen om medicinsk udstyr) (2017/745) og er erklæret at stemme overens med reguleringerne i henhold til bilag II og III til EU's MDR og er omfattet af definitionen af en ortose: En støtte, skinne eller anden kunstig ydre anordning, der tjener til at støtte lemmerne eller rygsøjlen eller til at forhindre eller støtte bestemte bevægelser.

Udstyret fås i faste størrelser og udviklet og fremstillet, så det opfylder de gældende krav i EU's MDR (forordningen om medicinsk udstyr) (2017/745) og er erklæret at stemme overens med reguleringerne i henhold til bilag II og III til EU's MDR.

Dato for levering

Vores udstyr i faste størrelser er fremstillet efter en specifik recept og vil blive forsynet med en fremstillingsdato på den medfølgende erklæringsformular, der følger med produktet. Dette skal opbevares af slutbrugeren.

Indholdsfortegnelse

●Brugsanvisning	s. 3
●Vaskeanvisninger	s. 4
●Kontraindikationer og forholdsregler	s. 5

Sensory-trøje i faste størrelser **s. 6**

●Anvendelsesformål	s. 6
●På tænkt patientpopulation	s. 6
●På tænkte brugere	s. 6
●Effektiv for patienter	s. 7
●Kliniske fordele	s. 7
●Sådan tager du produktet af og på	s. 8
●Erklæring om bortskaffelse af enheden	s. 10
●Erklæring om alvorlig hændelse	s. 10
●Forklaring af de anvendte symboler	s. 11

Brugsanvisning

Følg plejeanvisningen omhyggeligt. Ved at passe omhyggeligt på din ortose vil du **forlænge holdbarheden og forhindre skader.**

SÅDAN GØR DU

- Tag ortosen på og af som anbefalet af din terapeut/leverandør. Se webstedet: www.dmorthotics.com/productcare
- Vær forsigtig, når du tager den af og på, og følg nøje anvisningerne i dette hæfte. Hvis du trækker den af eller på for hurtigt, eller hvis du har lange negle, kan den blive beskadiget.
- Det er vigtigt at opbygge anvendelsestiden af ortosen i overensstemmelse med dine individuelle instruktioner.
- Følg vaskeanvisningerne omhyggeligt, da ortosen ellers kan blive beskadiget.

UNDLAD

- Undlad at tage dit produkt af eller på med magt - dette kan forårsage skader på produktet, så der løber masker, eller der opstår flænger eller huller i stoffet.
- Undlad at tage den på eller af med lange fingernegle, det kan også beskadige stoffet.

PASFORM ELLER SIKKERHEDSHENSYN

Kontakt **STRAKS** din terapeut/leverandør, hvis ortosen bliver meget stram, forårsager røde mærker, eller hvis maskerne begynder at løbe og/eller får huller.

DMO® produkter er designet som et supplement til terapi og fysisk træning, så de bør ikke fjernes for at træne, medmindre din terapeut anbefaler det, eller du har andre bekymringer, som de kan hjælpe dig med.

Anvendelsestid

SÅDAN GØR DU

- Udvid langsomt anvendelsestiden i løbet af den første uge som angivet nedenfor, så du fordobler varigheden hver dag, indtil ortosen bruges gennem en hel arbejdsdag.

f.eks. 1. dag - 1 time

2. dag - 2 timer

3. dag - 4 timer

4. dag - 8 timer

5. dag - hele dagen i dagtimerne. Derefter hele dagen, hver dag i løbet af dagen.

UNDLAD

- Bær ortosen hele dagen med det samme. Anvendelsen bør opbygges for at sikre sensorisk tolerance, biomekaniske ændringer og -for at holde øje med pasformen.
- Må ikke bæres om natten.

Vaskeanvisning

Følg vaskeanvisningen nøje. Ved at passe godt på din ortose forlænger du dens levetid og forebygger skader.

GØR

- Ortosen bør vaskes mindst hver 2.-3. dag.
- Ortosen kan håndvaskes i koldt vand eller maskinvaskes ved 30°C.
- Vaskes separat.
- Brug kun kort centrifugering eller rul ortosen ind i et tørt håndklæde for at fjerne overskydende fugt.
- Lad den tørre helt natten over ved at hænge den op indendørs.

GØR IKKE

- TØR IKKE i stærkt direkte sollys eller på en radiator.
- VRED IKKE – det vil strække ortosen og beskadige materialet.
- STRYG IKKE.
- Brug ikke blegemidler eller optisk hvidt.
- Brug ikke skyllemiddel.
- RENS IKKE.
- TØRRETUMBL IKKE – det vil få ortosen til at krympe.

For yderligere hjælp og support har vi tilføjet en vejledning i, hvordan du tager din ortose af og på, på vores hjemmeside. Besøg venligst: www.dmorthotics.com/productcare.

Regelmæssig og korrekt pleje af ortosen forhindrer udvikling af lugt og holder materialet smidigt. Hvis din ortose er sølvbehandlet, skal denne behandling genanvendes efter 100 vaske, da sølvionerne begynder at forsvinde efter 50 vaske.




Anvendelse af vores produkter

Vi har lavet en række videoguides, der skal hjælpe vores kunder med at få det bedste ud af deres produkt. Disse vejledninger indeholder nyttige tips og tricks til brugen af vores produkter, og til, hvordan du bedst passer på dem, når du tager dem af og på.

For at se dem gå til: www.dmorthotics.com/productcare

DMO® produkter bør bæres direkte på huden. Det er vigtigt at opbygge anvendelsestiden langsomt i løbet af den første uge ved at fordoble varigheden hver dag, indtil den bæres dagen igennem, fx

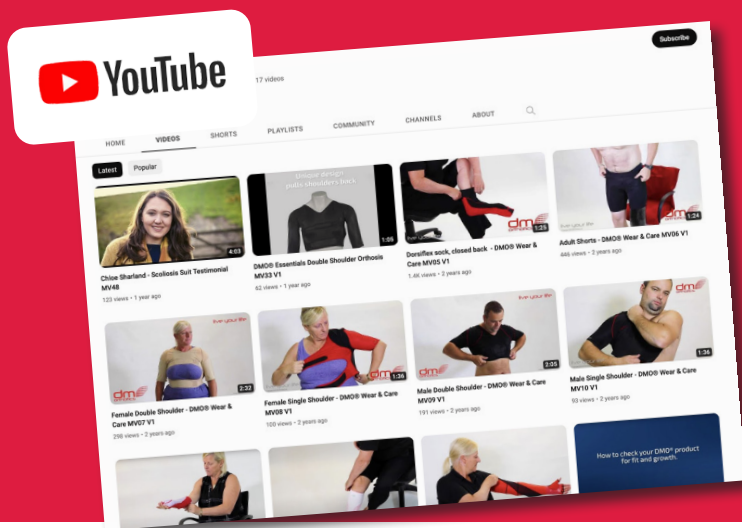

KONTRAINDIKATIONER OG FORHOLDSREGLER/OVERVEJELSER

Kontraindikationer

Der er ingen kendte kontraindikationer for brug af en DMO®. Vurderingen for et DMO®-produkt skal udføres af en autoriseret læge med de korrekte faglige kvalifikationer.

Forholdsregler/overvejelser

Det følgende er en liste over mulige forholdsregler, der skal tages i betragtning, før du fortsætter med at ordinere et DMO®-produkt. Dette bør drøftes med din fagligt kvalificerede læge.

Dårlig temperaturregulering

En DMO® vil ikke have nogen indflydelse på kroppens termoregulatoriske center. DMO® bør dog behandles som et lag af tøj, og tøjlæg skal justeres tilsvarende til varmt eller koldt klima.

Primære kredsløbsforstyrrelser

Visse primære luftvejsproblemer, hvor musklerne bliver svagere på grund af en nedbrydning af nerver/muskler, kræver nøje overvejelser og kan kræve drøftelse med patientens læge - selvom dragtens specifikation kan ændres for at imødekomme dette. Sekundære kredsløbsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grund af forbedret kropsholdning og forbedret position af ribbenene.

Hudlidelser

Hudlidelser, der kan forværres ved tæt kontakt med syntetiske materialer i længere perioder, kan kræve yderligere konsultation med sundhedspersonale, som overvåger patientens dermatologiske behandling, men dette er sjældent en kontraindikation.

Skrøbeligt skelet/knogleskørhed

Nogle tilstande kan godt understøttes af et DMO®-produkt, men dette bør diskuteres med din læge.

DMO® Sensory-trøje i faste størrelser

Anvendelsesformål

Det tilsigtede formål med Sensory-trøjen er at forbedre sensorisk proprioceptiv feedback og core stabilitet, som lettes ved påføring af dybt tryk. Det udøves gennem huden af den kompressionskraft, som kommer fra stoffet.

Forbedring af kropsbevidsthed kan have en positiv effekt. Når coren bliver mere stabil, justeres kroppen og rumlig bevidsthed forbedres, kan fin- og grovmotorik også forbedres.

Indikationer

Børn eller voksne med lav eller høj muskeltonus, sensoriske eller proprioceptionsproblemer, mangel på core- eller skulderbæltstabilitet. Børn eller voksne, der har smerter forbundet med dårlig tilpasning eller træthed forårsaget af deres manglende evne til at opretholde en korrigeret holdning af kroppen, de øvre lemmer.

På tænkt patientpopulation

Mandlige og kvindelige patienter normalt i alderen to eller derover, selvom børn under to kan have gavn af produktet. Den lavere alderstærskel blev sat på grund af øget vækst på dette stadium, der ikke skyldes manglende evne til at opnå det tilsigtede formål. Der er ingen øvre aldersgrænse for trøjen.

Forskellige medicinske tilstande giver symptomer, som trøjen kan hjælpe med.

En rimelig høj grad af fingerfærdighed og muskelstyrke er påkrævet for dem, der selv skal tage den af og på. Der vil være brug for en omsorgsperson til at hjælpe med at tage den på og af, hvor dette ikke er tilfældet.

På tænkte brugere

Sensory-trøjer i faste størrelser kan ordineres af en kompetent sundhedsmedarbejder, typisk en kvalificeret orto-, fysio- eller ergoterapeut, som har modtaget passende træning i ordination og brug af Dynamic Movement Orthoses.

Bæreren vil typisk være en lægperson. Bærerens omsorgsperson, som eventuelt inddrages i af- og påtagning, vask og indberetning af problemer, vil typisk være en lægperson.



DMO® Sensory-trøje i faste størrelser

Egnet til:

Voksne og børn, der kræver kompression for at øge kropsbevidstheden og mindske overaktivitet. Dette kan give en beroligende effekt og forbedre core-stabilitet og midtlinjeorientering.

Effektiv ved:

- sensoriske vanskeligheder
- nogle mennesker med autisme, ADHD og Sensory Processing Disorder

Giver:

- øget sensorisk registrering
- støtte til høj sensorisk tolerance eller lav sensorisk tolerance
- øget rumlig opmærksomhed og koncentration
- nedsat taktil følsomhed

Fordele omfatter:

- Kan bruges hele dagen
- Bomuld/polyester-blanding
- Åndbart materiale, der kan vaskes
- Bruges under tøjet, men kan bruges alene, hvis det ønskes, især i varme klimaer.
- Udvendige sømme skal forbedre produktets indvendige overflader og forhindre områder, der klør
- Oeko-Tex certificering – standard 100



Forholdsregler:

- Sørg for, at lynlåsen er på plads over huden, før du lukker den, og at den ikke er rullet tilbage.
- Vesten skal tages af, hvis patienten er syg eller har feber.
- Hvis der er problemer med pasformen, f.eks. hvis ekstremiteterne bliver blå eller føles meget kolde at røre ved, skal du straks fjerne den og informere behandlerteamet for at få foretaget yderligere undersøgelser.


Sådan kontrolleres pasformen:

- Trøjen skal sidde stramt, men du skal kunne føre din pegefinger ind under ærmerne og benene samt rundt om halsen.
- Når den er fjernet, kan syningen/enderne af ortosen efterlade røde mærker på huden. Hvis de er meget røde 20- 30 minutter efter fjernelse, kan den være for stram.
- Hvis du er i tvivl, om produktet sidder korrekt, bedes du henvende dig til vores hovedkontor for at få en anden størrelse eller en refusion. Returner produktet ubrugt og i den originale emballage i henhold til vores returpolitik. Hvis der er en behandler involveret i din pleje, bedes du kontakte denne om råd.


DMO® Sensory-trøje i faste størrelser - påtagningsvejledning

Sådan tager du DMO® Sensory-trøjen på.

DMO® Sensory-trøjen i faste størrelser tages på samme måde af og på som den specialfremstillede DMO trøje, som er blevet brugt til illustrationsformål.

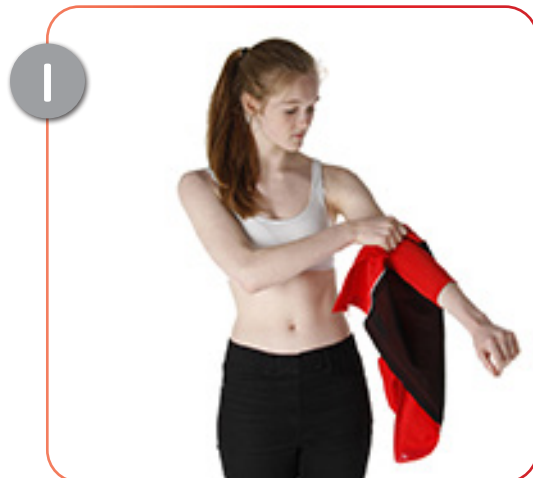

1 Tag ud af emballagen, og åbn lynlåsen. Placer din arm i det korrekte ærmeafsnit.

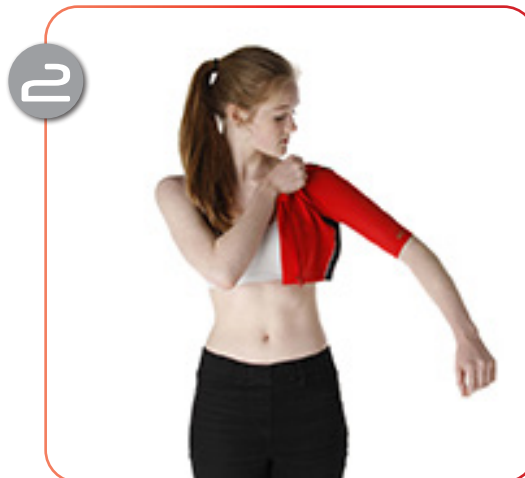

2 Træk godt op til skulderen.



3 Tag ortosen bag ryggen, og før den anden arm ind i det andet ærme bag ryggen.



4 Træk frontpanelet omkring dig.



5 Luk lynlåsen foran, idet du sørger for at beskytte huden mod at komme i klemme.


Bemærk venligst. Din ortose kan være længere end den, der er vist her. Når du har lukket lynlåsen, skal du sørge for, at du forsigtigt trækker ortosen ned for at sikre, at den dækker din krop godt.

Sørg også for, at lynlåsens for er placeret på huden for at sikre, at lynlåsen ikke får fat i huden.


live your life.

Sådan tager du DMO® Sensory-trøjen af.

Sådan skal Sensory-trøjen i fast størrelse se ud, når du har den på:

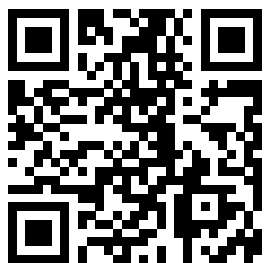

Brug QR-koden ovenfor for at få adgang til vores videoer om brug og pleje, eller gå til: www.dmorthotics.com/productcare

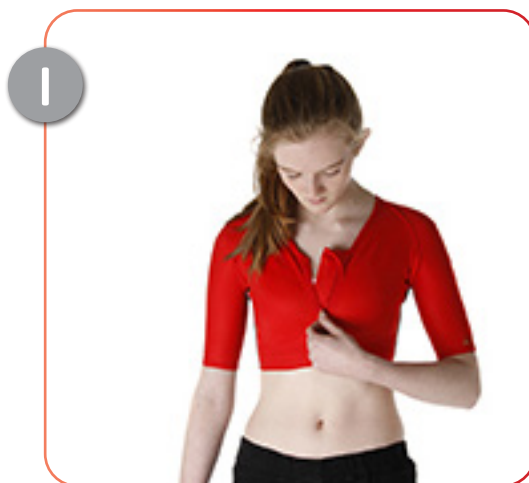


Åbn lynlåsen foran, idet du sørger for at beskytte huden mod at komme i klemme.



Åbn trøjen foran.



Fjern den ene arm fra ortosen.

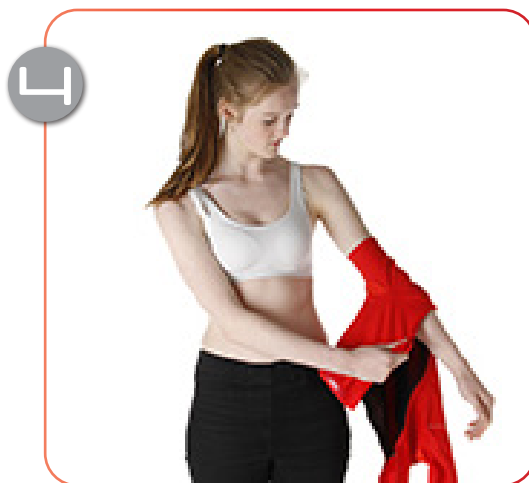

Fjern den anden arm og træk ortosen af over hånden.

Erklæring om bortskaffelse af enheden

De produkter, der fremstilles af DM Orthotics, er klasse 1 / specialfremstillede ortopædiske enheder. Der skal ikke træffes nogen forholdsregler ved bortskaffelse af DMO®-enheder. De materialer, der er anvendt til fremstillingen, kan bortskaffes i overensstemmelse med dine lokale ordninger for bortskaffelse af tøj/materialer. Vi beder dig dog om at vaske enheden, før du bortskaffer det.

Erklæring om alvorlig hændelse

Hvis der sker en alvorlig hændelse i forbindelse med din DMO®-enhed, skal du straks indberette den til producenten (DM Orthotics) og den kompetente myndighed med ansvar for medicinsk udstyr i din medlemsstat, f.eks. i Storbritannien til MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency).

Producent



Patient-id



Produkt-/model-id




Fremstillet i Storbritannien



Distributør




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederlandene

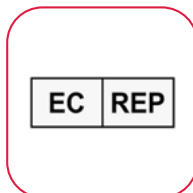

Klinikerens navn



Ordrenummer

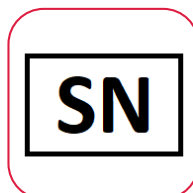

Medicinsk udstyr



Bemærk venligst, at ændringer fra brugerens side ikke anbefales, og at din garanti kan påvirkes eller ugyldiggøres, hvis du selv foretager ændringer på ortosen. Kontakt din kliniske specialist eller DM Orthotics vedrørende oplysninger om ændringer og produktmodifikationer.



Producent:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Storbritannien
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Designet og fremstillet i Storbritannien

© Ophavsrettighed 2024 DM Orthotics Ltd. Patent- og designregistrering gælder.

Basis-UDI-DI: 5054522SENSORYZ6

UDI-DI:

5054522001880 Sensory-trøje til børn - 1
5054522001897 Sensory-trøje til børn - 2
5054522001903 Sensory-trøje til børn - 3
5054522001910 Sensory-trøje til børn - 4
5054522001927 Sensory-trøje til børn - 5
5054522001934 Sensory-trøje til børn - 6
5054522001941 Sensory-trøje til børn - 7
5054522001958 Sensory-trøje til børn - 8
5054522001828 Sensory-trøje voksen - XS
5054522001835 Sensory-trøje voksen - S
5054522001842 Sensory-trøje voksen - M
5054522001859 Sensory-trøje voksen - L
5054522001866 Sensory-trøje voksen - XL
5054522001873 Sensory-trøje voksen - XXL



Producent: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, Storbritannien
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederlandene

DM-002734-MK (Issue 2)