

ζήσε τη ζωή σου.



Πληροφορίες Χρήσης για τον Ασθενή  
Προσαρμοσμένη στολή DMO® δομικής σκολίωσης



[www.dmorthotics.com](http://www.dmorthotics.com)

## Τα προϊόντα μας

Για τα προϊόντα της Dynamic Movement Orthoses® χρησιμοποιείται ένα μαλακό, ελαστικό ελαστομερές ύφασμα, το οποίο εξασφαλίζει στενή εφαρμογή και δημιουργεί δυνάμεις συμπίεσης, που βελτιώνουν την ιδιοδεκτική ανατροφοδότηση. Αυτό το βασικό ύφασμα είναι ελαφρύ, διαπνέον και ισχυρό.

Συνδυάζεται με πλαίσια ενίσχυσης, τα οποία κατασκευάζονται με ένα υλικό από ισχυρό πλέγμα, που παρέχει δύναμη και σταθερότητα εκεί όπου απαιτείται βελτίωση της στάσης του σώματος και βιομηχανική ευθυγράμμιση.

Τα ορθωτικά προϊόντα μας που κατασκευάζονται επί παραγγελία λειτουργούν χρησιμοποιώντας ενισχύσεις σε στρατηγικά σημεία, τα οποία βοηθούν το σώμα να πετύχει βελτιωμένη ευθυγράμμιση στάσης. Αυτή η νέα βιομηχανική κατάσταση, σε συνδυασμό με την βελτιωμένη ιδιοδεκτικότητα, διεγείρει και προσαρμόζει το νευρο-αισθητηριακό σύστημα, εκπαιδεύοντας τους μύες να λειτουργούν με βελτιωμένο τόνο, δύναμη και απόδοση.

Τα προϊόντα της DMO® βοηθούν τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά ως προς τη διαχείριση των σωματικών επιπτώσεων νευρολογικών, γενετικών και μυοσκελετικών παθήσεων.

**Τα προσαρμοσμένα προϊόντα DMO® φτιάχνονται ειδικά στα μέτρα του κάθε ατόμου και όλα τα κουμπώματα και τα ανοίγματα είναι ατομικά μελετημένα σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε ασθενούς.**

### Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σειρές προϊόντων της DMO®, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο ή διανομέα της DMO® ή απευθείας με την DM για να μάθετε ποιος είναι. Email: admin@dmorthotics.com Τοποθεσία web: www.dmorthotics.com Αριθμός τηλεφώνου: +44 (0) 1209 219205

### Σε ποιους ασθενείς απευθύνονται τα προϊόντα μας

Τα προσαρμοσμένα στα μέτρα σας ορθωτικά προϊόντα της DM Orthotics προορίζονται για **αποκλειστική χρήση από έναν μεμονωμένο ασθενή**, για την υποστήριξη και τη διόρθωση της σωματικής στάσης και της ευθυγράμμισης των αρθρώσεών του. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να φοριέται από κάποιο άλλο άτομο για το οποίο δεν έχει μετρηθεί και συνταγογραφηθεί ξεχωριστά.

**Όλα τα ορθωτικά βοηθήματα επί παραγγελία της DM Orthotics αποτελούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) και δηλώνεται ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σύμφωνα με τα Παραρτήματα II και III του MDR, και διέπονται από τον ορισμό ενός ορθωτικού προϊόντος: ενίσχυση, νάρθηκας ή άλλη τεχνητή εξωτερική συσκευή που χρησιμεύει στη στήριξη των άκρων ή της σπονδυλικής στήλης ή στην πρόληψη ή την υποστήριξη της σχετικής μετακίνησης.**

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατασκευάζονται προσαρμοσμένα (σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του MDR) και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του MDR (Κανονισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) (2017/745): Προϊόν Προσαρμοσμένης Κατασκευής

### Ημερομηνία έκδοσης

Τα προσαρμοσμένου μεγέθους προϊόντα μας κατασκευάζονται με βάση μια συγκεκριμένη συνταγογράφηση. Στο συνοδευτικό έντυπο δήλωσης που αποστέλλεται μαζί με το προϊόν σας αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του. Ο τελικός χρήστης μπορεί να φυλάξει αυτό το έντυπο για το προσωπικό του αρχείο.

## Περιεχόμενα

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| • Οδηγίες τοποθέτησης          | Σελ. 3 |
| • Οδηγίες πλύσης               | Σελ. 4 |
| • Αντενδείξεις και προφυλάξεις | Σελ. 5 |

### Προσαρμοσμένη στολή δομικής σκολίωσης **Σελ. 6**

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| • Προβλεπόμενη χρήση                          | Σελ. 6  |
| • Προβλεπόμενη ομάδα ασθενών                  | Σελ. 6  |
| • Προβλεπόμενοι χρήστες                       | Σελ. 7  |
| • Αποτελεσματικό για ασθενείς                 | Σελ. 7  |
| • Κλινικά οφέλη                               | Σελ. 7  |
| • Χρήση με άλλα ορθωτικά προϊόντα             | Σελ. 7  |
| • Τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης            | Σελ. 8  |
| • Δήλωση διάθεσης συσκευής                    | Σελ. 10 |
| • Δήλωση σοβαρού ατυχήματος                   | Σελ. 10 |
| • Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται | Σελ. 11 |

ζήσε τη ζωή σου.

## Οδηγίες τοποθέτησης

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας. Φροντίζοντας το ορθωτικό προϊόν σας, **θα παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του και θα αποτρέψετε την καταστροφή του.**

### ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Φορέστε ή βγάλτε το ορθωτικό σας βοήθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή/του προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στον ιστότοπο: [www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare)
- Προσέξτε κατά την εφαρμογή και την αφαίρεσή του, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες στο φυλλάδιο – αν το φοράτε και το βγάζετε τραβώντας το με δύναμη και με μακριά νύχια, ενδέχεται να το καταστρέψετε.
- Είναι σημαντικό να αυξήσετε τη χρήση του σταδιακά, ακολουθώντας τις προσωπικές σας οδηγίες.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες πλύσης, διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί.

### ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το προσαρμοσμένο προϊόν σας με δύναμη - αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν με τραβηγμένους πόντους ή σκισίματα ή οπές στο ύφασμα.
- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το προϊόν με μακριά νύχια διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ύφασμα.

### ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επικοινωνήστε με τον φυσικοθεραπευτή/τον προμηθευτή σας **ΑΜΕΣΑ** αν είναι υπερβολικά στενό, προκαλεί κόκκινα σημάδια ή αν έχει τραβηγμένους πόντους ή/και οπές.

**Τα προϊόντα DMO® σχεδιάστηκαν συμπληρωματικά προς τη θεραπεία και τη φυσικοθεραπεία, έτσι δεν θα πρέπει να αφαιρούνται για σωματική άσκηση, εκτός αν σας συμβουλευσει αντίθετα ο φυσικοθεραπευτής σας, ή αν έχετε άλλες ανησυχίες για τις οποίες μπορεί να σας βοηθήσει.**

## Χρόνος χρήσης

### ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Αυξήστε αργά και σταδιακά τον χρόνο χρήσης την πρώτη εβδομάδα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, διπλασιάζοντας καθημερινά τον χρόνο, μέχρι να φοράτε το ορθωτικό βοήθημα καθόλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Π.χ., 1η ημέρα - 1 ώρα

2η ημέρα - 2 ώρες

3η ημέρα - 4 ώρες

4η ημέρα - 8 ώρες

- Για τις **στολές σκολίωσης** αυτός ο χρόνος θα πρέπει να αυξηθεί σταδιακά σε τουλάχιστον 13 ώρες την ημέρα, έως 22 ώρες την ημέρα.
- Να φοράτε τη στολή σκολίωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας

### ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- Μην το φορέσετε όλη την ημέρα αμέσως. Ο χρόνος χρήσης πρέπει να αυξηθεί σταδιακά, για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αισθητηριακής πρόσληψης, των βιομηχανικών μεταβολών και της εφαρμογής.

## Οδηγίες πλύσης

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας. Φροντίζοντας το ορθωτικό προϊόν σας, **θα παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του και θα αποτρέψετε την καταστροφή του.**

### ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ


- Το ορθωτικό βοήθημα θα πρέπει να πλένεται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες.
- Το ορθωτικό βοήθημα μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή στο πλυντήριο, στους 30 βαθμούς.
- Κάντε σύντομο στύψιμο μόνο ή τυλίξτε με μια στεγνή πετσέτα, για να απομακρύνετε την υπερβολική υγρασία.
- Αφήστε να στεγνώσει εντελώς όλη τη νύχτα, απλώνοντάς το σε εσωτερικό χώρο.

### ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- ΜΗΝ το στεγνώνετε απευθείας σε ισχυρό ηλιακό φως ή επάνω σε ένα καλοριφέρ.
- ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΡΙΒΕΤΕ– θα ξεχειλώσει και θα χάσει το σχήμα του, ενώ θα προκληθεί ζημιά στα υλικά.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ Ή ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΟ.
- ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ.
- ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – θα συρρικνωθεί.

**Για περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη, έχουμε προσθέσει στην τοποθεσία web μας οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης του ορθωτικού σας βοηθήματος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: [www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare).**

Η τακτική και ορθή φροντίδα του ορθωτικού βοηθήματος δεν θα το αφήσει να αναπτύξει δυσάρεστες οσμές και θα διατηρήσει το υλικό απαλό. Αν το ορθωτικό σας βοήθημα έχει υποστεί επεξεργασία με άργυρο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά μετά από 100 πλύσεις, καθώς τα ιόντα αργύρου αρχίζουν να σκορπίζουν μετά από 50 πλύσεις.

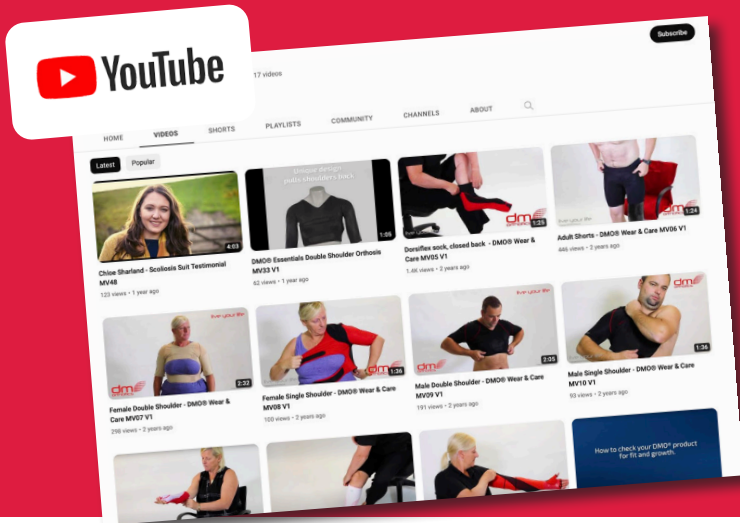

## Τοποθέτηση των προϊόντων μας

Δημιουργήσαμε μια σειρά από οδηγούς βίντεο, για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τα ορθωτικά βοηθήματά τους στο μέγιστο. Αυτοί οι οδηγοί περιλαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές και κόλπα για την τοποθέτηση των προϊόντων μας καθώς και για τον καλύτερο τρόπο φροντίδας τους, κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεσή τους.

**Για παρακολούθηση επισκεφθείτε τη διεύθυνση: [www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare)**

Τα προϊόντα DMO® πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Είναι σημαντικό να αυξάνετε αργά τον χρόνο χρήσης κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, διπλασιάζοντας τον χρόνο ημερησίως μέχρι το προϊόν να φορεθεί όλη την ημέρα. π.χ.

ζήσε τη ζωή σου.

## ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ΖΗΤΗΜΑΤΑ

### Αντενδείξεις

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις όσον αφορά τη χρήση ενός προϊόντος DMO®. Η αξιολόγηση ενός προσαρμοσμένου προϊόντος DMO® θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας με τα σωστά προσόντα.

### Προφυλάξεις/Ζητήματα

Ακολουθεί μια λίστα με πιθανές προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού προχωρήσετε με τη συνταγογράφηση ενός επί παραγγελία προϊόντος της DMO®. Πρέπει να συζητήσετε με τον επαγγελματία υγείας με τον οποίο συνεργάζεστε ο οποίος μπορεί να σας προτείνει ένα εναλλακτικό προϊόν της DMO® ή να αλλάξει το προτιμώμενο προϊόν DMO®.

### Κακή ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένα προϊόν DMO δεν θα επηρεάσει το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. Ωστόσο, το προϊόν DMO πρέπει να θεωρείται ως ένα στρώμα ρούχων και τα στρώματα ρούχων θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το αν κάνει κρύο ή ζέστη. Μπορούν να γίνουν προσαρμογές στη συνταγογράφηση, όπως κοντό παντελόνι ή κοντά μανίκια, ώστε να υπάρξει βελτίωση ως προς τον έλεγχο της θερμότητας.

**Πρωτοπαθείς διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος** Ορισμένα πρωτογενή αναπνευστικά προβλήματα όπου οι μύες εξασθενούν λόγω της επιδείνωσης των νευρών/μυών, θα χρειαστούν προσεκτική εξέταση και μπορεί να απαιτείται συζήτηση με τον ιατρό του ασθενούς σχετικά με την αλλαγή των προδιαγραφών της στολής. Τα δευτερογενή προβλήματα του κυκλοφορικού που σχετίζονται με την εγκεφαλική παράλυση μπορούν να βελτιωθούν λόγω της βελτιωμένης στάσης του κορμού/σώματος και της βελτιωμένης θέσης των πλευρών.

### Δερματικές παθήσεις

Για δερματικές παθήσεις που μπορεί να επιδεινωθούν λόγω στενής επαφής με συνθετικά υλικά για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση με έναν επαγγελματία υγείας που επιβλέπει τη δερματολογική θεραπεία του ασθενούς, αλλά αυτό σπάνια αποτελεί αντένδειξη.

### Σκελετική ευθραυστότητα/εύθραυστα οστά

Για ορισμένες παθήσεις, ένα προϊόν DMO® μπορεί να προσφέρει επαρκή υποστήριξη, ωστόσο αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσετε με τον ιατρό σας. Μπορούν να γίνουν αλλαγές στο προτιμώμενο προϊόν, όπως να προστεθούν φερμουάρ ή τρουκς ή το παντελόνι και τα μανίκια να είναι κοντά αντί για μακριά.

### Γαστροστομία, στομία και άλλες ιατρικές απαιτήσεις

Μπορούμε να κατασκευάσουμε το προϊόν κατά παραγγελία με ένα ειδικό άνοιγμα για διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG), στομία, υπερηβικό καθετήρα κ.λπ. Αυτό θα προστεθεί στο στάδιο της εφαρμογής για να διασφαλιστεί η ακριβής τοποθέτηση. Συζητήστε το ζήτημα με τον ιατρό σας, ο οποίος μπορεί να ζητήσει περαιτέρω συμβουλές από την έμπειρη ιατρική ομάδα της DMO®.

## DMO® Προσαρμοσμένη στολή δομικής σκολίωσης

### Προβλεπόμενη χρήση

Η προβλεπόμενη χρήση της στολής δομικής σκολίωσης της DM Orthotics είναι «Η βελτίωση, η διατήρηση ή η μείωση της εξέλιξης της νευροπαθούς και ιδιοπαθούς σκολίωσης κατά την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης και η βελτίωση ή η διατήρηση της στάσης του σώματος και η μείωση του πόνου στη νευροπαθή σκολίωση μετά την πλήρη ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης. Η στολή δομικής σκολίωσης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ειδικά όπου υπάρχει περιστροφή της σπονδυλικής στήλης λόγω σκολίωσης για τη μείωση ή την πρόληψη περαιτέρω εκφυλισμού λόγω αυτής της περιστροφής, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ή διατηρείται η μετωπιαία ή/και οβελιαία καμπυλότητα λόγω σκολίωσης.»

### Πριν την πλήρη ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης:

- Νευροπαθής σκολίωση με περιστροφή
- Ιδιοπαθής σκολίωση με περιστροφή

### Μετά την πλήρη ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης:

Νευροπαθής σκολίωση με περιστροφή όπου υπάρχει εξέλιξη της πάθησης ή/και πόνος λόγω μυϊκής αστάθειας. Η προσαρμοσμένη στολή δομικής σκολίωσης DMO® απευθύνεται σε ασθενείς με πιο προχωρημένη σκολίωση. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθήσει στη διαχείριση και τη μείωση των καμπύλων της νευροπαθούς και της ιδιοπαθούς σκολίωσης.

Η προσαρμοσμένη στολή δομικής σκολίωσης DMO® σχεδιάστηκε για να διορθώσει την καμπυλότητα και την περιστροφή της σπονδυλικής στήλης. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς άκαμπτους κηδεμόνες, αυτό το σχέδιο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της περιστροφής που σημειώνεται στη νευροπαθή και την ιδιοπαθή δομική σκολίωση.

### Προβλεπόμενη ομάδα ασθενών

Ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με σκολίωση και υπάρχει περιστροφή της σπονδυλικής στήλης. Ασθενείς από 2 ετών και άνω μέχρι την ηλικία πλήρους ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης (συνήθως έως 25 ετών) για βελτίωση, διατήρηση ή μείωση της εξέλιξης της σκολίωσης. Ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας μετά την πλήρη ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης για διατήρηση της στάσης του σώματος και πρόληψη ή ανακούφιση από τον πόνο που σχετίζεται με τη σκολίωση.

Για ορισμένους ασθενείς κάτω των 2 ετών ενδέχεται να είναι απαραίτητη η χρήση ορθωτικών βοηθημάτων δυναμικών κινήσεων κατόπιν συμβουλής ιατρού που εξειδικεύεται στη θεραπεία της σκολίωσης. Απαιτείται αρκετά υψηλός βαθμός επιδεξιότητας και μυϊκού τόνου για όσους πρόκειται να τοποθετούν και να αφαιρούν μόνοι τους τη στολή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ένας φροντιστής θα ήταν απαραίτητος για να παρέχει βοήθεια ως προς την τοποθέτηση και την αφαίρεση της στολής.



### Προβλεπόμενοι χρήστες

Για τη στολή απαιτούνται συνταγογράφηση και προδιαγραφές από κάποιον αρμόδιο επαγγελματία υγείας, συνήθως έναν εξειδικευμένο ορθωτικό, φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στη συνταγογράφηση και χρήση ορθωτικών βοηθημάτων δυναμικών κινήσεων για τη διαχείριση της σκολίωσης. Ένας τέτοιος ικανός επαγγελματίας υγείας θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την εφαρμογή της στολής και να δώσει περαιτέρω συμβουλές ως προς τις προδιαγραφές για τη βελτίωση της εφαρμογής της στολής όπου αυτό απαιτείται.

Ο χρήστης της ειδικής στολής για τη σκολίωση είναι συνήθως μη ειδικός.

Ο φροντιστής του χρήστη που μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες τοποθέτησης, αφαίρεσης και πλυσίματος της στολής καθώς και να αναφέρει τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη στολή είναι συνήθως μη ειδικός.

Το εν λόγω προσαρμοσμένο στα μέτρα σας προϊόν απαιτεί προδιαγραφές από επαγγελματία υγείας εκπαιδευμένο στη χρήση ορθωτικών βοηθημάτων δυναμικών κινήσεων για τη διαχείριση της σκολίωσης. Θα χρειαστούν κάποιες μετρήσεις για τις οποίες ο επαγγελματίας υγείας θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για να τις κάνει. Θα πληροί τα κριτήρια για την εκπαίδευση στη σκολίωση που έχει ορίσει η DM Orthotics και θα έχει παρακολουθήσει την ειδική εκπαίδευση για τη σκολίωση που παρέχεται από κλινικό ειδικό της DM Orthotics.

Μια σειρά διαφορετικών πλαισίων ενίσχυσης πρέπει επίσης να συνταγογραφηθούν από τον εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας.

### Αποτελεσματικό για ασθενείς με:-

- Ιδιοπαθή σκολίωση
- Νευροπαθή σκολίωση (στην οποία υπάρχει περιστροφή)

### Κλινικά οφέλη

- Βελτιωμένη νωτιαία ευθυγράμμιση
- Βελτιωμένο εύρος νωτιαίων κινήσεων
- Αισθητηριακή ανατροφοδότηση
- Ενθάρρυνση ορθής μυϊκής λειτουργίας
- Ανακούφιση από τον πόνο

### Χρήση με άλλα ορθωτικά προϊόντα

- Το μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα προϊόντα της DMO
- Για το μπορεί να ισχύουν επιπλέον απαιτήσεις για γαστροστομία, στομία και άλλες ιατρικές παθήσεις και αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συνταγογράφηση και να προστεθούν κατά την εφαρμογή. Συζητήστε το ζήτημα με τον κλινικό ιατρό σας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
- Το μπορεί να επιστραφεί για τροποποίηση σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα κατά την εφαρμογή
- Το μπορεί να επιστραφεί για τροποποίηση οποτεδήποτε και με κάποιο επιπλέον κόστος εφόσον υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή ή το μέγεθος.
- Το μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τη συνταγογράφηση του ιατρού σας.



## Ζήσε τη ζωή σου.

## Οδηγίες εφαρμογής στολής δομικής σκολίωσης DMO®

### Τρόπος εφαρμογής της στολής DMO® δομικής σκολίωσης.

Ο ασθενής θα πρέπει να ξαπλώσει, για να εξασφαλίσει ισορροπία και ασφάλεια, καθώς και την ορθή εφαρμογή της στολής.

#### Προφυλάξεις:

- Βεβαιωθείτε ότι οι επενδύσεις των φερμουάρ βρίσκονται σωστά τοποθετημένες επάνω στο δέρμα, πριν ανεβάσετε τα φερμουάρ και ότι δεν είναι τυλιγμένες πίσω.
- Όταν ανεβάζετε τα φερμουάρ στο εσωτερικό των μηρών (για στολές με φερμουάρ), φροντίστε να τραβήξετε το ορθωτικό προϊόν μακριά από το δέρμα, για να μην σημειωθεί εμπλοκή δέρματος.
- Η στολή πρέπει να αφαιρεθεί, αν ο ασθενής είναι άρρωστος ή έχει πυρετό.
- Αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή, π.χ. τα άκρα παρουσιάζουν κυάνωση ή είναι υπερβολικά κρύα στο άγγιγμα, αφαιρέστε το προϊόν και ενημερώστε άμεσα την ιατρική σας ομάδα, για περαιτέρω αξιολόγηση.
- Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να φοράτε τη στολή σας για τη δομική σκολίωση τουλάχιστον 13 ώρες και έως 22 ώρες την ημέρα (εκτός όταν την πλένετε).

1



Περάστε τα πόδια και τραβήξτε τη στολή πάνω από τα γόνατα.

2



Ανεβάστε τη στολή στους γοφούς. (Θα νιώσετε αίσθηση στενής εφαρμογής στη λεκάνη) μέχρι να ανεβεί εντελώς.

3



Περάστε το ένα χέρι και τραβήξτε το ορθωτικό βοήθημα πάνω από τον ώμο.

4



Κλείστε το μπροστινό φερμουάρ, προσέχοντας να προστατεύσετε το δέρμα από οποιαδήποτε εμπλοκή.

5



Ανεβάστε το πίσω φερμουάρ με τον ίδιο τρόπο.

6




Περάστε τον ιμάντα πάνω από τον ώμο - μην τραβήξετε δυνατά.

### Τρόπος αφαίρεσης της στολής δομικής σκολίωσης DMO®.

Ο ασθενής θα πρέπει να ξαπλώσει, για ισορροπία και ασφάλεια, καθώς και ορθή εφαρμογή της στολής.

Πώς θα πρέπει να φαίνεται η στολή δομικής σκολίωσης όταν την φοράτε:

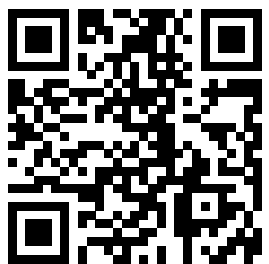

Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω κώδικα QR για πρόσβαση στα βίντεο εφαρμογής και φροντίδας ή πηγαίνετε στη διεύθυνση:  
[www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare)

1



Κατεβάστε πρώτα το πίσω φερμουάρ, κατόπιν το μπροστινό φερμουάρ, προσέχοντας να προστατεύσετε το δέρμα από οποιαδήποτε εμπλοκή. Αποσυνδέστε τον ιμάντα ώμου.

2



Βγάλτε το ένα χέρι από το μανίκι.

3



Χαμηλώστε τη στολή στα γόνατα.

4



Χαμηλώστε τη στολή στις γάμπες και τα πόδια και αφαιρέστε την.



#### Για να ελέγξετε την εφαρμογή:

- Η στολή θα πρέπει να έχει στενή εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να μπορείτε να περάσετε τον δείκτη σας κάτω από το κάτω μέρος των μανικιών και των ποδιών της στολής, καθώς και γύρω από το λαιμό.
- Η ραφή/τα άκρα του ορθωτικού βοηθήματος μπορούν να αφήσουν ελαφρύ σημάδι στο δέρμα, μόλις αφαιρεθεί η στολή, αλλά αν οποιαδήποτε σημάδια είναι υπερβολικά ερυθρά 20-30 λεπτά μετά την αφαίρεση, τότε ίσως είναι υπερβολικά στενό.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, όσον αφορά την σωστή εφαρμογή, ενημερώστε τον φυσικοθεραπευτή σας άμεσα, καθώς το ορθωτικό βοήθημα θα μεταποιηθεί δωρεάν μόνο εντός των πρώτων 6 εβδομάδων.

### **Δήλωση διάθεσης ιατροτεχνολογικού προϊόντος**

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται από τη DM Orthotics είναι ορθωτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 1/ επί παραγγελία. Δεν απαιτούνται προφυλάξεις κατά τη διάθεση των προϊόντων της DMO®. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανονισμούς για τη διάθεση ενδυμάτων/υλικών. Σας παρακαλούμε να πλύνετε αυτό το προϊόν πριν από τη διάθεση.

### **Δήλωση σοβαρού ατυχήματος**

Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν της DMO® που αγοράσατε, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή (DM Orthotics) και στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στο κράτος μέλος σας, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή η αρχή θα είναι η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας MHRA.

#### Κατασκευαστής



#### Ταυτοποίηση ασθενούς



#### Αναγνωριστικό προϊόντος/μοντέλου



#### Κατασκευάζεται στη Βρετανία



#### Διανομέας




MedEnvoy Global BV  
Pr. Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM Den Haag  
Netherlands



#### Όνομα ιατρού



#### Αριθμός παραγγελίας

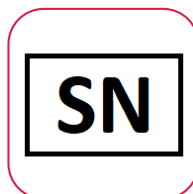

#### Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Λάβετε υπόψη ότι τυχόν τροποποίηση από τον χρήστη δεν συνιστάται και, σε περίπτωση που κάνετε αλλαγές στο ορθωτικό βοήθημα, η εγγύησή σας μπορεί να επηρεαστεί ή να θεωρηθεί άκυρη. Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο κλινικό ιατρό σας ή την DM Orthotics για πληροφορίες σχετικά με αλλαγές και τροποποιήσεις προϊόντων.



**Κατασκευαστής:**  
**DM Orthotics Ltd**  
**Unit 2 Cardrew Way**  
**Cardrew Industrial Estate**  
**Redruth**  
**Cornwall, UK**  
**TR15 1SS**

**+44 (0) 1209 219205**  
**[www.dmorthotics.com](http://www.dmorthotics.com)**  
**[admin@dmorthotics.com](mailto:admin@dmorthotics.com)**



Σχεδιασμός και κατασκευή: HB

UDI-DI 5054522000227



Κατασκευαστής: DM Orthotics Ltd  
Unit 2 Cardrew Way  
Cardrew Industrial Estate  
Redruth, Cornwall, UK  
TR15 1SS

EC

REP

MedEnvoy Global BV  
Pr. Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM Den Haag  
Netherlands