

ζήσε τη ζωή σου.



Πληροφορίες Χρήσης για τον Ασθενή
Προσαρμοσμένη στολή DM09 & DM53 DMO®



www.dmorthotics.com

Τα προϊόντα μας

Για τα προϊόντα επί παραγγελία της Dynamic Movement Orthoses® χρησιμοποιείται ένα μαλακό, ελαστικό ελαστομερές ύφασμα, το οποίο εξασφαλίζει στενή εφαρμογή και δημιουργεί δυνάμεις συμπίεσης που βελτιώνουν την ιδιοδεκτική ανατροφοδότηση. Αυτό το βασικό ύφασμα είναι ελαφρύ, διαπνέον και ισχυρό.

Συνδυάζεται με πλαίσια ενίσχυσης, τα οποία κατασκευάζονται με ένα υλικό από ισχυρό πλέγμα, που παρέχει δύναμη και σταθερότητα εκεί όπου απαιτείται βελτίωση της στάσης του σώματος και βιομηχανική ευθυγράμμιση.

Τα ορθωτικά προϊόντα μας που κατασκευάζονται επί παραγγελία λειτουργούν χρησιμοποιώντας ενισχύσεις σε στρατηγικά σημεία, τα οποία βοηθούν το σώμα να πετύχει βελτιωμένη ευθυγράμμιση στάσης. Αυτή η νέα βιομηχανική κατάσταση, σε συνδυασμό με την βελτιωμένη ιδιοδεκτικότητα, διεγείρει και προσαρμόζει το νευρο-αισθητηριακό σύστημα, εκπαιδεύοντας τους μύες να λειτουργούν με βελτιωμένο τόνο, δύναμη και απόδοση.

Τα προϊόντα της DMO® βοηθούν τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά ως προς τη διαχείριση των σωματικών επιπτώσεων νευρολογικών, γενετικών και μυοσκελετικών παθήσεων.

Τα DMO® προϊόντα που κατασκευάζονται επί παραγγελία φτιάχνονται ειδικά στα μέτρα του κάθε ατόμου και όλα τα κουμπώματα και τα ανοίγματα είναι ατομικά μελετημένα σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε ασθενούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σειρές προϊόντων της DMO®, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο ή διανομέα της DMO® ή απευθείας με την DM για να μάθετε ποιος είναι.

Email: admin@dmorthotics.com Τοποθεσία web: www.dmorthotics.com

Αριθμός τηλεφώνου: +44 (0) 1209 219205

Σε ποιους ασθενείς απευθύνονται τα προϊόντα μας

Τα προσαρμοσμένα στα μέτρα σας ορθωτικά προϊόντα της DM Orthotics προορίζονται για **αποκλειστική χρήση από έναν μεμονωμένο ασθενή**, για την υποστήριξη και τη διόρθωση της σωματικής στάσης και της ευθυγράμμισης των αρθρώσεών του. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να φοριέται από κάποιο άλλο άτομο για το οποίο δεν έχει μετρηθεί και συνταγογραφηθεί ξεχωριστά.

Όλα τα ορθωτικά βοηθήματα επί παραγγελία της DM Orthotics αποτελούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) και δηλώνεται ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σύμφωνα με τα Παραρτήματα II και III του MDR, και διέπονται από τον ορισμό ενός ορθωτικού προϊόντος: ενίσχυση, νάρθηκας ή άλλη τεχνητή εξωτερική συσκευή που χρησιμεύει στη στήριξη των άκρων ή της σπονδυλικής στήλης ή στην πρόληψη ή την υποστήριξη της σχετικής μετακίνησης.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατασκευάζονται προσαρμοσμένα (σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του MDR) και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του MDR (Κανονισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) (2017/745): Προϊόν Προσαρμοσμένης Κατασκευής

Ημερομηνία έκδοσης

Τα προσαρμοσμένου μεγέθους προϊόντα μας κατασκευάζονται με βάση μια συγκεκριμένη συνταγογράφηση. Στο συνοδευτικό έντυπο δήλωσης που αποστέλλεται μαζί με το προϊόν σας αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του. Ο τελικός χρήστης μπορεί να φυλάξει αυτό το έντυπο για το προσωπικό του αρχείο.

Περιεχόμενα

• Οδηγίες τοποθέτησης	Σελ. 3
• Οδηγίες πλύσης	Σελ. 4
• Αντενδείξεις και προφυλάξεις	Σελ. 5

Προσαρμοσμένη στολή

	Σελ. 6
• Προβλεπόμενη χρήση	Σελ. 6
• Προβλεπόμενη ομάδα ασθενών	Σελ. 6
• Προβλεπόμενοι χρήστες	Σελ. 6
• Αποτελεσματικό για ασθενείς	Σελ. 7
• Κλινικά οφέλη	Σελ. 7
• Τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης	Σελ. 8
• Δήλωση διάθεσης συσκευής	Σελ. 10
• Δήλωση σοβαρού ατυχήματος	Σελ. 10
• Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται	Σελ. 11

ζήσε τη ζωή σου.

Οδηγίες τοποθέτησης

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας. Φροντίζοντας το ορθωτικό προϊόν σας, **θα παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του και θα αποτρέψετε την καταστροφή του.**

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Φορέστε ή βγάλτε το ορθωτικό βοήθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή/του προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.dmorthotics.com/productcare
- Προσέξτε κατά την εφαρμογή και την αφαίρεσή του, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες στο φυλλάδιο – αν το φοράτε και το βγάζετε τραβώντας το με δύναμη και με μακριά νύχια, ενδέχεται να το καταστρέψετε.
- Είναι σημαντικό να αυξήσετε τη χρήση του σταδιακά, ακολουθώντας τις προσωπικές σας οδηγίες.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες πλύσης, διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το προσαρμοσμένο προϊόν σας με δύναμη - αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν με τραβηγμένους πόντους ή σκισίματα ή οπές στο ύφασμα.
- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το προϊόν με μακριά νύχια διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ύφασμα.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επικοινωνήστε με τον φυσικοθεραπευτή / τον προμηθευτή σας **ΑΜΕΣΑ** αν είναι υπερβολικά στενό, προκαλεί κόκκινα σημάδια ή αν έχει τραβηγμένους πόντους ή/και οπές.

Τα προϊόντα DMO® σχεδιάστηκαν συμπληρωματικά προς τη θεραπεία και τη φυσικοθεραπεία, έτσι δεν θα πρέπει να αφαιρούνται για σωματική άσκηση, εκτός αν σας συμβουλευτεί αντίθετα ο φυσικοθεραπευτής σας, ή αν έχετε άλλες ανησυχίες για τις οποίες μπορεί να σας βοηθήσει.

Χρόνος χρήσης

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Αυξήστε αργά και σταδιακά τον χρόνο χρήσης την πρώτη εβδομάδα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, διπλασιάζοντας καθημερινά τον χρόνο, μέχρι να φοράτε το ορθωτικό βοήθημα καθόλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Π.χ., 1η ημέρα - 1 ώρα

2η ημέρα - 2 ώρες

3η ημέρα - 4 ώρες

4η ημέρα - 8 ώρες

5η ημέρα - όλη την ημέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια, φορέστε το κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- Μην το φορέσετε όλη την ημέρα αμέσως. Ο χρόνος χρήσης πρέπει να αυξηθεί σταδιακά, για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αισθητηριακής πρόσληψης, των βιομηχανικών μεταβολών και της εφαρμογής.
- Μην φοράτε το DMO σας τη νύχτα, εκτός εάν σας το συστήσει ο ιατρός ή ο κλινικός σας ιατρός π.χ. στην περίπτωση ασθενών με Σύνδρομο Ehlers-Danlos (EDS) όπου αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό.

Οδηγίες πλύσης

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας. Φροντίζοντας το ορθωτικό προϊόν σας, **θα παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του και θα αποτρέψετε την καταστροφή του.**

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ


- Το ορθωτικό βοήθημα θα πρέπει να πλένεται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες.
- Το ορθωτικό βοήθημα μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή στο πλυντήριο, στους 30 βαθμούς.
- Κάντε σύντομο στύψιμο μόνο ή τυλίξτε με μια στεγνή πετσέτα, για να απομακρύνετε την υπερβολική υγρασία.
- Αφήστε να στεγνώσει εντελώς όλη τη νύχτα, απλώνοντάς το σε εσωτερικό χώρο.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- ΜΗΝ το στεγνώνετε απευθείας σε ισχυρό ηλιακό φως ή επάνω σε ένα καλοριφέρ.
- ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΡΙΒΕΤΕ– θα ξεχειλώσει και θα χάσει το σχήμα του, ενώ θα προκληθεί ζημιά στα υλικά.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ Ή ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΟ.
- ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ.
- ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – θα συρρικνωθεί.

Για περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη, έχουμε προσθέσει στην τοποθεσία web μας οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης του ορθωτικού σας βοηθήματος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.dmorthotics.com/productcare.

Η τακτική και ορθή φροντίδα του ορθωτικού βοηθήματος δεν θα το αφήσει να αναπτύξει δυσάρεστες οσμές και θα διατηρήσει το υλικό απαλό. Αν το ορθωτικό σας βοήθημα έχει υποστεί επεξεργασία με άργυρο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά μετά από 100 πλύσεις, καθώς τα ιόντα αργύρου αρχίζουν να σκορπίζουν μετά από 50 πλύσεις.

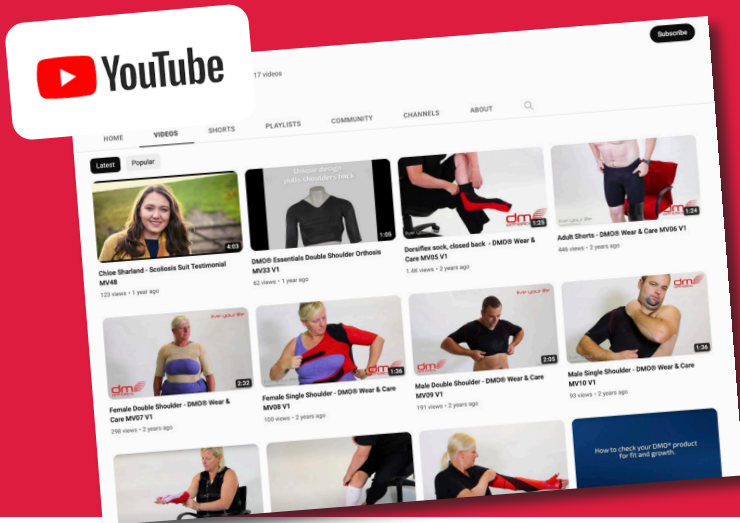

Τοποθέτηση των προϊόντων μας

Δημιουργήσαμε μια σειρά από οδηγούς βίντεο, για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τα ορθωτικά βοηθήματά τους στο μέγιστο. Αυτοί οι οδηγοί περιλαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές και κόλπα για την τοποθέτηση των προϊόντων μας καθώς και για τον καλύτερο τρόπο φροντίδας τους, κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεσή τους.

Για παρακολούθηση επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.dmorthotics.com/productcare

Τα προϊόντα DMO® πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Είναι σημαντικό να αυξάνετε αργά τον χρόνο χρήσης κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, διπλασιάζοντας τον χρόνο ημερησίως μέχρι το προϊόν να φορεθεί όλη την ημέρα. π.χ.

ζήσε τη ζωή σου.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντενδείξεις

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις όσον αφορά τη χρήση ενός προϊόντος DMO®. Η αξιολόγηση ενός προσαρμοσμένου προϊόντος DMO® θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας με τα σωστά προσόντα.

Προφυλάξεις/Ζητήματα

Ακολουθεί μια λίστα με πιθανές προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού προχωρήσετε με τη συνταγογράφηση ενός επί παραγγελία προϊόντος της DMO®. Πρέπει να συζητήσετε με τον επαγγελματία υγείας με τον οποίο συνεργάζεστε ο οποίος μπορεί να σας προτείνει ένα εναλλακτικό προϊόν της DMO® ή να αλλάξει το προτιμώμενο προϊόν DMO®.

Κακή ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένα προϊόν DMO δεν θα επηρεάσει το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. Ωστόσο, το προϊόν DMO πρέπει να θεωρείται ως ένα στρώμα ρούχων και τα στρώματα ρούχων θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το αν κάνει κρύο ή ζέστη. Μπορούν να γίνουν προσαρμογές στη συνταγογράφηση, όπως κοντό παντελόνι ή κοντά μανίκια, ώστε να υπάρξει βελτίωση ως προς τον έλεγχο της θερμότητας.

Πρωτοπαθείς διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος Ορισμένα πρωτογενή αναπνευστικά προβλήματα όπου οι μύες εξασθενούν λόγω της επιδείνωσης των νευρών/μυών, θα χρειαστούν προσεκτική εξέταση και μπορεί να απαιτείται συζήτηση με τον ιατρό του ασθενούς σχετικά με την αλλαγή των προδιαγραφών της στολής. Τα δευτερογενή προβλήματα του κυκλοφορικού που σχετίζονται με την εγκεφαλική παράλυση μπορούν να βελτιωθούν λόγω της βελτιωμένης στάσης του κορμού/σώματος και της βελτιωμένης θέσης των πλευρών.

Δερματικές παθήσεις

Για δερματικές παθήσεις που μπορεί να επιδεινωθούν λόγω στενής επαφής με συνθετικά υλικά για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση με έναν επαγγελματία υγείας που επιβλέπει τη δερματολογική θεραπεία του ασθενούς, αλλά αυτό σπάνια αποτελεί αντένδειξη.

Σκελετική ευθραυστότητα/εύθραυστα οστά

Για ορισμένες παθήσεις, ένα προϊόν DMO® μπορεί να προσφέρει επαρκή υποστήριξη, ωστόσο αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσετε με τον ιατρό σας. Μπορούν να γίνουν αλλαγές στο προτιμώμενο προϊόν, όπως να προστεθούν φερμουάρ ή τρουκς ή το παντελόνι και τα μανίκια να είναι κοντά αντί για μακριά.

Γαστροστομία, στομία και άλλες ιατρικές απαιτήσεις

Μπορούμε να κατασκευάσουμε το προϊόν κατά παραγγελία με ένα ειδικό άνοιγμα για διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG), στομία, υπερηβικό καθετήρα κ.λπ. Αυτό θα προστεθεί στο στάδιο της εφαρμογής για να διασφαλιστεί η ακριβής τοποθέτηση. Συζητήστε το ζήτημα με τον ιατρό σας, ο οποίος μπορεί να ζητήσει περαιτέρω συμβουλές από την έμπειρη ιατρική ομάδα της DMO®.

Προσαρμοσμένες στολές DM09 & DM53 DMO®

Προβλεπόμενη χρήση

Η προβλεπόμενη χρήση της στολής DM09/53 είναι να ευθυγραμμίσει ώμους, κορμό και ισχία. Βελτιώνει τη συμμετρία και βοηθά στη σταθεροποίηση του κορμού και της σπονδυλικής στήλης. Η στολή παρέχει ένα μη περιοριστικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό επίπεδο στήριξης για τη μεγιστοποίηση της σταθερότητας της στάσης. Η στολή βοηθά επίσης ως προς τον περιφερικό έλεγχο και επηρεάζει θετικά τον μυϊκό τόνο για τη βελτίωση της λειτουργίας.

Ενδείξεις

Παιδιά ή ενήλικες με χαμηλό ή υψηλό μυϊκό τόνο, αισθητηριακά προβλήματα ή προβλήματα ιδιοδεκτικότητας, απουσία σταθερότητας κορμού, πυελικής ζώνης ή ώμων. Παιδιά ή ενήλικες που έχουν πόνο που σχετίζεται με κακή ευθυγράμμιση ή κόπωση λόγω της αδυναμίας τους να διατηρήσουν μια σωστή στάση κορμού, άνω ή κάτω άκρων.

Προβλεπόμενη ομάδα ασθενών

Άνδρες και γυναίκες ασθενείς συνήθως ηλικίας δύο ετών και άνω, αν και τα παιδιά κάτω των δύο ετών μπορούν επίσης να επωφεληθούν. Το χαμηλότερο όριο ηλικίας ορίστηκε λόγω της αυξημένης ανάπτυξης σε αυτό το στάδιο που θα απαιτούσε προσαρμογή ή τροποποίηση της στολής, όχι λόγω της αδυναμίας επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη χρήση της στολής.

Η στολή μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με διάφορες ιατρικές παθήσεις και ανάλογα συμπτώματα: Εγκεφαλική παράλυση, Σύνδρομο Down, Μυϊκή δυστροφία, Νωτιαία μυϊκή ατροφία, Σύνδρομο υπερκινητικών αρθρώσεων, Διαταραχή αναπτυξιακής δυσπραξίας (DCD), Αυτισμός και ADHD, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης, Σύνδρομο Ehlers Danlos, Σύνδρομο Πάρκινσον, Νόσος Charcot Marie Tooth, Τραυματικός εγκεφαλικός τραυματισμός. Η λίστα είναι απλά ενδεικτική.

Απαιτείται αρκετά υψηλός βαθμός επιδεξιότητας και μυϊκού τόνου για όσους πρόκειται να τοποθετούν και να αφαιρούν μόνοι τους τη στολή. Σε αντίθετη περίπτωση, ένας φροντιστής θα ήταν απαραίτητος για να παρέχει βοήθεια ως προς την εφαρμογή και την αφαίρεση της στολής.

Προβλεπόμενοι χρήστες

Για τη στολή απαιτούνται συνταγογράφηση και προδιαγραφές από κάποιον αρμόδιο επαγγελματία υγείας, συνήθως έναν εξειδικευμένο ορθωτικό, φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στη συνταγογράφηση και χρήση ορθωτικών βοηθημάτων δυναμικών κινήσεων. Ένας τέτοιος ικανός επαγγελματίας υγείας θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την εφαρμογή της στολής και να δώσει περαιτέρω συμβουλές ως προς τις προδιαγραφές για τη βελτίωση της εφαρμογής της στολής όπου αυτό απαιτείται.

Ο χρήστης της στολής είναι συνήθως μη ειδικός.

Ο φροντιστής του χρήστη που μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες εφαρμογής, αφαίρεσης και πλυσίματος της στολής καθώς και να αναφέρει τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με το προϊόν είναι συνήθως μη ειδικός.

Το εν λόγω προσαρμοσμένο στα μέτρα σας προϊόν απαιτεί προδιαγραφές από επαγγελματία υγείας εκπαιδευμένο στη χρήση ορθωτικών βοηθημάτων δυναμικών κινήσεων. Θα χρειαστούν κάποιες μετρήσεις για τις οποίες ο επαγγελματίας υγείας θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση από την DM Orthotics για να τις κάνει.

Μια σειρά διαφορετικών πλαισίων ενίσχυσης πρέπει επίσης να συνταγογραφηθούν από τον εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας.



Η στολή DMO® σχεδιάστηκε για να ευθυγραμμίσει ώμους, κορμό και ισχία. Βελτιώνει τη συμμετρία και βοηθά στη σταθεροποίηση του κορμού και της σπονδυλικής στήλης. Η στολή DMO® παρέχει μη περιοριστικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό επίπεδο στήριξης, για μεγιστοποίηση της λειτουργικής σταθερότητας. Επίσης βοηθά στον περιφερικό έλεγχο και επηρεάζει θετικά τον μυϊκό τόνο για βελτιωμένη λειτουργικότητα.

Αποτελεσματικό για:

- Εγκεφαλική παράλυση
- Μυϊκή δυστροφία
- Σύνδρομο Retts
- Επίκτητο και μετατραυματικό εγκεφαλικό τραυματισμό
- Δισχιδή ράχη
- Σύνδρομο Ehlers Danlos και άλλες διαταραχές υπερκινητικών – χαλαρών αρθρώσεων
- Νωτιαία μυϊκή ατροφία
- Αναπτυξιακές διαταραχές
- Λειτουργική σκολίωση

Παρέχει:

- Κεντρικό έλεγχο
- Βελτιωμένη περιφερική σταθερότητα
- Σταθερότητα του κορμού
- Βιομηχανική ευθυγράμμιση
- Βελτιωμένη στάση του σώματος
- Δυναμική ισορροπία
- Βελτιωμένη μυϊκή λειτουργία
- Βελτιωμένο μυϊκό τόνο

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Ύφασμα συμπίεσης για άνεση και κίνηση
- Φοριέται κάτω από τα ρούχα
- Κλείσιμο με φερμουάρ
- Πάνελ ενίσχυσης για δύναμη και σταθερότητα
- Προαιρετικός ανοιχτός καβάλος



Ζήσε τη ζωή σου.

Προφυλάξεις:

- Βεβαιωθείτε ότι οι επενδύσεις των φερμουάρ βρίσκονται σωστά τοποθετημένες επάνω στο δέρμα, πριν ανεβάσετε τα φερμουάρ.
- Όταν ανεβάζετε τα φερμουάρ ποδιών (ενδεχομένως), τραβήξτε το ορθωτικό προϊόν μακριά από το δέρμα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα σημειωθεί εμπλοκή.
- Η στολή πρέπει να αφαιρεθεί, αν ο ασθενής είναι άρρωστος ή έχει πυρετό.
- Αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή, π.χ. τα άκρα παρουσιάζουν κυάνωση ή είναι υπερβολικά κρύα στο άγγιγμα, αφαιρέστε το προϊόν και ενημερώστε άμεσα την ιατρική σας ομάδα.

Για να ελέγξετε την εφαρμογή:

- Η στολή πρέπει να έχει στενή εφαρμογή. Θα πρέπει να χωράει ο δείκτης σας στο κάτω μέρος των μανικιών και των ποδιών, καθώς και γύρω από το λαιμό.
- Η ραφή/τα άκρα του ορθωτικού βοηθήματος μπορούν να αφήσουν ελαφρύ σημάδι στο δέρμα, αλλά αν οποιαδήποτε σημάδια είναι υπερβολικά ερυθρά 20-30 λεπτά μετά την αφαίρεση, τότε ίσως είναι υπερβολικά στενό.
 - Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, όσον αφορά την σωστή εφαρμογή, ενημερώστε αμέσως τον φυσικοθεραπευτή σας. Το ορθωτικό βοήθημα θα μεταποιηθεί δωρεάν μόνο κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 εβδομάδων.

Οδηγίες εφαρμογής προσαρμοσμένης στολής DMO®

Τρόπος εφαρμογής των προσαρμοσμένων στολών DM09/DM53 της DMO®.

Αφαιρέστε τη στολή από τη συσκευασία της και ανοίξτε τα φερμουάρ, αν υπάρχουν. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τα βίντεό μας στη διεύθυνση www.dmorthotics.com/productcare σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης του προϊόντος DMO®. **Ενδέχεται να χρειαστεί να ξαπλώσετε, για να φορέσετε σωστά τη στολή, για ισορροπία και ασφάλεια. Συνιστάται πάντα τα παιδιά να είναι ξαπλωμένα για να τοποθετηθεί η στολή με ασφάλεια.**

1



Ανοίξτε όλα τα φερμουάρ της στολής πριν τη φορέσετε. Περάστε τα πόδια και τραβήξτε τη στολή πάνω από τα γόνατα.

2



Εάν ο χρήστης φοράει πάντα, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος της πάνας δεν έχει πιαστεί στο πίσω φερμουάρ.

3



Περάστε το ένα χέρι και τραβήξτε το ορθωτικό βοήθημα πάνω από τον ώμο.

4



Κάντε το ίδιο και με το άλλο χέρι.

5



Κλείστε πρώτα το μπροστινό φερμουάρ, προσέχοντας να προστατεύσετε το δέρμα από οποιαδήποτε εμπλοκή.


6



Κλείστε τελευταίο το πίσω φερμουάρ.

ζήσε τη ζωή σου.

Πώς θα πρέπει να φαίνεται η στολή όταν την φοράτε:

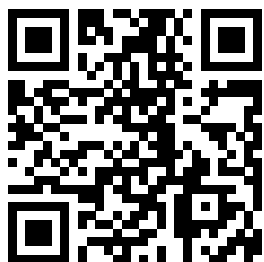

Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω κώδικα QR για πρόσβαση στα βίντεο εφαρμογής και φροντίδας ή πηγαίνετε στη διεύθυνση:
www.dmorthotics.com/productcare

Τρόπος αφαίρεσης των προσαρμοσμένων στολών DM09/DM53 της DMO®.

Ενδέχεται να πρέπει να ξαπλώσετε για να αφαιρέσετε την ορθωτική στολή, για ισορροπία και εξασφάλιση της ασφάλειας του ασθενούς

1



Ξεκουμπώστε πρώτα το πίσω φερμουάρ, μετά το μπροστινό και κατόπιν τα φερμουάρ στα πόδια, αν υπάρχουν. Να είστε προσεκτικοί και φροντίστε να μην πιαστεί το δέρμα σας.

2



Βγάλτε το ένα χέρι από το μανίκι.

3



Κάντε το ίδιο και με το άλλο χέρι.

4



Χαμηλώστε τη στολή προς τα κάτω στα γόνατά σας και βγάλτε την προσεκτικά τραβώντας την από την ανάποδη.

5



Χαμηλώστε τη στολή στις γάμπες και τα πόδια και αφαιρέστε την.



Δήλωση διάθεσης ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται από τη DM Orthotics είναι ορθωτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 1/ επί παραγγελία. Δεν απαιτούνται προφυλάξεις κατά τη διάθεση των προϊόντων της DMO®. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανονισμούς για τη διάθεση ενδυμάτων/υλικών. Σας παρακαλούμε να πλύνετε αυτό το προϊόν πριν από τη διάθεση.

Δήλωση σοβαρού ατυχήματος

Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν της DMO® που αγοράσατε, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή (DM Orthotics) και στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στο κράτος μέλος σας, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή η αρχή θα είναι η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας MHRA.

Κατασκευαστής



Ταυτοποίηση ασθενούς



Αναγνωριστικό προϊόντος/ μοντέλου




Κατασκευάζεται στη Βρετανία



Διανομέας




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Netherlands

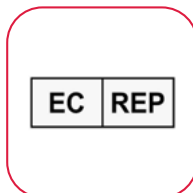

Όνομα ιατρού



Αριθμός παραγγελίας

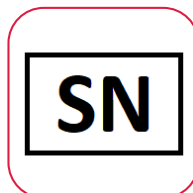

Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Λάβετε υπόψη ότι τυχόν τροποποίηση από τον χρήστη δεν συνιστάται και, σε περίπτωση που κάνετε αλλαγές στο ορθωτικό βοήθημα, η εγγύησή σας μπορεί να επηρεαστεί ή να θεωρηθεί άκυρη. Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο κλινικό ιατρό σας ή την DM Orthotics για πληροφορίες σχετικά με αλλαγές και τροποποιήσεις προϊόντων.



Κατασκευαστής:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Σχεδιασμός και κατασκευή: HB

DM09 - 5054522000081 (UDI-DI)
DM53 - 5054522002153 (UDI-DI)



Κατασκευαστής: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Netherlands