

ζήσε τη ζωή σου.



Πληροφορίες Χρήσης για τον Ασθενή
Προσαρμοσμένη κάλτσα DMO®



www.dmorthotics.com

Τα προϊόντα μας

Για τα προϊόντα προσαρμοσμένης κατασκευής της Dynamic Movement Orthoses® χρησιμοποιείται ένα μαλακό, ελαστικό ελαστομερές ύφασμα, το οποίο εξασφαλίζει στενή εφαρμογή και δημιουργεί δυνάμεις συμπίεσης, που βελτιώνουν την ιδιοδεκτική ανατροφοδότηση. Αυτό το βασικό ύφασμα είναι ελαφρύ, διαπνέον και ισχυρό.

Συνδυάζεται με πάνελ ενίσχυσης, τα οποία κατασκευάζονται με ένα υλικό από ισχυρό πλέγμα, που παρέχει δύναμη και σταθερότητα εκεί όπου απαιτείται βελτίωση της στάσης του σώματος και βιομηχανική ευθυγράμμιση.

Τα προσαρμοσμένης κατασκευής ορθωτικά προϊόντα μας λειτουργούν χρησιμοποιώντας ενισχύσεις σε στρατηγικά σημεία, τα οποία βοηθούν το σώμα να πετύχει βελτιωμένη ευθυγράμμιση στάσης. Αυτή η νέα βιομηχανική κατάσταση, σε συνδυασμό με την βελτιωμένη ιδιοδεκτικότητα, διεγείρει και προσαρμόζει το νευρο-αισθητηριακό σύστημα, εκπαιδεύοντας τους μύες να λειτουργούν με βελτιωμένο τόνο, δύναμη και απόδοση.

Τα προϊόντα της DMO® βοηθούν τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά ως προς τη διαχείριση των σωματικών επιπτώσεων νευρολογικών, γενετικών και μυοσκελετικών παθήσεων.

Τα προσαρμοσμένης κατασκευής προϊόντα της DMO® κατασκευάζονται στα μέτρα σας και όλοι οι σύνδεσμοι, τα ανοίγματα και οι ενισχύσεις συνταγογραφούνται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σειρές προϊόντων της DMO®, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο ή διανομέα της DMO® ή απευθείας με την DM για να μάθετε ποιος είναι.

Email: admin@dmorthotics.com Τοποθεσία web: www.dmorthotics.com Αριθμός τηλεφώνου: +44 (0) 1209 219205

Σε ποιους ασθενείς απευθύνονται τα προϊόντα μας

Τα προσαρμοσμένης κατασκευής ορθωτικά προϊόντα της DM Orthotics προορίζονται για **αποκλειστική χρήση από έναν μεμονωμένο ασθενή**, για την υποστήριξη και τη διόρθωση της σωματικής στάσης και της ευθυγράμμισης των αρθρώσεών του. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να φοριέται από κάποιο άλλο άτομο για το οποίο δεν έχει μετρηθεί και συνταγογραφηθεί ξεχωριστά.

Όλα τα ορθωτικά βοηθήματα επί παραγγελία της DM Orthotics αποτελούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) και δηλώνεται ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σύμφωνα με τα Παραρτήματα II και III του MDR, και διέπονται από τον ορισμό ενός ορθωτικού προϊόντος: ενίσχυση, νάρθηκας ή άλλη τεχνητή εξωτερική συσκευή που χρησιμεύει στη στήριξη των άκρων ή της σπονδυλικής στήλης ή στην πρόληψη ή την υποστήριξη της σχετικής μετακίνησης.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατασκευάζονται προσαρμοσμένα (σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του MDR) και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του MDR (Κανονισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) (2017/745): Προϊόν Προσαρμοσμένης Κατασκευής

Ημερομηνία έκδοσης

Τα προσαρμοσμένης κατασκευής προϊόντα μας κατασκευάζονται με βάση μια συγκεκριμένη συνταγή για έναν μεμονωμένο ασθενή. Στο συνοδευτικό έντυπο δήλωσης που αποστέλλεται μαζί με το προϊόν σας αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του. Ο τελικός χρήστης μπορεί να φυλάξει αυτό το έντυπο για το προσωπικό του αρχείο.

Περιεχόμενα

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • Οδηγίες τοποθέτησης | Σελ. 3 |
| • Οδηγίες πλύσης | Σελ. 4 |
| • Αντενδείξεις και προφυλάξεις | Σελ. 5 |

Προσαρμοσμένη κάλτσα

- | | |
|---|---------|
| • Προβλεπόμενη χρήση | Σελ. 6 |
| • Προβλεπόμενη ομάδα ασθενών | Σελ. 6 |
| • Προβλεπόμενοι χρήστες | Σελ. 6 |
| • Αποτελεσματικό για ασθενείς | Σελ. 7 |
| • Κλινικά οφέλη | Σελ. 7 |
| • Χρήση με άλλα ορθωτικά προϊόντα | Σελ. 7 |
| • Τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης | Σελ. 8 |
| • Δήλωση διάθεσης προϊόντος | Σελ. 10 |
| • Δήλωση σοβαρού ατυχήματος | Σελ. 10 |
| • Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται | Σελ. 11 |

ζήσε τη ζωή σου.

Οδηγίες τοποθέτησης

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας. Φροντίζοντας το ορθωτικό προϊόν σας, **θα παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του και θα αποτρέψετε την καταστροφή του.**

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Φορέστε ή βγάλτε το ορθωτικό βοήθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή/του προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.dmorthotics.com/productcare
- Προσέξτε κατά την εφαρμογή και την αφαίρεσή του, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες στο φυλλάδιο – αν το φοράτε και το βγάζετε τραβώντας το με δύναμη και με μακριά νύχια, ενδέχεται να το καταστρέψετε.
- Είναι σημαντικό να αυξήσετε τη χρήση του σταδιακά, ακολουθώντας τις προσωπικές σας οδηγίες.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες πλύσης, διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το προσαρμοσμένο προϊόν σας με δύναμη - αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν με τραβηγμένους πόντους ή σκισίματα ή οπές στο ύφασμα.
- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το προϊόν με μακριά νύχια διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ύφασμα.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επικοινωνήστε με τον φυσικοθεραπευτή/τον προμηθευτή σας **ΑΜΕΣΑ** αν είναι υπερβολικά στενό, προκαλώντας κόκκινα σημάδια ή αν έχει τραβηγμένους πόντους ή/και οπές.

Τα προϊόντα DMO® σχεδιάστηκαν συμπληρωματικά προς τη θεραπεία και τη φυσικοθεραπεία, έτσι δεν θα πρέπει να αφαιρούνται για σωματική άσκηση, εκτός αν σας συμβουλευτεί αντίθετα ο φυσικοθεραπευτής σας, ή αν έχετε άλλες ανησυχίες για τις οποίες μπορεί να σας βοηθήσει.

Χρόνος χρήσης

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Αυξήστε αργά και σταδιακά τον χρόνο χρήσης την πρώτη εβδομάδα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, διπλασιάζοντας καθημερινά τον χρόνο, μέχρι να φοράτε το ορθωτικό βοήθημα καθόλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Π.χ., 1η ημέρα - 1 ώρα

2η ημέρα - 2 ώρες

3η ημέρα - 4 ώρες

4η ημέρα - 8 ώρες

5η ημέρα - όλη την ημέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια, φορέστε το κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- μην το φορέσετε όλη την ημέρα αμέσως. Ο χρόνος χρήσης πρέπει να αυξηθεί σταδιακά, για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αισθητηριακής πρόσληψης, των βιομηχανικών μεταβολών και της εφαρμογής.
- Μην φοράτε την κάλτσα DMO σας τη νύχτα, εκτός εάν σας το συστήσει ο ιατρός ή ο κλινικός σας ιατρός π.χ. στην περίπτωση ασθενών με EDS όπου αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό.

Οδηγίες πλύσης

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας. Φροντίζοντας το ορθωτικό προϊόν σας, **θα παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του και θα αποτρέψετε την καταστροφή του.**

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ


- Το ορθωτικό βοήθημα θα πρέπει να πλένεται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες.
- Το ορθωτικό βοήθημα μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή στο πλυντήριο, στους 30 βαθμούς.
- Κάντε σύντομο στύψιμο μόνο ή τυλίξτε με μια στεγνή πετσέτα, για να απομακρύνετε την υπερβολική υγρασία.
- Αφήστε να στεγνώσει εντελώς όλη τη νύχτα, απλώνοντάς το σε εσωτερικό χώρο.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- ΜΗΝ το στεγνώνετε απευθείας σε ισχυρό ηλιακό φως ή επάνω σε ένα καλοριφέρ.
- ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΡΙΒΕΤΕ– θα ξεχειλώσει και θα χάσει το σχήμα του, ενώ θα προκληθεί ζημιά στα υλικά.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ Ή ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΟ.
- ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ.
- ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – θα συρρικνωθεί.

Για περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη, έχουμε προσθέσει στην τοποθεσία web μας οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης του ορθωτικού σας βοηθήματος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.dmorthotics.com/productcare.

Η τακτική και ορθή φροντίδα του ορθωτικού βοηθήματος δεν θα το αφήσει να αναπτύξει δυσάρεστες οσμές και θα διατηρήσει το υλικό απαλό. Αν το ορθωτικό σας βοήθημα έχει υποστεί επεξεργασία με άργυρο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά μετά από 100 πλύσεις, καθώς τα ιόντα αργύρου αρχίζουν να σκορπίζουν μετά από 50 πλύσεις.

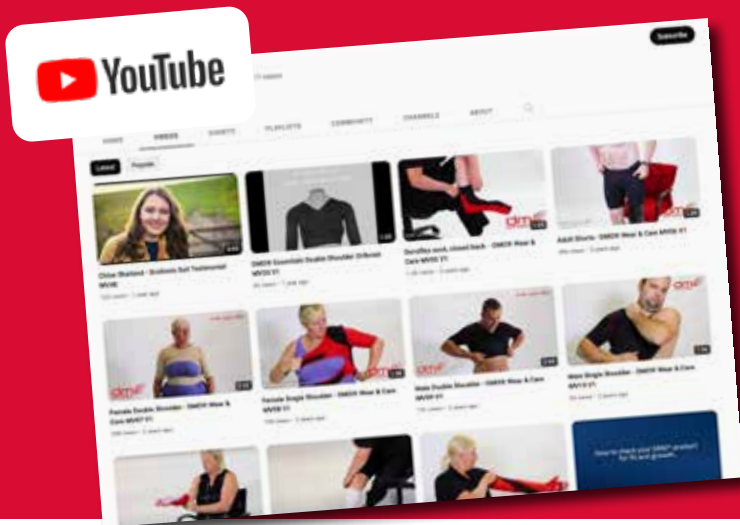

Τοποθέτηση των προϊόντων μας

Δημιουργήσαμε μια σειρά από οδηγούς βίντεο, για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τα ορθωτικά βοηθήματά τους στο μέγιστο. Αυτοί οι οδηγοί περιλαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές και κόλπα για την τοποθέτηση των προϊόντων μας καθώς και για τον καλύτερο τρόπο φροντίδας τους, κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεσή τους.

Για παρακολούθηση επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.dmorthotics.com/productcare

Τα προϊόντα DMO® πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Είναι σημαντικό να αυξάνετε αργά τον χρόνο χρήσης κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, διπλασιάζοντας τον χρόνο ημερησίως μέχρι το προϊόν να φορεθεί όλη την ημέρα. π.χ.

ζήσε τη ζωή σου.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντενδείξεις

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις όσον αφορά τη χρήση ενός προϊόντος DMO®. Η αξιολόγηση ενός προσαρμοσμένου προϊόντος DMO® θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας με τα σωστά προσόντα.

Προφυλάξεις/Ζητήματα

Ακολουθεί μια λίστα με πιθανές προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού προχωρήσετε με τη συνταγογράφηση ενός επί παραγγελία προϊόντος της DMO®. Πρέπει να συζητήσετε με τον επαγγελματία υγείας με τον οποίο συνεργάζεστε ο οποίος μπορεί να σας προτείνει ένα εναλλακτικό προϊόν της DMO® ή να αλλάξει το προτιμώμενο προϊόν DMO®.

Κακή ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένα προϊόν DMO δεν θα επηρεάσει το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. Ωστόσο, το προϊόν DMO πρέπει να θεωρείται ως ένα στρώμα ρούχων και τα στρώματα ρούχων θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το αν κάνει κρύο ή ζέστη. Μπορούν να γίνουν προσαρμογές στη συνταγογράφηση, όπως κοντό παντελόνι ή κοντά μανίκια, ώστε να υπάρξει βελτίωση ως προς τον έλεγχο της θερμότητας.

Πρωτοπαθείς διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος Ορισμένα πρωτογενή αναπνευστικά προβλήματα όπου οι μύες εξασθενούν λόγω της επιδείνωσης των νευρών/μυών, θα χρειαστούν προσεκτική εξέταση και μπορεί να απαιτείται συζήτηση με τον ιατρό του ασθενούς σχετικά με την αλλαγή των προδιαγραφών της στολής. Τα δευτερογενή προβλήματα του κυκλοφορικού που σχετίζονται με την εγκεφαλική παράλυση μπορούν να βελτιωθούν λόγω της βελτιωμένης στάσης του κορμού/σώματος και της βελτιωμένης θέσης των πλευρών.

Δερματικές παθήσεις

Για δερματικές παθήσεις που μπορεί να επιδεινωθούν λόγω στενής επαφής με συνθετικά υλικά για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση με έναν επαγγελματία υγείας που επιβλέπει τη δερματολογική θεραπεία του ασθενούς, αλλά αυτό σπάνια αποτελεί αντένδειξη.

Σκελετική ευθραυστότητα/εύθραυστα οστά

Για ορισμένες παθήσεις, ένα προϊόν DMO® μπορεί να προσφέρει επαρκή υποστήριξη, ωστόσο αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσετε με τον ιατρό σας. Μπορούν να γίνουν αλλαγές στο προτιμώμενο προϊόν, όπως να προστεθούν φερμουάρ ή τρουκς ή το παντελόνι και τα μανίκια να είναι κοντά αντί για μακριά.

Προσαρμοσμένη κάλτσα DMO®

Προβλεπόμενη χρήση

Η προβλεπόμενη χρήση της κάλτσας DM33/37 είναι να σταθεροποιεί και να παρέχει υποβοήθηση ραχιαίας κάμψης στο πόδι και στον αστραγάλο. Μπορούν επίσης να προστεθούν πλαίσια για τη διόρθωση ή την αποτροπή απότομων και βίαιων κινήσεων του αστραγάλου είτε προς τα έσω (inversion) είτε προς τα έξω (eversion). Η ιδιοδεκτικότητα και η αισθητηριακή ανατροφοδότηση συμβαίνουν επίσης μέσω της συμπίεσης που παρέχεται.

Ενδείξεις

Αστάθεια, κακός έλεγχος των μυών ή όπου απαιτείται διόρθωση ή διατήρηση της ευθυγράμμισης, στο συγκρότημα ποδιού και αστραγάλου.

Προβλεπόμενη ομάδα ασθενών

Άντρες και γυναίκες. Δεν υπάρχουν όρια ηλικίας για όσους χρησιμοποιούν τις κάλτσες DM33/37 και πολλοί ασθενείς με αστάθεια ή κακή ευθυγράμμιση του συγκροτήματος ποδιού και αστραγάλου θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το προϊόν.

Απαιτείται αρκετά υψηλός βαθμός επιδεξιότητας και μυϊκού τόνου για όσους πρόκειται να τοποθετούν και να αφαιρούν μόνοι τους τις κάλτσες τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ένας φροντιστής θα ήταν απαραίτητος για να παρέχει βοήθεια ως προς την εφαρμογή και την αφαίρεση των καλτσών.

Προβλεπόμενοι χρήστες

Για τις κάλτσες DM33/37 απαιτούνται συνταγογράφηση και προδιαγραφές από κάποιον αρμόδιο επαγγελματία υγείας, συνήθως έναν εξειδικευμένο ορθωτικό, φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή, ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στη συνταγογράφηση και χρήση προϊόντων Dynamic Movement Orthoses® (DMO®). Ένας τέτοιος αρμόδιος επαγγελματίας υγείας θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την εφαρμογή των καλτσών και να παράσχει περαιτέρω συμβουλές σχετικά με τις προδιαγραφές με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής όπου απαιτείται.

Ο χρήστης είναι συνήθως μη ειδικός.

Ο φροντιστής του χρήστη μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες εφαρμογής, αφαίρεσης και πλυσίματος των καλτσών καθώς και να αναφέρει τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τις κάλτσες.

Το εν λόγω προϊόν είναι προσαρμοσμένης κατασκευής και απαιτούνται προδιαγραφές από έναν επαγγελματία υγείας που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση προϊόντων DMO®. Θα χρειαστούν κάποιες μετρήσεις για τις οποίες ο επαγγελματίας υγείας θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση από την DM Orthotics για να τις κάνει. Μια σειρά από διαφορετικά πλαίσια ενίσχυσης είναι διαθέσιμα τα οποία πρέπει επίσης να συνταγογραφηθούν από τον εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας.



Η προσαρμοσμένη κάλτσα Dorsiflex DMO σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τους αδύναμους περονιαίους μύες του ασθενούς και για να βελτιώσει την επαφή του ποδιού με το έδαφος, τόσο στο περπάτημα όσο και στο τρέξιμο (ενεργή ραχιαία κάμψη).

Η προσαρμοσμένη κάλτσα DMO® Dorsiflex θα βελτιώσει τα μοτίβα βάδισης καθώς και τη σταθερότητα του αστραγάλου και θα παρέχει πρόσθετη ώθηση στους ασθενείς με μειωμένη δύναμη.

Αποτελεσματικό για:

- Εγκεφαλική παράλυση
- Σύνδρομα Ehlers-Danlos
- Εγκεφαλικό
- Δυστονία
- Μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD)
- Επίκτητος εγκεφαλικός τραυματισμός
- Σκλήρυνση κατά πλάκας
- Νόσο του Parkinson
- και πολλά άλλα

Παρέχει:

- Υποβοήθηση της ραχιαίας κάμψης
- Υποστήριξη κατά τον πρηνισμό ή τον υπτιασμό (αν προστεθούν επιπλέον ενισχύσεις)
- Συμπίεση
- Ανακούφιση από τον πόνο
- Βελτιωμένη σταθερότητα του αστραγάλου

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Ύφασμα συμπίεσης για άνεση και κίνηση
- Προαιρετικό ανοιχτό ή κλειστό πίσω μέρος
- Πάνελ ενίσχυσης για δύναμη και σταθερότητα
- Προαιρετικά ανοιχτά ή κλειστά δάχτυλα



Ζήσε τη ζωή σου.

Οδηγίες εφαρμογής κάλτσας DMO®

Τρόπος εφαρμογής της Προσαρμοσμένης Κάλτσας Dorsiflex DMO® με κλειστό ή ανοιχτό πίσω μέρος.

Προφυλάξεις:

- Προσέξτε όταν ρυθμίζετε την ταινία σιλικόνης στο επάνω μέρος του ορθωτικού βοηθήματος, να μην τραβηχτούν οι τρίχες και το δέρμα.
- Αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή, π.χ. τα άκρα παρουσιάζουν κυάνωση ή είναι υπερβολικά κρύα στο άγγιγμα, αφαιρέστε το προϊόν και ενημερώστε άμεσα την ιατρική σας ομάδα, για περαιτέρω αξιολόγηση.

Για να ελέγξετε την εφαρμογή:

- Το λογότυπο DMO® στο επάνω μέρος της κάλτσας θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τη μεσαία γραμμή της επιγονατίδας.
- Η πτέρνα θα πρέπει να εφαρμόζει στενά στο πίσω μέρος της κάλτσας και οι μπροστινές πλευρές της κάλτσας θα πρέπει να βρίσκονται μπροστά από τις μπροστινές φαρδιές αρθρώσεις (μετατάρσια) έτσι, ώστε η κάλτσα να τελειώνει στην πτυχή κάτω από τα δάχτυλά σας.



Αφαιρέστε την κάλτσα και τον μηχανισμό από τη συσκευασία τους.



Γυρίστε την κάλτσα ανάποδα, εκτός από το πόδι.



Περάστε το πόδι μέσα στον μηχανισμό.



Περάστε το πόδι και τον μηχανισμό μέσα στην κάλτσα και σπρώξτε/τραβήξτε προς την πτέρνα.



Ξετυλίξτε την κάλτσα προς τα επάνω και γύρω από την πτέρνα. Ο μηχανισμός θα πρέπει να παραμένει στη θέση του.



Ξετυλίξτε την κάλτσα προς τα επάνω στην κνήμη, **προσέχοντας να μην τρυπήσετε την κάλτσα με τα νύχια σας και να μην τραβήξετε με πολλή δύναμη.**




Ξετυλίξτε την κάλτσα στη θέση της, όπως φαίνεται.



Αφαιρέστε τον μηχανισμό κάλτσας. Έτσι θα πρέπει να φαίνεται η κάλτσα στη σωστή θέση.

ζήσε τη ζωή σου.

Πώς πρέπει να φαίνονται οι κάλτσες Dorsiflex με κλειστό πίσω μέρος όταν φοριούνται:

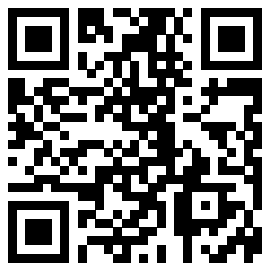

Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω κώδικα QR για πρόσβαση στα βίντεο εφαρμογής και φροντίδας ή πηγαίνετε στη διεύθυνση:
www.dmorthotics.com/productcare

Τρόπος αφαίρεσης της προσαρμοσμένης κάλτσας με κλειστό πίσω μέρος DMO® Dorsiflex.



1 Τραβήξτε το επάνω μέρος της κάλτσας προς τα κάτω, προς τον αστράγαλο.



2 Συνεχίστε να κατεβάζετε την κάλτσα, τυλίγοντάς την, προς τον αστράγαλο.



3 Αφαιρέστε την κάλτσα από την πτέρνα του ποδιού.



4 Αφαιρέστε εντελώς την κάλτσα από το πόδι. Η κάλτσα θα πρέπει να είναι γυρισμένη ανάποδα.

Δήλωση διάθεσης ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται από τη DM Orthotics είναι ορθωτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 1/ προσαρμοσμένης κατασκευής. Δεν απαιτούνται προφυλάξεις κατά τη διάθεση των προϊόντων της DMO®. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανονισμούς για τη διάθεση ενδυμάτων/υλικών. Σας παρακαλούμε να πλύνετε αυτό το προϊόν πριν από τη διάθεση.

Δήλωση σοβαρού ατυχήματος

Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν της DMO® που αγοράσατε, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή (DM Orthotics) και στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στο κράτος μέλος σας, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή η αρχή θα είναι η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας MHRA.

Κατασκευαστής



Ταυτοποίηση ασθενούς



Αναγνωριστικό προϊόντος/ μοντέλου




Κατασκευάζεται στη Βρετανία



Διανομέας



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Netherlands

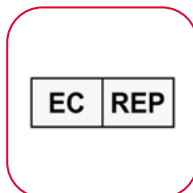

Όνομα ιατρού



Αριθμός παραγγελίας



Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Λάβετε υπόψη ότι τυχόν τροποποίηση από τον χρήστη δεν συνιστάται και, σε περίπτωση που κάνετε αλλαγές στο ορθωτικό βοήθημα, η εγγύησή σας μπορεί να επηρεαστεί ή να θεωρηθεί άκυρη. Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο κλινικό ιατρό σας ή την DM Orthotics για πληροφορίες σχετικά με αλλαγές και τροποποιήσεις προϊόντων.



Κατασκευαστής:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com




Σχεδιασμός και κατασκευή: HB

UDI-DI:
DM33 - 5054522000197
DM37 - 5054522000210



Κατασκευαστής: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS

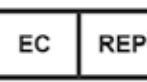

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Netherlands