

éld az életed.



Betegtájékoztató a használatához:

DMO® Alapvető/előre méretezett egyvállas és kétvállas ortézis



www.dmorthotics.com

Termékeink.

A DM Orthotics a dinamikus mozgást lehetővé tevő, szabadalmazott Dynamic Movement Orthoses® (DMO®) ortézisek tervezésében és gyártásában globálisan vezető szerepet betöltő vállalkozás.

A DMO® biomechanikus elemek és a fontos pontok megerősítése révén javítja a testtartást és fokozza a propriocepciót. A továbbiakban ezek a tényezők stimulálják és beállítják a szenzoros idegrendszert, edzve az izmokat a jobb tónus, erő és teljesítőképesség érdekében.

A DMO® alapvető kétvállas és egyvállas ortézisei előre méretezett, szövetanyagból készült ortézisek, amelyek költséghatékony megoldást kínálnak arra az esetre, ha szeretné kipróbálni, vajon a személyre szabott ortézis a beteg előnyére szolgálna-e. Hatékonyan töltik be a szerepüket belépő szintű, egyetlen mérést igénylő termékeként.

Tervezésük során a kényelemérzet, a tartás és a felhasználói mozgástartomány javítása volt célként meghatározva. Az eszközt arra tervezték, hogy közvetlenül a bőrrel érintkezve viseljék, így a jobb proprioceptív visszacsatolás és a biomechanikai pozicionálás segíti az izmok munkára fogását, ami a tónus, az izomerő és a teljesítmény javulásához vezet.

Mindezek egyetlen cél irányába mutatnak, amely nem más, mint a felhasználó képességeinek javítása és önállóságának elősegítése.

A DMO® Alapvető termék előre megadott méretekben készül gyermekek és felnőttek számára egyaránt az általunk használt kompressziós/szenzoros szövetanyagból, több olyan megerősítő elemmel ellátva, amelyeket előre gondolkodva, a beteg számára előnyös pontokon helyeztünk el. A termék nem módosítható, további megerősítésekkel nem lehet ellátni. Olyan esetekben javasolhatjuk klinikai szakorvos, amelyekben egy szokásos konfekció termék előnyös lehet, valamint akár közvetlenül a honlapunkról is megrendelhető egyetlen mérés elvégzése után.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Ha szeretne többet tudni a DMO® termékcsaládról, forduljon a DMO® területileg illetékes szolgáltatójához vagy forgalmazójához. Ha nem tudja, kihez kell fordulni, kérjük, keresse közvetlenül a DM Orthotics vállalatot!
E-mail: admin@dmorthotics.com Honlap: www.dmorthotics.com
Telefonszám: +44 (0) 1209 219205

Hogyan használják termékeinket a betegek?

A DMO alapvető ortézis termékeinek rendeltetése a testtartás és az ízületillesztés támogatása és korrigálása olyan esetekben, amelyekben nincs szükség személyre szabott módosításokra vagy további megerősítő elemekre.

A DM Orthotics ortézisei kivétel nélkül orvostechnikai eszköznek minősülnek a 2017/745/EU rendelet (MDR) értelmében és deklaráltan megfelelnek az MDR II. és III. mellékletében megfogalmazott szabályozásnak, valamint az ortotikus eszköz fogalom meghatározása alá tartoznak: merevítő, sín vagy más mesterséges külső eszköz, amely a végtagok vagy gerinc megtámasztására vagy a relatív mozgás megakadályozására vagy elősegítésére szolgál.

Az eszközöket úgy tervezték meg és állítják elő, hogy megfeleljenek az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745/EU rendelet („MDR”) vonatkozó követelményeinek, és kinyilvánítottan teljesítik az MDR II. és III. mellékletében foglalt előírásokat.

Kiállítás dátuma

Az előállított orvostechnikai eszközeinkhez mellékelte nyilatkozaton megtalálható a gyártás dátuma. A végső felhasználót arra kérjük, őrizze meg ezt a nyilatkozatot.

Tartalom

●Viselési utasítások	3. o.
●Mosási utasítások	4. o.
●Ellenjavallatok és óvintézkedések	5. o.
Alapvető, előre méretezett egyvállas	6. o.
●Rendeltetés	6. o.
●A rendeltetésnek megfelelő betegpopuláció	6. o.
●A rendeltetésnek megfelelő felhasználók	6. o.
●Milyen betegek számára hatásos?	6. o.
●Az eszköz fel- és levétele	8. o.
Alapvető, előre méretezett kétvállas	7. o.
●Rendeltetés	7. o.
●A rendeltetésnek megfelelő betegpopuláció	7. o.
●A rendeltetésnek megfelelő felhasználók	7. o.
●Milyen betegek számára hatásos?	7. o.
●Az eszköz fel- és levétele	10. o.

éld az életed.

Viselési utasítások

Pontosan kövesse a termékre vonatkozó utasításokat. A megfelelő kezeléssel és tisztítással **meghosszabbíthatja az ortézis élettartamát, és megelőzheti annak károsodását.**

TEGYE A KÖVETKEZŐKET

- Az ortézist a szakorvos/szolgáltató utasításainak megfelelően vegye fel és le. További részletekért keresse fel a weboldalt: www.dmorthotics.com/productcare
- Óvatosan vegye fel és le a terméket, figyelmesen betartva az ebben a füzetben leírt utasításokat – a durva mozgítás és a hosszú körmök kárt tehetnek a termékben.
- Fontos, hogy az egyéni utasításoknak megfelelően növelje a viselési időt.
- Pontosán tartsa be a mosásra vonatkozó utasításokat, ellenkező esetben a termék megsérülhet.

NE TEGYE A KÖVETKEZŐKET

- A terméket soha ne vegye fel, illetve vegye le durván, máskülönben ugyanis elszakadhat vagy kilyukadhat a szövet.
- Ne legyen hosszú a körme, amikor fel- vagy leveszi a terméket, máskülönben ugyanis károsodhat a szövet.

ILLESZKEDÉssel VAGY BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOK

AZONNAL lépjen kapcsolatba a szakorvossal/szolgáltatóval, ha a termék túl szoros, ha piros foltokat hagy a bőrön, illetve ha elszakadt és/vagy kilyukadt.

A DMO® termékeket úgy tervezték, hogy kiegészítsék a terápiát és a testmozgást, ezért ne vegye le mozgáskor, hacsak a specialista azt nem tanácsolta, illetve ha bármilyen egyéb aggálya merül fel – ebben az esetben a specialista tud segíteni Önnek.

Viselési idő

TEGYE A KÖVETKEZŐKET

- Az első héten az alábbiak szerint, fokozatosan kezdje viselni a terméket, minden nap megduplázva a viselési időt, amíg a munkanap során végig viselni tudja az ortézist.

pl. 1. nap – 1 óra
2. nap – 2 óra
3. nap – 4 óra
4. nap – 8 óra
5. nap – végig a nap folyamán. Utána folyamatosan viselje, minden nap a nap folyamán.

NE TEGYE A KÖVETKEZŐKET

- Ne kezdje el azonnal egész nap viselni a terméket. Az érzékszervi bemenet, a biomechanikai változások, illetve a megfelelő illeszkedés ellenőrzése érdekében a viselési időt fokozatosan kell növelni.
- Kizárólag akkor viselje DMO termékét éjszaka, ha orvosa ezt tanácsolta Önnek – például EDS-es betegek számára az éjszakai viselés hasznos lehet.

Mosási útmutató

Kövesse figyelmesen a kezelési útmutatót. Az ortézis megfelelő ápolásával meghosszabbíthatja annak élettartamát és megelőzheti a károsodást.

TEENDŐK

- Az ortézist legalább 2-3 naponta ajánlott kimosni.
- Az ortézis kézzel, hideg vízben vagy mosógépben 30 °C-on mosható.
- Külön mossa más ruháktól.
- Csak rövid centrifugálást alkalmazzon, vagy tekerje száraz törölközőbe a felesleges nedvesség eltávolításához.
- Hagyja teljesen megszáradni egy éjszaka alatt, beltérben felakasztva.

TILOS

- NE szárítsa erős, közvetlen napfényben vagy radiátoron.
- NE CSAVARGASSA – ez deformálhatja és károsíthatja az anyagot.
- NE VASALJA.
- Ne használjon fehérítőt vagy fehérítő hatású szereket.
- Ne használjon öblítőt.
- NE VEGYTISZTÍTSA.
- NE SZÁRÍTÓGÉPBEN SZÁRÍTSA – az ortézis összezsugorodhat.

További segítségért és támogatásért elérhetővé tettük az ortézis fel- és levételének útmutatóját weboldalunkon: www.dmorthotics.com/productcare

Az ortézis rendszeres és megfelelő ápolása megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását, és rugalmassá teszi az anyagot. Amennyiben ortézise ezüsttel kezelt, az ezüstionokat 50 mosás után fokozatosan elveszíti, ezért 100 mosás után az ezüstkezelést meg kell ismételni.




Termékeink viselése

Létrehoztunk egy sor videókalauzt, hogy segítsünk ügyfeleinknek a legtöbbet kihozni termékeinkből. Ezek az útmutatók hasznos tippeket és trükköket tartalmaznak a termékeink viselésére, valamint arra vonatkozóan, hogy miként tud a legjobban gondoskodni róluk, amikor fel- vagy leveszi azokat.

A következő honlapon tekintheti meg ezeket: www.dmorthotics.com/productcare

A DMO® termékeknek viselés során a bőrrel kell érintkezniük. Fontos, hogy az első héten fokozatosan kezdje viselni a terméket, minden nap megduplázva a viselési időt, amíg a nap során végig viselni tudja az ortézist, például:

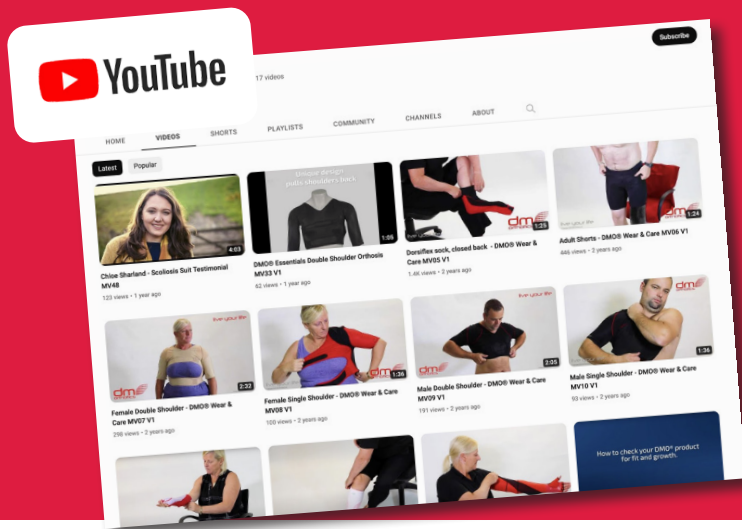

éld az életed.

ELLENJAVALLATOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK/MEGFONTOLÁSOK

Ellenjavallatok

A DMO® termékek alkalmazásának nincs ismert ellenjavallata. A DMO® termék használatához szükséges kivizsgálást erre jogosult szakorvos végzi, aki rendelkezik a megfelelő szakképzettséggel.

Óvintézkedések és megfontolások

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges óvintézkedéseket, amelyekre gondolni kell egy DMO® termék felírása előtt. Ezt beszélje meg képzett szakorvosával, aki alternatív DMO® terméket javasolhat.

A testhőmérséklet szabályozásának zavara

A DMO® nem befolyásolja a szervezet hőszabályozását. Ugyanakkor a DMO®-t egy réteg öltözetnek kell tekinteni a meleg, illetve hideg környezetnek megfelelő öltözködés során.

Elsődleges keringési rendellenességek

Alapos megfontolás szükséges bizonyos elsődleges légúti problémák esetén, amelyekben az izmok elgyengülnek az idegek/izmok állapotának romlása miatt, emellett szükség lehet a beteg orvosával folytatott egyeztetésre. A cerebrális parézissel (agyi eredetű bénulással) járó másodlagos keringési problémák enyhülhetnek a törzs/a test jobb tartásának, valamint a bordák kedvezőbb pozíciójának köszönhetően.

Bőrproblémák

A szintetikus anyagokkal való hosszan tartó, szoros érintkezés súlyosbíthat egyes bőrproblémákat, ilyen esetben pedig további konzultáció szükséges a beteg bőrgyógyászati kezelését felügyelő orvossal – ez azonban ritkán minősül ellenjavallatnak.

Törékeny csontok

Vannak olyan állapotok, amelyekben megfelelő támasztás biztosítható egy DMO® termékkel, ezt azonban kezelőorvosával kell megbeszélnie.

DMO® Alapvető, előre méretezett egyvállas ortézis

Rendeltetés

A DMO® vállortézis egyvállas és kétvállas változata egyaránt arra szolgál, hogy kezelje a váll károsodásait, stabilizálja és kiigazítsa a törzs, a váll és a felső végtag helyzetét.

A kiterjedt kutatásokból kifejlesztett egyedi kialakításukból adódóan hátrahúzzák a vállat, támogatják az érintett lapockát, és stabilizálják a vállízületet, nagyobb kényelmet, jobb testtartást és mozgásteret biztosítva.

A rendeltetésnek megfelelő betegpopuláció

Olyan gyermekek vagy felnőttek, akiknél csekély vagy nagy izomtónus miatt az érintett ízületek stabilizálására, valamint a törzs, a váll vagy a felső végtag helyzetének kiigazítására van szükség.

A kiigazítás elősegíti a funkcionális javulást, valamint enyhítheti a fájdalmat és a kifáradás leküzdését. Az ortézist olyan beteg tudja saját maga fel- és levenni, akinek megfelelően nagy mértékű a kézügyessége és izomtónusa. Ezeknek a képességeknek a hiányában gondozó segítségét kell igénybe venni az ortézis fel- és levétele során.

A rendeltetésnek megfelelő felhasználók

Az eszközt felírhatja arra jogosult egészségügyi szakember, illetve a viselő, annak gondozója vagy szülője is választhatja. A viselő rendszerint nem szakmabeli.

A viselő gondozója, aki jellemzően szintén nem szakmabeli, részt vehet a termék fel- és levételében, a termék mosásában, valamint a termékkel kapcsolatos esetleges problémák bejelentésében.

Hatásos az alábbiak esetén:

- Vállficam
- Váll diszlokáció
- Váll instabilitás
- Neurológiai vállfájdalom
- Plexus brachialis sérülés (Erb–Duchenne-bénulás)
- Cerebrális parézis (agyi eredetű bénulás)
- Ehler–Danlos-szindrómák
- Szklerózis multiplex
- Agyvérzés
- Gerincsérülés

Amit biztosít:

- Váll komplex helyreigazítása
- Jobb disztális funkció
- Jobb mozgástartomány
- Jobb testtartás
- Fájdalomcsillapítás

DMO® Alapvető egyvállas ortézis (női)



DMO® Alapvető egyvállas ortézis (férfi)



DMO® Alapvető, előre méretezett kétvállas ortézis

Rendeltetés

A DMO® vállortézis egyvállas és kétvállas változata egyaránt arra szolgál, hogy kezelje a váll károsodásait, stabilizálja és kiigazítsa a törzs, a váll és a felső végtag helyzetét.

A kiterjedt kutatásokból kifejlesztett egyedi kialakításukból adódóan hátrahúzzák a vállat, támogatják az érintett lapockát, és stabilizálják a vállízületeket, nagyobb kényelmet, jobb testtartást és mozgásteret biztosítva.

A rendeltetésnek megfelelő betegpopuláció

Olyan gyermekek vagy felnőttek, akiknél csekély vagy nagy izomtónus miatt az érintett ízületek stabilizálására, valamint a törzs, a váll vagy a felső végtag helyzetének kiigazítására van szükség.

A kiigazítás elősegíti a funkcionális javulást, valamint enyhítheti a fájdalmat és a kifáradás leküzdését. Az ortézist olyan beteg tudja saját maga fel- és levenni, akinek megfelelően nagy mértékű a kézügyessége és izomtónusa. Ezeknek a képességeknek a hiányában gondozó segítségét kell igénybe venni az ortézis fel- és levétele során.

A rendeltetésnek megfelelő felhasználók

Az eszközt felírhatja arra jogosult egészségügyi szakember, illetve a viselő, annak gondozója vagy szülője is választhatja. A viselő rendszerint nem szakmabeli.

A viselő gondozója, aki jellemzően szintén nem szakmabeli, részt vehet a termék fel- és levételében, a termék mosásában, valamint a termékkel kapcsolatos esetleges problémák bejelentésében.

Hatásos az alábbiak esetén:

- Vállficam
- Váll diszlokáció
- Váll instabilitás
- Neurológiai vállfájdalom
- Plexus brachialis sérülés (Erb–Duchenne-bénulás)
- Cerebrális parézis (agyi eredetű bénulás)
- Ehler–Danlos-szindrómák
- Szklerózis multiplex
- Agyvérzés
- Gerincsérülés

Amit biztosít:

- Váll komplex helyreigazítása
- Jobb disztális funkció
- Jobb mozgástartomány
- Jobb testtartás
- Fájdalomcsillapítás

DMO® Alapvető kétvállas ortézis (női)



DMO® Alapvető kétvállas ortézis (férfi)



DMO® Egyvállas ortézisre vonatkozó alkalmazási utasítások


Hogyan vegye fel a DMO® egyvállas ortézist? (Az ábrákon DMO® egyedi egyvállas ortézis látható)

Óvintézkedések:

- Vegye le az órát és az ékszereket, mielőtt felveszi az ortézist.
- Az egyvállas ortézist le kell venni, ha a beteg rosszul érzi magát vagy lázas.
- Ha bármi kétség merülne fel az illeszkedéssel kapcsolatban, pl. a végtagok bekékülnek vagy túlságosan hidegek tapintásra, vegye le és azonnal tájékoztassa a klinikai csapatot további vizsgálatok elvégzéséhez, ha pedig a honlapunkról rendelte meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel és küldje vissza az eszközt a DM Orthotics számára.

Az illeszkedés ellenőrzése:

- Az ortézis varrása/végei enyhe bevágásokat hagyhatnak a bőrön az eltávolítás után, de ha a nyomok túlságosan pirosak 20–30 perccel a levétel után, akkor lehet, hogy az túl szoros.
- Ha kétségei vannak az eszköz megfelelő illeszkedésével kapcsolatban, akkor vegye le és beszéljen a beutaló orvosával, ha van; ha pedig a honlapunkról rendelte meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel és küldje vissza az eszközt a DM Orthotics számára.

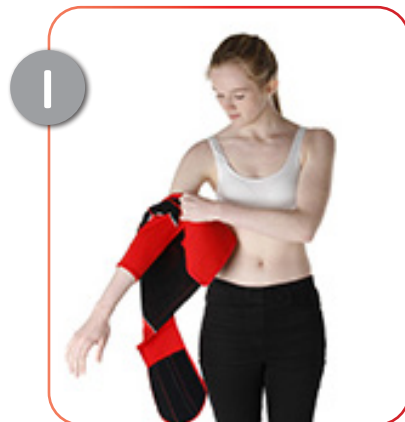


1 Helyezze az érintett oldal karját az ujjba úgy, hogy az ortézis jól fel legyen húzva a vállra.



2 Helyezze az érintett kart az ortézis tetejére az ábra szerint, ha képes rá. Ez a helyén tartja az ortézist, miközben a háta mögé nyúlva megfogja a széles pántot.



3 Húzza oldalra az ortézis hátsó részét, amíg a gumiszalag teljesen kinyúlik (Ez az oldalirányú mozgás kritikus fontosságú az ortézis megfelelő működésének biztosításához). A kinyújtott kart tartva mozgassa előre a kezét, és vigye a kinyújtott pántot a törzsön körbe, amíg a tépőzár két vége össze nem kapcsolódik. Rögzítse teljesen a tépőzárát az előlő helyzetben.

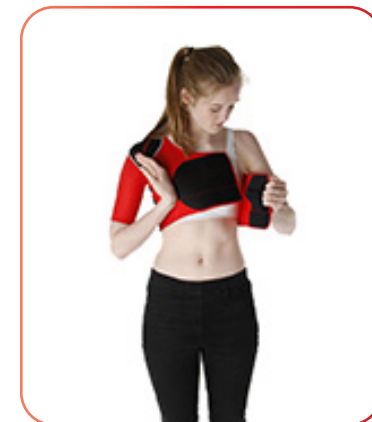

4 Hogyan néz ki az egyvállas ortézis a gyermekeken és férfiakon, ha helyesen viselik.



A női egyvállas ortézis esetén két pánt lesz egy helyett. Kövesse a 3. sz. utasítást, húzza át a felső pántot, hogy elérje a tépőzárát, majd ezután húzza az alsó pántot. Győződjön meg arról, hogy a tépőzár kényelmesen van rögzítve.

éld az életed.


Hogy vegye le a DMO® egyvállas ortézist?

Hogy kell kinéznie az egyvállas ortézisnek, amikor felvette:


Férfi/gyermek:




Nő:

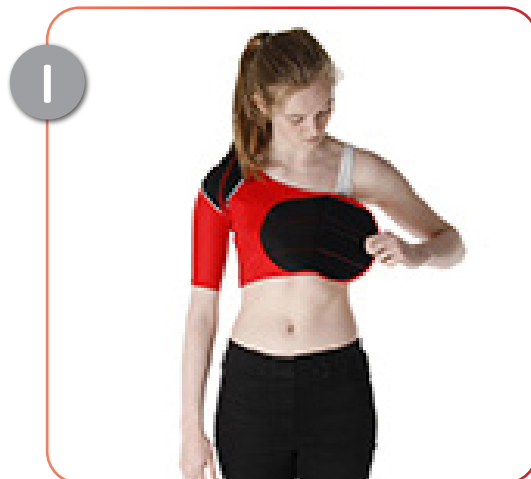


Gyermek és férfi változat esetén húzza szét a tépőzárát elöl, és hagyja, hogy a pántok szétnyíljanak. A női változatnál húzza le a két pántot a tépőzárról, és hagyja, hogy a pántok szétnyíljanak.

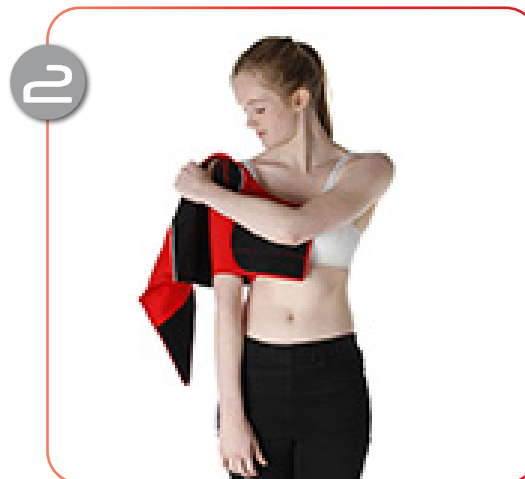

Vegyes le az ortézist az érintett oldalról.

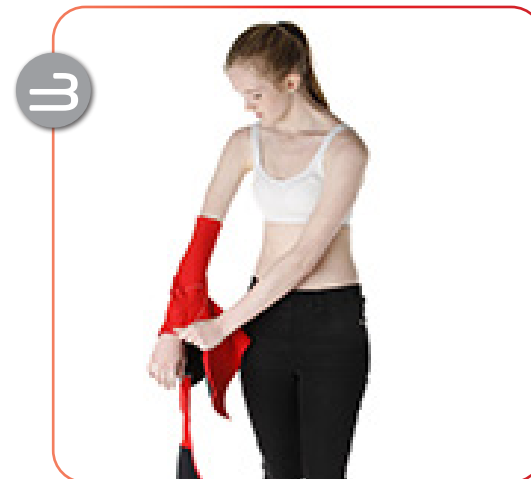

Húzza ki a karját az ortézis ujjából.

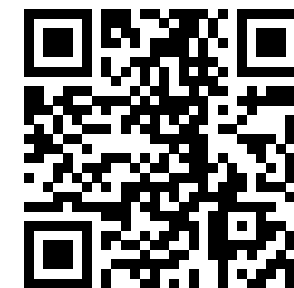

Használja a fenti QR-kódot a viselésről és ápolásról szóló videóink eléréséhez, vagy látogasson el ide:
www.dmorthotics.com/productcare

élje az életét.

DMO® kétvállas ortézisre vonatkozó alkalmazási utasítások

Hogy vegye fel a DMO® kétvállas ortézist?

Óvintézkedések:

- Az alábbi utasítások a női és férfi vállstabilitást biztosító ortézisre egyaránt vonatkoznak.
- Javasoljuk, hogy üljön le, hogy a vállára tegye az ortézist.
- A kétvállas ortézist előre helyezzük, hogy elkerüljük a vállízületekre nehezedő nyomást.

Az illeszkedés ellenőrzése:

- Az ortézis varrása/végei enyhe bevágásokat hagyhatnak a bőrön az eltávolítás után, de ha a nyomok túlságosan pirosak 20–30 perccel a levétel után, akkor lehet, hogy az túl szoros.
- Ha bármilyen kétség merülne fel a helyes illeszkedést illetően, akkor vegye le, és beszéljen a beutaló orvosával, ha van. Illetve ha a honlapunkról rendelte meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel és küldje vissza az eszközt a DM Orthotics számára

Gyermekek kétvállas ortézise

A termék gyermekverziójának felöltésére vonatkozó utasítások megegyeznek a felnőtt férfi verzió utasításaival.



1 Oldja ki a váll ortézis tépőzáras pántjait.



2 Tegye a karjait a váll ortézis ujjába és finoman húzza fel egyenként a vállára, a másik kezével pedig segítsen ebben úgy, hogy az végül teljesen a vállakon legyen, az ábra szerint. **MEGJEGYZÉS** A női ortézis felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy az elülső nyílás a mell felett és alatt legyen, az ábra szerint. A férfi és a gyermek ortézise esetében az elülső rétegnek nincs nyílása a mell számára. Ügyeljen rá, hogy az anyagot elől finoman lefelé húzza, így az kényelmes lesz a bordákon.



3 Fogja meg az ortézis jobb oldalán lévő két pántot az ábra szerint. Vigye a háta mögé, és csúsztassa át az ortézis bal oldalán lévő nyíláson, a kar rész alatt.



4 Ezután fogja meg a pánto(ka)t, amelyeket átfűzött a nyíláson, és erősen, de óvatosan az alsó pántot húzza el a testétől. Rögzítse az ortézis elején lévő alsó tépőzárhoz.



5 Fogja meg a felső hevedert, és óvatosan húzza el a testétől, és rögzítse az ortézis elején lévő felső tépőzárhoz.

Könnyebb lehet először a felső pántot rögzíteni, mivel ez egyes betegeknél jobban segítheti a váll beállítását. Rögzítse az alsó pántot másodszor.

élje az életét.

Hogy kell kinéznie az kétvállas
ortézisnek, amikor felvette:

Férfi:



Nő:



Gyermekek:



6



Ismételje meg a többi pánttal a test jobb oldalán. Óvatosan húzza az alsó hevedert lefelé el a testtől, majd rögzítse a test elején lévő alsó tépőzárra.

7




Ismételje meg az ortézis pánttal (lásd a 6. ábrát) Ügyeljen rá, hogy a vállpánt testrésztét hátul és elöl húzza le, hogy kihasználhassa az általa nyújtott jobb helyzetet. Ügyeljen rá, hogy a húzás kényelmesen megfelel az Ön igényeinek a vállán és a bordáin.

8



Győződjön meg arról, hogy az ujj része a helyén van.

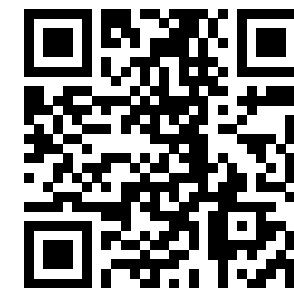

Használja a fenti QR-kódot a
viselésről és ápolásról szóló
videóink eléréséhez, vagy
látogasson el ide:
www.dmorthotics.com/productcare

éld az életed.

Hogy kell kinéznie az kétvállas ortézisnek, amikor felvette:

Férfi:



Nő:



Gyermekek:



Hogy vegye le a DMO® kétvállas ortézist?

1



Lazítsa meg a tépőzárat mindkét oldalon.

2



Óvatosan tegye az ellentétes kezét a vállrészre, és kezdje el lehúzni a karján.

3



Ismételje meg ezt a váll ortézis másik oldalán.

4



Távolítsa el a pánto(ka)t, ha laza, és óvatosan vegye le az ortézist.

Nyilatkozat az eszköz megsemmisítéséről

A DM Orthotics által gyártott eszközök 1. osztályú/egyedi gyártású ortotikus eszközök. A DMO®-eszközök ártalmatlanításához nincsen szükség óvintézkedésekre. A gyártáshoz felhasznált anyagokat a ruházat/anyagok ártalmatlanításával kapcsolatos helyi intézkedésekkel összhangban lehet kidobni. Kérjük, hogy mielőtt kidobja, mossa ki az eszközt.

Nyilatkozat súlyos eseményről

Ha bármilyen súlyos esemény történik a DMO® eszközzel kapcsolatban, haladéktalanul jelentenie kell azt a gyártónak (DM Orthotics) és az Ön tagállamában az orvostechnikai eszközökért felelős illetékes hatóságnak, például az Egyesült Királyságban, ez a Gyógyszerek és egészségügyi termékek szabályozó ügynöksége (MHRA).

Gyártó



A beteg azonosítása



Termék- vagy modellazonosító




Gyártás helye: Nagy-Britannia



Forgalmazó




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Hollandia

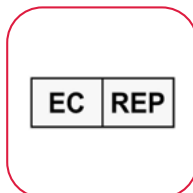

Orvos neve



Rendelészám

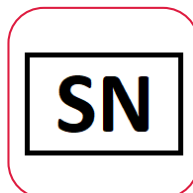

Orvostechnikai eszköz



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék felhasználó általi módosítása nem ajánlott. Amennyiben Ön saját maga megváltoztatja az ortézist, ez befolyásolhatja vagy semmissé teheti a garanciát. A termék megváltoztatásával vagy módosításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot klinikai szakorvosával vagy a DM Orthotics vállalattal.



Gyártó:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Az Egyesült Királyságban tervezték és gyártották

Alap UDI-DI: 5054522UPPERLIMBQS

UDI-DI:

5054522001231 Gyermek kétvállas – 1
5054522001248 Gyermek kétvállas – 2
5054522001255 Gyermek kétvállas – 3
5054522001262 Gyermek kétvállas – 4
5054522001279 Gyermek kétvállas – 5
5054522001286 Gyermek kétvállas – 6

5054522000708 Felnőtt kétvállas – XS
5054522000715 Felnőtt kétvállas – S
5054522000722 Felnőtt kétvállas – M
5054522000739 Felnőtt kétvállas – L
5054522000746 Felnőtt kétvállas – XL
5054522001224 Felnőtt kétvállas – XXL

5054522001415 Gyermek egyvállas, bal – 1
5054522001422 Gyermek egyvállas, bal – 2
5054522001439 Gyermek egyvállas, bal – 3
5054522001446 Gyermek egyvállas, bal – 4
5054522001453 Gyermek egyvállas, bal – 5
5054522001460 Gyermek egyvállas, bal – 6
5054522001477 Gyermek egyvállas, jobb – 1
5054522001484 Gyermek egyvállas, jobb – 2
5054522001491 Gyermek egyvállas, jobb – 3
5054522001507 Gyermek egyvállas, jobb – 4
5054522001514 Gyermek egyvállas, jobb – 5
5054522001521 Gyermek egyvállas, jobb – 6

5054522001293 Felnőtt egyvállas, bal – XS
5054522001309 Felnőtt egyvállas, bal – S
5054522001316 Felnőtt egyvállas, bal – M
5054522001323 Felnőtt egyvállas, bal – L
5054522001330 Felnőtt egyvállas, bal – XL
5054522001347 Felnőtt egyvállas, bal – XXL
5054522001354 Felnőtt egyvállas, jobb – XS
5054522001361 Felnőtt egyvállas, jobb – S
5054522001378 Felnőtt egyvállas, jobb – M
5054522001385 Felnőtt egyvállas, jobb – L
5054522001392 Felnőtt egyvállas, jobb – XL
5054522001408 Felnőtt egyvállas, jobb – XXL



Manufacturer: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Hollandia