

éld az életed.



Betegtájékoztató a használatához:

DMO® Alapvető leggings és rövidnadrág



www.dmorthotics.com

Termékeink.

A DM Orthotics a dinamikus mozgást lehetővé tevő, szabadalmazott Dynamic Movement Orthoses® (DMO®) ortézisek tervezésében és gyártásában globálisan vezető szerepet betöltő vállalkozás.

A DMO® biomechanikus elemek és a fontos pontok megerősítése révén javítja a testtartást és fokozza a propriocepciót. A továbbiakban ezek a tényezők stimulálják és beállítják a szenzoros idegrendszert, edzve az izmokat a jobb tónus, erő és teljesítőképesség érdekében.

A DMO® alapvető leggingsai és rövidnadrágjai előre méretezett, szövetanyagból készült ortézisek, amelyek költséghatékony megoldást kínálnak arra az esetre, ha szeretné kipróbálni, vajon a személyre szabott ortézis a beteg előnyére szolgálna-e. Hatékonyan töltik be a szerepüket belépő szintű, egyetlen mérést igénylő termékeként.

Tervezésük során a kényelemérzet, a tartás és a felhasználói mozgástartomány javítása volt célként meghatározva. Az eszközt arra tervezték, hogy közvetlenül a bőrrel érintkezve viseljék, így a jobb proprioceptív visszacsatolás és a biomechanikai pozicionálás segíti az izmok munkára fogását, ami a tónus, az izomerő és a teljesítmény javulásához vezet.

Mindezek egyetlen cél irányába mutatnak, amely nem más, mint a felhasználó képességeinek javítása és önállóságának elősegítése.

A DMO® Alapvető termék előre megadott méretekben készül gyermekek és felnőttek számára egyaránt az általunk használt kompressziós/szenzoros szövetanyagból, több olyan megerősítő elemmel ellátva, amelyeket előre gondolkodva, a beteg számára előnyös pontokon helyeztünk el. A termék nem módosítható, további megerősítésekkel nem lehet ellátni. Olyan esetekben javasolhatjuk klinikai szakorvos, amelyekben egy szokásos konfekció termék előnyös lehet, valamint akár közvetlenül a honlapunkról is megrendelhető egyetlen mérés elvégzése után.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Ha szeretne többet tudni a DMO® termékcsaládról, forduljon a DMO® területileg illetékes szolgáltatójához vagy forgalmazójához. Ha nem tudja, kihez kell fordulni, kérjük, keresse közvetlenül a DM Orthotics vállalatot!

E-mail: admin@dmorthotics.com Honlap: www.dmorthotics.com

Telefonszám: +44 (0) 1209 219205

Hogyan használják termékeinket a betegek?

A DMO alapvető ortézis termékeinek rendeltetése a testtartás és az ízületillesztés támogatása és korrigálása olyan esetekben, amelyekben nincs szükség személyre szabott módosításokra vagy további megerősítő elemekre.

A DM Orthotics ortézisei kivétel nélkül orvostechnikai eszköznek minősülnek a 2017/745/EU rendelet (MDR) értelmében és deklaráltnak megfelelnek az MDR II. és III. mellékletében megfogalmazott szabályozásnak, valamint az ortotikus eszköz fogalom meghatározása alá tartoznak: merevítő, sín vagy más mesterséges külső eszköz, amely a végtagok vagy gerinc megtámasztására vagy a relatív mozgás megakadályozására vagy elősegítésére szolgál.

Az eszközöket úgy tervezték meg és állítják elő, hogy megfeleljenek az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745/EU rendelet („MDR”) vonatkozó követelményeinek, és kinyilvánítottan teljesítik az MDR II. és III. mellékletében foglalt előírásokat.

Kiállítás dátuma

Az előállított orvostechnikai eszközeinkhez mellékelt nyilatkozaton megtalálható a gyártás dátuma. A végső felhasználót arra kérjük, őrizze meg ezt a nyilatkozatot.

Tartalom

● Viselési utasítások	3. o.
● Mosási utasítások	4. o.
● Ellenjavallatok és óvintézkedések	5. o.

Alapvető leggings és rövidnadrág

● Rendeltetés	6. o.
● A rendeltetésnek megfelelő betegpopuláció	7. o.
● A rendeltetésnek megfelelő felhasználók	7. o.
● Milyen betegek számára hatásos?	8. o.
● Alkalmazás egyéb ortotikus eszközökkel	7. o.
● Az eszköz fel- és levétele	9. o.
● Nyilatkozat az eszköz megsemmisítéséről	14. o.
● Nyilatkozat súlyos eseményről	14. o.
● A felhasznált szimbólumok jelmagyarázata	15. o.

Viselési utasítások

Pontosan kövesse a termékre vonatkozó utasításokat. A megfelelő kezeléssel és tisztítással **meghosszabbíthatja az ortézis élettartamát, és megelőzheti annak károsodását.**

TEGYE A KÖVETKEZŐKET

- Az ortézist a szakorvos/szolgáltató utasításainak megfelelően vegye fel és le. További részletekért keresse fel a weboldalt: www.dmorthotics.com/productcare
- Óvatosan vegye fel és le a terméket, figyelmesen betartva az ebben a füzetben leírt utasításokat – a durva mozgítás és a hosszú körmök kárt tehetnek a termékben.
- Fontos, hogy az egyéni utasításoknak megfelelően növelje a viselési időt.
- Pontosán tartsa be a mosásra vonatkozó utasításokat, ellenkező esetben a termék megsérülhet.

NE TEGYE A KÖVETKEZŐKET

- A terméket soha ne vegye fel, illetve vegye le durván, máskülönben ugyanis elszakadhat vagy kilyukadhat a szövet.
- Ne legyen hosszú a körme, amikor fel- vagy leveszi a terméket, máskülönben ugyanis károsodhat a szövet.

ILLESZKEDÉSSSEL VAGY BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOK

AZONNAL lépjen kapcsolatba a szakorvossal/szolgáltatóval, ha a termék túl szoros, ha piros foltokat hagy a bőrön, illetve ha elszakadt és/vagy kilyukadt.

A DMO® termékeket úgy tervezték, hogy kiegészítsék a terápiát és a testmozgást, ezért ne vegye le mozgáskor, hacsak a specialista azt nem tanácsolta, illetve ha bármilyen egyéb aggálya merül fel – ebben az esetben a specialista tud segíteni Önnek.

Viselési idő

TEGYE A KÖVETKEZŐKET

- Az első héten az alábbiak szerint, fokozatosan kezdje viselni a terméket, minden nap megduplázva a viselési időt, amíg a munkanap során végig viselni tudja az ortézist.

pl. 1. nap – 1 óra
2. nap – 2 óra
3. nap – 4 óra
4. nap – 8 óra
5. nap – végig a nap folyamán. Utána folyamatosan viselje, minden nap a nap folyamán.

NE TEGYE A KÖVETKEZŐKET

- Ne kezdje el azonnal egész nap viselni a terméket. Az érzékszervi bemenet, a biomechanikai változások, illetve a megfelelő illeszkedés ellenőrzése érdekében a viselési időt fokozatosan kell növelni.
- Kizárólag akkor viselje DMO leggingsét/rövidnadrágját éjszaka, ha orvosa ezt tanácsolta Önnek – például EDS-es betegek számára az éjszakai viselés hasznos lehet.

Mosási útmutató

Kövesse figyelmesen a kezelési útmutatót. Az ortézis megfelelő ápolásával meghosszabbíthatja annak élettartamát és megelőzheti a károsodást.

TEENDŐK

- Az ortézist legalább 2-3 naponta ajánlott kimosni.
- Az ortézis kézzel, hideg vízben vagy mosógépben 30 °C-on mosható.
- Külön mossa más ruháktól.
- Csak rövid centrifugálást alkalmazzon, vagy tekerje száraz törölközőbe a felesleges nedvesség eltávolításához.
- Hagyja teljesen megszáradni egy éjszaka alatt, beltérben felakasztva.

TILOS

- NE szárítsa erős, közvetlen napfényben vagy radiátoron.
- NE CSAVARGASSA – ez deformálhatja és károsíthatja az anyagot.
- NE VASALJA.
- Ne használjon fehérítőt vagy fehérítő hatású szereket.
- Ne használjon öblítőt.
- NE VEGYTISZTÍTSA.
- NE SZÁRÍTÓGÉPBEN SZÁRÍTSA – az ortézis összezsugorodhat.

További segítségért és támogatásért elérhetővé tettük az ortézis fel- és levételének útmutatóját weboldalunkon: www.dmorthotics.com/productcare

Az ortézis rendszeres és megfelelő ápolása megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását, és rugalmassá teszi az anyagot. Amennyiben ortézise ezüsttel kezelt, az ezüstionokat 50 mosás után fokozatosan elveszíti, ezért 100 mosás után az ezüstkezelést meg kell ismételni.




Termékeink viselése

Létrehoztunk egy sor videókalauzt, hogy segítsünk ügyfeleinknek a legtöbbet kihozni termékeinkből. Ezek az útmutatók hasznos tippeket és trükköket tartalmaznak a termékeink viselésére, valamint arra vonatkozóan, hogy miként tud a legjobban gondoskodni róluk, amikor fel- vagy leveszi azokat.

A következő honlapon tekintheti meg ezeket: www.dmorthotics.com/productcare

A DMO® termékeknek viselés során a bőrrel kell érintkezniük. Fontos, hogy az első héten fokozatosan kezdje viselni a terméket, minden nap megduplázva a viselési időt, amíg a nap során végig viselni tudja az ortézist, például:

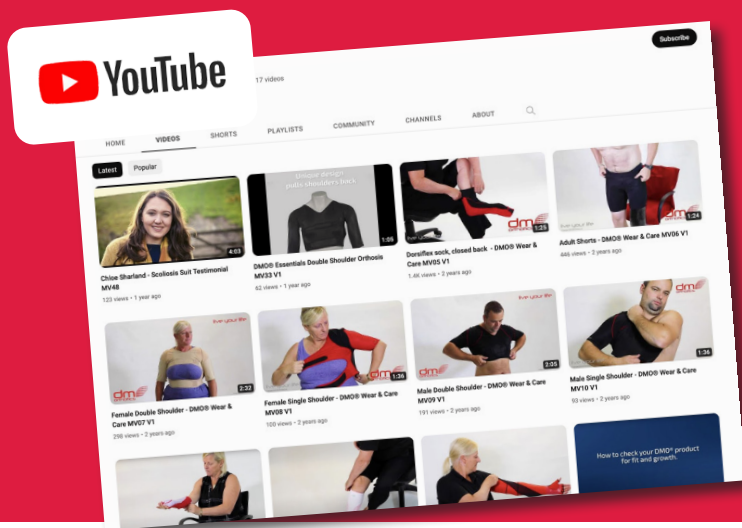

éld az életed.

ELLENJAVALLATOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK/MEGFONTOLÁSOK

Ellenjavallatok

A DMO® termékek alkalmazásának nincs ismert ellenjavallata. A DMO® termék használatához szükséges kivizsgálást erre jogosult szakorvos végzi, aki rendelkezik a megfelelő szakképzettséggel.

Óvintézkedések és megfontolások

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a lehetséges óvintézkedéseket, amelyekre gondolni kell egy DMO® termék felírása előtt. Ezt beszélje meg képzett szakorvosával, aki alternatív DMO® terméket javasolhat.

A testhőmérséklet szabályozásának zavara

A DMO® nem befolyásolja a szervezet hőszabályozását. Ugyanakkor a DMO®-t egy réteg öltözetnek kell tekinteni a meleg, illetve hideg környezetnek megfelelő öltözködés során.

Elsődleges keringési rendellenességek

Alapos megfontolás szükséges bizonyos elsődleges légúti problémák esetén, amelyekben az izmok elgyengülnek az idegek/izmok állapotának romlása miatt, emellett szükség lehet a beteg orvosával folytatott egyeztetésre. A cerebrális parézissel (agyi eredetű bénulással) járó másodlagos keringési problémák enyhülhetnek a törzs/a test jobb tartásának, valamint a bordák kedvezőbb pozíciójának köszönhetően.

Bőrproblémák

A szintetikus anyagokkal való hosszan tartó, szoros érintkezés súlyosbíthat egyes bőrproblémákat, ilyen esetben pedig további konzultáció szükséges a beteg bőrgyógyászati kezelését felügyelő orvossal – ez azonban ritkán minősül ellenjavallatnak.

Törékeny csontok

Vannak olyan állapotok, amelyekben megfelelő támasztás biztosítható egy DMO® termékkel, ezt azonban kezelőorvosával kell megbeszélnie.

DMO® Alapvető leggings és rövidnadrág

Rendeltetés

Az eszköz rendeltetése a deréktáj, a kismedence, a csípő és az alsó végtag összehangolása. A hatás kifejtésének pontos helyét a választott termék határozza meg. Javítja a szimmetriát és segíti a stabilizációt. A leggings és a rövidnadrág nem korlátozó és rendkívül hatékony támogatást biztosít a kismedence és az alsó végtag stabilitásának maximalizálása érdekében. A termék emellett segíti a disztális kontrollt és pozitívan befolyásolja az izomtónust a funkció javítása érdekében.

Javallatok

Olyan gyermekek vagy felnőttek, akiknél csekély vagy nagy izomtónus, szenzoros vagy propiocepciós problémák, a törzs, a kismedence vagy az alsó végtag stabilitásának hiánya áll fenn. Olyan gyermekek vagy felnőttek, akiknél illeszkedési zavar miatti fájdalom áll fenn, illetve akik kimerültek amiatt, hogy képtelenek a korrigált kismedencei vagy alsó végtagi testhelyzet fenntartására.

A rendeltetésnek megfelelő betegpopuláció

Rendszerint két éves vagy idősebb fiúk és lányok, illetve férfiak és nők, mindazonáltal két évesnél fiatalabb gyermekek számára is előnyös lehet a leggings és a rövidnadrág.

Sokféle állapotban lépnek fel olyan tünetek, amelyekre kedvező hatással lehet a leggings és a rövidnadrág; nem teljeskörű felsorolásukat lásd alább:

Az ortézist olyan beteg tudja saját maga fel- és levenni, akinek megfelelően nagy mértékű a kézügyessége és izomtónusa. Ezeknek a képességeknek a hiányában gondozó segítségét kell igénybe venni az ortézis fel- és levétele során.

A rendeltetésnek megfelelő felhasználók

Az ortézis viselője rendszerint nem szakmabeli.

A viselő gondozója, aki jellemzően szintén nem szakmabeli, részt vehet az ortézis fel- és levételében, mosásában, valamint az ortézissel kapcsolatos esetleges problémák bejelentésében.



DMO® Alapvető leggings

Hatásos az alábbiak esetén:

- Cerebrális parézis (agyi eredetű bénulás)
- Alsó végtag károsodásai
- Szklerózis multiplex
- Ehler–Danlos-szindróma
- Magas és alacsony izomtónus
- satöbbi

Amit biztosít:

- Medence stabilitás
- Javulás a csípő és a térd összehangolásában
- Jobb külső/belső csípőforgás
- Fokozott érzékszervi tudatosság
- Jobb testtartás
- Jobb izomfunkció
- Fájdalomcsillapítás
- Megerősítő elemek az erő és stabilitás érdekében

További jellemzők:

- Választható ágyéki nyílás
- A kompressziós szövet kényelmet és mozgékonytságot biztosít
- Jobb lábtartás
- Ruházat alatt kell viselni

DMO® Alapvető rövidnadrág

Hatásos az alábbiak esetén:

- Cerebrális parézis (agyi eredetű bénulás)
- Szklerózis multiplex
- Ataxia
- Alacsony izomtónus
- Szerzett és traumás agykárosodás
- Ehler–Danlos-szindróma
- Rossz járásmód
- Agyvérzés
- Parkinson-kór
- Huntington-kór
- satöbbi

Amit biztosít:

- Medence stabilitás
- Csípő és térd nyújtás
- Csökkent külső/belső csípőforgás
- Fokozott érzékszervi tudatosság
- Jobb testtartás
- Jobb izomfunkció
- Fájdalomcsillapítás


További jellemzők:

- A kompressziós szövet kényelmet és mozgékonytságot biztosít
- Választható ágyéki nyílás
- Megerősítő elemek az erő és stabilitás érdekében
- Ruházat alatt kell viselni



Óvintézkedések:

- Vegye le az órát és az ékszereket mielőtt felveszi az ortézist.
- A rövidnadrágot le kell venni, ha a beteg rosszul érzi magát vagy lázas.
- Ha bármi kétség merülne fel az illeszkedéssel kapcsolatban, pl. a végtagok bekékülnek vagy túlságosan hidegek tapintásra, vegye le és azonnal tájékoztassa a klinikai csapatot további vizsgálatok elvégzéséhez. (ha van Önt ellátó klinikai csapat), illetve ha a honlapunkról rendelte meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel és küldje vissza az eszközt a DM Orthotics számára

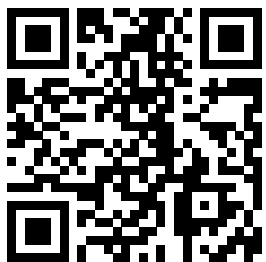

Használja a fenti QR-kódot a viselésről és ápolásról szóló videóink eléréséhez, vagy látogasson el ide:

www.dmorthotics.com/productcare

DMO® Alapvető rövidnadrágra vonatkozó alkalmazási utasítások

Hogy vegye fel a DMO® alapvető rövidnadrágot?

A betegnek le kell feküdnie az egyensúly és biztonság biztosítása, illetve a rövidnadrág megfelelő felvétele érdekében.

A DMO® Alapvető rövidnadrágot ugyanúgy kell felvenni és levenni, ahogy az ábrákon látható DMO egyedi rövidnadrágot.



Tartsa a rövidnadrágot (a címkével hátul) és húzza fel a lábaira (ahogy egy pár harisnyával tenné). Győződjön meg arról, hogy a térde és combja fölé húzta az egészet, mielőtt elkezdene felhúzni a csípőjére.




Húzza fel a rövidnadrágot a derekáig.

éld az életed.

Hogy vegye le a DMO® alapvető rövidnadrágot?

A betegnek le kell feküdnie az egyensúly és biztonság biztosítása, illetve a rövidnadrág megfelelő levétele érdekében.

Hogy kell kinéznie az Alapvető rövidnadrágnak, amikor felvette?

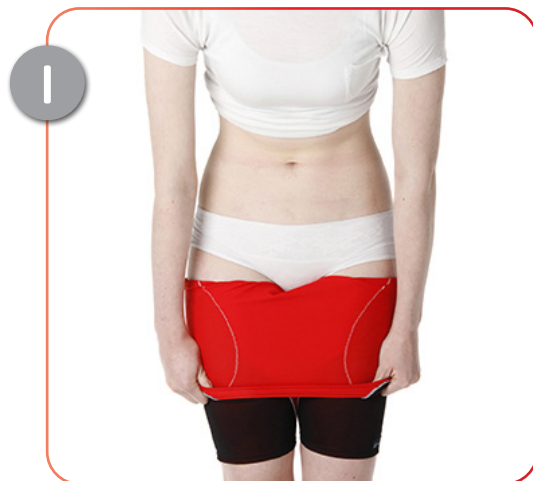

Tolja le a lábán a rövidnadrágot a lábfeje felé.



Csúsztassa ki mindkét lábát az ortézisből.

Az illeszkedés ellenőrzése:

- A rövidnadrágnak szorosan kell illeszkednie, de be kell tudnia tenni a mutatóujját a rövidnadrág szárának és derekának alsó szélé alá.
- Az ortézis varrása/végei enyhe bevágásokat hagyhatnak a bőrön az eltávolítás után, de ha a nyomok túlságosan pirosak 25-30 perccel a levétel után, akkor lehet, hogy az túl szoros.
- Ha bármilyen kétség merülne fel a helyes illeszkedést illetően. Ha a honlapunkról rendelte meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel és küldje vissza az eszközt a DM Orthotics számára

DMO® Alapvető leggingsre vonatkozó alkalmazási utasítások

Hogy vegye fel a DMO® alapvető leggingsset?

A betegnek le kell feküdnie az egyensúly és biztonság biztosítása, illetve a rövidnadrág megfelelő levétele érdekében.

A DMO® Alapvető leggingsst ugyanúgy kell felvenni és levenni, ahogy az ábrákon látható DMO egyedi leggingsst.

Óvintézkedések:

- Vegye le az órát és az ékszereket mielőtt felveszi az ortézist.
- A leggingsst soha nem szabad éjszaka viselni (hacsak nem beszélte meg egy orvossal vagy gyógytornásszal. Néhány EDS-es beteg számára hasznos lehet az éjszakai viselet, de erről egyeztetni kell, mielőtt így tesz). vagy ha a felhasználó beteg vagy lázas.
- Ha bármi kétség merülne fel az illeszkedéssel kapcsolatban, pl. a végtagok bekékülnek vagy túlságosan hidegek tapintásra, vegye le és azonnal tájékoztassa a klinikai csapatot további vizsgálatok elvégzéséhez. (ha van Önt ellátó klinikai csapat), illetve ha a honlapunkról rendelte meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel és küldje vissza az eszközt a DM Orthotics számára

Az illeszkedés ellenőrzése:

- A leggingsnek szorosan kell illeszkednie, de a mutatóujjának be kell férnie a leggings és a derék alsó széle alá.



Vegyes ki az ortézist a csomagolásból.



Helyezze fel a selyem lábvédőt. Ha szükséges és van.



Bújtassa keresztül a jobb lábát az ortézis jobb lábán.



Óvatosan húzza az ortézis jobb lábát a térdé felé.



Addig folytassa óvatosan, amíg az ortézis jobb lábának alja a bokája fölé kerül.




Vegye le a selyem lábvédőt a jobb lábáról.



Helyezze fel a bal lábára. Az eszköz lábszárát illetően lásd a 10. képet

8

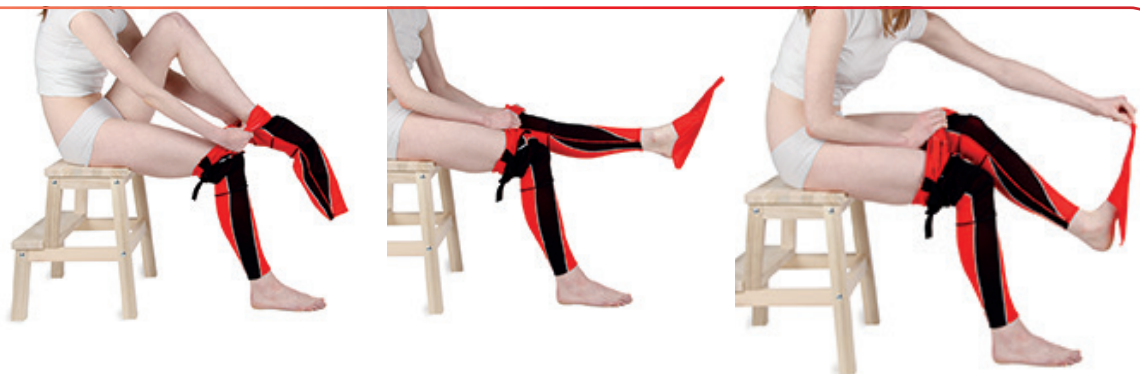

Ismételje meg a lépéseket a 4.-től a 7.-ig. Majd vegye le a selyem lábvédőt a lábáról. Győződjön meg arról, hogy óvatosan felhúzta a leggingst a combjára, mielőtt elkezdené felhúzni a csípőjére és a törzsére.

9



Húzza a leggingst óvatosan felfelé a csípője irányába.

10



Győződjön meg arról, hogy a szilikon érintkezik a bőrrel az ortézis tetején.

II





Hogy kell kinéznie a leggingnek, amikor helyesen van viselve

Az illeszkedés ellenőrzése folyt.:

- A leggings varrása/végei enyhe bevágásokat hagyhatnak a bőrön az eltávolítás után, de ha a nyomok túlságosan pirosak 25–30 perccel a levétel után, akkor lehet, hogy az túl szoros.
- Ha bármilyen kétség merülne fel a helyes illeszkedést illetően. Ha a honlapunkról rendelte meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel és küldje vissza az eszközt a DM Orthotics számára

éld az életed.

Hogy kell kinéznie az Alapvető leggingsnek, amikor felvette?

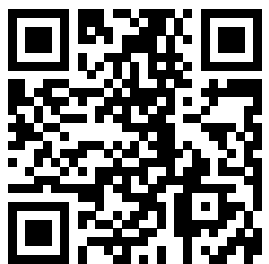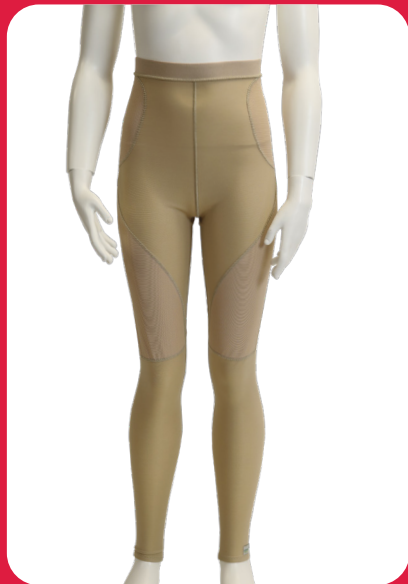


Használja a fenti QR-kódot a viselésről és ápolásról szóló videóink eléréséhez, vagy látogasson el ide:

www.dmorthotics.com/productcare

DMO® Alapvető leggingsre vonatkozó alkalmazási utasítások

Hogy vegye le a DMO® alapvető leggingsset?

A betegnek le kell feküdnie az egyensúly és biztonság biztosítása, illetve a rövidnadrág megfelelő levétele érdekében.

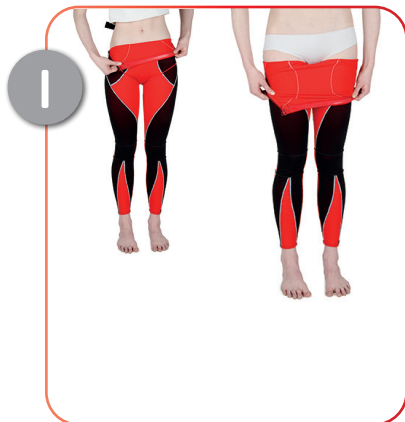

1 Tolja le a leggings tetejét a térdei felé.



2 Tolja tovább a leggingsset a térdei felé ülve.



3 Tolja tovább a leggingsset a térdei felé ülve.



4 Tolja le a leggingsset a bokáig mindkét lábán.



5 Húzza ki mindkét lábát a leggingsből.

Nyilatkozat az eszköz megsemmisítéséről

A DM Orthotics által gyártott eszközök 1. osztályú/egyedi gyártású ortotikus eszközök. A DMO®-eszközök ártalmatlanításához nincsen szükség óvintézkedésekre. A gyártáshoz felhasznált anyagokat a ruházat/anyagok ártalmatlanításával kapcsolatos helyi intézkedésekkel összhangban lehet kidobni. Kérjük, hogy mielőtt kidobja, mossa ki az eszközt.

Nyilatkozat súlyos eseményről

Ha bármilyen súlyos esemény történik a DMO® eszközzel kapcsolatban, haladéktalanul jelentenie kell azt a gyártónak (DM Orthotics) és az Ön tagállamában az orvostechnikai eszközökért felelős illetékes hatóságnak, például az Egyesült Királyságban, ez a Gyógyszerek és egészségügyi termékek szabályozó ügynöksége (MHRA).

Gyártó



A beteg azonosítása



Termék- vagy modellazonosító




Gyártás helye: Nagy-Britannia



Forgalmazó




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Hollandia

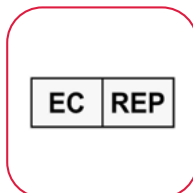

Orvos neve



Rendelészám

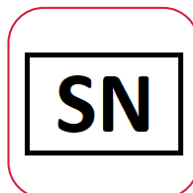

Orvostechnikai eszköz



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék felhasználó általi módosítása nem ajánlott. Amennyiben Ön saját maga megváltoztatja az ortézist, ez befolyásolhatja vagy semmissé teheti a garanciát. A termék megváltoztatásával vagy módosításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot klinikai szakorvosával vagy a DM Orthotics vállalattal.



Gyártó:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Az Egyesült Királyságban tervezték és gyártották

Alap UDI-DI: 5054522LOWERLIMBMF

UDI-DI:

5054522001675 Felnőtt leggings – XXS
5054522001682 Felnőtt leggings – XS
5054522001699 Felnőtt leggings – S
5054522001705 Felnőtt leggings – M
5054522001712 Felnőtt leggings – L
5054522001729 Felnőtt leggings – XL
5054522001736 Felnőtt leggings – XXL

5054522001743 Gyermek leggings – 1
5054522001750 Gyermek leggings – 2
5054522001767 Gyermek leggings – 3
5054522001774 Gyermek leggings – 4
5054522001781 Gyermek leggings – 5
5054522001798 Gyermek leggings – 6
5054522001804 Gyermek leggings – 7
5054522001811 Gyermek leggings – 8

5054522000555 Felnőtt rövidnadrág – XXS
5054522000562 Felnőtt rövidnadrág – XS
5054522000579 Felnőtt rövidnadrág – S
5054522000586 Felnőtt rövidnadrág – M
5054522000593 Felnőtt rövidnadrág – L
5054522000609 Felnőtt rövidnadrág – XL
5054522000616 Felnőtt rövidnadrág – XXL

5054522000623 Gyermek rövidnadrág – 1
5054522000630 Gyermek rövidnadrág – 2
5054522000647 Gyermek rövidnadrág – 3
5054522000654 Gyermek rövidnadrág – 4
5054522000661 Gyermek rövidnadrág – 5
5054522000678 Gyermek rövidnadrág – 6
5054522000685 Gyermek rövidnadrág – 7
5054522000692 Gyermek rövidnadrág – 8



Manufacturer: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Hollandia