

Vivi la tua vita.



Documento di informazioni per l'utilizzo del paziente:  
**Monospalla e bispalla DMO® Essentials in taglie predefinite**



[www.dmorthotics.com](http://www.dmorthotics.com)

## I nostri prodotti

DM Orthotics è leader mondiale nella progettazione e nella produzione di Ortesi dinamiche di movimento (Dynamic Movement Orthoses®, DMO®).

DMO® utilizza pannelli biomeccanici e rinforzi strategici per migliorare l'allineamento posturale e aumentare la propriocezione. Questi fattori stimolano e regolano il sistema neurosensoriale, allenando i muscoli a lavorare con tono, forza e prestazioni migliori.

Le ortesi monospalla e bispalla DMO® sono una gamma di ortesi in taglie predefinite in tessuto e costituiscono una buona opzione economica se si desidera verificare se un'ortesi personalizzata sarà di beneficio per un paziente. Costituiscono un efficace prodotto di misurazione entry level.

Sono pensati per fornire migliore comfort, postura e libertà di movimento all'utilizzatore. Pensati per essere indossati a contatto con la pelle, il migliore feedback propriocettivo e il posizionamento biomeccanico di questi modelli aiutano ad allenare i muscoli al lavoro, portando a un miglioramento del tono, della forza e delle prestazioni.

Tutti questi benefici concorrono a un unico obiettivo: migliorare la funzionalità e promuovere l'indipendenza dell'utente.

**DMO® Essentials sono un prodotto in taglie predefinite realizzato per adattarsi sia a bambini che ad adulti e sono una combinazione del nostro tessuto compressivo/sensoriale combinato con una serie di pannelli di rinforzo posizionati strategicamente a beneficio del paziente. Non sono modificabili e non sono ammessi ulteriori rinforzi. Possono essere consigliati da un medico nel caso in cui un prodotto standard disponibile in commercio possa essere utile, oppure possono essere ordinati direttamente dal nostro sito web con la necessità di una sola misurazione.**

### Contattateci

Per avere maggiori informazioni sulle gamme di prodotti DMO®, contattare il rivenditore o il distributore DMO® locale, oppure direttamente DM Orthotics per conoscerne il nominativo.

E-mail: [admin@dmorthotics.com](mailto:admin@dmorthotics.com) – Visitare: [www.dmorthotics.com](http://www.dmorthotics.com) –

Chiamare: +44 (0) 1209 219205

## Come riteniamo che i prodotti dovrebbero essere usati dai pazienti

I prodotti DMO Orthotic Essential sono pensati per aiutare a supportare e correggere la postura e l'allineamento articolare ove non siano richiesti ulteriori aggiustamenti individuali o rinforzi aggiuntivi.

**Tutte le ortesi DM Orthotics sono dispositivi medici ai sensi del regolamento UE MDR (2017/745) e sono dichiarati conformi alle normative in base agli Allegati II e III di EU MDR e rientrano nella definizione di dispositivo ortesico: un corsetto, un busto o altri dispositivi artificiali esterni che servono per sostenere gli arti o la colonna vertebrale oppure per prevenire o assistere un relativo movimento.**

I dispositivi sono progettati e realizzati per essere conformi ai requisiti applicabili dell'MDR (Regolamento sui dispositivi medici) (2017/745) dell'Unione europea e sono dichiarati conformi alle normative secondo l'Allegato II e III MDR UE.

### Data di emissione

I nostri dispositivi medici sono realizzati ed emessi con una data di produzione sul modulo di dichiarazione allegato al prodotto. La dichiarazione deve essere conservata dall'utente finale.

## Indice

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| ● Istruzioni per l'uso                             | Pag. 3        |
| ● Istruzioni per il lavaggio                       | Pag. 4        |
| ● Controindicazioni e precauzioni                  | Pag. 5        |
| <b>Monospalla Essentials in taglie predefinite</b> | <b>Pag. 6</b> |
| ● Scopo previsto                                   | Pag. 6        |
| ● Popolazione di pazienti prevista                 | Pag. 6        |
| ● Utilizzatori previsti                            | Pag. 6        |
| ● Efficace per i pazienti                          | Pag. 6        |
| ● Come indossare e rimuovere                       | Pag. 8        |
| <b>Bispalla Essentials in taglie predefinite</b>   | <b>Pag. 7</b> |
| ● Scopo previsto                                   | Pag. 7        |
| ● Popolazione di pazienti prevista                 | Pag. 7        |
| ● Utilizzatori previsti                            | Pag. 7        |
| ● Efficace per i pazienti                          | Pag. 7        |
| ● Come indossare e rimuovere                       | Pag. 10       |

## Istruzioni per l'uso

Seguire attentamente le istruzioni per la manutenzione. Prendersi cura della propria ortesi **ne prolungherà la durata e ne preverrà i danni.**

### COSA FARE

- Indossare e rimuovere l'ortesi come consigliato dal terapeuta/fornitore. Visita la pagina web: [www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare)
- Prestare attenzione nell'indossare e nel togliere l'ortesi e seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale: indossarla e toglierla senza cura o con unghie lunghe può causare danni.
- È importante incrementare il tempo di utilizzo in base alle proprie istruzioni individuali.
- Seguire con attenzione le istruzioni per il lavaggio, per evitare di danneggiare il dispositivo.

### COSA NON FARE

- Non indossare o togliere il prodotto senza cura: questo potrebbe causare danni al prodotto con smagliature, strappi o buchi nel tessuto.
- Non indossare o togliere il prodotto con le unghie lunghe: anche questo potrebbe danneggiare il tessuto.

### PROBLEMI DI VESTIBILITÀ O SICUREZZA

Contattare **IMMEDIATAMENTE** il proprio terapeuta/fornitore se il dispositivo sta diventando molto stretto, causando segni rossi, oppure si sono create smagliature e/o fori.

**I prodotti DMO® sono pensati come complemento a una terapia e all'esercizio fisico, per cui non devono essere rimossi per allenarsi, a meno che questo sia consigliato dal terapeuta o che si abbiano dubbi che il terapeuta può aiutare a risolvere.**

## Tempo di utilizzo

### COSA FARE

- Incrementare lentamente il tempo di utilizzo durante la prima settimana, come indicato sotto, raddoppiando il tempo di utilizzo giornaliero fino a indossare l'ortesi per tutta la giornata lavorativa.

Per es. 1° giorno - 1 ora

2° giorno - 2 ore

3° giorno - 4 ore

4° giorno - 8 ore

5° giorno – tutto il giorno durante il giorno. Da qui in poi, indossarla tutti i giorni durante il giorno per tutto il giorno.

### COSA NON FARE

- Indossarla subito per tutto il giorno. L'utilizzo deve essere incrementato per permettere di monitorare gli input sensoriali, i cambiamenti biomeccanici e l'adattamento.
- Non indossare il DMO durante la notte, a meno che sia consigliato dal medico: per es. nel caso di pazienti con EDS l'indosso notturno può essere utile.

## Istruzioni per il lavaggio

Segui attentamente le istruzioni per la cura. Prendendoti cura della tua ortesi, ne prolungherai la durata e ne preverrai i danni.

### DA FARE


- L'ortesi dovrebbe essere lavata almeno ogni 2-3 giorni.
- L'ortesi può essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice a 30 °C.
- Lavare separatamente.
- Utilizzare solo una centrifuga breve oppure avvolgere in un asciugamano asciutto per rimuovere l'umidità in eccesso.
- Lasciare asciugare completamente durante la notte appendendola in un ambiente interno.

### DA NON FARE

- NON asciugare alla luce solare diretta o su un termosifone.
- NON STRIZZARE – potrebbe deformarsi e danneggiare i materiali.
- NON STIRARE.
- Non usare candeggina o agenti sbiancanti.
- Non usare ammorbidente.
- NON LAVARE A SECCO.
- NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE – potrebbe restringersi.

**Per ulteriore aiuto e supporto, abbiamo aggiunto sul nostro sito web le istruzioni su come indossare e rimuovere l'ortesi. Ti invitiamo a visitare: [www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare)**

Una cura regolare e corretta dell'ortesi ne previene la formazione di odori e mantiene il materiale morbido ed elastico. Se la tua ortesi è trattata con argento, il trattamento dovrà essere riapplicato dopo 100 lavaggi, poiché gli ioni d'argento iniziano a disperdersi dopo circa 50 lavaggi.

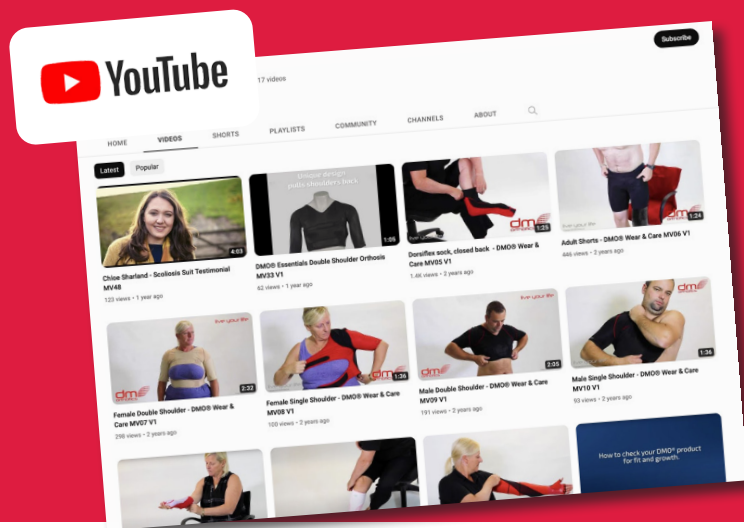

## Come indossare i prodotti

Abbiamo creato una serie di guide video per aiutare i nostri clienti a ottenere il meglio dai loro prodotti. Queste guide includono utili consigli e accorgimenti per indossare i prodotti e su come averne la massima cura indossandoli e rimuovendoli.

**Per visualizzarli, visitare: [www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare)**

I prodotti DMO® devono essere indossati a contatto con la pelle. È importante aumentare lentamente il tempo di utilizzo durante la prima settimana, raddoppiando la quantità di tempo ogni giorno fino a quando non viene indossato per tutta la giornata. Per esempio

## CONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI/CONSIDERAZIONI

### **Controindicazioni**

Non esistono controindicazioni note all'utilizzo di un DMO®. La valutazione per un prodotto DMO® deve essere svolta da un medico autorizzato in possesso delle adeguate qualifiche professionali.

### **Precauzioni/Considerazioni**

Prima di prescrivere un prodotto DMO® occorre considerare questo elenco di possibili precauzioni. Queste devono essere discusse con il proprio medico qualificato, che potrebbe suggerire altri prodotti DMO®.

### **Controllo insufficiente della regolazione della temperatura**

Un'ortesi DMO® non ha alcuna influenza sul centro di regolazione della temperatura corporea. Tuttavia, il DMO® deve essere trattato come uno strato di abbigliamento e gli strati di abbigliamento devono essere adattati per adeguarsi ai climi caldi o freddi.

### **Disturbi circolatori primari**

Alcuni problemi respiratori primari, in cui i muscoli si indeboliscono a causa del deterioramento dei nervi/muscoli, devono essere presi attentamente in considerazione e potrebbero richiedere una discussione con il proprio medico. Problemi di circolazione secondari associati alla paralisi cerebrale possono essere migliorati grazie a una migliore postura del tronco/corpo e a una migliore posizione delle costole.

### **Condizioni della pelle**

Condizioni della pelle che potrebbero subire peggioramenti dal contatto ravvicinato con materiali sintetici per periodi prolungati possono richiedere un'ulteriore consultazione con l'operatore sanitario che supervisiona il trattamento dermatologico, ma questo raramente costituisce una controindicazione.

### **Fragilità scheletrica/ossa fragili**

Alcune condizioni possono essere ben supportate da un prodotto DMO® ma questo deve essere discusso con il proprio medico.

## Monospalla Essentials in taglie predefinite DMO®

### Scopo previsto

Le ortesi per spalla DMO®, sia monospalla che bispalla, sono progettate per gestire le disabilità delle spalle e garantiscono la stabilizzazione e il riallineamento di tronco, spalla e arti superiori.

Sviluppate a fronte di una estesa ricerca, il loro design esclusivo tira indietro le spalle, sostenendo le scapole e stabilizzando le articolazioni delle spalle, garantendo maggiore comfort, migliore postura e gamma di movimenti.

### Popolazione di pazienti prevista

Bambini o adulti che presentino un tono muscolare basso o alto che richiede la stabilizzazione delle articolazioni colpite e anche il riallineamento del tronco, della spalla e degli arti superiori.

Questo riallineamento può contribuire a migliorare la funzionalità e può aiutare a ridurre il dolore e aiutare a gestire l'affaticamento. Per indossare e rimuovere autonomamente l'ortesi è richiesto un grado ragionevolmente elevato di destrezza e tono muscolare. Un caregiver dovrà fornire assistenza nell'indossare e rimuovere l'ortesi laddove ciò non sia possibile.

### Utilizzatori previsti

Può essere prescritta da un operatore sanitario competente o scelto da chi la indossa, da chi lo assiste o da un genitore. Chi le indossa sarà tipicamente una persona non esperta.

Il caregiver dell'utilizzatore, che può essere coinvolto nell'indossare e rimuovere il prodotto, nel lavaggio e nella segnalazione di eventuali problemi con il prodotto sarà tipicamente una persona non esperta.

### Efficace per:

- Sublussazione della spalla
- Slogatura della spalla
- Instabilità della spalla
- Dolore neurologico della spalla
- Lesione del plesso brachiale (paralisi di Erb)
- Paralisi cerebrale
- Sindrome di Ehlers-Danlos
- Sclerosi multipla
- Ictus
- Lesione spinale

### Fornisce:

- Riallineamento complesso della spalla
- Migliore funzione distale
- Migliore gamma di movimenti
- Migliore postura
- Solievo dal dolore

### Monospalla Essentials (donna) DMO®



### Monospalla Essentials (uomo) DMO®



## Bispalla Essentials in taglie predefinite DMO®

### Scopo previsto

Le ortesi per spalla DMO®, sia monospalla che bispalla, sono progettate per gestire le disabilità delle spalle e garantiscono la stabilizzazione e il riallineamento di tronco, spalla e arti superiori.

Sviluppate a fronte di una estesa ricerca, il loro design esclusivo tira indietro le spalle, sostenendo le scapole e stabilizzando le articolazioni delle spalle, garantendo maggiore comfort, migliore postura e gamma di movimenti.

### Popolazione di pazienti prevista

Bambini o adulti che presentino un tono muscolare basso o alto che richiede la stabilizzazione delle articolazioni colpite e anche il riallineamento del tronco, della spalla e degli arti superiori.

Questo riallineamento può contribuire a migliorare la funzionalità e può aiutare a ridurre il dolore e aiutare a gestire l'affaticamento. Per indossare e rimuovere autonomamente l'ortesi è richiesto un grado ragionevolmente elevato di destrezza e tono muscolare. Un caregiver dovrà fornire assistenza nell'indossare e rimuovere l'ortesi laddove ciò non sia possibile.

### Utilizzatori previsti

Può essere prescritta da un operatore sanitario competente o scelto da chi la indossa, da chi lo assiste o da un genitore. Chi le indossa sarà tipicamente una persona non esperta.

Il caregiver dell'utilizzatore, che può essere coinvolto nell'indossare e rimuovere il prodotto, nel lavaggio e nella segnalazione di eventuali problemi con il prodotto sarà tipicamente una persona non esperta.

### Efficace per:

- Sublussazione della spalla
- Slogatura della spalla
- Instabilità della spalla
- Dolore neurologico della spalla
- Lesione del plesso brachiale (paralisi di Erb)
- Paralisi cerebrale
- Sindrome di Ehlers-Danlos
- Sclerosi multipla
- Ictus
- Lesione spinale

### Fornisce:

- Riallineamento complesso della spalla
- Migliore funzione distale
- Migliore gamma di movimenti
- Migliore postura
- Sollievo dal dolore

Bispalla Essentials (donna) DMO®



Bispalla Essentials (uomo) DMO®



## Istruzioni per l'applicazione dell'ortesi monospalla DMO®

Come applicare l'ortesi monospalla DMO®. (A scopo illustrativo è stata utilizzata l'ortesi monospalla DMO® personalizzata)

### Precauzioni:


- Rimuovere orologi e gioielli prima di applicare l'ortesi.
- L'ortesi monospalla deve essere rimossa se il paziente è malato o ha la febbre.
- Se vi sono dubbi sulla taglia, come le estremità corporee che diventano blu o estremamente fredde al tatto, rimuovere e informare immediatamente il personale sanitario per ulteriori valutazioni. Oppure, se acquistata sul nostro sito web, contattare il nostro reparto amministrativo e restituirla a DM Orthotics

### Per controllare la taglia:

- Le cuciture/estremità dell'ortesi possono lasciare lievi rientranze nella pelle una volta rimossa, ma se alcuni segni sono notevolmente arrossati dopo 20-30 minuti dalla rimozione, allora l'ortesi potrebbe essere troppo stretta.
- In caso di dubbi sulla taglia, rimuovere e consultare il proprio terapeuta di riferimento, qualora se ne abbia uno. Oppure, se acquistata sul nostro sito Web, contattare il nostro reparto amministrativo e restituirla a DM Orthotics.




1 Inserire il braccio del lato interessato nella manica, accertandosi che l'ortesi sia ben tirata sulla spalla.

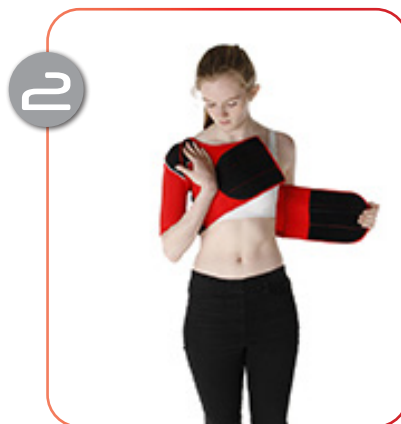

2 Appoggiare il braccio interessato sulla sommità dell'ortesi, come illustrato, qualora se ne sia in grado. Questo tiene ferma l'ortesi mentre si afferra, sul retro, la fascia larga.



3 Tirare lateralmente la parte posteriore dell'ortesi fino ad estendere completamente l'elastico (questo movimento laterale è essenziale per garantire che l'ortesi svolga le funzioni per cui è stata progettata). Tenendo in fuori il braccio esteso, spostare la mano in avanti e portare la fascia estesa attorno al torso fino a che sia possibile fissarla con la chiusura in velcro. Continuare a fissare completamente la chiusura in velcro sulla posizione anteriore.

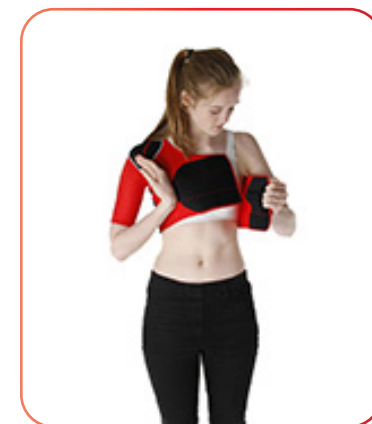

4 Come appare l'ortesi monospalla per bambini e uomini quando è indossata correttamente.



Nell'ortesi monospalla da donna vi sono due fasce invece di una. Seguire le istruzioni riportate al N. 3, tirando la fascia superiore fino a raggiungere il velcro, poi tirando la fascia inferiore. Accertarsi che il velcro sia comodo una volta fissato.

Vivi la tua vita.


Come applicare l'ortesi monospalla DMO®.

Come deve apparire il monospalla una volta indossato:


**Uomo/Bambino:**




**Donna:**

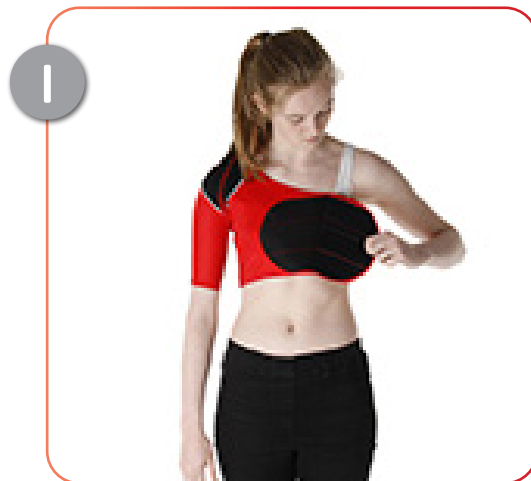


Per la versione per bambino e per uomo, aprire la chiusura in velcro anteriore e lasciare cadere la fascia. Per la versione da donna, aprire le chiusure in velcro delle due fasce e lasciare cadere le fasce.

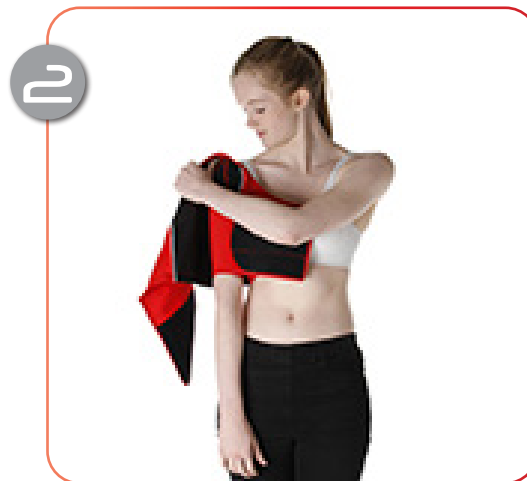

Rimuovere l'ortesi dal lato interessato.

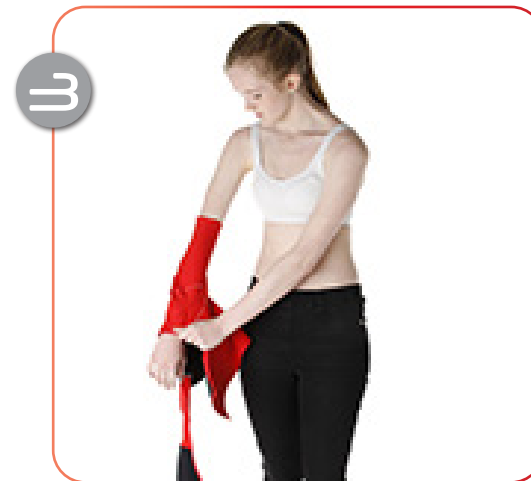

Rimuovere il braccio dalla manica dell'ortesi.

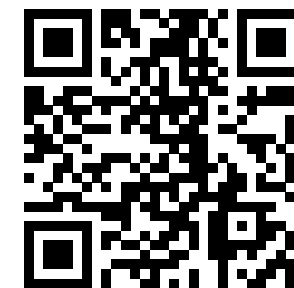

Utilizzate il codice QR qui sopra per accedere ai nostri video sull'uso e la cura, oppure visitate:  
[www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare)

Vivi la tua vita.

## Istruzioni per l'applicazione dell'ortesi bispalla DMO®

Come applicare l'ortesi bispalla DMO®.

### Precauzioni:

- Le seguenti istruzioni sono per lo stabilizzatore di spalla sia per uomo che per donna.
- Raccomandiamo di sedersi per indossare l'ortesi per la spalla.
- L'ortesi bispalla va indossata in avanti per evitare sforzi sull'articolazione della spalla.

### Per controllare la taglia:

- Le cuciture/estremità dell'ortesi possono lasciare lievi rientranze nella pelle una volta rimossa, ma se alcuni segni sono notevolmente arrossati dopo 20-30 minuti dalla rimozione, allora l'ortesi potrebbe essere troppo stretta.
- In caso di dubbi relativamente alla taglia, rimuovere e consultare il proprio terapeuta di riferimento, qualora lo si abbia. O se acquistato sul nostro sito web, contattate il nostro reparto amministrativo e restituitelo a DM Orthotics

### Ortesi bispalla per bambini

Le istruzioni per indossare la versione per bambini di questo prodotto sono le stesse riportate per l'uomo adulto.



1  
Aprire tutte le fasce con velcro dell'ortesi per la spalla.



2  
Inserire le braccia nelle maniche dell'ortesi per la spalla e tirarle delicatamente sopra le spalle una per volta, utilizzando l'altra mano, in modo che sia completamente sopra le spalle, come illustrato. *N.B. Quando si indossa l'ortesi da donna, accertarsi che l'apertura anteriore sia sopra e sotto il seno, come illustrato. Per le ortesi da uomo e da bambino, lo strato anteriore non ha aperture. Accertarsi che il materiale nella parte anteriore sia tirato delicatamente verso il basso, in modo che sia comodo sulle costole.*



3  
Afferrare le due fasce sul lato destro dell'ortesi, come illustrato. Avvolgerle attorno alla schiena e infilarle nell'apertura sul lato sinistro dell'ortesi, sotto la sezione del braccio.



4  
Quindi, afferrare le fasce già fatte passare attraverso l'apertura, tirare la fascia inferiore delicatamente ma con forza e allontanarla dal corpo. Fissare il velcro inferiore alla parte anteriore dell'ortesi.



5  
Afferrare la fascia superiore, estrarla con delicatezza e allontanarla dal corpo, poi fissarla al velcro superiore, nella parte anteriore dell'ortesi.

Può essere preferibile fissare prima la fascia superiore, in quanto questo può riposizionare meglio la spalla per alcuni pazienti. Fissare poi la fascia inferiore.

Vivi la tua vita.

**Come deve apparire il bispalla una volta indossato:**

**Uomo:**



**Donna:**



**Bambino:**



6



Ripetere con le rimanenti fasce sul lato destro del corpo. Tirare delicatamente la fascia inferiore allontanandola dal corpo e fissarla sul velcro inferiore nella parte anteriore del corpo.

7




Ripetere con la fascia dell'ortesi (come in fig. 6). Tirare la sezione del corpo della fascia della spalla in basso sul retro e sulla parte anteriore, in modo da approfittare dalla migliore posizione che può garantire. Accertarsi di tirare in modo da garantire la comodità sopra le spalle e sulle costole.

8



Accertarsi che la sezione della manica sia posizionata correttamente.

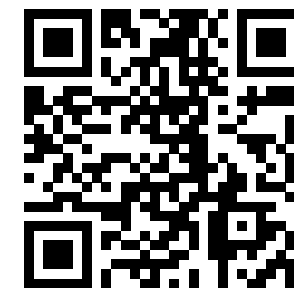

Utilizzate il codice QR qui sopra per accedere ai nostri video sull'uso e la cura, oppure visitate:  
[www.dmorthotics.com/productcare](http://www.dmorthotics.com/productcare)

Vivi la tua vita.

Come deve apparire il bispalla una volta indossato:

**Uomo:**



**Donna:**



**Bambino:**



Come rimuovere l'ortesi bispalla DMO®.

1



Aprire la chiusura velcro su entrambi i lati.

2



Posizionare delicatamente la mano opposta sulla sezione della spalla e iniziare a tirare verso il basso sopra il braccio.

3



Ripetere con l'altro lato dell'ortesi per le spalle.

4



Rimuovere le fasce quando sono allentate e uscire delicatamente dall'indumento.

### **Dichiarazione sullo smaltimento del dispositivo**

I dispositivi prodotti da DM Orthotics sono dispositivi ortesici personalizzati di classe 1. Non sono necessarie precauzioni per smaltire i dispositivi DMO®. I materiali utilizzati per la produzione possono essere smaltiti secondo le normative locali per lo smaltimento di abiti/materiali. Chiediamo di volere gentilmente lavare il dispositivo prima dello smaltimento.

### **Dichiarazione di grave incidente**

Qualora si verifichi un grave incidente in relazione al vostro dispositivo DMO®, siete tenuti a comunicarlo immediatamente al produttore (DM Orthotics) e alla competente autorità responsabile per i dispositivi medici nel vostro Stato membro. Per esempio, nel Regno Unito questa sarebbe la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA.

**Produttore**



**Identificazione  
del paziente**



**ID prodotto/modello**



**Prodotto in  
Gran Bretagna**



**Distributore**




**MedEnvoy Global BV**  
**Pr. Margrietplantsoen 33**  
**Suite 123**  
**2595 AM Den Haag**  
**Paesi Bassi**



**Nome del medico**



**Numero d'ordine**

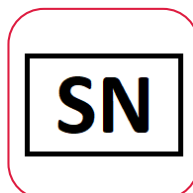

**Dispositivo medico**



**Si osservi che la modifica da parte dell'utente non è consigliata e che alterando autonomamente l'ortesi la garanzia può essere compromessa o ritenuta nulla. Rivolgersi al proprio specialista clinico o a DM Orthotics per informazioni su alterazioni e modifiche del prodotto.**



**Produttore:**  
**DM Orthotics Ltd**  
**Unit 2 Cardrew Way**  
**Cardrew Industrial Estate**  
**Redruth**  
**Cornwall, UK**  
**TR15 1SS**

**+44 (0) 1209 219205**  
**www.dmorthotics.com**  
**admin@dmorthotics.com**



Progettato e costruito nel Regno Unito

UDI- DI di base: 5054522UPPERLIMBQS

**UDI-DI:**

5054522001231 Bispalla bambino - 1  
5054522001248 Bispalla bambino - 2  
5054522001255 Bispalla bambino - 3  
5054522001262 Bispalla bambino - 4  
5054522001279 Bispalla bambino - 5  
5054522001286 Bispalla bambino - 6

5054522000708 Bispalla adulto - XS  
5054522000715 Bispalla adulto - S  
5054522000722 Bispalla adulto - M  
5054522000739 Bispalla adulto - L  
5054522000746 Bispalla adulto - XL  
5054522001224 Bispalla adulto - XXL

5054522001415 Monospalla bambino sinistra - 1  
5054522001422 Monospalla bambino sinistra - 2  
5054522001439 Monospalla bambino sinistra - 3  
5054522001446 Monospalla bambino sinistra - 4  
5054522001453 Monospalla bambino sinistra - 5  
5054522001460 Monospalla bambino sinistra - 6  
5054522001477 Monospalla bambino destra - 1  
5054522001484 Monospalla bambino destra - 2  
5054522001491 Monospalla bambino destra - 3  
5054522001507 Monospalla bambino destra - 4  
5054522001514 Monospalla bambino destra - 5  
5054522001521 Monospalla bambino destra - 6

5054522001293 Monospalla adulto sinistra - XS  
5054522001309 Monospalla adulto sinistra - S  
5054522001316 Monospalla adulto sinistra - M  
5054522001323 Monospalla adulto sinistra - L  
5054522001330 Monospalla adulto sinistra - XL  
5054522001347 Monospalla adulto sinistra - XXL  
5054522001354 Monospalla adulto destra- XS  
5054522001361 Monospalla adulto destra- S  
5054522001378 Monospalla adulto destra - M  
5054522001385 Monospalla adulto destra - L  
5054522001392 Monospalla adulto destra- XL  
5054522001408 Monospalla adulto destra- XXL



Produttore: DM Orthotics Ltd  
Unit 2 Cardrew Way  
Cardrew Industrial Estate  
Cornwall, UK  
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV  
Pr. Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM Den Haag  
Paesi Bassi