

lev livet.



Bruksdokument for pasientinformasjon:
DMO® måltilpasset leggings, benemer og shorts



www.dmorthotics.com

Våre produkter

Våre måltilpassede Dynamic Movement Orthoses® bruker et mykt, fleksibelt elastomert stoff som sørger for tett passform og skaper kompresjonskraft for å forbedre proprioseptiv tilbakemelding. Dette basestoffet er lett, pustende og sterkt.

Dette er kombinert med forsterkningspaneler laget av et powernet-materiale for å gi styrke og stabilitet der det er behov for å forbedre holdning og biomekanisk justering.

Våre måltilpassede ortoser fungerer gjennom strategisk plasserte forsterkninger som plasserer kroppen i en bedre stilling. Denne nye biomekaniske tilstanden kombinert med forbedret proprioepsjon stimulerer og justerer det nevro-sensoriske systemet, trener muskler for å jobbe med forbedret tonus, styrke og ytelse.

DMO®-produktene hjelper både voksne og barn med å håndtere de fysiske effektene av deres nevrologiske, muskuloskeletale og genetiske tilstander.

DMO® måltilpassede produkter er individuelt måltilpassede, og alle fester og åpninger er individuelt foreskrevet i henhold til de funksjonelle behovene og preferansene til hver enkelt pasient.

Ta kontakt

For å finne ut mer om våre DMO®-produktserier, kontakt din lokale DMO®-leverandør eller distributør eller DM Orthotics direkte for å finne ut hvem dette er.

E-post: admin@dmorthotics.com eller gå til: www.dmorthotics.com eller ring: +44 (0) 1209 219205

Hvordan vi har tenkt at produktene våre skal brukes

DM Orthotics måltilpassede ortoser er ment for **eksklusiv bruk av én enkelt, spesifikk pasient** for å støtte og korrigere holdning og justering av ledd. Den skal ikke bæres av andre personer som den ikke er individuelt målt og foreskrevet for.

Alle tilpassede DM Orthotics ortoser er medisinsk utstyr som definert av EU MDR (2017/745), og er erklært å være i samsvar med forskriftene i henhold til vedlegg II og III EU MDR. De kommer inn under definisjonen av et ortopedisk medisinsk utstyr: en spenne, skinne eller annen kunstig ekstern enhet som har som formål å støtte lemmer eller ryggrad eller for å hindre eller hjelpe relativ bevegelse.

Enhetene er tilpasset (i henhold til vedlegg XIII MDR) og oppfyller gjeldende krav i MDR (Medical Devices Regulation) (2017/745): Tilpasset produkt

Utstedelsesdato

Vårt tilpassede enheter produseres og utstedes med en produksjonsdato på det medfølgende deklarasjonsskjemaet som sendes med produktet ditt. Dette er ment som fremtidig referanse for sluttbruker.

Innhold

● Bruksanvisning	S3
● Vaskeanvisninger	S4
● Kontraindikasjoner og forholdsregler	S5

Måltilpasset leggings, benemermer og shorts S6

● Tiltenkt bruk	S6
● Tiltenkt pasientgruppe	S7
● Tiltenkte brukere	S7
● Effektiv for pasienter	S8
● Bruk med andre ortoser	S7

Måltilpasset leggings S6

● Hvordan sette på og ta av	S9
-----------------------------	----

Måltilpassede benemermer S6

● Hvordan sette på og ta av	S9
-----------------------------	----

Måltilpasset shorts S6

● Hvordan sette på og ta av	S9
-----------------------------	----

● Erklæring om enhetsavhending	S14
● Erklæring om alvorlig hendelse	S14
● Forklaring av symboler som brukes	S15

Bruksanvisning

Følg vedlikeholdsrådene nøye. Hvis du tar vare på ortosen vil du **forlenge dens levetid og forhindre skade.**

DU MÅ GJØRE FØLGENDE

- ta ortosen av og på som anbefalt av terapeuten/leverandøren. Se nettsted: www.dmorthotics.com/productcare
- vær forsiktig når du tar den på og av og følg bruksanvisningen. Hardhendt behandling ved av- og påtagning, samt lange negler, kan skade produktet.
- det er viktig at du bygger opp brukstiden i henhold til dine individuelle instruksjoner.
- følg vaskeanvisningene nøye for å forhindre at det oppstår skader på ortosen.

DU MÅ IKKE GJØRE FØLGENDE

- hardhendt behandling ved av- og påtagning av det ferdig tilpassede produktet kan føre til at produktet får skade eller lage rifter eller hull i stoffet.
- ikke ta plagget av/på med lange finger negler, dette kan også skade stoffet.

TILPASNING ELLER SIKKERHETSBEKYMRINGER

Ta kontakt med behandleren/leverandøren **UMIDDELBART** hvis ortosen blir veldig trang, forårsaker røde merker eller har fått rifter og/eller hull.

DMO® -produktene er designet som et tillegg til terapi og fysisk trening, så de bør ikke fjernes for trening med mindre det er anbefalt av terapeuten din.

Brukstid

DU MÅ GJØRE FØLGENDE

- bygg opp brukstiden sakte i løpet av den første uken, som angitt nedenfor, og doble den daglige tiden frem til ortosen kan brukes under hele arbeidsdagen.

f.eks 1. dag – 1 time

2. dag – 2 timer

3. dag – 4 timer

4. dag – 8 timer

5. dag – hele dagen, i løpet av dagen. Bruk den deretter hele dagen og hver dag på dagtid.

DU MÅ IKKE GJØRE FØLGENDE

- bruke ortosen hele dagen umiddelbart. Brukstiden må bygges opp for å sikre at sensoriske inntrykk, biomekaniske endringer og passform overvåkes.
- ikke bruk dine DMO-leggings/shorts om natten med mindre det er anbefalt av legen eller klinikerens din, f.eks. når det gjelder EDS-pasienter, hvor dette kan være gunstig.

Vaskeanvisning

Følg vaskeanvisningene nøye. Ved å ta godt vare på ortosen din, vil du forlenge levetiden og forhindre skader.

GJØR


- Ortosen bør vaskes minst hver 2.–3. dag.
- Ortosen kan håndvaskes i kaldt vann eller maskinvaskes på 30°C.
- Vask separat.
- Kun kort sentrifugering, eller rull den inn i et tørt håndkle for å fjerne overflødig fuktighet.
- La ortosen tørke helt over natten ved å henge den opp innendørs.

GJØR IKKE

- IKKE tørk i sterk sollys eller på en radiator.
- IKKE VRI ORTOSEN – den kan miste fasongen og materialet kan bli skadet.
- IKKE STRYK.
- Ikke bruk blekemiddel eller hvitemidler.
- Ikke bruk tøymykner.
- IKKE RENS.
- IKKE TØRK I TØRKETROMMEL – ortosen vil krympe.

For ytterligere hjelp og støtte har vi lagt ut veiledning om hvordan du tar på og av ortosen på vår nettside. Vennligst besøk: www.dmorthotics.com/productcare

Regelmessig og riktig stell av ortosen vil forhindre at den utvikler lukt og holde materialet mykt og smidig. Hvis ortosen din er sølvbehandlet, må behandlingen påføres på nytt etter 100 vask, ettersom sølvionene begynner å brytes ned etter 50 vask.

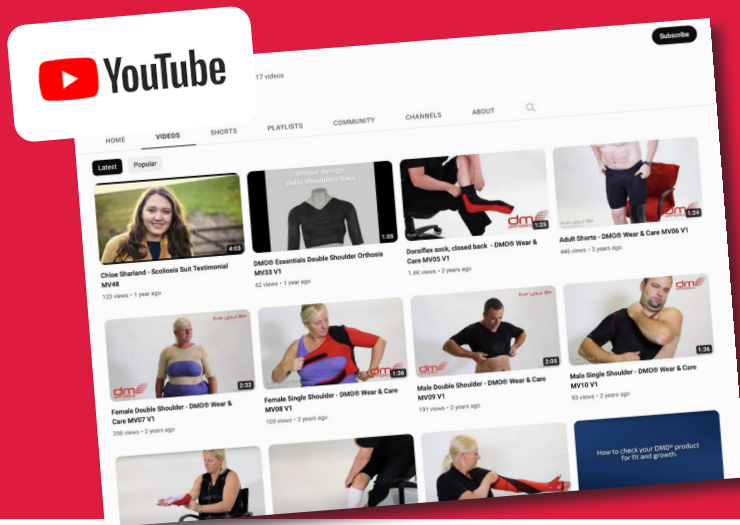

Bruke produktene våre

Vi har laget en rekke videoguides for å hjelpe kundene våre med å få mest mulig ut av produktet sitt. Disse guidene inneholder nyttige tips og triks for bruk av produktene våre og hvordan du best kan ta vare på dem når du tar den på eller av.

For å se disse, gå til: www.dmorthotics.com/productcare

DMO® -produktene skal bæres nærmest huden. Det er viktig å bygge opp brukstiden sakte i løpet av den første uken, og doble tiden daglig til den kan brukes hele dagen, f.eks.

KONTRAINDIKASJONER OG FORHOLDSREGLER

Kontraindikasjoner

Det finnes ingen kontraindikasjoner ved bruk av DMO®. Vurdering av en DMO® Spesialtilpasset produkt skal utføres av en autorisert medisinsk fagperson med riktige faglige kvalifikasjoner.

Forholdsregler

Her er en liste over mulige forholdsregler å vurdere før du går videre med forskrivning av et tilpasset DMO®-produkt. Dette bør diskuteres med din kvalifiserte lege som kan foreslå et alternativt DMO®-produkt eller endring av foretrukket DMO®-produkt.

Dårlig temperaturregulering

En DMO vil ikke ha noen innvirkning på kroppens temperaturregulering. Imidlertid bør DMO-en behandles som et lag med klær som må justeres for varmt eller kaldt klima i henhold til dette. Man kan gjøre justeringen i forhold til gitt resept, f.eks korte ben og armer for å forbedre varmekontrollen.

Primære sirkulasjonsforstyrrelser

Visse primære luftveisproblemer der musklene blir svakere på grunn av svekkelse av nerver/muskler, vil trenge nøye vurdering og kan kreve diskusjon med pasientens lege. Draktspesifikasjonen kan imidlertid endres for å imøtekomme dette. Sekundære sirkulasjonsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grunn av forbedret holdning av overkropp/kropp og forbedret posisjon av ribbeina.

Hudsykdommer

Hudsykdommer som kan forverres ved nær kontakt med syntetiske materialer over lengre perioder, kan kreve ytterligere konsultasjon med helsepersonell som overvåker pasientens dermatologiske behandling, men dette er sjelden en kontraindikasjon.

Skjelettskjørhet/benskjørhet

Noen tilstander kan få god støtte med et DMO® produkt, men dette bør diskuteres med legen din. Endringer kan gjøres på det foretrukne produktet, som tillegg av glidelåser eller trykknapper eller bruk av korte armer eller ben i stedet for lange armer eller ben.

Gastrostomi, stomi og andre medisinske behov

Vi kan produsere det skreddersydde produktet med en spesiell blenderåpning for en gastrostomipinne, stomi, suprapubisk kateter osv. Dette vil bli lagt til på tilpasningsstadiet for å sikre nøyaktig plassering. Diskuter dette med legen din som kan få ytterligere råd fra det erfarne kliniske teamet hos DMO®.

DMO® måltilpasset leggings, benermer og shorts

Tiltenkt bruk

Hensikten med DM28 leggings, DM30/31 benermer og DM32 shorts er å justere nedre bakpart, bekken, hofter og nedre lemmer. Den nøyaktige plasseringen av effekten bestemmes av valget av produkt. Det forbedrer symmetrien og bidrar til stabilisering. DM28-leggings, DM30/31 benermer og DM32 shorts gir svært effektivt støtte med fri bevegelse for å maksimere stabiliteten til bekken- og underekstremiteter. Produktet hjelper også distal kontroll og påvirker muskeltonen positivt for å forbedre funksjonen.

Indikasjoner

Barn eller voksne med lav eller høy muskeltonus, sensoriske eller proprioceptive problemer, mangel på stabilitet kjernemrådet, bekkenet eller underekstremitetene. Barn eller voksne som har smerter forbundet med dårlig justering eller tretthet forårsaket av manglende evne til å opprettholde en stabil stilling på bekken- eller underekstremiteter.

Forholdsregler

Avhengig av høyden på baken til det valgte produktet, må følgende vurderes.

Visse primære luftveisproblemer der musklene blir svakere på grunn av svekkelse av nerver/muskler, vil trenge nøye vurdering og kan kreve diskusjon med pasientens lege.

Sekundære sirkulasjonsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grunn av forbedret holdning av underkropp/kropp og forbedret posisjon av ribbeina. Se forrige side for andre kontraindikasjoner/hensyn.



Tiltent patientgruppe

Mannlige og kvinnelige pasienter vanligvis i alderen to år eller eldre. Barn under to år kan imidlertid også ha nytte av DM28 leggings, DM30/31 benmermer og DM32 shorts. Den nedre aldersgrensen ble satt på grunn av økt vekst på dette stadiet som ville kreve justering eller ny produksjon. Det skyldes ikke manglende evne til å oppnå den tiltente bruken. Det er ingen øvre aldersgrense for DM28 leggings, DM30/31 benmermer og DM32 shorts.

Ulike medisinske tilstander med symptomer som DM28 leggings, DM30/31 benmermer og DM32 shorts kan hjelpe med, er blant annet de du ser på side 8 (ikke uttømmende).

En rimelig høy grad av fingerferdighet og muskeltonus er nødvendig for de som skal ta ortosen av/på selv. En omsorgsperson vil bli pålagt å hjelpe med påkledning og avkledning av ortosen der dette ikke er tilfelle.

Tiltente brukere

DM28 leggings og DM30/31 benmermer og DM32 shorts vil kreve resept og spesifisering av kompetent helsepersonell, vanligvis en kvalifisert ortotist, fysioterapeut eller ergoterapeut, som har fått riktig opplæring i reseptbehandling og bruk av Dynamic Movement Orthoses® (DMO®). Kompetent helsepersonell vil også bli pålagt å vurdere passformen til produktet og å gi ytterligere spesifiseringsråd for å forbedre passformen til produktet der det er nødvendig.

Bæreren av ortosen vil vanligvis være en lekmann.

Brukerens omsorgsperson som kan være involvert i påkledning og avkledning, vasking og rapportering av eventuelle problemer med ortosen, vil vanligvis være en lekmann.

Den aktuelle enheten er laget for måling og krever spesifisering av helsepersonell som er opplært i bruk av dynamiske bevegelsesortoser (DMO). Dette vil kreve et sett med målinger som helsepersonell vil ha fått opplæring i å utføre fra DM Orthotics.

En rekke forskjellige forsterkningspaneler må også foreskrives etter behov av opplært helsepersonell.



DMO® Måltilpasset leggings

Effektiv for:

- Cerebral parese
- Nedre lemmer
- Multippel sklerose
- Ehlers-Danlos syndromer
- Høy og lav muskeltonus
- og mer

Gir:

- bekkenstabilitet
- forbedring av hofte- og knejustering
- forbedret ekstern/intern hofterotasjon
- Økt sensorisk bevissthet
- Forbedret holdning
- forbedret muskelfunksjon
- Smertelindring
- forsterkningspaneler for styrke og stabilitet

Tilleggsfunksjoner:

- valgfri gylfåpning
- kompresjonsstoff for komfort og bevegelse
- forbedret benposisjonering
- Brukes under klær

DMO® Måltilpasset shorts

Effektiv for:

- Cerebral parese
- Multippel sklerose
- Ataxia
- Lav muskeltone
- Påført og traumatisk hjerneskade
- Ehlers-Danlos syndromer
- Nedsatt gåmønster
- Hjerneslag
- Parkinsons sykdom
- Huntingtons sykdom
- og mer

Gir:

- bekkenstabilitet
- forlengelse av hofte og kne
- redusert ekstern/intern hofterotasjon
- Økt sensorisk bevissthet
- Forbedret holdning
- forbedret muskelfunksjon
- smertelindring

Tilleggsfunksjoner:

- kompresjonsstoff for komfort og bevegelse
- valgfri gylfåpning
- forsterkningspaneler for styrke og stabilitet
- Brukes under klær

DMO® Bennerme

Effektiv for:

- Cerebral parese
- Nedre lemmer
- Multippel sklerose
- Ehlers-Danlos syndromer
- Høy og lav muskeltonus
- og mer

Gir:

- bekkenstabilitet
- forbedring av hofte- og knejustering
- forbedret ekstern/intern hofterotasjon
- Økt sensorisk bevissthet
- Forbedret holdning
- forbedret muskelfunksjon
- Smertelindring
- forsterkningspaneler for styrke og stabilitet

Tilleggsfunksjoner:

- kompresjonsstoff for komfort og bevegelse
- forsterkningspaneler for styrke og stabilitet
- Brukes under klær

DMO® Benerme med tilbehør

Effektiv for:

- Cerebral parese
- Nedre lemmer
- Multippel sklerose
- Ehlers-Danlos syndromer
- Høy og lav muskeltonus
- og mer

Gir:


- Bekkenstabilitet
- forbedring av hofte- og knejustering
- forbedret ekstern/intern hofterotasjon
- Økt sensorisk bevissthet
- Forbedret holdning
- forbedret muskelfunksjon
- Smertelindring
- forsterkningspaneler for styrke og stabilitet

Tilleggsfunksjoner:

- kompresjonsstoff for komfort og bevegelse
- forsterkningspaneler for styrke og stabilitet
- Brukes under klær

Forholdsregler:

- Fjern klokke og smykker før ortosen settes på.
- hvis shortsene har blitt tilpasset med en glidelås, forsikre deg om at glidelåsene befinner seg på utsiden av huden før du trekker de opp, og at de ikke ruller tilbake.
- shortsene bør fjernes hvis pasienten er syk eller har feber.
- hvis det er bekymringer med passform, dvs. at ekstremiteter blir blå eller føles kalde, fjern shortsene og informer det kliniske teamet umiddelbart for videre evaluering.

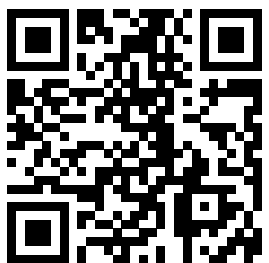

Bruk QR-koden ovenfor for å få tilgang til våre brukervennlige videoer eller gå til:

www.dmorthotics.com/productcare

DMO® bruksanvisning for måltilpasset shorts

Slik setter du på DMO® måltilpasset shorts.

Pasienten må legge seg ned for å sikre balanse og sikkerhet og at shortsene er satt riktig på.



Hvis shortsene har glidelås i livet, kan du løsne før du trekker den på. Ta shortsene (med merkelappen bak) og trekk dem oppover bena (som du ville gjort med et par strømpebukser). Forsikre deg om at du trekker dem over knærne og oppover lårene før du begynner å trekke dem oppover hoftene.




Trekk shortsene opp til midjen og trekk opp glidelåsen hvis den er tilstede.

lev livet.

Slik tar du av DMO® måltilpasset shorts.

Pasienten må legge seg ned for å sikre balanse og sikkerhet og at shortsene er tatt av.

Hvordan shortsene skal se ut når den er på:

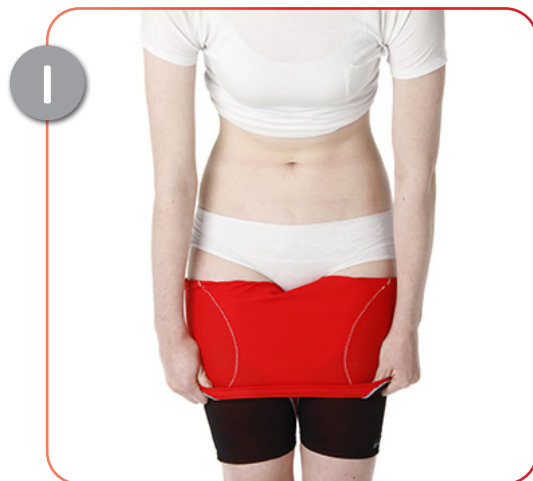

Rull shortsene nedover bena mot føttene, og trekk den forsiktig fra innsiden og ut. .



Skyv hvert ben ut av ortosen.

Slik sjekker du passformen:

- shortsene skal ha en stram passform, men du skal kunne plassere pekefingeren under underkanten av shortsene og midjen.
- sømmene/endene på ortosen kan etterlate små fordypninger i huden, men hvis noen merker er for røde etter 25–30 minutter etter at du har tatt den av, er den kanskje for stram.
- hvis du er i tvil om passformen, gi beskjed til terapeuten din umiddelbart, da ortosen bare kan endres uten kostnad de første seks ukene.

DMO® bruksanvisning for måltilpasset leggings

Slik setter du på DMO® leggings.

Pasienten må sette eller legge seg ned for å sikre balanse og sikkerhet.

Forholdsregler:

- Fjern klokke og smykker før ortosen settes på.
- forsikre deg om at glidelåsene befinner seg på utsiden av huden før du trekker de opp, og at de ikke ruller tilbake.
- leggings skal aldri brukes om natten (med mindre det diskuteres med en lege eller fysioterapeut. Noen EDS-pasienter kan ha nytte av nattplagg, men dette må være bekreftet før evt. bruk) eller når brukeren er syk eller har feber.
- hvis det er bekymringer med passform, dvs. at ekstremiteter blir blå eller føles kalde, fjern plagget og informer det kliniske teamet umiddelbart for videre evaluering.

Slik sjekker du passformen:

- leggings skal ha en stram passform, men du skal kunne plassere pekefingeren under underkanten av leggingsen og midjen.



Fjern ortosen fra emballasjen.



Hvis leggingsen har glidelås på kroppen eller ankel, må du først åpne disse før du setter på deg leggingsen.



Påfør silkefotapplikatoren. Hvis forespurt og tilstede.



Skyv høyre ben gjennom høyre ben i ortosen.



Trekk forsiktig høyre ben i ortosen mot kneet.



Fortsett å trekke forsiktig mot kneet til bunnen av høyre ortose er over ankelen.




Fjern silkeapplikatoren fra høyre fot.



Sett silkeapplikatoren på plass på venstre fot. For benhylsen, gå til bilde 10

9

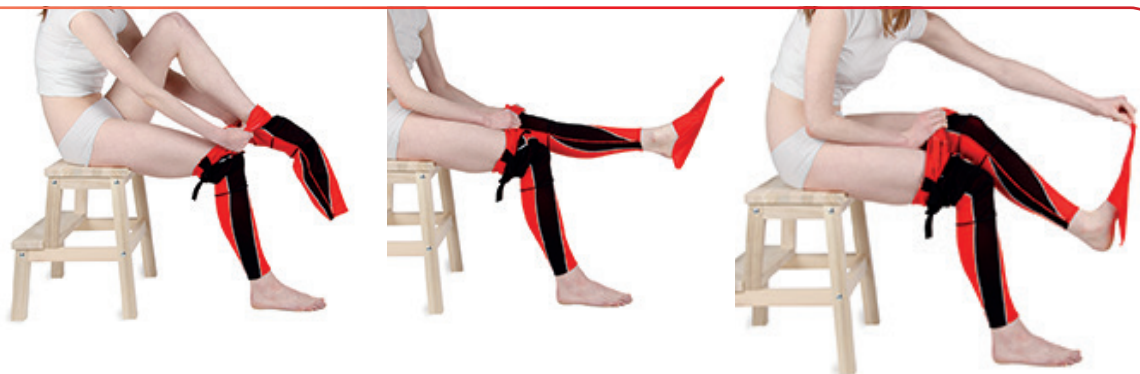

Gjenta trinn fire til sju. Fjern deretter silkeapplikatoren fra foten. Forsikre deg om at du har trukket leggingsen forsiktig opp til låret før du prøver å trekke den over hoftene og kroppen.

10




Trekk leggingsen forsiktig oppover mot hoftene.

11




Forsikre deg om at silikonet er i kontakt med huden på toppen av ortosen, og trekk opp eventuelle glidelåser.

12

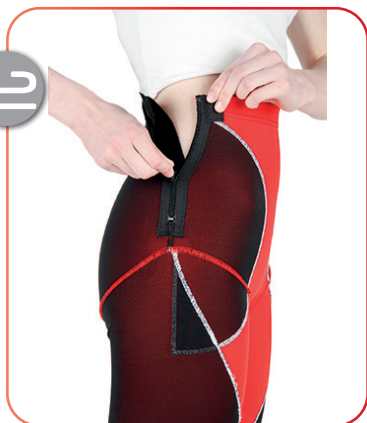

Fest glidelåsen på siden hvis den er inkludert.

13

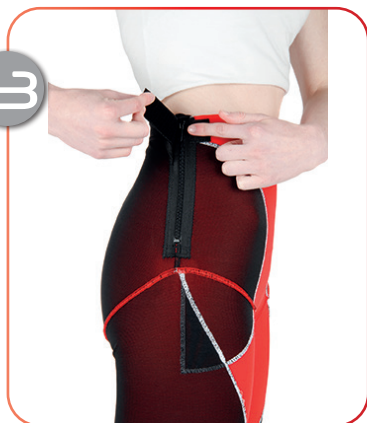

Fest tappen mot fronten. Leveres bare når glidelås er etterspurt.

14



Bildet viser tappen som er festet foran på ortosen.

15



Hvordan leggingsen skal se ut når de brukes riktig.

Slik sjekker du passformen:

- sømmene/endene på leggingsen kan etterlate små fordypninger i huden, men hvis noen merker er for røde etter 25–30 minutter etter at du har tatt den av, er den kanskje for stram.
- hvis du er i tvil om passformen, gi beskjed til terapeuten din umiddelbart, da ortosen bare kan endres uten kostnad de første seks ukene.


lev livet.

DMO® bruksanvisning for måltilpasset leggings


Slik tar du av DMO® leggings.

Pasienten må sette eller legge seg ned for å sikre balanse og sikkerhet.

Hvordan leggings skal se ut når den er på:

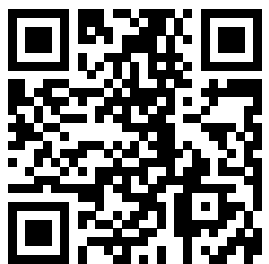


Bruk QR-koden ovenfor for å få tilgang til våre brukervennlige videoer eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare

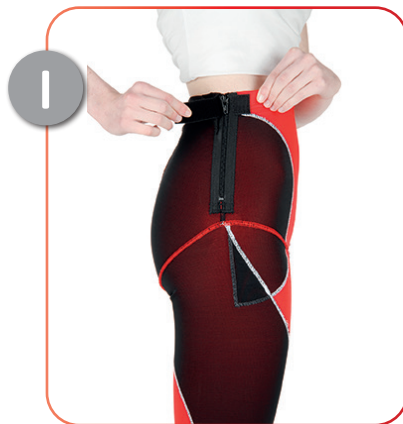

Løsne festene hvis de finnes.



Løsne kroppsglidelåsen hvis den er tilstede. Løsne ankelglidelåsen hvis den er tilstede.

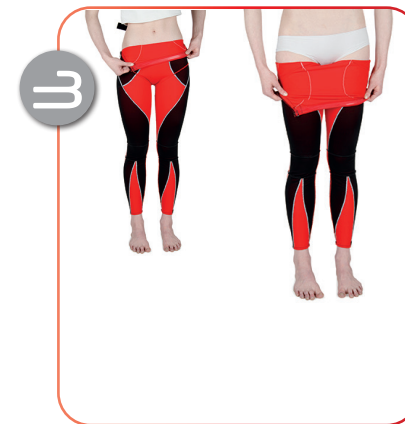

Rull shortsken nedover mot knærne, og trekk den forsiktig fra vrangsiden og ut.



Sett deg ned og fortsett å rulle leggingsen ned mot knærne.



Sett deg ned og fortsett å rulle leggingsen ned mot knærne.



Rull leggingsen ned til ankene på begge bena.



Fjern hver fot fra leggingsen.

DMO® bruksanvisning for måltipasset benerme

Slik setter du på DMO® benerme – med eller uten tilbehør.

Pasienten må sette eller legge seg ned for å sikre balanse og sikkerhet.

Forholdsregler:

- Fjern klokker og smykker før ortosen settes på.
- forsikre deg om at glidelåsene befinner seg på utsiden av huden før du trekker de opp, og at de ikke ruller tilbake.
- leggings skal aldri brukes om natten (med mindre det diskuteres med en lege eller fysioterapeut. Noen EDS-pasienter kan ha nytte av nattplagg, men dette må være bekreftet før evt. bruk) eller når brukeren er syk eller har feber.
- hvis det er bekymringer med passform, dvs. at ekstremiteter blir blå eller føles kalde, fjern plagget og informer det kliniske teamet umiddelbart for videre evaluering.

Slik sjekker du passformen:

- leggingsen skal ha en stram passform, men du skal kunne plassere pekefingeren under underkanten av leggingsen og midjen.



Fjern ortosen fra emballasjen.



Påfør silkefotapplikatoren. Hvis forespurt og tilstede.



Trekk benermet forsiktig opp mot kneet.




Fjern deretter silkeapplikatoren fra foten.



For benermer uten fester, trekk benermet forsiktig opp til låret og sørg for at det øverste silikonbåndet er på riktig sted øverst på benet.




Forsikre deg om at silikonet er i kontakt med huden på toppen av ortosen.

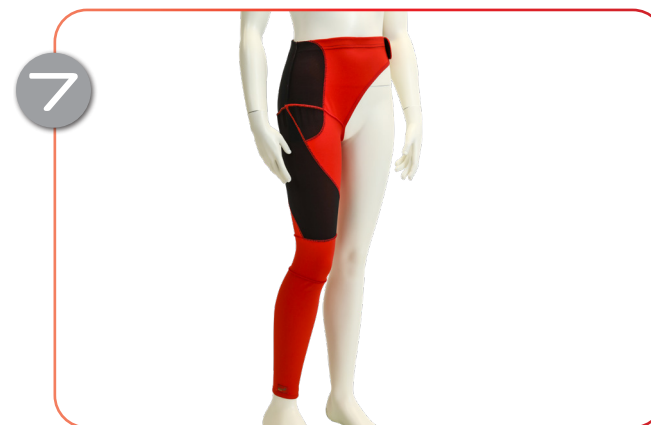

For benerme med fester, trekk ermet forsiktig opp mot hoften. Forsikre deg om at du har trukket leggingsen forsiktig opp til låret før du prøver å trekke den over hoftene og kroppen. Fest nå borrelåsfastet på motsatt hofte.

lev livet.

Hvordan bennerme med og uten feste vil se ut når de er på.

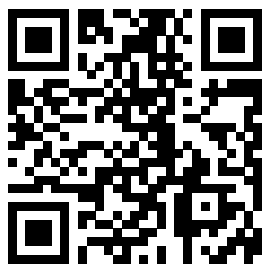

Bruk QR-koden ovenfor for å få tilgang til våre brukervennlige videoer eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare

DMO® bruksanvisning for måtipasset bennerme

Slik tar du av DMO® bennerme – med eller uten fester.

Pasienten må sette eller legge seg ned for å sikre balanse og sikkerhet.



Løsne borrelåsfestet på motsatt hofte.



For bennerme, trekk bennermet forsiktig nedover benet mot kneet og trekk forsiktig med innsiden ut.



Fortsett å rulle bennermet forsiktig av benet, over kneet og av foten.

Erklæring om avhending av enhet

Enhetene produsert av DM Orthotics er klasse 1 / tilpassede ortotiske enheter. Ingen forholdsregler kreves for å avhende DMO-enheter. Materialene som brukes til fremstilling kan kastes i samsvar med lokale ordninger for avhending av klær/materialer. Vi ber deg om å vaske enheten før avhending.

Erklæring om alvorlig hendelse

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med DMO®-enheten din, bør du rapportere den umiddelbart til produsenten (DM Orthotics) og den kompetente myndigheten som er ansvarlig for medisinsk utstyr i landet ditt. I Norge til dette være Legemiddelverket.

Produsent



Pasientidentifikasjon



Produkt-/modell-ID




Produsert i Storbritannia



Distributør




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederland

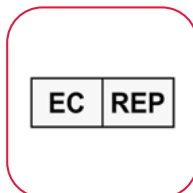

Navn på lege



Bestillingsnummer

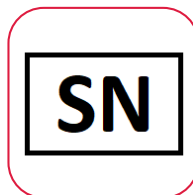

Medisinsk utstyr



Vær oppmerksom på at brukerendring ikke anbefales, og ved å endre ortosen selv, kan garantien bli påvirket eller erklært ugyldig. Kontakt din kliniske spesialist eller DM Orthotics for informasjon om endringer og produktmodifikasjoner.



Produsent:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Storbritannia
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Designet og konstruert i Storbritannia

DM28 – 5054522000142 (UDI-DI)
DM30 – 5054522000166 (UDI-DI)
DM31 – 5054522000173 (UDI-DI)
DM32 – 5054522000180 (UDI-DI)



Produsent: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederland