

live your life.



Dokument z informacjami dla pacjenta dotyczący stosowania:
Kamizelka i kostium DMO® na indywidualne zamówienie



www.dmorthotics.com

Nasze produkty

Nasze wykonane na zamówienie ortezy DMO® (Dynamic Movement Orthoses®) wykorzystują miękką, elastyczną tkaninę elastomerową, która zapewnia ściśle dopasowanie i wytwarza siły kompresji w celu wzmocnienia proprioceptywnego sprzężenia zwrotnego. Ten podstawowy materiał jest lekki, oddychający i mocny.

W połączeniu z panelami wzmacniającymi wykonanymi z materiału powernet zapewnia wytrzymałość i stabilność tam, gdzie jest to wymagane, poprawiając postawę i biomechanikę.

Nasze ortezy szyte na miarę działają dzięki strategicznie rozmieszczonym wzmocnieniom, które układają ciało w lepszej postawie. Ten nowy stan biomechaniczny w połączeniu ze wzmocnioną propriocepcją stymuluje i dostosowuje układ neurosensoryczny, trenując mięśnie do pracy z lepszym napięciem, siłą i wydajnością. DMO®pomaga zarówno dorosłym, jak i dzieciom zarządzać fizycznymi konsekwencjami ich chorób neurologicznych, mięśniowo-szkieletowych i genetycznych.

Wykonywane na zamówienie produkty DMO® są szyte ma miarę, a wszystkie mocowania, otwory i wzmocnienia są indywidualnie określone zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi i preferencjami każdego pacjenta.

Skontaktuj się z nami

Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach DMO®, skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub dystrybutorem DMO® lub bezpośrednio z firmą DM Orthotics, aby dowiedzieć się, kto nim jest.

E-mail: admin@dmorthotics.com Internet: www.dmorthotics.com

Tel.: +44 (0) 1209 219205

W jaki sposób nasze produkty mogą być wykorzystywane przez pacjentów?

Ortezy DM Orthotics wykonane na zamówienie są przeznaczone do **wyłączonego użytku jednego konkretnego pacjenta** w celu wspierania i korygowania postawy oraz prawidłowego ustawienia stawów. Nie powinny być noszone przez inne osoby, dla których nie zostały indywidualnie zmierzone i przepisane.

Wszystkie wykonane na zamówienie ortezy DM Orthotics są wyrobami medycznymi zgodnie z definicją EU MDR (2017/745) i zostały zgłoszone

jako zgodne z przepisami zgodnie z załącznikiem II i III EU MDR, są objęte definicją wyrobu ortopedycznego: orteza, szyna lub inne sztuczne urządzenie zewnętrzne służące do podparcia kończyn lub kręgosłupa lub do zapobiegania lub wspomagania wykonywania ruchu.

Wyroby są wykonane na zamówienie (zgodnie z załącznikiem XIII MDR) i spełniają obowiązujące wymagania MDR (rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych) (2017/745): Produkt wykonany na zamówienie

Data wydania

Nasze wykonywane na zamówienie urządzenia są produkowane zgodnie z określonymi zaleceniami i będą opatrzone datą produkcji na załączonym formularzu deklaracji, który jest wysyłany wraz z produktem. Jest to informacja, którą użytkownik końcowy może zachować w swojej dokumentacji.

Spis treści

●Instrukcja użytkowania	P3
●Instrukcja prania	P4
●Przeciwwskazania i środki ostrożności	P5

Kostium na indywidualne zamówienie P6

●Przeznaczenie	P6
●Grupa docelowa pacjentów	P6
●Docelowi użytkownicy	P6
●Skuteczność dla pacjentów	P7
●Korzyści kliniczne	P7
●Stosowanie z innymi ortezami	P7
●Jak zakładać i zdejmować	P10

Kamizelka na indywidualne zamówienie P6

●Przeznaczenie	P6
●Grupa docelowa pacjentów	P6
●Docelowi użytkownicy	P6
●Skuteczność dla pacjentów	P7
●Korzyści kliniczne	P7
●Stosowanie z innymi ortezami	P7
●Jak zakładać i zdejmować	P8

●Deklaracja dotycząca utylizacji urządzenia	P14
●Oświadczenie dotyczące poważnego incydentu	P14
●Objaśnienie użytych symboli	P15

Instrukcja użytkowania

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących konserwacji. Dbając o ortezę, **można przedłużyć jej żywotność i zapobiec uszkodzeniom.**

ZALECANIE DZIAŁANIA

- Należy zakładać i zdejmować ortezę zgodnie z zaleceniami terapeuty/dostawcy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.dmorthotics.com/productcare
- Zakładając i zdejmując ortezę, należy zachować ostrożność i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej broszurze — nieostrożne zakładanie i zdejmowanie ortozy oraz długie paznokcie mogą spowodować jej uszkodzenie.
- Ważne jest, aby wydłużać czas noszenia zgodnie z indywidualnymi instrukcjami.
- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji prania, w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.

NIEZALECANE DZIAŁANIA

- Nie należy gwałtownie zakładać ani zdejmować produktu wykonanego na miarę - może to spowodować uszkodzenie produktu w postaci zaciągnięć, rozdarć lub dziur w materiale.
- Nie należy zakładać ani zdejmować produktu, dotykając go długimi paznokciami — może to również spowodować uszkodzenie materiału.

KWESTIE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Należy **NATYCHMIAST** skontaktować się z terapeutą/dostawcą, jeśli produkt staje się naprawdę ciasny, powoduje czerwone ślady lub pojawiły się w nim zaciągnięcia i/lub dziury.

Produkty DMO® zostały zaprojektowane w celu uzupełnienia terapii i ćwiczeń fizycznych, dlatego nie należy ich zdejmować do ćwiczeń, chyba że zaleci to terapeuta lub istnieją inne dolegliwości, w których mogą one pomóc.

Czas noszenia

ZALECANIE DZIAŁANIA

- Należy powoli wydłużać czas noszenia ortozy w ciągu pierwszego tygodnia, jak opisano poniżej, podwajając ilość czasu każdego dnia, aż orteza będzie noszona przez cały dzień.
 1. dzień – 1 godzina
 2. dzień – 2 godziny
 3. dzień – 4 godziny
 4. dzień – 8 godzin
 5. dzień – cały dzień w ciągu dnia. Następnie należy nosić ortezę codziennie w ciągu dnia.

NIEZALECANE DZIAŁANIA

- Nie należy nosić ortozy od razu przez cały dzień. Czas noszenia musi być wydłużany, co pozwoli monitorować wrażenia czuciowe, zmiany biomechaniczne i dopasowanie.
- Nie należy zakładać produktu DMO na noc, chyba że jest to zalecane przez lekarza lub specjalistę, np. w przypadku pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa (EDS), gdzie może to być korzystne.

Instrukcja prania

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących konserwacji. Dbając o ortezę, **można przedłużyć jej żywotność i zapobiec uszkodzeniom**.

ZALECANIE DZIAŁANIA


- Ortezę należy prać co najmniej co 2–3 dni.
- Ortezę można prać ręcznie w chłodnej wodzie lub prać w pralce w temperaturze 30 stopni.
- Należy stosować tylko krótkie wirowanie lub zawinąć produkt w suchy ręcznik, aby usunąć nadmiar wilgoci.
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przez noc, wieszając w pomieszczeniu.

NIEZALECANE DZIAŁANIA

- NIE suszyć w silnym bezpośrednim świetle słonecznym lub na grzejniku.
- NIE WYKRĘCAĆ – produkt będzie się rozciągać i spowoduje to uszkodzenie materiałów.
- NIE PRASOWAĆ.
- NIE STOSOWAĆ WYBIELACZA.
- NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE.
- NIE UŻYWAĆ PŁYNU DO PŁUKANIA TKANIN.
- NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ – produkt się skurczy.

Aby uzyskać dalszą pomoc i wsparcie, dodaliśmy informacje na temat sposobu zakładania i zdejmowania ortezy na naszej stronie internetowej: www.dmorthotics.com/productcare.

Regularna i prawidłowa pielęgnacja ortezy pozwala zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i zachować elastyczność materiału. Jeśli orteza jest powlekana srebrem, należy ponownie nanieść powłokę po 100 praniach, ponieważ jony srebra zaczynają się rozpadać po 50 praniach.

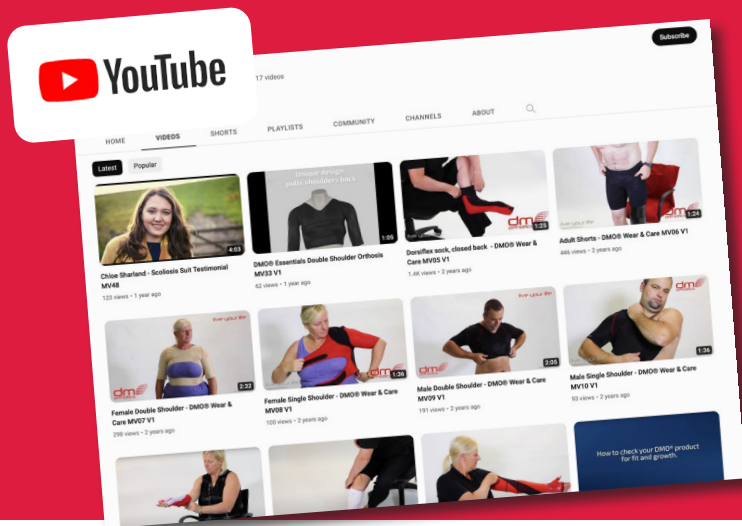

Noszenie naszych produktów

Stworzyliśmy szereg przewodników wideo, aby pomóc naszym klientom jak najlepiej wykorzystać ich produkt. Przewodniki te zawierają pomocne wskazówki i porady dotyczące noszenia naszych produktów oraz tego, jak najlepiej o nie dbać podczas zakładania i zdejmowania.

Aby obejrzeć przewodniki, należy odwiedzić stronę: www.dmorthotics.com/productcare

Produkty DMO® powinny być noszone na gołą skórę. Ważne jest, aby powoli wydłużać czas noszenia w ciągu pierwszego tygodnia, podwajając ilość czasu każdego dnia, aż do momentu noszenia produktu przez cały dzień, np.

PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / UWAGI

Przeciwwskazania

Nie ma znanych przeciwwskazań do stosowania produktów DMO®. Ocenę produktu DMO® wykonanego na zamówienie powinien przeprowadzić upoważniony lekarz posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Środki ostrożności / uwagi

Poniżej znajduje się lista możliwych środków ostrożności, które należy rozważyć przed wydaniem recepty na produkt DMO® wykonany na zamówienie. Należy to omówić z wykwalifikowanym personelem medycznym, który może zasugerować alternatywny produkt DMO® lub zmianę preferowanego produktu DMO®.

Słaba regulacja temperatury

Produkt DMO nie ma wpływu na ośrodek regulacji temperatury ciała. Jednak produkt DMO należy traktować jako warstwę odzieży, a warstwy odzieży należy odpowiednio dostosować do gorącego lub zimnego klimatu. Można wprowadzić korekty do zaleceń, takie jak skrócenie nogawek i rękawów, aby poprawić kontrolę ciepła.

Pierwotne zaburzenia krążenia

Niektóre pierwotne problemy z oddychaniem, w których mięśnie stają się coraz słabsze z powodu pogorszenia stanu nerwów/mięśni, będą wymagały starannego rozważenia i mogą wymagać omówienia z lekarzem prowadzącym pacjenta — chociaż specyfikacja kombinezonu może zostać zmieniona, aby to uwzględnić. Wtórne problemy z krążeniem związane z porażeniem mózgowym mogą ulec poprawie dzięki lepszemu postawie tułowia/ciała i lepszemu ułożeniu żeber.

Choroby skóry

Choroby skóry, które mogą się zaostrzyć w wyniku ścisłego kontaktu z materiałami syntetycznymi przez dłuższy czas, mogą wymagać dalszej konsultacji z personelem medycznym, który nadzoruje leczenie dermatologiczne pacjenta, ale rzadko sytuacja taka stanowi przeciwwskazanie.

Kruchość układu kostnego / kruchość kości

W przypadku niektórych schorzeń produkt DMO® może być odpowiedni, ale należy to omówić z lekarzem prowadzącym. W preferowanym produkcie można wprowadzić zmiany, takie jak dodanie zamków błyskawicznych lub zatrzasków lub użycie krótkich rękawów lub nogawek zamiast długich rękawów lub nogawek.

Gastrostomia, stomia i inne wymagania medyczne Możemy wyprodukować produkt na zamówienie ze specjalnym otworem na gastrostomię, stomię, cewnik dopęcherzowy itp. Taki otwór zostanie dodany na etapie dopasowywania, aby zapewnić precyzyjne umieszczenie. Należy omówić tę kwestię z lekarzem, który może uzyskać dalsze porady od doświadczonego zespołu klinicznego firmy DMO®.

Kamizelka i kostium DMO®

Przeznaczenie

Przeznaczeniem kamizelek DM04/05 i kostiumów DM06/07 DM Orthotics jest zapewnienie stabilizacji i korekty ułożenia tułowia, ramion, kończyn górnych, a w przypadku wyboru kostiumu również pasa miednicy.

Wskazania

Dzieci lub dorośli, u których występuje słabe lub wysokie napięcie mięśniowe, które wymaga stabilizacji zmienionych chorobowo stawów, a także korekty ustawienia stawów/tułowia. Taka korekta może pomóc w funkcjonowaniu i zapobieganiu przykurczom. Kamizelki i kostiumy ortopedyczne mogą pomóc zmniejszyć ból i kontrolować zmęczenie.

Uwagi

Niektóre zaburzenia krążenia mogą być przeciwwskazaniem i może być wymagana dalsza konsultacja z kardiologiem pacjenta.

Grupa docelowa pacjentów

Dorośli lub dzieci, u których występuje słabe lub wysokie napięcie mięśniowe i którzy wymagają pomocy w utrzymaniu prawidłowej postawy i ułożenia tułowia, ramion, kończyn górnych lub, w zależności od długości kamizelki lub kostiumu, pasa miednicy.

Może być wymagana pomoc opiekuna przy zakładaniu i zdejmowaniu kamizelki lub kostiumu, w zależności od możliwości fizycznych użytkownika.

Docelowi użytkownicy

Kamizelka i kostium wymagają wystawienia recepty i sporządzenia specyfikacji przez kompetentnego pracownika służby zdrowia, zazwyczaj wykwalifikowanego ortopedę, fizjoterapeutę lub

terapeutę zajęciowego, który przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie przepisywania i stosowania dynamicznych ortez ruchowych. Taki kompetentny pracownik służby zdrowia będzie również zobowiązany do oceny dopasowania kombinezonu i zapewnienia dalszych porad dotyczących specyfikacji w celu poprawy dopasowania kombinezonu w razie potrzeby.

Użytkownikiem kamizelki i kostiumu jest zazwyczaj osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego.

Opiekun użytkownika, który może uczestniczyć w zakładaniu i zdejmowaniu kombinezonu, praniu kombinezonu i zgłaszaniu wszelkich problemów z kombinezonem, jest zazwyczaj osobą nieposiadającą wykształcenia medycznego.

Opisywany produkt jest szyty na miarę i wymaga sporządzenia specyfikacji przez pracownika służby zdrowia przeszkolonego w zakresie stosowania ortez Dynamic Movement Orthoses® (DMO®). Będzie to wymagało wykonania pomiarów, do wykonania których pracownik służby zdrowia zostanie przeszkolony przez firmę DM Orthotics. Przeszkolony pracownik służby zdrowia musi również przepisać szereg różnych paneli wzmacniających.



Skuteczność w przypadku:

- porażenia mózgowego
- udaru mózgu
- stwardnienia rozsianego
- ataksji mózdkowej
- zespołu Ehlersa-Danlosa
- i innych

Korzyści:

- cofnięcie barku
- poprawa pozycji stawu barkowego
- poprawa postawy
- poprawa funkcji dystalnych
- wsparcie korpusu
- panele wzmacniające zapewniające wytrzymałość i stabilność

Dodatkowe funkcje:

- dostępne z długim lub krótkim rękawem
- różne opcje zapinania na zamek błyskawiczny
- materiał uciskowy zapewniający wygodę i swobodę ruchów
- możliwość noszenia pod ubraniem



Środki ostrożności:

- Przed zaciągnięciem zamków błyskawicznych należy się upewnić, że zamki znajdują się na skórze i nie są podwinięte.
- Kamizelkę należy zdjąć, jeśli pacjent jest chory lub ma gorączkę.
- Jeśli występują jakiegokolwiek problemy z kamizelką, np. sinienie kończyn lub wrażenie nadmiernego zimna przy dotyku, należy natychmiast zdjąć kamizelkę i poinformować o tym personel medyczny w celu przeprowadzenia dalszej oceny.

Instrukcje zakładania kamizelki DMO®

Jak założyć kamizelkę DMO®.

Pacjent musi usiąść, aby zachować równowagę i bezpieczeństwo oraz upewnić się, że kamizelka jest prawidłowo założona.



Włożyć jedną rękę do rękawa.



Podciągnąć dokładnie do ramienia.



Chwycić ortezę z tyłu i włożyć drugie ramię do drugiego rękawa.



Pociągnąć przedni panel wokół tułowia.




Zapiąć przedni zamek błyskawiczny, uważając, aby skóra nie została przytrzaśnięta.



Wygląd kamizelki po prawidłowym założeniu. Należy pamiętać, że kamizelka może być dłuższa niż na zdjęciu.


Jak powinna wyglądać
kamizelka po założeniu:

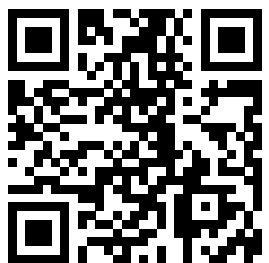

Aby uzyskać dostęp do naszych
filmów dotyczących noszenia i
pielęgnacji, należy skorzystać
z powyższego kodu QR lub
odwiedzić stronę:
www.dmorthotics.com/productcare

Jak zdejmować kamizelkę DMO®.

Pacjent musi usiąść, aby zachować równowagę i bezpieczeństwo.

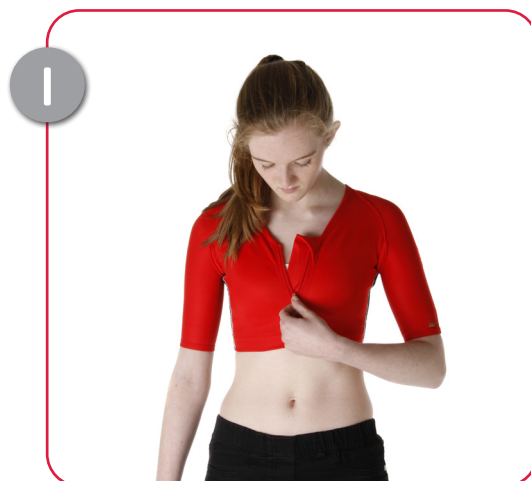

1 Rozpiąć przedni zamek błyskawiczny, uważając,
aby nie przytrzasnąć skóry.



2 Rozchylić kamizelkę z przodu.



3 Wyjąć jedno ramię z ortezy.



4 Wyjąć drugie ramię i zsunąć ortezę
z ręki.

Sprawdzanie dopasowania:

- Orteza powinna być ciasna, ale powinno być możliwe włożenie palca wskazującego pod spód rękawów i nogawek ortezy, a także wokół dekoltu.
- Szwy/zakończenia ortezy mogą pozostawić niewielkie wgłębienia w skórze po zdjęciu, ale jeśli jakiegolwiek ślady są zbyt czerwone po 20–30 minutach od zdjęcia, może to oznaczać, że orteza jest zbyt ciasna.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do odpowiedniego dopasowania należy niezwłocznie powiadomić terapeutę, ponieważ orteza zostanie bezpłatnie zmodyfikowana tylko w ramach naszej gwarancji.

Instrukcje zakładania kostiumu DMO®

Jak założyć kostiumu DMO®.

Pacjent musi znajdować się w pozycji siedzącej lub leżącej, aby zachować równowagę i bezpieczeństwo oraz upewnić się, że kostium jest prawidłowo założony.

Środki ostrożności:

- Przed zaciągnięciem zamków błyskawicznych należy się upewnić, że zamki znajdują się na skórze i nie są podwinięte.
- Kostium należy zdjąć, jeśli pacjent jest chory lub ma gorączkę.
- Jeśli występują jakiegokolwiek problemy z kamizelką, np. sinienie kończyn lub wrażenie nadmiernego zimna przy dotyku, należy natychmiast zdjąć kamizelkę i poinformować o tym personel medyczny w celu przeprowadzenia dalszej oceny.



1 Wyjąć z opakowania i rozpiąć przedni i tylny zamek błyskawiczny oraz zatrzaski na pasku między nogami.



2 Wsunąć stopy w otwór w kostiumie i delikatnie podciągnąć do kolan.



3 Następnie delikatnie podciągnąć kostium do góry na biodra.



4 Podciągnąć główną część kostiumu do klatki piersiowej.



5 W przypadku kostiumu z rękawami należy wsunąć dłoń/ramię w rękaw i delikatnie pociągnąć do góry przez ramię.



6 Powtórzyć z drugim rękawem.

Instrukcje zakładania kostiumu DMO®

Jak założyć kostiumu DMO®.

Pacjent musi znajdować się w pozycji siedzącej lub leżącej, aby zachować równowagę i bezpieczeństwo.

Środki ostrożności:

- Przed zaciągnięciem zamków błyskawicznych należy się upewnić, że zamki znajdują się na skórze i nie są podwinięte.
- Kostium należy zdjąć, jeśli pacjent jest chory lub ma gorączkę.
- Jeśli występują jakiegokolwiek problemy z kamizelką, np. sinienie kończyn lub wrażenie nadmiernego zimna przy dotyku, należy natychmiast zdjąć kamizelkę i poinformować o tym personel medyczny w celu przeprowadzenia dalszej oceny.



7 W przypadku kostiumu bez rękawów należy wsunąć dłoń/ramię w otwór i delikatnie pociągnąć do góry na ramię.




8 Powtórzyć z drugą ręką.



9 Najpierw zapiąć przedni zamek błyskawiczny.




10 Zapiąć pas w kroku.

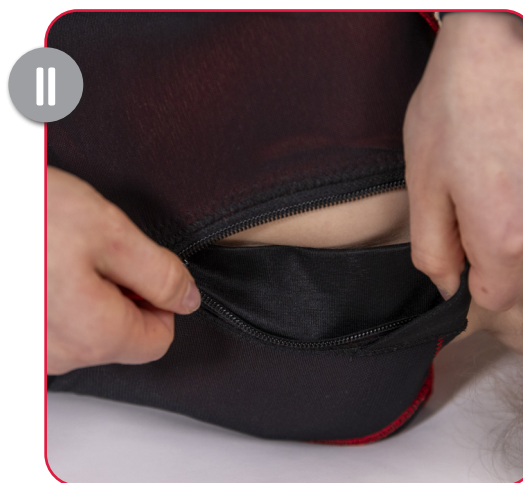

11 Obrócić dziecko na bok i na końcu zapiąć zamek błyskawiczny z tyłu.

Jak powinien wyglądać kostium po założeniu:

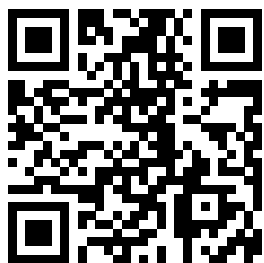

Aby uzyskać dostęp do naszych filmów dotyczących noszenia i pielęgnacji, należy skorzystać z powyższego kodu QR lub odwiedzić stronę:

www.dmorthotics.com/productcare

Jak zdejmować kostium DMO®.

Pacjent musi znajdować się w pozycji siedzącej lub leżącej, aby zachować równowagę i bezpieczeństwo podczas zdejmowania kostiumu.



Najpierw rozpiąć tylny zamek błyskawiczny



Rozpiąć pasek w kroku.



Rozpiąć przedni zamek błyskawiczny.



Wyjąć jedno ramię z rękawa kostiumu.




Wyjąć drugie ramię z rękawa kostiumu.

Sprawdzanie dopasowania:

- Orteza powinna być ciasna, ale powinno być możliwe włożenie palca wskazującego pod spód rękawów i nogawek ortezy, a także wokół dekoltu.
- Szwy/zakończenia ortezy mogą pozostawić niewielkie wgłębienia w skórze po zdjęciu, ale jeśli jakiegokolwiek ślady są zbyt czerwone po 20–30 minutach od zdjęcia, może to oznaczać, że orteza jest zbyt ciasna.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do odpowiedniego dopasowania należy niezwłocznie powiadomić terapeutę, ponieważ orteza zostanie bezpłatnie zmodyfikowana tylko w ramach naszej gwarancji.

Jak powinien wyglądać kostium po założeniu:

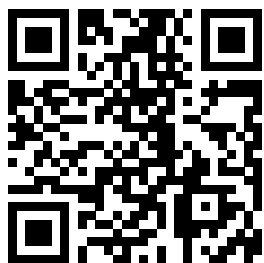

Aby uzyskać dostęp do naszych filmów dotyczących noszenia i pielęgnacji, należy skorzystać z powyższego kodu QR lub odwiedzić stronę:
www.dmorthotics.com/productcare

Jak zdejmować kostium DMO®.

Pacjent musi znajdować się w pozycji siedzącej lub leżącej, aby zachować równowagę i bezpieczeństwo podczas zdejmowania kostiumu.



Delikatnie pociągnąć kostium w dół w kierunku bioder, wywijając go na zewnątrz.



Dalej delikatnie ciągnąć w dół nóg.



Ściągnąć z nóg.

Deklaracja dotycząca utylizacji urządzenia

Urządzenia produkowane przez DM Orthotics są urządzeniami ortopedycznymi klasy 1 / wykonywanymi na zamówienie. W przypadku utylizacji urządzeń DMO® nie są wymagane żadne środki ostrożności. Materiały użyte do produkcji można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odzieży/tkanin. Prosimy jednak o wypranie produktu przed jego utylizacją.

Oświadczenie dotyczące poważnego incydentu

Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego z urządzeniem DMO®, należy natychmiast zgłosić to producentowi (DM Orthotics) i właściwemu organowi odpowiedzialnemu za wyroby medyczne w danym państwie członkowskim, na przykład w Wielkiej Brytanii będzie to Agencja Regulacyjna Leków i Produktów Medycznych (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA).

Producent



Dane identyfikacyjne pacjenta



Identyfikator produktu/modelu



Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii



Dystrybutor



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Holandia



Nazwisko lekarza



Numer zamówienia



Urządzenie medyczne



Należy pamiętać, że modyfikowanie ortezy przez użytkownika nie jest zalecane, a samodzielne modyfikowanie ortezy może mieć wpływ na gwarancję lub może ją unieważnić. Prosimy o kontakt ze swoim lekarzem specjalistą lub firmą DM Orthotics w celu uzyskania informacji na temat zmian i modyfikacji produktu.



Producent:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Wielka Brytania
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii

DM04 - 5054522000036 (UDI-DI)
DM05 - 5054522000043 (UDI-DI)
DM06 - 5054522000050 (UDI-DI)
DM07 - 5054522000067 (UDI-DI)



Producent: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS

EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Holandia