

live your life.



Documento de Informações sobre o Uso para o Utente:
Leggings, Perneiras e Calções Personalizados DMO®



www.dmorthotics.com

Os nossos produtos

As nossas Dynamic Movement Orthoses® personalizadas usam um tecido de elastómero macio e flexível que garante um bom ajuste, criando forças de compressão que melhoram a propriocektividade. Este tecido de base é leve, respirável e resistente,

sendo combinado com painéis de reforço em material de rede elástica para fornecer força e estabilidade, quando necessário, melhorando a postura e o alinhamento biomecânico.

As nossas ortóteses personalizadas funcionam usando reforços estrategicamente localizados, que posicionam o corpo num melhor alinhamento postural. Este novo alinhamento biomecânico combinado com propriocepção melhorada, estimula e ajusta o sistema neuro-sensorial, treinando os músculos para trabalhar com tónus, força e desempenho melhorados.

DMO® ajudam tanto os adultos como as crianças a gerir os efeitos físicos de doenças neurológicas, músculo-esqueléticas e genéticas.

Os produtos personalizados DMO® são feitos por medida e todos os fechos/elementos de fixação, aberturas e reforços são prescritos individualmente de acordo com as necessidades funcionais e preferências de cada utente.

Fale connosco

Para mais informações sobre as nossas gamas de produtos DMO®, contacte o seu fornecedor ou distribuidor local da DMO® ou a DM Orthotics diretamente para obter os dados de contacto destes.

E-mail: admin@dmorthotics.com site: www.dmorthotics.com

telefone: +44 (0) 1209 219205

Como pretendemos que os nossos produtos sejam utilizados pelos utentes

As ortóteses personalizadas da DM Orthotics destinam-se a **ser usadas exclusivamente por um único utente específico** para apoiar e corrigir a postura e o alinhamento das articulações. Não devem ser usadas por outras pessoas a quem não tenham sido tiradas as medidas e para as quais não tenham sido individualmente prescritas.

Todas as ortóteses personalizadas da DM Orthotics são dispositivos médicos como definido pelo MRD da UE (Regulamento relativo aos dispositivos médicos) (2017/745) e são declarados em conformidade com os regulamentos de acordo com os anexos II e III do MRD da UE, sendo abrangidas pela definição de dispositivo ortótico: um colete, uma tala ou outro dispositivo externo artificial que serve para apoiar os membros ou a coluna vertebral ou para prevenir ou auxiliar o movimento relativo.

Os dispositivos são feitos por medida (de acordo com o Anexo XIII do MDR) e cumprem os requisitos aplicáveis do MDR (Regulamento relativo aos dispositivos médicos) (2017/745): Produto feito por medida

Data de emissão

Os nossos dispositivos personalizados são prefabricados de acordo com uma prescrição específica e têm uma data de fabrico que é indicada no formulário de declaração enviado com o produto. Esta informação destina-se aos registos do utilizador final.

Índice

● Instruções de uso	P3
● Instruções de lavagem	P4
● Contraindicações e precauções	P5

Leggings, Perneiras e Calções Personalizados P6

● Finalidade prevista	P6
● População de utentes prevista	P7
● Utilizadores previstos	P7
● Eficácia para os utentes	P8
● Utilização com outras ortóteses	P7

Leggings Personalizadas P6

● Como colocar e retirar	P9
--------------------------	----

Perneiras Personalizadas P6

● Como colocar e retirar	P9
--------------------------	----

Calções Personalizados P6

● Como colocar e retirar	P9
--------------------------	----

● Declaração de eliminação do equipamento	P14
● Notificação de incidente grave	P14
● Explicação dos símbolos utilizados	P15

Instruções de uso

Siga atentamente as instruções de conservação. Se tiver os devidos cuidados com a sua ortótese, irá **prolongar-lhe a vida útil e evitar danos**.

O QUE DEVE FAZER

- Coloque e retire a ortótese conforme aconselhado pelo seu terapeuta/fornecedor. Consulte o site: www.dmorthotics.com/productcare
- Seja cuidadoso ao colocar e retirar a ortótese, siga cuidadosamente as instruções deste folheto; colocações e remoções bruscas e com força, assim como unhas compridas podem causar danos.
- É importante ir aumentando gradualmente o tempo de uso, de acordo com as instruções que lhe foram dadas para a sua situação específica.
- Cumprir as instruções de lavagem cuidadosamente, caso contrário a ortótese pode ser danificada.

O QUE NÃO DEVE FAZER

- Não coloque nem retire o produto feito por medida de forma brusca, pois tal pode danificar o produto com malhas puxadas, rasgões ou buracos no tecido.
- Não coloque nem retire o produto com recurso a unhas compridas, pois pode danificar o tecido.

PROBLEMAS COM AJUSTE OU SEGURANÇA

Contacte o seu terapeuta/fornecedor **IMEDIATAMENTE** se a ortótese começar a ficar muito apertada, a causar marcas vermelhas ou a apresentar malhas puxadas e/ou buracos.

Os produtos DMO® foram concebidos para complementar a terapia e o exercício físico, pelo que não devem ser removidos para a prática de exercício físico, a menos que seja aconselhado pelo seu terapeuta ou caso tenha quaisquer outros problemas com os quais ele o possa ajudar.

Tempo de uso

O QUE DEVE FAZER

- Aumentar gradualmente o tempo de uso ao longo da primeira semana, como indicado abaixo, duplicando o tempo diariamente até usar a ortótese durante todo o dia.

por exemplo, 1.º dia - 1 hora

2.º dia - 2 horas

3.º dia - 4 horas

4.º dia - 8 horas

5.º dia - o dia inteiro, no período diurno. Posteriormente, todos os dias, o dia inteiro, no período diurno.

O QUE NÃO DEVE FAZER

- Começar logo a usar a ortótese o dia inteiro. O tempo de uso tem de ser aumentado de forma gradual para permitir a monitorização do input sensorial, das alterações biomecânicas e do ajuste.
- Não use leggings/calções DMO durante a noite, exceto se recomendado pelo médico ou profissional de saúde, por exemplo, no caso de doentes com Síndrome de Ehlers-Danlos (SED), em que tal pode ser benéfico.

Instruções de lavagem

Siga atentamente as instruções de conservação. Se tiver os devidos cuidados com a sua ortótese, irá **prolongar-lhe a vida útil e evitar danos**.

O QUE DEVE FAZER


- A ortótese deve ser lavada a cada 2 a 3 dias.
- A ortótese pode ser lavada à mão com água fria ou à máquina a 30 graus.
- Usar o ciclo de centrifugação curto da máquina de lavar ou uma toalha seca para remover o excesso de humidade.
- Pendurar no interior e deixar secar completamente durante a noite.

O QUE NÃO DEVE FAZER

- NÃO seque sob luz solar direta e forte ou sobre um radiador.
- NÃO TORÇA – a peça pode deformar e danificar o tecido.
- NÃO PASSAR A ORTÓTESE A FERRO.
- NÃO UTILIZE ALVEJANTE OU BRANQUEADORES.
- NÃO LIMPAR A SECO A ORTÓTESE.
- NÃO UTILIZE AMACIANTE DE ROUPA.
- NÃO SECAR A ORTÓTESE NA SECADORA pois encolherá.

Para ajuda e suporte adicionais, pode consultar no nosso site como colocar e retirar a sua ortótese: www.dmorthotics.com/productcare.

Um cuidado correto e regular da ortótese irá evitar a formação de odores e manter o material maleável. Se a sua ortótese tiver recebido um tratamento com prata, este terá de ser reaplicado após 100 lavagens, dado que os iões de prata começam a dispersar-se após 50 lavagens.

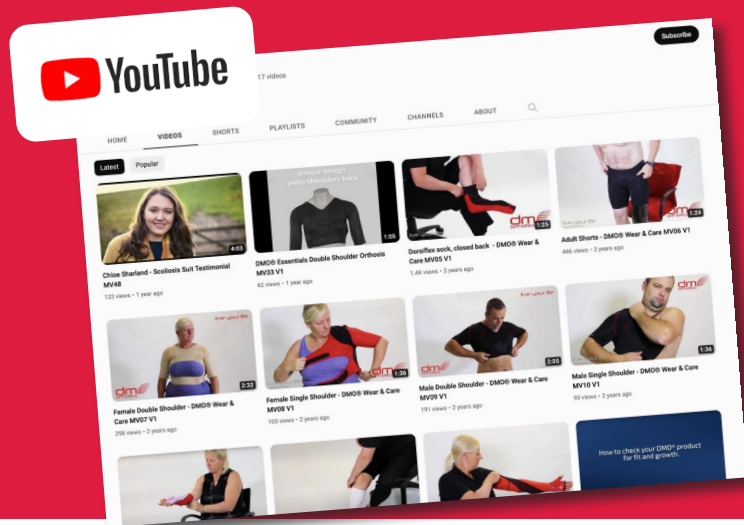

Usar os nossos produtos

Criámos uma série de guias de vídeo para ajudar os nossos clientes a tirar o melhor partido do seu produto. Estes guias incluem conselhos e truques úteis para usar os nossos produtos e os cuidados a ter ao colocá-los e retirá-los.

Para ver os vídeos, visite: www.dmorthotics.com/productcare

Os produtos DMO® devem ser usados junto à pele. É importante aumentar lentamente o tempo de uso ao longo da primeira semana, duplicando o tempo de uso diário até usar o produto durante o dia inteiro, por exemplo.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES/CONSIDERAÇÕES

Contraindicações

Não são conhecidas contraindicações ao uso de um produto DMO®. A avaliação de um produto personalizado DMO® deve ser realizada por um profissional de saúde autorizado com as qualificações profissionais adequadas.

Precauções/considerações

Segue-se uma lista de possíveis precauções a considerar antes de avançar com a prescrição de um produto personalizado DMO®. Esta deve ser discutida com o seu profissional de saúde qualificado, que poderá sugerir um produto DMO® ou a modificação do produto DMO® preferencial.

Termorregulação deficiente

O produto DMO não terá qualquer efeito sobre o centro regulador da temperatura corporal. No entanto, o DMO deve ser encarado como uma camada de vestuário e as camadas de vestuário terão de ser ajustadas em conformidade para climas quentes ou frios. Podem ser feitos ajustes à prescrição, como manga ou perna curtas, para ajudar a melhorar a termorregulação.

Doenças primárias do aparelho circulatório

Certos problemas primários do aparelho respiratório, em que o enfraquecimento dos músculos se deve à deterioração dos nervos/músculos, requerem uma análise cuidadosa e pode ser necessário falar com o médico do utente, embora as especificações do fato possam ser alteradas para ter em conta este facto. Os problemas secundários do aparelho circulatório associados à Paralisia Cerebral podem ser melhorados devido a uma melhor postura do tronco/corpo e a uma melhor posição das costelas.

Problemas de pele

Problemas de pele que possam ser exacerbados pelo contacto direto com materiais sintéticos durante períodos prolongados podem exigir uma consulta adicional com um profissional de saúde a supervisionar o tratamento dermatológico do doente, mas esta situação raramente constitui uma contraindicação.

Fragilidade do esqueleto/ossos frágeis

Algumas doenças podem ser bem suportadas por um produto DMO® mas esta questão deve ser discutida com o seu profissional de saúde. O produto preferencial pode ser modificado, por exemplo, com a adição de fechos de correr ou de molas ou com a utilização de manga ou perna curtas em vez de manga ou perna compridas.

Gastrostomia, estoma e outras necessidades médicas

Podemos fabricar o produto por medida com uma abertura especial para uma sonda de gastrostomia endoscópica percutânea (peg), estoma, cateter suprapúbico, etc. Esta será adicionada na fase de ajuste para garantir uma colocação precisa. Fale com o seu profissional de saúde, o qual poderá aconselhar-se junto da experiente equipa clínica da DMO®.

Leggings, Perneiras e Calções Personalizados DMO®

Finalidade prevista

A finalidade prevista das leggings DM28, das perneiras DM30/31 e dos calções DM32 é alinhar a parte inferior do tronco, a pélvis, as ancas e os membros inferiores. A localização exata do efeito é determinada pela escolha do produto. Melhora a simetria e ajuda na estabilização. As leggings DM28, as perneiras DM30/31 e os calções DM32 proporcionam um nível de suporte não restritivo e altamente eficaz para maximizar a estabilidade pélvica e dos membros inferiores. O produto também ajuda no controlo distal e influencia de forma positiva o tónus muscular para melhorar a função.

Indicações

Crianças ou adultos com tónus muscular baixo ou alto, problemas sensoriais ou de proprioção, falta de estabilidade do "core", da cintura pélvica ou dos membros inferiores. Crianças ou adultos com dor associada a um mau alinhamento ou fadiga causada pela sua incapacidade de manter uma postura pélvica ou dos membros inferiores correta.

Considerações

Em função da altura do suporte do tronco do produto escolhido, deve ter em conta o seguinte.

Certos problemas primários do aparelho respiratório, em que o enfraquecimento dos músculos se deve à deterioração dos nervos/músculos, embora as especificações da ortótese possam ser alteradas para ter em conta este facto.

Os problemas secundários do aparelho circulatório associados à paralisia cerebral podem ser melhorados devido a uma melhor postura do tronco/corpo e a uma melhor posição das costelas. Consulte a página anterior para outras contraindicações/considerações.



População de utentes prevista

Utentes do sexo masculino e feminino, normalmente com idade igual ou superior a dois anos, embora as crianças com menos de dois anos possam beneficiar das leggings DM28, das perneiras DM30/31 e dos calções DM32. Este limite de idade mais baixo foi estabelecido devido ao maior crescimento nesta fase, que exigiria o ajuste da ortótese ou a elaboração de uma nova ortótese, e não devido à incapacidade de satisfazer a finalidade prevista. Não há limite máximo de idade para as leggings DM28, as perneiras DM30/31 e os calções DM32.

As leggings DM28, as perneiras DM30/31 e os calções DM32 podem ajudar a resolver os sintomas de várias patologias, consulte a página 8 (lista não exaustiva).

Os utentes que vão vestir e despir a ortótese eles próprios têm de ter um grau razoavelmente elevado de destreza e de tónus muscular. Se não for esse o caso, será necessário o auxílio de um cuidador para vestir e despir a ortótese.

Utilizadores previstos

As leggings DM28, as perneiras DM30/31 e os calções DM32 requerem prescrição e especificação por um profissional de saúde competente, normalmente um ortesista ou fisioterapeuta qualificado, que tenha recebido formação adequada na prescrição e uso de ortóteses dinâmicas. Esse profissional de saúde competente deverá também avaliar o ajuste do produto e fornecer outros conselhos sobre as especificações para melhorar o ajuste do produto, se necessário.

Normalmente, o utilizador da ortótese é um leigo.

O cuidador do utente, que pode estar envolvido na colocação e retirada da ortótese, na lavagem e na notificação de quaisquer problemas com a ortótese, será normalmente uma pessoa leiga.

O dispositivo em questão é feito por medida e requer especificação por um profissional de saúde com formação na utilização de ortóteses dinâmicas. Para tal, é necessário realizar um conjunto de medições, para as quais o profissional de saúde terá recebido formação dada pela DM Orthotics.

O profissional de saúde qualificado terá também de prescrever uma gama de diferentes painéis de reforço, conforme adequado.



Leggings Personalizadas DMO®

Eficaz para:

- Paralisia cerebral
- Disfunções dos membros inferiores
- Esclerose múltipla
- Síndromes de Ehlers-Danlos
- Alto e baixo tônus muscular
- etc.

Oferece:

- Estabilidade pélvica
- Melhoria no alinhamento das ancas e do joelho
- Melhoria da rotação externa/interna das ancas
- Aumento da consciência sensorial
- Melhoria da postura
- Melhoria da função muscular
- Alívio da dor
- Painéis de reforço para resistência e estabilidade

Características adicionais:

- Abertura opcional na virilha
- Tecido de compressão para conforto e movimento
- Melhoria do posicionamento das pernas
- Uso por baixo da roupa

Calções Personalizados DMO®

Eficaz para:

- Paralisia cerebral
- Esclerose múltipla
- Ataxia
- Baixo tônus muscular
- Lesão Encefálica Adquirida e Traumática
- Síndromes de Ehlers-Danlos
- Padrão de marcha comprometido
- AVC
- Doença de Parkinson
- Coreia de Huntington
- etc.

Oferece:

- Estabilidade pélvica
- Extensão da anca e do joelho
- Redução da rotação externa/interna das ancas
- Aumento da consciência sensorial
- Melhoria da postura
- Melhoria da função muscular
- Redução da dor

Características adicionais:

- Tecido de compressão para conforto e movimento
- Abertura opcional na virilha
- Painéis de reforço para resistência e estabilidade
- Uso por baixo da roupa

Perneira DMO®

Eficaz para:

- Paralisia cerebral
- Disfunções dos membros inferiores
- Esclerose múltipla
- Síndromes de Ehlers-Danlos
- Alto e baixo tônus muscular
- etc.

Oferece:

- Estabilidade pélvica
- Melhoria no alinhamento das ancas e do joelho
- Melhoria da rotação externa/interna das ancas
- Aumento da consciência sensorial
- Melhoria da postura
- Melhoria da função muscular
- Alívio da dor
- Painéis de reforço para resistência e estabilidade

Características adicionais:

- Tecido de compressão para conforto e movimento
- Painéis de reforço para resistência e estabilidade
- Uso por baixo da roupa

Perneira com fixação DMO®

Eficaz para:

- Paralisia cerebral
- Disfunções dos membros inferiores
- Esclerose múltipla
- Síndromes de Ehlers-Danlos
- Alto e baixo tônus muscular
- etc.

Oferece:


- Estabilidade pélvica
- Melhoria no alinhamento das ancas e do joelho
- Melhoria da rotação externa/interna das ancas
- Aumento da consciência sensorial
- Melhoria da postura
- Melhoria da função muscular
- Alívio da dor
- Painéis de reforço para resistência e estabilidade

Características adicionais:

- Tecido de compressão para conforto e movimento
- Painéis de reforço para resistência e estabilidade
- Uso por baixo da roupa

Precauções:

- Remova os relógios e as joias antes de colocar a ortótese.
- Se os calções tiverem um fecho de correr, certifique-se de que as abas de proteção dos fechos de correr estão sobre a pele e não enroladas para os lados, antes de puxar os fechos para cima.
- Os calções devem ser retirados se o utente estiver doente ou tiver febre.
- Se houver algum problema com o ajuste, por exemplo, se as extremidades começarem a ficar azuladas ou demasiado frias ao toque, retire a ortótese e informe imediatamente a equipa clínica para uma avaliação mais aprofundada.

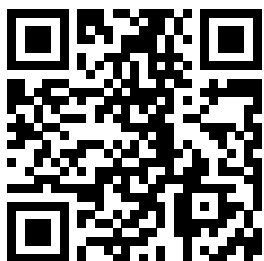

Utilize o código QR acima para aceder aos nossos vídeos sobre o uso e os cuidados ou acesse a: www.dmorthotics.com/productcare

Instruções para vestir os Calções Personalizados DMO®

Como vestir os Calções Personalizados DMO®.

O doente terá de se sentar para garantir o equilíbrio e a segurança e que os calções são bem colocados.



Se os calções forem fornecidos com um fecho de correr na cintura, abra-o antes de os puxar para cima. Agarre nos calções (com a etiqueta na parte de trás) e puxe-os pelas pernas acima (como faria com uns collants). Certifique-se de puxá-los sobre os joelhos e pelas coxas acima antes de começar a puxá-los sobre as ancas.




Puxe os calções até à cintura e feche o fecho de correr, se disponível.

live your life.

Como despir os Calções Personalizados DMO®.

O doente terá de se sentar para garantir o equilíbrio e a segurança e que os calções são removidos corretamente.

Como os calções devem ficar quando estão vestidos:

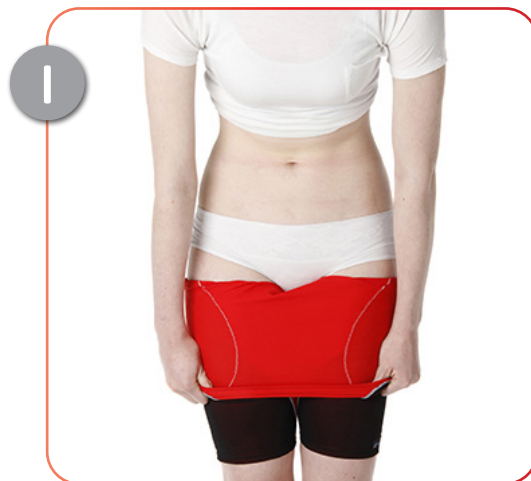

Desenrole os calções pelas pernas em direção aos pés, cuidadosamente virando do avesso. .



Deslize cada perna para fora da ortótese.

Para verificar o ajuste:

- Os calções devem ficar justos ao corpo, mas deve ser possível inserir o indicador sob a costura inferior dos calções e da cintura.
- A costura/os remates da ortótese podem deixar ligeiras marcas na pele, mas se alguma marca estiver excessivamente vermelha decorridos 25-30 minutos após a remoção, então é possível que a ortótese seja demasiado apertada.
- Em caso de dúvida, quanto ao ajuste adequado, notifique o seu terapeuta imediatamente, pois a ortótese só será alterada gratuitamente nas primeiras 6 semanas.

live your life.

Instruções para vestir as Leggings Personalizadas DMO®

Como vestir as Leggings DMO®.

O utente terá de se sentar ou deitar para garantir o equilíbrio e a segurança.

Precauções:

- Remova os relógios e as joias antes de colocar a ortótese.
- Certifique-se de que as abas de proteção dos fechos de correr estão sobre a pele e não enroladas para os lados, antes de puxar os fechos para cima.
- As leggings nunca devem ser usadas durante a noite (exceto sob indicação de um médico ou fisioterapeuta). Alguns utentes com SED podem beneficiar do uso noturno, mas tal deve ser confirmado previamente). Também não devem ser usadas quando o utente estiver doente ou com febre.
- Se houver algum problema com o ajuste, por exemplo, se as extremidades começarem a ficar azuladas ou demasiado frias ao toque, retire a ortótese e informe imediatamente a equipa clínica para uma avaliação mais aprofundada.

Para verificar o ajuste:

- As leggings devem ficar justas ao corpo, mas deve ser possível inserir o indicador sob a costura inferior das leggings e da cintura.



Retire a ortótese da embalagem.



Se houver fechos na parte principal ou nos tornozelos, abra-os primeiro antes de vestir as leggings.



Aplique o aplicador de pé de seda. Se solicitado e fornecido.



Enfie a perna direita na perna direita da ortótese.



Puxe suavemente a perna direita da ortótese em direção ao joelho.



Continue a puxar suavemente na direção do joelho até que a parte inferior da perna direita da ortótese esteja acima do tornozelo.




Retire o aplicador de seda do pé direito.



Aplique o aplicador de seda no pé esquerdo. Consulte a figura 10 relativamente às pernas.

9

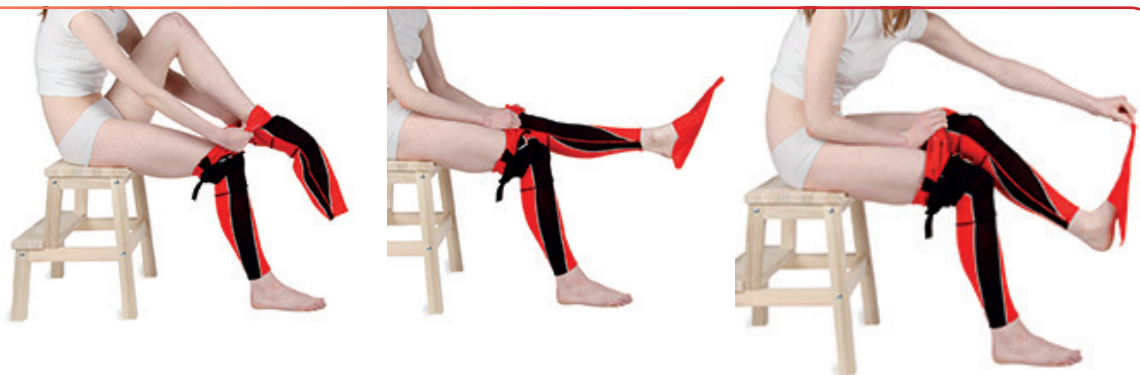

Repita os passos 4 a 7. Em seguida, remova o aplicador de seda do pé. Certifique-se de que puxou suavemente as leggings até às coxas antes de as tentar puxar sobre as ancas e o corpo.

10




Puxe as leggings suavemente para cima na direção das ancas.

11




Certifique-se de que o silicone está em contacto com a pele na parte de cima da ortótese e feche os fechos de correr das pernas.

12

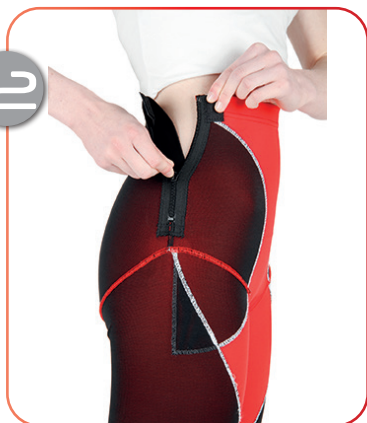

Feche o fecho de correr lateral, se incluído.

13

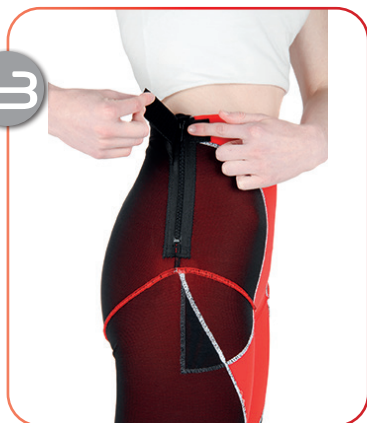

Aperte a tira à frente. Só fornecida se for solicitado um fecho de correr.

14



A imagem mostra a tira presa na frente da ortótese.

15




Como as leggings devem ficar quando vestidas corretamente.

Para verificar o ajuste (Cont.):

- A costura/os remates das leggings podem deixar ligeiras marcas na pele, mas se alguma marca estiver excessivamente vermelha decorridos 25-30 minutos após a remoção, então é possível que a ortótese seja demasiado apertada.
- Em caso de dúvida, quanto ao ajuste adequado, notifique o seu terapeuta imediatamente, pois a ortótese só será alterada gratuitamente nas primeiras 6 semanas.

live your life.

Como as leggings devem ficar quando vestidas

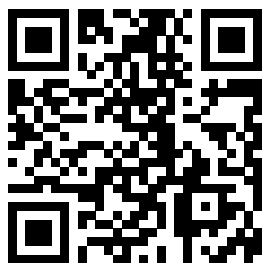


Utilize o código QR acima para aceder aos nossos vídeos sobre o uso e os cuidados ou acesse a: www.dmorthotics.com/productcare

Instruções para vestir as Leggings Personalizadas DMO®

Como despir as Leggings DMO®.


O utente terá de se sentar ou deitar para garantir o equilíbrio e a segurança.

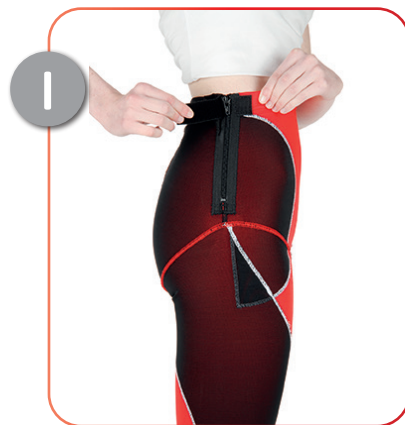

Desprenda a tira, se existente.



Abra o fecho de correr da parte principal, se disponível. Abra os fechos de correr do tornozelo, se disponíveis.

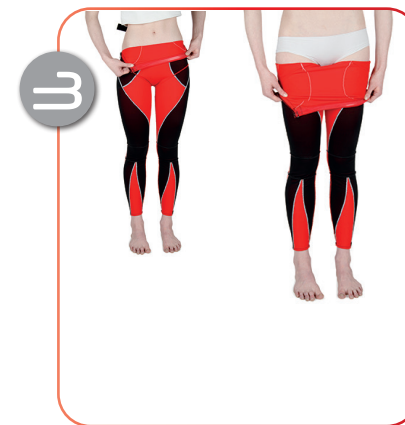

Desenrole a parte de cima das leggings em direção aos joelhos, cuidadosamente virando do avesso.



Sentando-se, continue a desenrolar as leggings para baixo em direção aos joelhos.



Sentando-se, continue a desenrolar as leggings para baixo em direção aos joelhos.



Desenrole as leggings até aos tornozelos de ambas as pernas.



Remova cada pé das leggings.

Instruções para vestir a Perneira Personalizada DMO®

Como vestir a Perneira DMO® - com ou sem fixação.

O utente terá de se sentar ou deitar para garantir o equilíbrio e a segurança.

Precauções:

- Remova os relógios e as joias antes de colocar a ortótese.
- Certifique-se de que as abas de proteção dos fechos de correr estão sobre a pele e não enroladas para os lados, antes de puxar os fechos para cima.
- As leggings nunca devem ser usadas durante a noite (exceto sob indicação de um médico ou fisioterapeuta). Alguns utentes com SED podem beneficiar do uso noturno, mas tal deve ser confirmado previamente). Também não devem ser usadas quando o utente estiver doente ou com febre.
- Se houver algum problema com o ajuste, por exemplo, se as extremidades começarem a ficar azuladas ou demasiado frias ao toque, retire a ortótese e informe imediatamente a equipa clínica para uma avaliação mais aprofundada.

Para verificar o ajuste:

- As leggings devem ficar justas ao corpo, mas deve ser possível inserir o indicador sob a costura inferior das leggings e da cintura.



Retire a ortótese da embalagem.



Aplique o aplicador de pé de seda. Se solicitado e fornecido.



Puxe suavemente a perneira em direção ao joelho.




Em seguida, remova o aplicador de seda do pé.



No caso de uma perneira sem fixação, puxe cuidadosamente a perneira para cima até à coxa e certifique-se de que a banda de silicone superior está no sítio certo, na parte superior da perna.




Certifique-se de que o silicone está em contacto com a pele na parte de cima da ortótese.

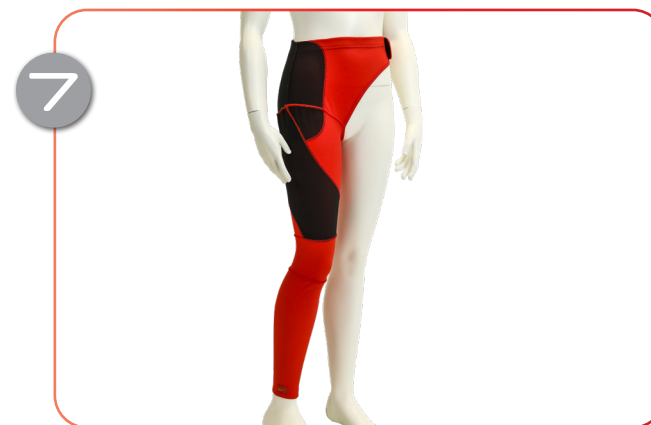

No caso de uma perneira com fixação, puxe cuidadosamente a perneira para cima até à anca. Certifique-se de que puxou suavemente as leggings até às coxas antes de as tentar puxar sobre as ancas e o corpo. Agora prenda a fixação de velcro na anca oposta.

live your life.

Como as perneiras devem ficar quando colocadas.

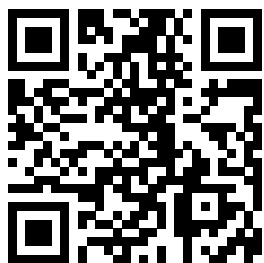

Utilize o código QR acima para aceder aos nossos vídeos sobre o uso e os cuidados ou aceda a: www.dmorthotics.com/productcare

Instruções para vestir a Perneira Personalizada DMO®

Como despir a Perneira DMO® - com ou sem fixação.

O utente terá de se sentar ou deitar para garantir o equilíbrio e a segurança.



1 Desprenda a fixação de velcro na anca oposta.



2 No caso da perneira, desenrole-a cuidadosamente pela perna abaixo até ao joelho, virando do avesso.



3 Continue a desenrolar a perneira na perna, sobre o joelho e retirando pelo pé.

Declaração de eliminação do dispositivo

Os dispositivos fabricados pela DM Orthotics são ortóteses da classe 1/ personalizadas/feitas por medida. Não são necessárias precauções para eliminar os dispositivos DMO®. Os materiais utilizados para o fabrico podem ser eliminados de acordo com as suas disposições locais para a eliminação de vestuário/materiais. Pedimos que lave o dispositivo antes de o eliminar.

Notificação de incidente grave

Se ocorrer qualquer incidente grave em associação com o seu dispositivo DMO®, deve notificá-lo imediatamente ao fabricante (DM Orthotics) e à autoridade competente responsável pelos dispositivos médicos no seu Estado-Membro, por exemplo, no Reino Unido seria a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA.

Fabricante



Identificação do utente



ID do produto/modelo




Fabricado na Grã-Bretanha



Distribuidor




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Países Baixos

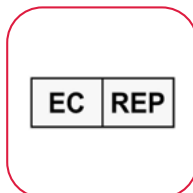

Nome do profissional de saúde



Número do pedido

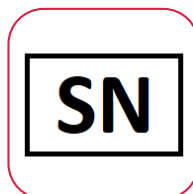

Dispositivo médico



Tenha em atenção que a modificação pelo utilizador não é recomendada e que, ao alterar a ortótese, a garantia pode ser afetada ou invalidada. Para informações sobre alterações e modificações do produto, contacte o seu especialista clínico ou a DM Orthotics.



Fabricante:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Reino Unido
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Concebido e fabricado no Reino Unido

DM28 – 5054522000142 (UDI-DI)
DM30 – 5054522000166 (UDI-DI)
DM31 – 5054522000173 (UDI-DI)
DM32 – 5054522000180 (UDI-DI)



Fabricante: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Países Baixos