

live your life.



Documento de Informações sobre o Uso para o Utente:
Ombro Unilateral e Bilateral Prefabricados/Essenciais DMO®



www.dmorthotics.com

Os nossos produtos

A DM Orthotics é uma empresa líder mundial na conceção e fabrico das suas ortóteses Dynamic Movement Orthoses® (DMO®).

Os produtos DMO® utilizam painéis biomecânicos e reforços estratégicos para melhorar o alinhamento postural e aumentar a proprioceção. Estes fatores estimulam e ajustam o sistema neurossensorial, treinando os músculos para trabalhar com tónus, força e desempenho melhorados.

As ortóteses de ombro unilaterais e bilaterais essenciais DMO® são um conjunto prefabricado de ortóteses em tecido e uma opção económica caso se pretenda testar se uma ortótese personalizada é benéfica para um utente. Funcionam eficazmente como um produto universal básico.

Criado para proporcionar maior conforto, melhoria da postura e maior amplitude de movimento ao utilizador. Concebido para ser usado junto à pele, o feedback proprioceptivo melhorado e o posicionamento biomecânico destes designs ajudam a treinar os músculos para trabalharem, levando a uma melhoria do tónus, da força e do desempenho.

Todos estes benefícios têm um único objetivo, que é melhorar a função e promover a independência do utilizador.

Os produtos Essentials DMO® são produtos prefabricados em tamanhos definidos para crianças e adultos e combinam o nosso tecido de compressão/sensorial com uma série de painéis de reforço estrategicamente colocados para beneficiar o utente. Não podem ser modificados nem reforçados. Podem ser recomendados por um profissional de saúde nos casos em que um produto normalizado pronto a usar possa ser benéfico ou ser encomendados diretamente no nosso site, bastando indicar um tamanho.

Fale connosco

Para mais informações sobre as nossas gamas de produtos DMO®, contacte o seu fornecedor ou distribuidor local da DMO® ou a DM Orthotics diretamente para obter os dados de contacto destes.

E-mail: admin@dmorthotics.com site: www.dmorthotics.com telefone: +44 (0) 1209 219205

Como pretendemos que os nossos produtos sejam utilizados pelos utentes

Os produtos ortóticos essenciais da DMO foram concebidos para auxiliar no apoio e na correção da postura e do alinhamento das articulações, nos casos em que não sejam necessários ajustes individuais ou reforços adicionais.

Todas as ortóteses da DM Orthotics são dispositivos médicos como definido pelo MRD da UE (Regulamento relativo aos dispositivos médicos) (2017/745) e são declarados em conformidade com os regulamentos de acordo com os anexos II e III do MRD da UE, sendo abrangidas pela definição de dispositivo médico ortótico: um colete, uma tala ou outro dispositivo externo artificial que serve para apoiar os membros ou a coluna vertebral ou para prevenir ou auxiliar o movimento relativo.

Os dispositivos são concebidos e fabricados para cumprir os requisitos aplicáveis do MRD da UE (Regulamento relativo aos dispositivos médicos) (2017/745) e são declarados em conformidade com os regulamentos de acordo com os anexos II e III do MRD da UE.

Data de emissão

Os nossos dispositivos médicos têm uma data de fabrico que é indicada no formulário de declaração enviado com o produto. Esta informação destina-se aos registos do utilizador final.

Índice

● Instruções de uso	P3
● Instruções de lavagem	P4
● Contraindicações e precauções	P5
Ombro Unilateral Prefabricado Essentials	P6
● Finalidade prevista	P6
● População de utentes prevista	P6
● Utilizadores previstos	P6
● Eficácia para os utentes	P6
● Como colocar e retirar	P8
Ombro Bilateral Prefabricado Essentials	P7
● Finalidade prevista	P7
● População de utentes prevista	P7
● Utilizadores previstos	P7
● Eficácia para os utentes	P7
● Como colocar e retirar	P10

Instruções de uso

Siga atentamente as instruções de conservação. Se tiver os devidos cuidados com a sua ortótese, irá **prolongar-lhe a vida útil e evitar danos**.

O QUE DEVE FAZER

- Coloque e retire a ortótese conforme aconselhado pelo seu terapeuta/fornecedor. Consulte o site: www.dmorthotics.com/productcare
- Seja cuidadoso ao colocar e retirar a ortótese, siga cuidadosamente as instruções deste folheto; colocações e remoções bruscas e com força, assim como unhas compridas podem causar danos.
- É importante ir aumentando gradualmente o tempo de uso, de acordo com as instruções que lhe foram dadas para a sua situação específica.
- Cumprir as instruções de lavagem cuidadosamente, caso contrário a ortótese pode ser danificada.

O QUE NÃO DEVE FAZER

- Não coloque nem retire o produto de forma brusca, pois tal pode danificar o produto com malhas puxadas, rasgos ou buracos no tecido.
- Não coloque nem retire o produto com recurso a unhas compridas, pois pode danificar o tecido.

PROBLEMAS COM AJUSTE OU SEGURANÇA

Contacte o seu terapeuta/fornecedor **IMEDIATAMENTE** se a ortótese começar a ficar muito apertada, a causar marcas vermelhas ou a apresentar malhas puxadas e/ou buracos.

Os produtos DMO® foram concebidos para complementar a terapia e o exercício físico, pelo que não devem ser removidos para a prática de exercício físico, a menos que seja aconselhado pelo seu terapeuta ou caso tenha quaisquer outros problemas com os quais ele o possa ajudar.

Tempo de uso

O QUE DEVE FAZER

- Aumentar gradualmente o tempo de uso ao longo da primeira semana, como indicado abaixo, duplicando o tempo diariamente até usar a ortótese durante todo o dia.

por exemplo, 1.º dia - 1 hora

2.º dia - 2 horas

3.º dia - 4 horas

4.º dia - 8 horas

5.º dia - o dia inteiro, no período diurno. Posteriormente, todos os dias, o dia inteiro, no período diurno.

O QUE NÃO DEVE FAZER

- Começar logo a usar a ortótese o dia inteiro. O tempo de uso tem de ser aumentado de forma gradual para permitir a monitorização do input sensorial, das alterações biomecânicas e do ajuste.
- Não use o produto DMO durante a noite, exceto se recomendado pelo médico ou profissional de saúde, por exemplo, no caso de utentes com Síndrome de Ehlers-Danlos (SED), em que o uso durante a noite pode ser benéfico.

Instruções de lavagem

Siga atentamente as instruções de conservação. Se tiver os devidos cuidados com a sua ortótese, irá **prolongar-lhe a vida útil e evitar danos**.

O QUE DEVE FAZER


- A ortótese deve ser lavada a cada 2 a 3 dias.
- A ortótese pode ser lavada à mão com água fria ou à máquina a 30 graus.
- Usar o ciclo de centrifugação curto da máquina de lavar ou uma toalha seca para remover o excesso de humidade.
- Pendurar no interior e deixar secar completamente durante a noite.

O QUE NÃO DEVE FAZER

- NÃO seque sob luz solar direta e forte ou sobre um radiador.
- NÃO TORÇA – a peça pode deformar e danificar o tecido.
- NÃO PASSAR A ORTÓTESE A FERRO.
- NÃO UTILIZE ALVEJANTE OU BRANQUEADORES.
- NÃO LIMPAR A SECO A ORTÓTESE.
- NÃO UTILIZE AMACIANTE DE ROUPA.
- NÃO SECAR A ORTÓTESE NA SECADORA pois encolherá.

Para ajuda e suporte adicionais, pode consultar no nosso site como colocar e retirar a sua ortótese: www.dmorthotics.com/productcare.

Um cuidado correto e regular da ortótese irá evitar a formação de odores e manter o material maleável. Se a sua ortótese tiver recebido um tratamento com prata, este terá de ser reaplicado após 100 lavagens, dado que os iões de prata começam a dispersar-se após 50 lavagens.

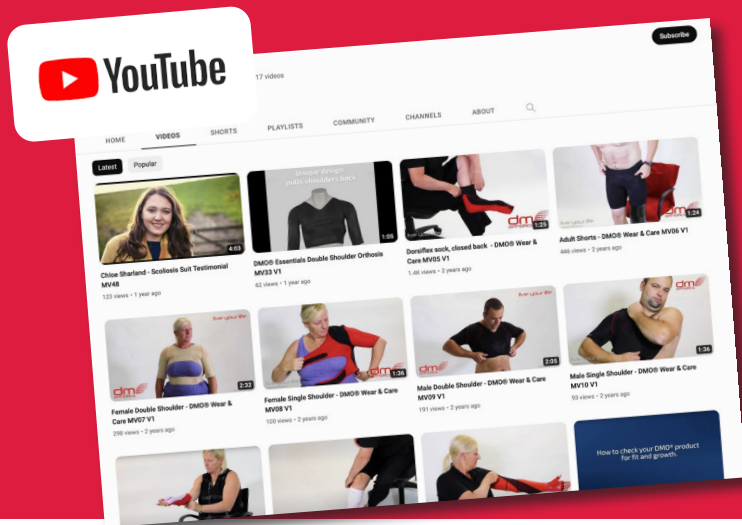

Usar os nossos produtos

Criámos uma série de guias de vídeo para ajudar os nossos clientes a tirar o melhor partido do seu produto. Estes guias incluem conselhos e truques úteis para usar os nossos produtos e os cuidados a ter ao colocá-los e retirá-los.

Para ver os vídeos, visite: www.dmorthotics.com/productcare

Os produtos DMO® devem ser usados junto à pele. É importante aumentar lentamente o tempo de uso ao longo da primeira semana, duplicando o tempo de uso diário até usar o produto durante o dia inteiro, por exemplo.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES/CONSIDERAÇÕES

Contraindicações

Não são conhecidas contraindicações ao uso de um produto DMO®. A avaliação de um produto DMO® deve ser realizada por um profissional de saúde autorizado com as qualificações profissionais adequadas.

Precauções/considerações

Segue-se uma lista de possíveis precauções a considerar antes de avançar com a prescrição de um produto DMO®. Esta situação deve ser discutida com o seu profissional de saúde qualificado, que poderá sugerir um produto DMO® alternativo.

Termorregulação deficiente

Um produto DMO® não terá qualquer efeito sobre o centro regulador da temperatura corporal. No entanto, o produto DMO® deve ser encarado como uma camada de vestuário e as camadas de vestuário terão de ser ajustadas em conformidade para climas quentes ou frios.

Doenças primárias do aparelho circulatório

Certos problemas primários do aparelho respiratório, em que o enfraquecimento dos músculos se deve à deterioração dos nervos/músculos, requerem uma análise cuidadosa e pode ser necessário falar com o médico do utente. Os problemas secundários do aparelho circulatório associados à Paralisia Cerebral podem ser melhorados devido a uma melhor postura do tronco/corpo e a uma melhor posição das costelas.

Problemas de pele

Problemas de pele que possam ser exacerbados pelo contacto direto com materiais sintéticos durante períodos prolongados podem exigir uma consulta adicional com um profissional de saúde a supervisionar o tratamento dermatológico do doente, mas esta situação raramente constitui uma contraindicação.

Fragilidade do esqueleto/ossos frágeis

Algumas doenças podem ser bem suportadas por um produto DMO® mas esta questão deve ser discutida com o seu profissional de saúde.

Ombro Unilateral Prefabricado Essentials DMO®

Finalidade prevista

As Ortóteses de Ombro Unilaterais e Bilaterais DMO® foram concebidas para gerir disfunções do ombro, proporcionar a estabilização e o realinhamento do tronco, dos ombros e dos membros superiores.

Fruto de uma extensa investigação, o seu design exclusivo puxa os ombros para trás, apoiando as omoplatas e estabilizando as articulações, o que proporciona maior conforto, melhoria da postura e maior amplitude de movimento.

População de utentes prevista

Crianças ou adultos que apresentam um tónus muscular baixo ou alto, exigindo a estabilização das articulações afetadas e também o realinhamento do tronco, dos ombros e dos membros superiores.

Este realinhamento pode ajudar funcionalmente, a reduzir a dor e a controlar a fadiga. Os utentes que vão vestir e despir a ortótese eles próprios têm de ter um grau razoavelmente elevado de destreza e de tónus muscular. Se não for esse o caso, será necessário o auxílio de um cuidador para vestir e despir a ortótese.

Utilizadores previstos

Pode ser prescrito por um profissional de saúde competente ou escolhido pelo utilizador, pelo cuidador ou pelos pais. Normalmente, o utilizador é leigo.

O cuidador do utente, que pode estar envolvido na colocação e retirada do produto, na lavagem o produto e na notificação de quaisquer problemas com o produto, será normalmente uma pessoa leiga.

Eficaz para:

- Subluxação do ombro
- Luxação do ombro
- Instabilidade do ombro
- Dores no ombro de origem neurológica
- Lesão do plexo braquial (paralisia de Erb)
- Paralisia cerebral
- Síndrome de Ehlers-Danlos
- Esclerose múltipla
- AVC
- Lesões na coluna

Oferece:

- Realinhamento complexo do ombro
- Melhoria da função distal
- Maior amplitude de movimento
- Melhoria da postura
- Alívio da dor

Ombro Unilateral Essentials DMO® (Versão feminina)



Ombro Unilateral Essentials DMO® (Versão masculina)



Ombro Bilateral Prefabricado Essentials DMO®

Finalidade prevista

As Ortóteses de Ombro Unilaterais e Bilaterais DMO® foram concebidas para gerir disfunções do ombro, proporcionar a estabilização e o realinhamento do tronco, dos ombros e dos membros superiores.

Fruto de uma extensa investigação, o seu design exclusivo puxa os ombros para trás, apoiando as omoplatas e estabilizando as articulações, o que proporciona maior conforto, melhoria da postura e maior amplitude de movimento.

População de utentes prevista

Crianças ou adultos que apresentam um tónus muscular baixo ou alto, exigindo a estabilização das articulações afetadas e também o realinhamento do tronco, dos ombros e dos membros superiores.

Este realinhamento pode ajudar funcionalmente, a reduzir a dor e a controlar a fadiga. Os utentes que vão vestir e despir a ortótese eles próprios têm de ter um grau razoavelmente elevado de destreza e de tónus muscular. Se não for esse o caso, será necessário o auxílio de um cuidador para vestir e despir a ortótese.

Utilizadores previstos

Pode ser prescrito por um profissional de saúde competente ou escolhido pelo utilizador, pelo cuidador ou pelos pais. Normalmente, o utilizador é leigo.

O cuidador do utente, que pode estar envolvido na colocação e retirada do produto, na lavagem o produto e na notificação de quaisquer problemas com a produto, será normalmente uma pessoa leiga.

Eficaz para:

- Subluxação do ombro
- Luxação do ombro
- Instabilidade do ombro
- Dores no ombro de origem neurológica
- Lesão do plexo braquial (paralisia de Erb)
- Paralisia cerebral
- Síndrome de Ehlers-Danlos
- Esclerose múltipla
- AVC
- Lesões na coluna

Oferece:

- Realinhamento complexo do ombro
- Melhoria da função distal
- Maior amplitude de movimento
- Melhoria da postura
- Alívio da dor

Ombro Bilateral Essentials DMO®
(Versão feminina)



Ombro Bilateral Essentials DMO®
(Versão masculina)



Instruções para colocar a Ortótese de Ombro Unilateral DMO®

Como colocar a Ortótese de Ombro Unilateral DMO®. (Para fins ilustrativos, foi utilizada a ortótese de ombro unilateral personalizada DMO®)

Precauções:

- Remova os relógios e as joias antes de colocar a ortótese.
- A ortótese de ombro unilateral deve ser removida se o utente estiver doente ou tiver febre.
- Se houver algum problema com o ajuste, por exemplo, se as extremidades começarem a ficar azuladas ou demasiado frias ao toque, retire a ortótese e informe imediatamente a equipa clínica para uma avaliação mais aprofundada ou se tiver adquirido um produto no nosso site, contacte o nosso departamento administrativo e devolva-o à DM Orthotics

Para verificar o ajuste:


- A costura/os remates da ortótese podem deixar ligeiras marcas na pele após a remoção, mas se alguma marca estiver excessivamente vermelha decorridos 20 a 30 minutos após a remoção, então é possível que a ortótese seja demasiado apertada.
- Em caso de dúvida quanto ao ajuste adequado, retire a ortótese e fale com o seu terapeuta, se aplicável, ou se a tiver adquirido no nosso site, contacte o nosso departamento administrativo e devolva-a à DM Orthotics.




1 Coloque o braço do lado afetado na manga, assegurando que a ortótese é bem puxada para cima do ombro.




2 Coloque o braço afetado em cima da ortótese, como mostrado, se for capaz. Isto mantém a ortótese no lugar, enquanto estende a mão atrás das costas para agarrar a fita larga.

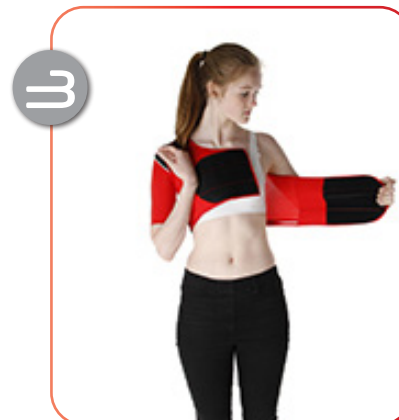

3 Puxe a parte de trás da ortótese lateralmente até que o elástico esteja totalmente esticado (este movimento lateral é fundamental para garantir que a ortótese funciona conforme projetada). Mantendo o braço estendido para fora, mova a mão para a frente e traga a aba esticada sobre o tronco até que o fecho de velcro fique preso. Continue a fixar o fecho de velcro na posição dianteira.

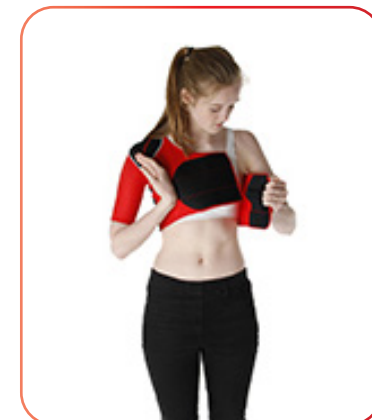

4 Como a ortótese de ombro unilateral fica na versão infantil e masculina quando usada corretamente.

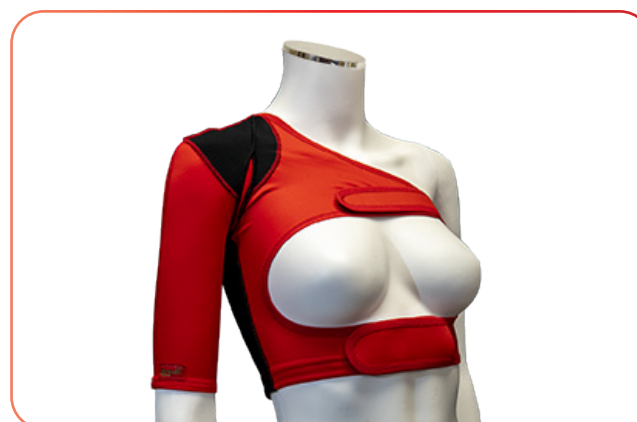

A ortótese de ombro unilateral na versão feminina terá duas correias em vez de uma. Siga as instruções como no n.º 3, puxando a correia superior por cima até ao velcro e, em seguida, puxando a correia inferior. Assegure-se que o velcro fica confortável quando preso.

live your life.


Como retirar a Ortótese de Ombro Unilateral DMO®.

Como o ombro unilateral deve ficar quando está colocado:


**Versão infantil
(sexo masculino):**




**Versão
feminina:**

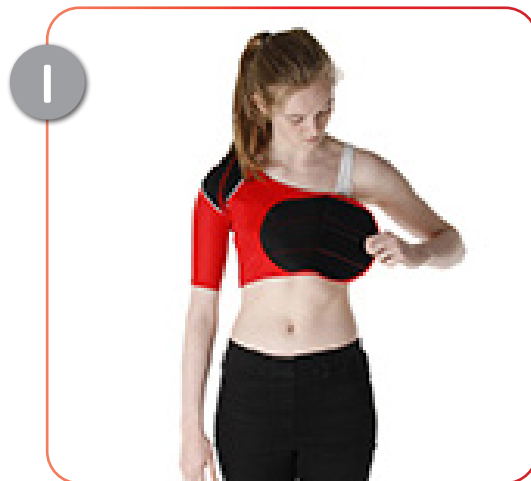


Para a versão infantil e masculina, separe o fecho de velcro na frente e deixe as correias caírem. Para a versão feminina, separe as duas correias do fecho de velcro e deixe as correias caírem.

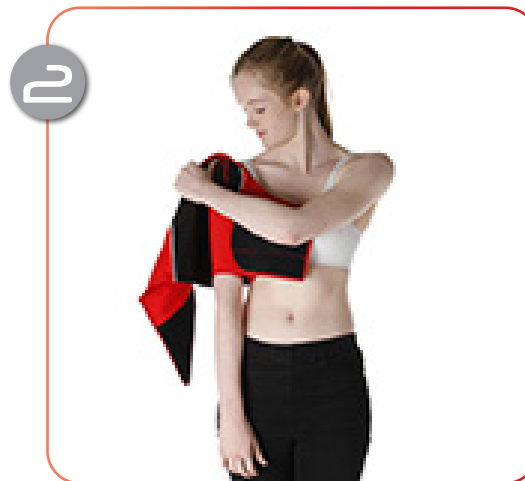

Remova a ortótese do lado afetado.

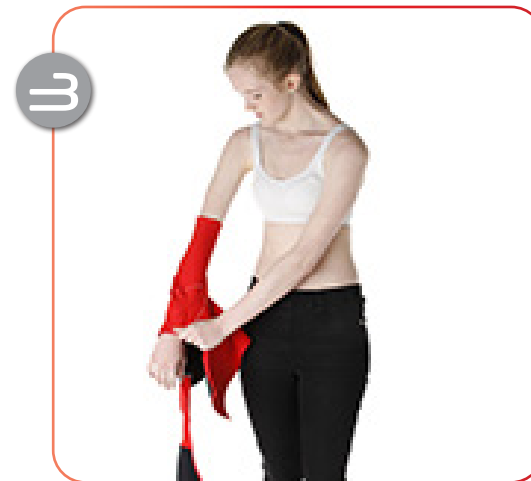

Desenfie o braço da manga da ortótese.

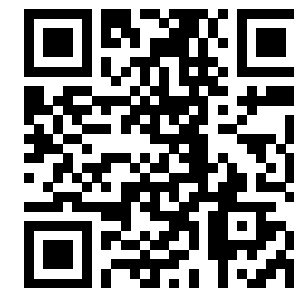

Utilize o código QR acima para aceder aos nossos vídeos sobre o uso e os cuidados ou aceda a:
www.dmorthotics.com/productcare

Instruções para colocar a Ortótese de Ombro Bilateral DMO®

Como colocar a Ortótese de Ombro Bilateral DMO®.

Precauções:

- As instruções abaixo são válidas tanto para a versão masculina como feminina da ortótese de estabilidade do ombro.
- Recomendamos que se sente para colocar a ortótese de ombro.
- A ortótese de ombro bilateral é colocada pela frente para evitar stress nas articulações do ombro.

Para verificar o ajuste:

- A costura/os remates da ortótese podem deixar ligeiras marcas na pele após a remoção, mas se alguma marca estiver excessivamente vermelha decorridos 20 a 30 minutos após a remoção, então é possível que a ortótese seja demasiado apertada.
- Em caso de dúvida quanto ao ajuste adequado, retire a ortótese e fale com o seu terapeuta, se aplicável. Se tiver adquirido um produto no nosso site, contacte o nosso departamento administrativo e devolva-o à DM Orthotics.

Ortótese de Ombro Bilateral Versão infantil

As instruções para colocar a versão infantil deste produto são as mesmas que as instruções para adultos do sexo masculino.



Abra todas as correias de velcro da ortótese de ombro.



Coloque os braços nas mangas da ortótese de ombro e puxe-as suavemente sobre os ombros, uma de cada vez, ajudando com a outra mão, de modo que a ortótese fique totalmente sobre os ombros, como mostrado. **Nota:** Ao colocar a versão feminina da ortótese, certifique-se de que a abertura rodeia os seios, como mostrado. Para a versão masculina e infantil da ortótese, a parte dianteira não tem abertura para os seios. Certifique-se de que o material na frente é puxado suavemente para baixo para que fique confortável sobre as costelas.



Segure as duas correias no lado direito da ortótese, como mostrado. Passe-as até às costas e deslize-as através da abertura no lado esquerdo da ortótese sob a secção do braço.



Em seguida, segure a(s) correia(s) que enfiou através da abertura e puxe a correia inferior com firmeza, mas suavemente para fora e para baixo, para longe do corpo. Prenda no fecho de velcro inferior na frente da ortótese.



Segure a correia superior e puxe suavemente para fora e para baixo para longe do corpo e prenda ao fecho de velcro superior na frente da ortótese.

Pode preferir apertar a correia superior primeiro, pois tal pode ajudar a reposicionar o ombro melhor nalguns utentes. Aperte a correia inferior em segundo lugar.

live your life.

Como o ombro bilateral deve parecer quando colocado:

Versão masculina:



Versão feminina:



Versão infantil:



6



Repita com as correias restantes no lado direito do corpo. Puxe suavemente a correia inferior para baixo e para longe do corpo e prenda-a no fecho de velcro inferior na parte da frente do corpo.

7




Repita com a correia da ortótese (como na fig. 6). Não se esqueça de puxar a secção do corpo da cinta do ombro para baixo, nas costas e à frente, para que possa beneficiar da posição melhorada. Certifique-se de que a tração é confortável para as suas necessidades sobre os ombros e as costelas.

8



Certifique-se de que a secção da manga está no lugar.

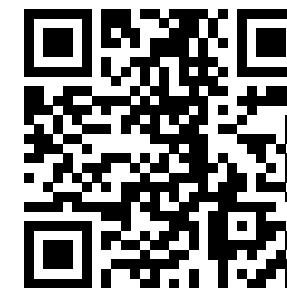

Utilize o código QR acima para aceder aos nossos vídeos sobre o uso e os cuidados ou acesse a: www.dmorthotics.com/productcare

live your life.

Como o ombro bilateral deve parecer quando colocado:

Versão masculina:



Versão feminina:



Versão infantil:



Como retirar a Ortótese de Ombro Bilateral DMO®.



Solte a correia de velcro em ambos os lados.



Coloque suavemente a mão oposta na secção do ombro e comece a puxá-la para baixo sobre o braço.



Repita este procedimento com o outro lado da ortótese de ombro.



Retire a(s) correia(s) quando solta(s) e deslize suavemente para fora da cinta.

Declaração de eliminação do dispositivo

Os dispositivos fabricados pela DM Orthotics são ortóteses da classe 1/ personalizadas/feitas por medida. Não são necessárias precauções para eliminar os dispositivos DMO®. Os materiais utilizados para o fabrico podem ser eliminados de acordo com as suas disposições locais para a eliminação de vestuário/materiais. Pedimos que lave o dispositivo antes de o eliminar.

Notificação de incidente grave

Se ocorrer qualquer incidente grave em associação com o seu dispositivo DMO®, deve notificá-lo imediatamente ao fabricante (DM Orthotics) e à autoridade competente responsável pelos dispositivos médicos no seu Estado-Membro, por exemplo, no Reino Unido seria a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA.

Fabricante



Identificação do utente



ID do produto/modelo




Fabricado na Grã-Bretanha



Distribuidor




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Países Baixos

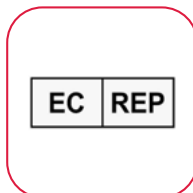

Nome do profissional de saúde



Número do pedido

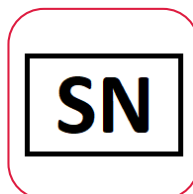

Dispositivo médico



Tenha em atenção que a modificação pelo utilizador não é recomendada e que, ao alterar a ortótese, a garantia pode ser afetada ou invalidada. Para informações sobre alterações e modificações do produto, contacte o seu especialista clínico ou a DM Orthotics.



Fabricante:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Reino Unido
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Concebido e fabricado no Reino Unido

UDI-DI básico: 5054522UPPERLIMBQS

UDI-DI:

5054522001231 Ombro Bilateral Versão Infantil - 1
5054522001248 Ombro Bilateral Versão Infantil - 2
5054522001255 Ombro Bilateral Versão Infantil - 3
5054522001262 Ombro Bilateral Versão Infantil - 4
5054522001279 Ombro Bilateral Versão Infantil - 5
5054522001286 Ombro Bilateral Versão Infantil - 6

5054522000708 Ombro Bilateral Versão Adulto - XS
5054522000715 Ombro Bilateral Versão Adulto - S
5054522000722 Ombro Bilateral Versão Adulto - M
5054522000739 Ombro Bilateral Versão Adulto - L
5054522000746 Ombro Bilateral Versão Adulto - XL
5054522001224 Ombro Bilateral Versão Adulto - XXL

5054522001415 Ombro Unilateral Versão Infantil Esquerda - 1
5054522001422 Ombro Unilateral Versão Infantil Esquerda - 2
5054522001439 Ombro Unilateral Versão Infantil Esquerda - 3
5054522001446 Ombro Unilateral Versão Infantil Esquerda - 4
5054522001453 Ombro Unilateral Versão Infantil Esquerda - 5
5054522001460 Ombro Unilateral Versão Infantil Esquerda - 6
5054522001477 Ombro Unilateral Versão Infantil Direita - 1
5054522001484 Ombro Unilateral Versão Infantil Direita - 2
5054522001491 Ombro Unilateral Versão Infantil Direita - 3
5054522001507 Ombro Unilateral Versão Infantil Direita - 4
5054522001514 Ombro Unilateral Versão Infantil Direita - 5
5054522001521 Ombro Unilateral Versão Infantil Direita - 6

5054522001293 Ombro Unilateral Versão Adulto Esquerda - XS
5054522001309 Ombro Unilateral Versão Adulto Esquerda - S
5054522001316 Ombro Unilateral Versão Adulto Esquerda - M
5054522001323 Ombro Unilateral Versão Adulto Esquerda - L
5054522001330 Ombro Unilateral Versão Adulto Esquerda - XL
5054522001347 Ombro Unilateral Versão Adulto Esquerda - XXL
5054522001354 Ombro Unilateral Versão Adulto Direita - XS
5054522001361 Ombro Unilateral Versão Adulto Direita - S
5054522001378 Ombro Unilateral Versão Adulto Direita - M
5054522001385 Ombro Unilateral Versão Adulto Direita - L
5054522001392 Ombro Unilateral Versão Adulto Direita - XL
5054522001408 Ombro Unilateral Versão Adulto Direita - XXL



Fabricante: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, Reino Unido
TR15 1SS



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Países Baixos