

live your life.



Instrucciones de uso para el paciente:

Leggings, perneras y pantalones cortos personalizados DMO®



www.dmorthotics.com

Nuestros productos

Nuestras ortesis de movimiento dinámico* personalizadas utilizan un tejido elastomérico flexible y suave que garantiza un ajuste perfecto y crea fuerzas de compresión para mejorar la respuesta propioceptiva. Este tejido básico es ligero, transpirable y resistente,

y se combina con paneles de refuerzo fabricados con un material Powernet (tela elástica con mezcla de poliamida y elastano) para proporcionar fuerza y estabilidad cuando es necesario, además de mejorar la postura y la alineación biomecánica.

Nuestras ortesis a medida funcionan mediante unos refuerzos estratégicamente situados que colocan el cuerpo en una alineación postural mejorada. Esta nueva categoría biomecánica combinada con una propiocepción mejorada estimula y ajusta el sistema neurosensorial al entrenar a los músculos para que trabajen con un mejor tono, fuerza y rendimiento.

Los productos DMO* ayudan tanto a adultos como a niños a gestionar los efectos físicos de sus afecciones neurológicas, musculoesqueléticas y genéticas.

Los productos DMO® personalizados se fabrican de forma individual a medida, y todos los cierres, aberturas y refuerzos se prescriben individualmente según las necesidades funcionales y las preferencias de cada paciente.

Contacto

Para obtener más información sobre nuestras gamas de productos DMO*, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local de DMO* o directamente con DM Orthotics.

Correo: admin@dmorthotics.com Sitio web: www.dmorthotics.com

Tel.: +44 (0) 1209 219205

Uso previsto de nuestros productos

Las ortesis personalizadas de DM Orthotics están previstas para el **uso exclusivo por un solo paciente específico** con el fin de mantener y corregir la postura, además de alinear las articulaciones. No deben llevarlas ninguna otra persona a la que no se le haya medido y prescrito individualmente.

Todas las ortesis personalizadas de DM Orthotics se consideran productos sanitarios según la definición del Reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745 y se ha declarado que cumplen con las normativas según lo establecido en los Anexos II y III de dicho reglamento, y se engloban dentro de la definición de ortesis médica: un dispositivo ortopédico, una férula u otro dispositivo externo artificial para sujetar las extremidades o la columna vertebral, o para evitar el movimiento relativo o favorecerlo.

Los dispositivos son personalizados (según el anexo III del Reglamento de productos sanitarios [RPS] y cumplen los requisitos correspondientes del RPS (2017/745): Producto personalizado

Fecha de emisión

Nuestros productos sanitarios personalizados se fabrican según una prescripción específica y se emiten con una fecha de fabricación en el formulario de declaración adjunto que se envía con su producto. El usuario final debe conservar este documento.

Índice

● Instrucciones de uso	pág. 3
● Instrucciones de lavado	pág. 4
● Contraindicaciones y precauciones	pág. 5

Leggings, perneras y pantalones cortos personalizados

● Finalidad prevista	pág. 6
● Población de pacientes prevista	pág. 7
● Usuarios previstos	pág. 7
● Eficaz para los pacientes	pág. 8
● Uso con otras ortesis	pág. 7

Leggings personalizados

● Cómo ponérselos y quitárselos	pág. 9
---------------------------------	--------

Perneras personalizadas

● Cómo ponérselos y quitárselos	pág. 9
---------------------------------	--------

Pantalones cortos personalizados

● Cómo ponérselos y quitárselos	pág. 9
---------------------------------	--------

● Declaración sobre la eliminación de los productos	pág. 14
● Declaración de incidente grave	pág. 14
● Leyenda símbolos utilizados	pág. 15

Instrucciones de uso

Siga meticulosamente las instrucciones de mantenimiento. Para que su ortesis **dure más tiempo y no se estropee**, cuídela bien.

SÍ

- Póngase y quítese la ortesis según le indique el terapeuta o el proveedor. Consulte la página web: www.dmorthotics.com/productcare
- Tenga cuidado cuando se la ponga o se la quite y siga las instrucciones de este folleto. Hacer movimientos bruscos al ponérsela o quitársela y tener las uñas largas pueden dañarla.
- Es importante aumentar progresivamente el tiempo de uso conforme a las instrucciones recibidas.
- Siga meticulosamente las instrucciones de lavado. De lo contrario, podría dañar su ortesis.

NO

- No se ponga ni se quite el producto de forma brusca, ya que podría provocar carreras, desgarros o agujeros en el tejido.
- No se ponga ni se quite el producto con las uñas largas, ya que esto también puede dañar el tejido.

PROBLEMAS DE AJUSTE O SEGURIDAD

Póngase en contacto con el terapeuta o el proveedor **DE INMEDIATO** si le empieza a apretar y le salen marcas rojas o han aparecido carreras o agujeros.

Los productos DMO® están diseñados para complementar el tratamiento y el ejercicio físico, por lo que no deberán quitarse durante el ejercicio a menos que se lo aconseje su terapeuta.

Tiempo de uso

SÍ

- Aumente progresivamente el tiempo de uso durante la primera semana, tal y como aparece más abajo, de manera que se duplique el tiempo día tras día hasta que pueda utilizar la ortesis todo el día.

p.ej., 1.º día: 1 hora

2.º día: 2 horas

3.º día: 4 horas

4.º día: 8 horas

5.º día: todo el día, durante el día. A partir de entonces, todos los días durante del día.

NO

- La utilice todo el día desde el primer momento. El uso se debe aumentar progresivamente para garantizar que se controla la percepción sensorial, los cambios biomecánicos y la adaptación.
- No lleve los leggings/pantalones cortos DMO por la noche a menos que se lo recomiende su médico o profesional sanitario. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, su uso por la noche puede ser beneficioso.

Instrucciones de lavado

Siga cuidadosamente las instrucciones de cuidado. Al cuidar de su ortesis, prolongará su vida útil y evitará daños.

HACER

- La ortesis debe lavarse al menos cada 2–3 días.
- La ortesis puede lavarse a mano en agua fría o a máquina a 30 °C.
- Lavar por separado.
- Solo centrifugado corto, o envuélvala en una toalla seca para eliminar el exceso de humedad.
- Deje secar completamente durante la noche colgándola en interiores.

NO HACER

- NO secar a la luz solar directa intensa ni sobre un radiador.
- NO RETORCER – se deformará y dañará los materiales.
- NO PLANCHAR.
- No usar lejía ni agentes blanqueadores.
- No usar suavizante de telas.
- NO LAVAR EN SECO.
- NO USAR SECADORA – la ortesis se encogerá.

Para más ayuda y asistencia, hemos añadido en nuestra página web instrucciones sobre cómo ponerse y quitarse la ortesis. Por favor visite: www.dmorthotics.com/productcare

El cuidado regular y adecuado de la ortesis evitará que desarrolle olor y mantendrá el material flexible. Si su ortesis está tratada con plata, este tratamiento deberá volver a aplicarse después de 100 lavados, ya que los iones de plata comienzan a dispersarse después de 50 lavados.




Usar nuestros productos

Hemos creado varias guías en vídeo para ayudar a los clientes a sacar el máximo provecho del producto. En estas guías se incluyen trucos y consejos prácticos para usar nuestros productos y la mejor forma de cuidarlos al ponérselos o quitárselos.

Para verlos, visite la página www.dmorthotics.com/productcare

Los productos DMO® deben llevarse pegados a la piel. Es importante aumentar el tiempo de uso paulatinamente durante la primera semana y duplicar la cantidad de tiempo diario hasta llevarlo durante todo el día.

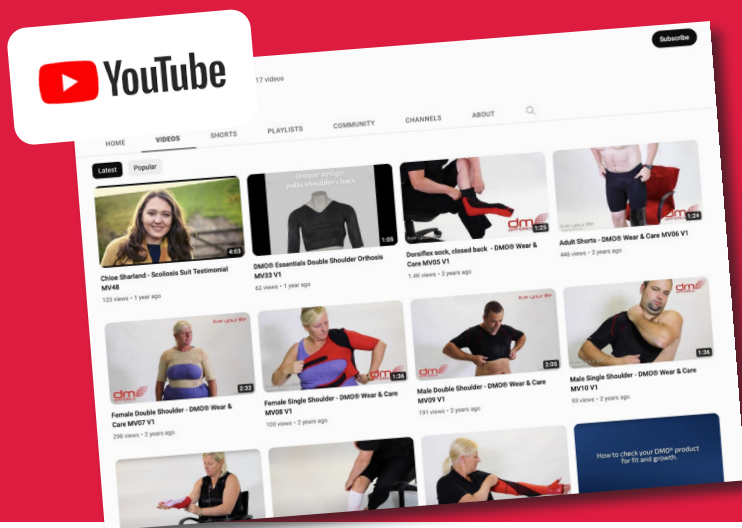

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES/CONSIDERACIONES

Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones para la utilización del producto DMO[®]. Un profesional médico autorizado con la cualificación profesional adecuada debe ser quien se encargue de la evaluación de cualquier producto DMO[®] personalizado.

Precauciones/consideraciones

A continuación, figura una lista de posibles precauciones que hay que tener en cuenta antes de seguir adelante con la prescripción de un producto DMO[®] a medida. Esto debe discutirse con un profesional médico cualificado, ya que puede recomendarle otro producto DMO[®] o modificar el producto DMO[®] elegido.

Control deficiente de la regulación de la temperatura

El producto DMO no afectará al centro regulador de la temperatura del cuerpo. Sin embargo, este debe considerarse una capa de ropa y las capas de ropa deberán ajustarse en consecuencia para climas cálidos o fríos. Se pueden realizar ajustes en la prescripción, como utilizar perneras y mangas cortas, para ayudar a mejorar el control del calor.

Trastornos circulatorios primarios

Si el paciente sufre de problemas respiratorios primarios en los que los músculos se están debilitando debido al deterioro de los nervios/músculos, habrá que considerarlo detenidamente y se deberá consultar al médico del paciente, aunque las especificaciones del producto pueden modificarse para adaptarse a ello. Los problemas respiratorios secundarios asociados con la parálisis cerebral se pueden mitigar mediante una postura mejorada del tronco/cuerpo y una mejor disposición de las costillas.

Afecciones cutáneas

Las afecciones cutáneas que puedan agravarse por el contacto estrecho con materiales sintéticos durante periodos prolongados pueden requerir una consulta adicional con un profesional sanitario que supervise el tratamiento dermatológico del paciente, pero esto no suele ser una contraindicación.

Fragilidad esquelética/huesos frágiles

Algunas afecciones son compatibles con el producto DMO[®], pero esto debe consultarse con el médico. Se pueden realizar modificaciones en el producto elegido, como añadir cremalleras o botones a presión, o utilizar mangas o perneras cortas en lugar de largas.

Gastrostomía, estoma y otros requisitos médicos Podemos fabricar el producto a medida con una abertura especial para una sonda de gastrostomía, estoma, catéter suprapúbico, etc. Esto se añadirá en la fase de ajuste para garantizar una colocación precisa. Consulte a su médico para que le asesore el equipo clínico experimentado de DMO[®].

Leggings, perneras y pantalones cortos personalizados DMO®

Finalidad prevista

La finalidad prevista de los leggings DM28, la pernera DM30/31 y los pantalones cortos DM32 es alinear la parte inferior del tronco, la pelvis, las caderas y las extremidades inferiores. La ubicación exacta del efecto viene determinada por la elección del producto. Mejora la simetría y ayuda a la estabilización. Los leggings DM28 y los pantalones cortos DM30/31 proporcionan un nivel de sujeción no restrictivo y muy eficaz para maximizar la estabilidad de la pelvis y las extremidades inferiores. El producto también ayuda al control distal e influye positivamente en el tono muscular para mejorar la función.

Indicaciones

Niños o adultos que presentan un tono muscular bajo o alto, problemas sensoriales o de propiocepción, falta de estabilidad del tronco, la pelvis o las extremidades inferiores. Niños o adultos que presentan dolor asociado a una mala alineación o fatiga causada por su incapacidad para mantener una postura correcta de la pelvis o de las extremidades inferiores.

Consideraciones

En función de la altura del refuerzo troncal del producto elegido, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Si el paciente padece problemas respiratorios primarios en los que los músculos se están debilitando debido al deterioro de los nervios/músculos, aunque se puedan cambiar las especificaciones de la ortesis.

Los problemas respiratorios secundarios asociados con la parálisis cerebral se pueden aliviar mediante una postura mejorada del tronco/cuerpo y una mejor posición de las costillas. Consulte la página anterior para ver otras contraindicaciones/consideraciones.



Población de pacientes prevista

Pacientes de ambos sexos de dos años o más, aunque los niños menores de dos años también podrían beneficiarse de los leggings DM28, las perneras DM30/31 y los pantalones cortos DM32. Este límite de edad se fijó debido a un mayor crecimiento en esta etapa que requeriría un ajuste o nueva confección de la ortesis, no debido a la incapacidad de lograr el propósito previsto. No hay límite de edad superior para los leggings DM28, las perneras DM30/31 y los pantalones cortos DM32.

Los leggings DM28, las perneras DM30/31 y los pantalones cortos DM32 pueden ayudar a tratar diversos problemas médicos, entre los que se incluyen los que aparecen en la página 8.

Se requiere un grado razonablemente alto de destreza y tono muscular para quienes vayan a ponerse y quitarse la ortesis por sí mismos. En caso contrario, se necesitará la ayuda de un cuidador para ponerse y quitarse la ortesis.

Usuarios previstos

Los leggings DM28, la pernera DM30/31 y los pantalones cortos DM32 deberán haber sido prescritos y especificados por un profesional sanitario competente, normalmente un ortopeda o fisioterapeuta cualificado que haya recibido la formación adecuada en la prescripción y el uso de ortesis de movimiento dinámico. Dicho profesional sanitario también deberá evaluar el ajuste del producto y proporcionar asesoramiento adicional para mejorarlo cuando sea necesario.

El usuario de la ortesis será normalmente una persona no especialista.

El cuidador del usuario, que puede ayudar a poner y quitar la ortesis, lavarla y notificar de cualquier problema con la misma, será normalmente una persona no profesional.

El producto en cuestión está hecho a medida y requiere la especificación de un profesional sanitario formado en el uso de ortesis de movimiento dinámico. Para ello, DM Orthotics habrá formado al profesional sanitario en la toma de medidas.

El profesional sanitario capacitado también debe prescribir los paneles de refuerzo necesarios dentro de la gama de paneles disponibles.



Leggings personalizados DMO®

Es eficaz para:

- Parálisis cerebral
- Disfunciones de las extremidades inferiores
- Esclerosis múltiple
- Síndrome de Ehlers Danlos
- Hipertonía e hipotonía muscular
- Y otras afecciones

Beneficios:

- Estabilidad pélvica
- Mejora de la alineación de la cadera y la rodilla
- Mejora de la rotación de la cadera interna y externa
- Aumento de la percepción sensorial
- Mejora de la postura
- Mejora de la función muscular
- Alivio del dolor
- Paneles de refuerzo para mayor resistencia y estabilidad

Otras características:

- Apertura de la entrepierna optativa
- Tejido de compresión que aporta comodidad y permite el movimiento
- Mejora de la colocación de la pierna
- Se puede llevar debajo de la ropa

Pantalones cortos personalizados DMO®

Es eficaz para:

- Parálisis cerebral
- Esclerosis múltiple
- Ataxia
- Hipotonía muscular
- Traumatismo craneoencefálico o daño cerebral adquirido
- Síndrome de Ehlers Danlos
- Patrones de marcha afectada
- Ictus
- Enfermedad de Parkinson
- La corea de Huntington
- Y otras afecciones

Beneficios:

- Estabilidad pélvica
- Extensión de la cadera y de la rodilla
- Reducción de la rotación externa/ interna de la cadera
- Aumento de la percepción sensorial
- Mejora de la postura
- Mejora de la función muscular
- Reducción del dolor

Otras características:

- Tejido de compresión que aporta comodidad y permite el movimiento
- Apertura de la entrepierna optativa
- Paneles de refuerzo para mayor resistencia y estabilidad
- Se puede llevar debajo de la ropa

Pernera DMO®

Es eficaz para:

- Parálisis cerebral
- Disfunciones de las extremidades inferiores
- Esclerosis múltiple
- Síndrome de Ehlers Danlos
- Hipertonía e hipotonía muscular
- Y otras afecciones

Beneficios:

- Estabilidad pélvica
- Mejora de la alineación de la cadera y la rodilla
- Mejora de la rotación de la cadera interna y externa
- Aumento de la percepción sensorial
- Mejora de la postura
- Mejora de la función muscular
- Alivio del dolor
- Paneles de refuerzo para mayor resistencia y estabilidad

Otras características:

- Tejido de compresión que aporta comodidad y permite el movimiento
- Paneles de refuerzo para mayor resistencia y estabilidad
- Se puede llevar debajo de la ropa

Pernera con enganche DMO®

Es eficaz para:

- Parálisis cerebral
- Disfunciones de las extremidades inferiores
- Esclerosis múltiple
- Síndrome de Ehlers Danlos
- Hipertonía e hipotonía muscular
- Y otras afecciones

Beneficios:


- Estabilidad pélvica
- Mejora de la alineación de la cadera y la rodilla
- Mejora de la rotación de la cadera interna y externa
- Aumento de la percepción sensorial
- Mejora de la postura
- Mejora de la función muscular
- Alivio del dolor
- Paneles de refuerzo para mayor resistencia y estabilidad

Otras características:

- Tejido de compresión que aporta comodidad y permite el movimiento
- Paneles de refuerzo para mayor resistencia y estabilidad
- Se puede llevar debajo de la ropa

Precauciones:

- Quítese el reloj y las joyas antes de ponerse la ortesis.
- Si los pantalones cortos llevan cremalleras, compruebe que los protectores de las cremalleras están bien situados sobre la piel antes de subirlas y que no están enrollados.
- Los pantalones cortos deben quitarse si el paciente está enfermo o tiene fiebre.
- Si hay problemas con el ajuste, es decir, las extremidades se vuelven moradas o están muy frías al tacto, debe quitarse la ortesis e informar de inmediato al equipo médico para una nueva evaluación.

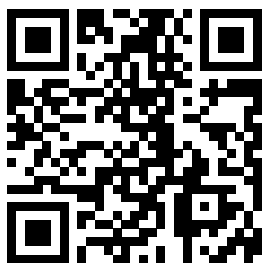

Utilice el código QR de arriba para acceder a los vídeos de instrucciones de uso y cuidado o visite:

www.dmorthotics.com/productcare

Instrucciones de uso de los pantalones cortos DMO® personalizados

Cómo ponerse los pantalones cortos personalizados DMO®

El paciente tendrá que sentarse para no perder el equilibrio y por su seguridad, y para asegurarse de que los pantalones cortos se ponen de forma correcta.



Si los pantalones cortos se suministran con una cremallera en la cintura, bájela antes de ponérselos. Coja los pantalones cortos (con la etiqueta en la parte trasera) y súbalos por las piernas (como haría con un par de medias). Súbalos por encima de las rodillas hasta los muslos antes de empezar a subirlos por las caderas.




Suba los pantalones cortos hasta la cintura y suba la cremallera en caso de tenerla.

live your life.

Cómo quitarse los pantalones cortos personalizados DMO®

El paciente tendrá que sentarse para no perder el equilibrio y por su seguridad, y para asegurarse de que los pantalones cortos se quitan de forma correcta.

Aspecto que deben tener los pantalones cortos al llevarlos puestos:

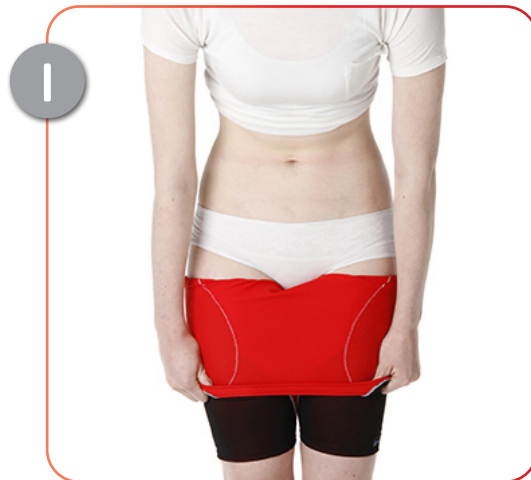

Baje los pantalones cortos por las piernas hacia los pies tirando con cuidado de la parte de dentro hacia afuera. .



Extraiga las piernas de la ortesis.

Para comprobar el ajuste:

- Los pantalones cortos deben quedar bien ajustados, pero debería poder introducir el dedo índice por debajo del borde inferior de los pantalones cortos y la cintura.
- Las costuras o los bordes de la ortesis pueden dejar pequeñas hendiduras en la piel al quitársela, pero si las marcas están demasiado rojas 25 o 30 minutos después de quitársela, puede que quede demasiado ajustada.
- Si tiene dudas sobre si el ajuste es correcto, notifíquelo de inmediato a su terapeuta ya que la ortesis solo se modificará de forma gratuita durante las 6 primeras semanas.

Instrucciones de uso de los leggings personalizados DMO®

Cómo ponerse los leggings DMO®

El paciente tendrá que sentarse o tumbarse para no perder el equilibrio y por su seguridad.

Precauciones:

- Quítese el reloj y las joyas antes de ponerse la ortesis.
- Compruebe que los protectores de las cremalleras están bien situados sobre la piel antes de subirlas y que no están enrollados.
- Los leggings nunca deben llevarse de noche (a menos que así lo indique el médico o fisioterapeuta, algunos pacientes con Ehlers-Danlos pueden beneficiarse si los llevan por la noche, pero antes se debe confirmar), o cuando el usuario esté enfermo o tenga fiebre.
- Si hay problemas con el ajuste, es decir, las extremidades se vuelven moradas o están muy frías al tacto, se debe quitar la ortesis e informar de inmediato al equipo médico para una nueva evaluación.

Para comprobar el ajuste:

- Los leggings deben quedar bien ajustados, pero debería poder introducir el dedo índice por debajo del borde inferior de los leggings y la cintura.



Extraiga la ortesis de su embalaje.



Si tiene cremalleras en el cuerpo o en los tobillos, ábralas primero antes de ponerse los leggings.



Ponga el aplicador de seda del pie. Si se solicita y se suministra.



Ponga la pierna derecha por la pernera derecha de la ortesis.



Tire con cuidado de la pernera derecha de la ortesis hacia la rodilla.



Siga tirando hacia la rodilla hasta que la parte inferior de la pernera derecha de la ortesis esté por encima del tobillo.




Retire el aplicador de seda del pie derecho.



Ponga el aplicador de seda en el pie izquierdo. Para la pernera, mire la imagen 10

9

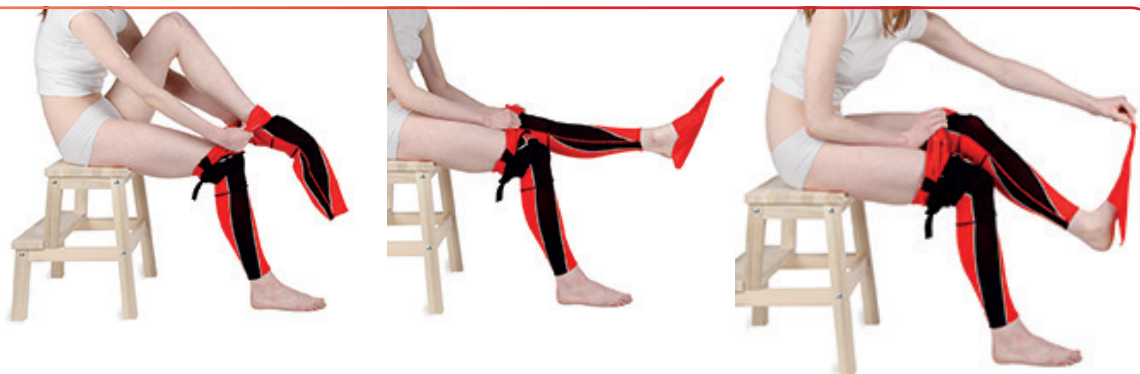

Repita los pasos del 4 al 7. A continuación, extraiga el aplicador de seda del pie. Compruebe que ha subido con cuidado los leggings hasta el muslo antes de intentar subirlos hacia las caderas y el cuerpo.

10




Tire con cuidado de los leggings hacia las caderas.

11




Compruebe que la silicona está en contacto con la piel en la parte superior de la ortesis y suba las cremalleras de las perneras.

12

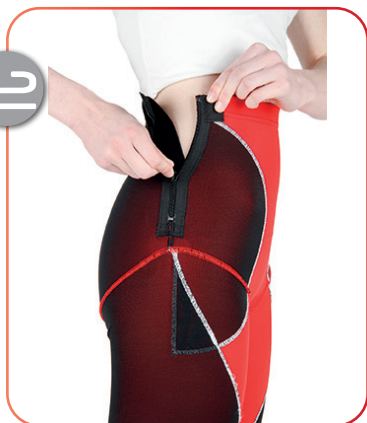

Si tiene cremallera lateral, súbala.

13

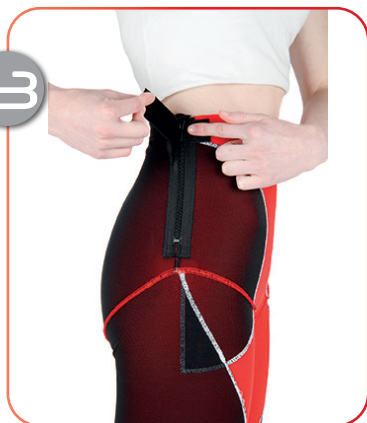

Suba la lengüeta hacia la parte delantera. Solo se incluye donde sea necesaria una cremallera.

14



En la imagen se muestra que la lengüeta está fijada en la parte delantera de la ortesis.

15




Aspecto que deben tener los leggings cuando se llevan de forma correcta.

Para comprobar el ajuste (cont.):

- Las costuras o los bordes de los leggings pueden dejar pequeñas hendiduras en la piel al retirarlos, pero si las marcas están demasiado rojas 25 o 30 minutos después de quitárselos, puede que le queden demasiado ajustados.
- Si tiene dudas sobre si el ajuste es correcto, avise de inmediato al terapeuta ya que la ortesis solo se modificará de forma gratuita durante las 6 primeras semanas.

live your life.

Aspecto que deben tener los leggings al llevarlos puestos:

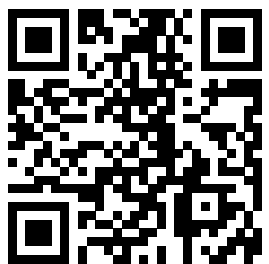


Utilice el código QR de arriba para acceder a los vídeos de instrucciones de uso y cuidado o visite:

www.dmorthotics.com/productcare

Instrucciones de uso de los leggings personalizados DMO®

Cómo quitarse los leggings DMO®


El paciente tendrá que sentarse o tumbarse para no perder el equilibrio y por su seguridad.

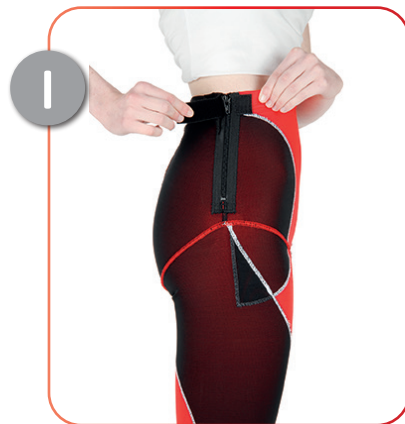

1 Desabroche la lengüeta si está abrochada.



2 Si hay cremallera para el cuerpo, bájela. Si hay cremalleras para los tobillos, bájelas.

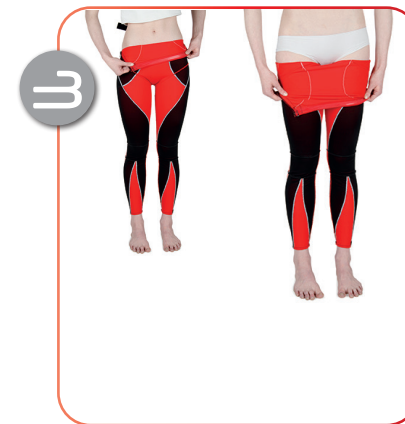

3 Baje la parte superior de los leggings por las piernas hacia las rodillas tirando con cuidado de la parte de dentro hacia afuera.



4 Siéntese y continúe bajando los leggings hacia las rodillas.



5 Siéntese y continúe bajando los leggings hacia las rodillas.



6 Baje los leggings hasta los tobillos en ambas piernas.



7 Extraiga los pies de los leggings.

Instrucciones de uso de la pernera personalizada DMO®

Cómo ponerse la pernera DMO® (con o sin enganche)

El paciente tendrá que sentarse o tumbarse para no perder el equilibrio y por su seguridad.

Precauciones:

- Quítese el reloj y las joyas antes de ponerse la ortesis.
- Compruebe que los protectores de las cremalleras están bien situados sobre la piel antes de subirlas y que no están enrollados.
- Los leggings nunca deben llevarse de noche (a menos que así lo indique el médico o fisioterapeuta, algunos pacientes con Ehlers-Danlos pueden beneficiarse si los llevan por la noche, pero antes se debe confirmar), o cuando el usuario esté enfermo o tenga fiebre.
- Si hay problemas con el ajuste, es decir, las extremidades se vuelven moradas o están muy frías al tacto, se debe quitar la ortesis e informar de inmediato al equipo médico para una nueva evaluación.

Para comprobar el ajuste:

- Los leggings deben quedar bien ajustados, pero debería poder introducir el dedo índice por debajo del borde inferior de los leggings y la cintura.



Extraiga la ortesis de su embalaje.



Ponga el aplicador de seda del pie. Si se solicita y se suministra.



Tire con cuidado de la pernera hacia la rodilla.




A continuación, extraiga el aplicador de seda del pie.



En el caso de las perneras sin enganche, suba la pernera hacia el muslo y asegúrese de que la banda superior de silicona esté correctamente colocada en la parte superior de la pierna.




Compruebe que la silicona está en contacto con la piel en la parte superior de la ortesis.

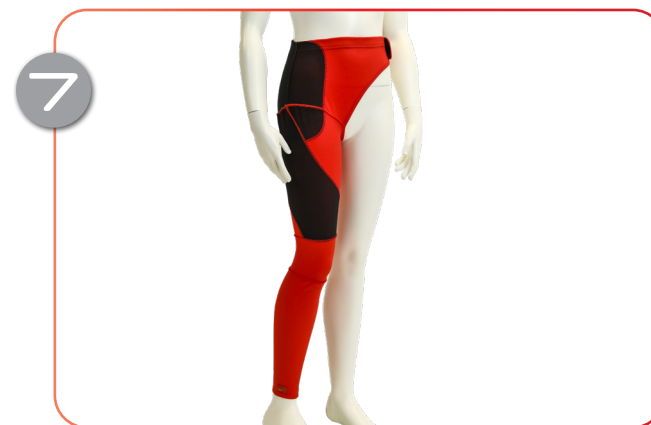

Para las perneras con enganches, tire con cuidado de la pernera hacia la cadera. Compruebe que ha subido con cuidado la pernera hasta el muslo antes de intentar subirla hacia las caderas y el cuerpo. A continuación, abroche el enganche de velcro en la otra cadera.

live your life.

Cómo queda puesta la pernera con y sin enganche.

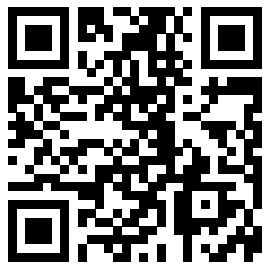

Utilice el código QR de arriba para acceder a los vídeos de instrucciones de uso y cuidado o visite:

www.dmorthotics.com/productcare

Instrucciones de uso de la pernera personalizada DMO®

Cómo quitarse la pernera DMO® (con o sin enganche)

El paciente tendrá que sentarse o tumbarse para no perder el equilibrio y por su seguridad.



Desabroche el enganche de velcro de la otra cadera.



Para quitar la pernera, baje con cuidado la pernera hacia la rodilla tirando de dentro hacia afuera.



Siga sacando la pernera de la pierna, pasando primero por la rodilla y finalmente por el pie.

Declaración sobre la eliminación de dispositivos

Los productos fabricados por DM Orthotics son ortesis personalizadas de clase 1. No es necesario tomar precauciones para eliminar los productos de DMO®. Los materiales utilizados para la fabricación se pueden eliminar según las disposiciones locales para la eliminación de ropa y materiales. Antes de desechar el dispositivo, lávelo.

Declaración de incidente grave

Si se produce algún incidente grave relacionado con el dispositivo DMO®, deberá notificarlo de inmediato al fabricante (DM Orthotics) y a la autoridad competente responsable de los productos sanitarios en el correspondiente Estado miembro; por ejemplo, en el Reino Unido sería la MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios).

Fabricante



Identificación del paciente



Identificador del producto/modelo




Fabricado en Gran Bretaña



Distribuidor



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Países Bajos

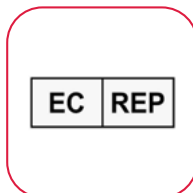

Nombre del médico



Número de pedido



Producto sanitario



Por favor, tenga en cuenta que no se recomienda la modificación por parte del usuario y que la alteración de la ortesis puede afectar a la garantía o anularla. Póngase en contacto con su especialista clínico o con DM Orthotics para obtener información sobre alteraciones y modificaciones del producto.



Fabricante:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Reino Unido
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Diseñadas y fabricadas en Reino Unido.

DM28 – 5054522000142 (UDI-DI)
DM30 – 5054522000166 (UDI-DI)
DM31 – 5054522000173 (UDI-DI)
DM32 – 5054522000180 (UDI-DI)



Fabricante: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Países Bajos