

live your life.



Patientens brugsvejledning:
Specialfremstillet DMO® Sensory leggings



www.dmorthotics.com

Vores produkter

DM Orthotics udviklede DMO® Sensory-serien efter anmodninger fra klinikere om et kompressionsprodukt uden forstærkningspaneler, der forbedrer den sensoriske proprioceptive feedback og core-stabiliteten. Som navnet antyder, er den udviklet til at støtte personer med sensoriske vanskeligheder.

Kompressionskræfterne i stofortosens design kan forbedre den proprioceptive feedback modtaget af hjernen gennem det neuro-sensoriske system. Dette påvirker igen muskeltonus og kropsbevidsthed, hvilket kan føre til en forbedring af kroppens evne til at mærke sin placering, bevægelse og handlinger.

Den dybe trykeffekt kan hjælpe med at reducere symptomer på både overaktiv og lav sensoriske udholdenhed, føre til en positiv effekt på core stabilitet, kropsjustering samt forbedret rumlig bevidsthed. Som kombination kan dette hjælpe på fin- og grovmotorikken.

Specialfremstillede DMO® sensory-produkter fremstilles enkeltvis efter mål, og alle fastgørelser, åbninger og forstærkninger følger individuelle anvisninger i henhold til hver enkelt patients funktionelle behov og præferencer.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om vores DMO® produktsortiment, kan du kontakte din stedlige DMO®-forhandler eller distributør eller DM Orthotics direkte for at finde ud af, hvem det er.

E-mail: admin@dmorthotics.com gå til: www.dmorthotics.com
ring til: +44 (0) 1209 219205

Sådan skal patienter bruge vores produkter

DM Orthotics' specialfremstillede ortoser er beregnet til **udelukkende at blive brugt af en enkelt specifik patient** til støtte og korrektion af kropsholdning og ledjustering. Den bør ikke bæres af andre personer, som den ikke er blevet opmålt og ordineret til.

Alle specialfremstillede DMO-ortoser er medicinsk udstyr i henhold til EU's MDR (forordningen om medicinsk udstyr) (2017/745) og er erklæret at stemme overens med reguleringerne i henhold til bilag II og III til EU's MDR og er omfattet af definitionen af en ortose: En støtte, skinne eller anden kunstig ydre anordning, der tjener til at støtte lemmerne eller rygsøjlen eller til at forhindre eller støtte bestemte bevægelser.

Udstyret er udviklet og fremstillet, så det opfylder de gældende krav i EU's MDR (forordningen om medicinsk udstyr) (2017/745) og er erklæret at stemme overens med reguleringerne i henhold til bilag II og III til EU's MDR.

Dato for levering

Vores specialfremstillede udstyr er fremstillet efter en specifik ordination til en bestemt patient recept og vil blive forsynet med en fremstillingsdato på den medfølgende erklæring. Dette er til en ordination, der er specifik for en individuel patient. Dette skal opbevares af slutbrugeren.

Indholdsfortegnelse

●Brugsanvisning	s. 3
●Vaskeanvisninger	s. 4
●Kontraindikationer og forholdsregler	s. 5

Specialfremstillet Sensory leggings **s. 6**

●Anvendelsesformål	s. 6
●Påænkt patientpopulation	s. 6
●Påænkede brugere	s. 6
●Effektiv for patienter	s. 6
●Kliniske fordele	s. 6
●Sådan tager du produktet af og på	s. 7
●Erklæring om bortskaffelse af enheden	s. 10
●Erklæring om alvorlig hændelse	s. 10
●Forklaring af de anvendte symboler	s. 11

Brugsanvisning

Følg plejeanvisningen omhyggeligt. Ved at passe omhyggeligt på din ortose vil du **forlænge holdbarheden og forhindre skader**.

SÅDAN GØR DU

- Tag ortosen på og af som anbefalet af din terapeut/leverandør. Se webstedet: www.dmorthotics.com/productcare
- Vær forsigtig, når du tager den af og på, og følg nøje anvisningerne i dette hæfte. Hvis du trækker den af eller på for hurtigt, eller hvis du har lange negle, kan den blive beskadiget.
- Det er vigtigt at opbygge anvendelsestiden af ortosen i overensstemmelse med dine individuelle instruktioner.
- Følg vaskeanvisningerne omhyggeligt, da ortosen ellers kan blive beskadiget.

UNDLAD

- Undlad at tage dit skræddersyede produkt af eller på med magt - dette kan forårsage skader på produktet, så der løber masker, eller der opstår flænger eller huller i stoffet.
- Undlad at tage den på eller af med lange fingernegle, det kan også beskadige stoffet.

PASFORM ELLER SIKKERHEDSHENSYN

Kontakt **STRAKS** din terapeut/leverandør, hvis ortosen bliver meget stram, forårsager røde mærker, eller hvis maskerne begynder at løbe og/eller får huller.

DMO® produkter er designet som et supplement til terapi og fysisk træning, så de bør ikke fjernes for at træne, medmindre din terapeut anbefaler det, eller du har andre bekymringer, som de kan hjælpe dig med.

Anvendelsestid

SÅDAN GØR DU

- Udvid langsomt anvendelsestiden i løbet af den første uge som angivet nedenfor, så du fordobler varigheden hver dag, indtil ortosen bruges gennem en hel arbejdsdag.

f.eks. 1. dag - 1 time
2. dag - 2 timer
3. dag - 4 timer
4. dag - 8 timer
5. dag - hele dagen i dagtimerne. Derefter hele dagen, hver dag i løbet af dagen.

UNDLAD

- Bær ortosen hele dagen med det samme. Anvendelsen bør opbygges for at sikre sensorisk tolerance, biomekaniske ændringer og -for at holde øje med pasformen.
- Må ikke bæres om natten.

Vaskeanvisning

Følg vaskeanvisningen nøje. Ved at passe godt på din ortose forlænger du dens levetid og forebygger skader.

GØR

- Ortosen bør vaskes mindst hver 2.-3. dag.
- Ortosen kan håndvaskes i koldt vand eller maskinvaskes ved 30°C.
- Vaskes separat.
- Brug kun kort centrifugering eller rul ortosen ind i et tørt håndklæde for at fjerne overskydende fugt.
- Lad den tørre helt natten over ved at hænge den op indendørs.

GØR IKKE

- TØR IKKE i stærkt direkte sollys eller på en radiator.
- VRED IKKE – det vil strække ortosen og beskadige materialet.
- STRYG IKKE.
- Brug ikke blegemidler eller optisk hvidt.
- Brug ikke skyllemiddel.
- RENS IKKE.
- TØRRETUMBL IKKE – det vil få ortosen til at krympe.

For yderligere hjælp og support har vi tilføjet en vejledning i, hvordan du tager din ortose af og på, på vores hjemmeside. Besøg venligst: www.dmorthotics.com/productcare.

Regelmæssig og korrekt pleje af ortosen forhindrer udvikling af lugt og holder materialet smidigt. Hvis din ortose er sølvbehandlet, skal denne behandling genanvendes efter 100 vaske, da sølvionerne begynder at forsvinde efter 50 vaske.




Anvendelse af vores produkter

Vi har lavet en række videoguides, der skal hjælpe vores kunder med at få det bedste ud af deres produkt. Disse vejledninger indeholder nyttige tips og tricks til brugen af vores produkter, og til, hvordan du bedst passer på dem, når du tager dem af og på.

For at se dem gå til: www.dmorthotics.com/productcare

DMO® produkter bør bæres direkte på huden. Det er vigtigt at opbygge anvendelsestiden langsomt i løbet af den første uge ved at fordoble varigheden hver dag, indtil den bæres dagen igennem, f.eks.

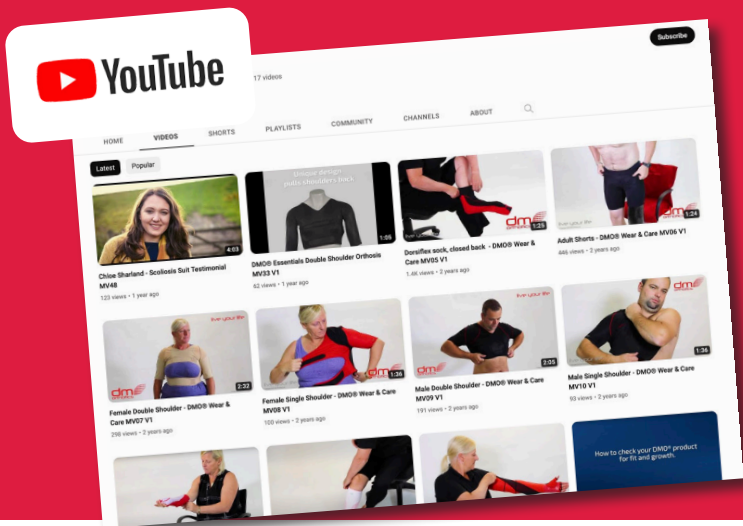

KONTRAINDIKATIONER OG FORHOLDSREGLER/OVERVEJELSER

Kontraindikationer

Der er ingen kendte kontraindikationer for brug af en DMO®. Vurderingen for et specialfremstillet DMO®-produkt skal udføres af en autoriseret læge med de korrekte faglige kvalifikationer.

Forholdsregler/overvejelser

Det følgende er en liste over mulige forholdsregler, der skal tages i betragtning, før du fortsætter med at ordinere et DMO®-produkt. Dette bør drøftes med din fagligt kvalificerede læge, som kan foreslå et alternativt DMO®-produkt eller en ændring af det foretrukne DMO®-produkt.

Dårlig temperaturregulering

En DMO vil ikke have nogen indflydelse på kroppens termoregulatoriske center. DMO bør dog behandles som et lag af tøj, og tøjlæg skal justeres tilsvarende til varmt eller koldt klima. Der kan foretages justeringer af ordinationen, såsom korte ben og ærmer, for at hjælpe med at forbedre varmekontrollen.

Primære kredsløbsforstyrrelser

Visse primære luftvejsproblemer, hvor musklerne bliver svagere på grund af en nedbrydning af nerver/muskler, kræver nøje overvejelser og kan kræve drøftelse med patientens læge - selvom dragtens specifikation kan ændres for at imødekomme dette. Sekundære kredsløbsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grund af forbedret kropsholdning og forbedret position af ribbenene.

Hudlidelser

Hudlidelser, der kan forværres ved tæt kontakt med syntetiske materialer i længere perioder, kan kræve yderligere konsultation med sundhedspersonale, som overvåger patientens dermatologiske behandling, men dette er sjældent en kontraindikation.

Skrøbeligt skelet/knogleskørhed

Nogle tilstande kan godt understøttes af et DMO®-produkt, men dette bør diskuteres med din læge. Der kan foretages ændringer i det foretrukne produkt, såsom tilføjelse af lynlåse eller trykknapper eller brug af korte ærmer eller ben i stedet for lange ærmer eller ben.

Gastrostomi, stomi og andre medicinske behov

Vi kan fremstille det specialfremstillede produkt med en særlig åbning til en gastrostomi, stomi, suprapubisk kateter osv. Dette vil blive tilføjet på tilpasningsstadiet for at sikre præcis placering. Tal om dette med din læge, som kan søge yderligere rådgivning fra det erfarne kliniske team hos DMO®.

DMO® Sensory leggings

Anvendelsesformål

SENLA/SENLC Sensory-leggingenes anvendelsesformål er at forbedre proprioceptiv og sensorisk feedback. Dette sker gennem den medfølgende kompression. På grund af den kompressive karakter vil dette også give en grad af stabilisering af leddene, der er dækket af leggingene.

Indikationer

Voksne og børn med sanseforstyrrelser, ADHD, autisme mv.

Påtænkt patientpopulation

Mandlige og kvindelige patienter. Der er ingen aldersgrænser for bæreren af SENLA/SENLC sensoriske leggings, og mange lidelser med symptomer, der påvirker det sensoriske system, kan have gavn af leggingene.

En rimelig høj grad af fingerfærdighed og muskelstyrke er påkrævet for dem, der selv skal tage og tage ortosen af. Der vil være brug for en omsorgsperson til at hjælpe med at tage ortosen på og af, hvor dette ikke er tilfældet.

Påtænkte brugere

Ortosens bærer vil typisk være en lægperson.

Bærerens omsorgsperson, som eventuelt inddrages i af- og påtagning, vask og indberetning af problemer med ortosen, vil typisk være en lægperson.

Den pågældende enhed er lavet efter mål og kræver specifikation af en sundhedsmedarbejder, der er uddannet i brugen af DMO®. Dette kræver, at der tages en række målinger, hvilket sundhedspersonalet er blevet oplært i af DM Orthotics.

Egnet til:

Voksne og børn, der kræver kompression for at øge kropsbevidstheden og mindske overaktivitet. Dette kan give en beroligende effekt og forbedre core-stabilitet og midtlinjeorientering.

Effektiv ved:

- sensoriske vanskeligheder
- nogle mennesker med autisme, ADHD og Sensory Processing Disorder

Giver:

- øget sensorisk bevidsthed
- støtte til høj sensorisk tolerance eller lav sensorisk tolerance
- øget rumlig opmærksomhed og koncentration
- nedsat taktil følsomhed

Fordele omfatter:

- leggings kan leveres med åbent skridt for at lette toiletbesøg
- kan bruges hele dagen
- bomuld/polyester-blanding
- åndbart og vaskbart materiale
- bruges under tøjet, men kan bruges alene, hvis det ønskes, især i varme klimaer
- udvendige sømme for at forbedre produktets indvendige fornemmelse og undgå kløende områder
- Oeko-Tex certificering – standard 100



Specialfremstillet DMO® Sensory leggings - påføringsanvisninger

Sådan tager du specialfremstillede DMO® Sensory leggings på. (Til illustrationsformål blev der anvendt specialfremstillede leggings)

Forholdsregler:

- Fjern ure og smykker, inden du tager ortosen på.
- Sørg for, at lynlåsene er på plads over huden, før du lukker dem, og at de ikke er rullet tilbage.
- Leggings bør aldrig bæres om natten, (medmindre det er aftalt med en læge eller en fysioterapeut. Nogle EDS-patienter kan have gavn af nattøj, men dette skal undersøges først), eller når brugeren er syg eller har feber.
- Hvis der er problemer med pasformen, f.eks. hvis ekstremiteterne bliver blå eller føles meget kolde at røre ved, skal du straks tage shortsene af og informere behandlerteamet, så der kan foretages yderligere undersøgelser.

Sådan kontrolleres pasformen:

- Leggings skal sidde stramt, men du skal kunne føre din pegefinger ind under den nedre kant og i taljen.



Tag ortosen ud af emballagen, og åbn alle eventuelle lynlåse.



Påfør silkefodsapplikatoren. Hvis den er bestilt og leveret.



Før højre ben gennem ortosens højre ben.




Træk forsigtigt ortosens højre ben op mod knæet.




Bliv ved med at trække forsigtigt mod knæet, indtil bunden af ortosens højre ben befinder sig over anklen.



Fjern silkeapplikatoren fra højre fod.

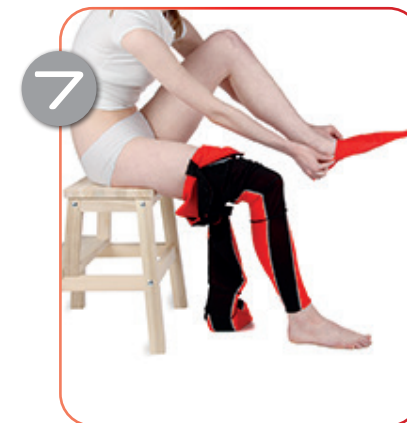


Tag silkeapplikatoren på venstre fod.

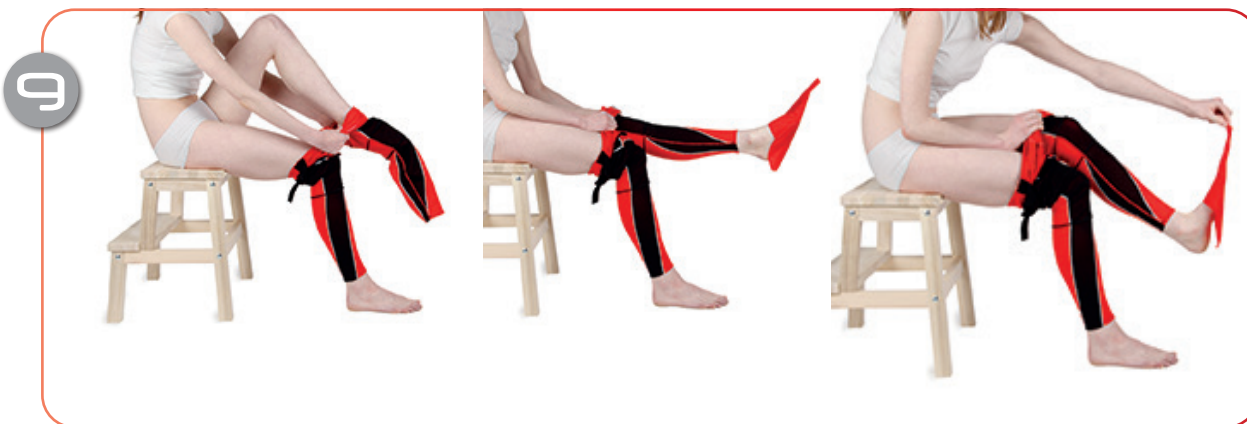

Gentag trin 4 til 7. Fjern derefter silkeapplikatoren fra foden. Sørg for, at du har trukket leggings forsigtigt op til låret, før du forsøger at trække dem op over hofterne og kroppen.



Træk leggings forsigtigt op mod hofterne.

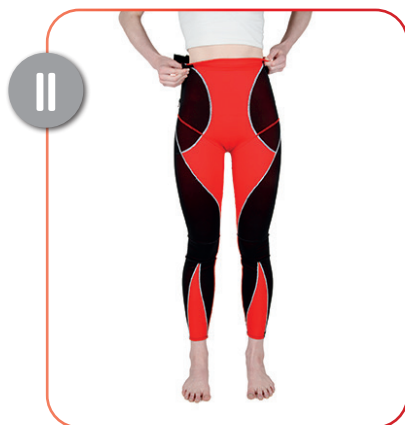

Sørg for, at silikonen er i kontakt med huden øverst på ortosen, og luk eventuelle lynlåse.




Sådan skal leggings se ud, når de er taget på korrekt.

Sådan kontrolleres pasformen forts.:

- Syningerne/enderne på Leggings kan efterlade små mærker på huden, når de fjernes, men hvis mærkerne er meget røde 25-30 minutter efter, at de er fjernet, kan de være for stramme.
- Hvis du er i tvivl om pasformen, skal du måle din hofte (J) igen. Leggings i fast størrelse kan erstattes med en større eller mindre størrelse eller returneres til refusion, forudsat at de er ubrugte og returneres i deres originale emballage. Se vores vilkår og betingelser.

live your life.

Sådan skal leggings se ud, når du har den på:

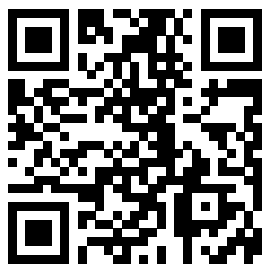

Brug QR-koden ovenfor for at få adgang til vores videoer om brug og pleje, eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare

Sådan tager du de specialfremstillede DMO® Sensory leggings af (Til illustrationsformål blev der anvendt specialfremstillede leggings)



Åbn eventuelle lynlåse. Rul leggings øvre del ned mod knæene.



Sid ned, og fortsæt med at rulle leggings ned mod knæene.



Sid ned, og fortsæt med at rulle leggings ned mod knæene.



Rul leggings ned til anklerne på begge ben.



Fjern fødderne fra leggings, én ad gangen.

Erklæring om bortskaffelse af enheden

De produkter, der fremstilles af DM Orthotics, er klasse 1 / specialfremstillede ortopædiske enheder. Der skal ikke træffes nogen forholdsregler ved bortskaffelse af DMO®-enheder. De materialer, der er anvendt til fremstillingen, kan bortskaffes i overensstemmelse med dine lokale ordninger for bortskaffelse af tøj/materialer. Vi beder dig dog om at vaske enheden, før du bortskaffer det.

Erklæring om alvorlig hændelse

Hvis der sker en alvorlig hændelse i forbindelse med din DMO®-enhed, skal du straks indberette den til producenten (DM Orthotics) og den kompetente myndighed med ansvar for medicinsk udstyr i din medlemsstat, f.eks. i Storbritannien til MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency).

Producent



Patient-id



Produkt-/model-id




Fremstillet i Storbritannien



Distributør




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederlandene

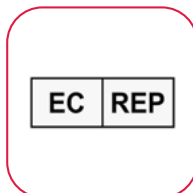

Klinikerens navn



Ordrenummer

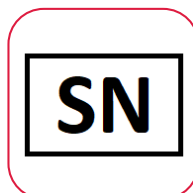

Medicinsk udstyr



Bemærk venligst, at ændringer fra brugerens side ikke anbefales, og at din garanti kan påvirkes eller ugyldiggøres, hvis du selv foretager ændringer på ortosen. Kontakt din kliniske specialist eller DM Orthotics vedrørende oplysninger om ændringer og produktmodifikationer.



Producent:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Storbritannien
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Designet og fremstillet i Storbritannien

© Ophavsrettighed 2024 DM Orthotics Ltd. Patent- og designregistrering gælder.

UDI-DI - 5054522002313



Producent: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederlandene

DM-002732-MK (Issue 3)