

lev livet.



Bruksdokument for pasientinformasjon:

DMO® måltilpasset erme, hanske og hanske med åpen håndflate



www.dmorthotics.com

Våre produkter

Våre måltilpassede Dynamic Movement Orthoses® bruker et mykt, fleksibelt elastomert stoff som sørger for tett passform og skaper kompresjonskraft for å forbedre proprioseptiv tilbakemelding. Dette basestoffet er lett, pustende og sterkt.

Dette er kombinert med forsterkningspaneler laget av et powernet-materiale for å gi styrke og stabilitet der det er behov for å forbedre holdning og biomekanisk justering.

Våre måltilpassede ortoser fungerer gjennom strategisk plasserte forsterkninger som plasserer kroppen i en bedre stilling. Denne nye biomekaniske tilstanden kombinert med forbedret proprioepsjon stimulerer og justerer det nevro-sensoriske systemet, trener muskler for å jobbe med forbedret tonus, styrke og ytelse.

DMO®-produktene hjelper både voksne og barn med å håndtere de fysiske effektene av deres nevrologiske, muskuloskeletale og genetiske tilstander.

DMO® måltilpassede produkter er individuelt måltilpassede, og alle fester, åpninger og forsterkninger er individuelt foreskrevet i henhold til de funksjonelle behovene og preferansene til hver enkelt pasient.

Ta kontakt

For å finne ut mer om våre DMO®-produktserier, kontakt din lokale DMO®-leverandør eller distributør eller DM Orthotics direkte for å finne ut hvem dette er.

E-post: admin@dmorthotics.com eller gå til: www.dmorthotics.com eller ring: +44 (0) 1209 219205

Hvordan vi har tenkt at produktene våre skal brukes

DM Orthotics måltilpassede ortoser er ment for **eksklusiv bruk av én enkelt, spesifikk pasient** for å støtte og korrigere holdning og justering av ledd. Den skal ikke bæres av andre personer som den ikke er individuelt målt og foreskrevet for.

Alle måltilpassede DM Orthotics ortoser er medisinsk utstyr som definert av EU MDR (2017/745), og er erklært å være i samsvar med forskriftene i henhold til vedlegg II og III EU MDR. De kommer inn under definisjonen av et ortopedisk medisinsk utstyr: en spenne, skinne eller annen kunstig ekstern enhet som har som formål å støtte lemmer eller ryggrad eller for å hindre eller hjelpe relativ bevegelse.

Enhetene er tilpasset (i henhold til vedlegg XIII MDR) og oppfyller gjeldende krav i MDR (Medical Devices Regulation) (2017/745): Tilpasset produkt

Utstedelsesdato

Vårt tilpassede enheter produseres og utstedes med en produksjonsdato på det medfølgende deklarasjonsskjemaet som sendes med produktet ditt. Dette er ment som fremtidig referanse for sluttbruker.

Innhold

● Bruksanvisning	S3
● Vaskeanvisninger	S4
● Kontraindikasjoner og forholdsregler	S5
● Tiltent bruk	S6
● Tiltent pasientgruppe	S6
● Tiltente brukere	S7
● Effektiv for pasienter	S7
● Kliniske fordeler	S7
● Bruk med andre ortoser	S7

Måltilpasset hanske S 6

● Hvordan sette på og ta av	S8
-----------------------------	----

Måltilpasset erme

● Slik setter du på og tar av	S11
-------------------------------	-----

Måltilpasset hanske med åpen håndflate (SPOG)

● Slik setter du på og tar av	S13
-------------------------------	-----

● Erklæring om enhetsavhending	S10
● Erklæring om alvorlig hendelse	S10
● Forklaring av symboler som brukes	S11

Bruksanvisning

Følg vedlikeholdsrådene nøye. Hvis du tar vare på ortosen vil du **forlenge dens levetid og forhindre skade.**

DU MÅ GJØRE FØLGENDE

- ta ortosen av og på som anbefalt av terapeuten/leverandøren. Se nettsted: www.dmorthotics.com/productcare
- vær forsiktig når du tar den på og av og følg bruksanvisningen. Hardhendt behandling ved av- og påtagning, samt lange negler, kan skade produktet.
- det er viktig at du bygger opp brukstiden i henhold til dine individuelle instruksjoner.
- følg vaskeanvisningene nøye for å forhindre at det oppstår skader på ortosen.

DU MÅ IKKE GJØRE FØLGENDE

- hardhendt behandling ved av- og påtagning av det ferdig tilpassede produktet kan føre til at produktet får skade eller lage rifter eller hull i stoffet.
- ikke ta plagget av/på med lange finger negler, dette kan også skade stoffet.

TILPASNING ELLER SIKKERHETSBEKYMRINGER

Ta kontakt med behandleren/leverandøren **UMIDDELBART** hvis ortosen blir veldig trang, forårsaker røde merker eller har fått rifter og/eller hull.

DMO® -produktene er designet som et tillegg til terapi og fysisk trening, så de bør ikke fjernes for trening med mindre det er anbefalt av terapeuten din.

Brukstid

DU MÅ GJØRE FØLGENDE

- bygg opp brukstiden sakte i løpet av den første uken, som angitt nedenfor, og doble den daglige tiden frem til ortosen kan brukes under hele arbeidsdagen.

f.eks 1. dag – 1 time

2. dag – 2 timer

3. dag – 4 timer

4. dag – 8 timer

5. dag – hele dagen, i løpet av dagen. Bruk den deretter hele dagen og hver dag på dagtid.

DU MÅ IKKE GJØRE FØLGENDE

- bruke ortosen hele dagen umiddelbart. Brukstiden må bygges opp for å sikre at sensoriske inntrykk, biomekaniske endringer og passform overvåkes.
- ikke bruk dine DMO- om natten med mindre det er anbefalt av legen eller klinikerens din, f.eks. når det gjelder EDS-pasienter, hvor dette kan være gunstig.

Vaskeanvisninger

Følg vedlikeholdsrådene nøye. Hvis du tar vare på ortosen vil du **forlenge dens levetid og forhindre skade**.

DU MÅ GJØRE FØLGENDE


- ortosen må vaskes minst hver 2- 3. dag.
- ortosen kan håndvaskes i kaldt vann eller maskinvaskes på 30 grader.
- kun kort sentrifugering, eller rull ortosen inn i et tørt håndkle for å fjerne overflødig fuktighet.
- la ortosen tørke helt over natten ved å henge den opp innendørs.

DU MÅ IKKE GJØRE FØLGENDE

- IKKE tørk ortosen i sterkt, direkte sollys eller på en varmeovn.
- IKKE VRI - det vil strekke den ut av form og forårsake skade på materialet.
- MÅ IKKE STRYKES.
- MÅ IKKE BLEKES.
- MÅ IKKE RENSES.
- MÅ IKKE TØRKES I TØRKETROMMEL, den vil krympe.

For ytterligere hjelp og støtte har vi lagt ut en forklaring på hvordan du setter på og tar av ortosen på vårt nettsted: www.dmorthotics.com/productcare.

Regelmessig og riktig behandling av ortosen vil forhindre luktutvikling og bevare materialets smidighet. Hvis ortosen er sølvbehandlet vil dette måtte gjøres om igjen etter 100 vask, ettersom sølvionene begynner å løses opp etter 50 vask.

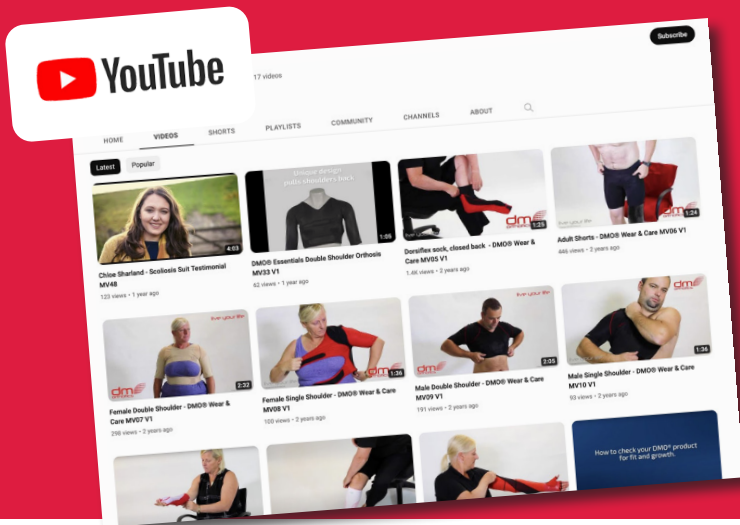

Bruke produktene våre

Vi har laget en rekke videoguides for å hjelpe kundene våre med å få mest mulig ut av produktet sitt. Disse guidene inneholder nyttige tips og triks for bruk av produktene våre og hvordan du best kan ta vare på dem når du tar den på eller av.

For å se disse, gå til: www.dmorthotics.com/productcare

DMO® -produktene skal bæres nærmest huden. Det er viktig å bygge opp brukstiden sakte i løpet av den første uken, og doble tiden daglig til den kan brukes hele dagen, f.eks.

KONTRAINDIKASJONER OG FORHOLDSREGLER

Kontraindikasjoner

Det finnes ingen kontraindikasjoner ved bruk av DMO®. Vurdering av en DMO® Spesialtilpasset produkt skal utføres av en autorisert medisinsk fagperson med riktige faglige kvalifikasjoner.

Forholdsregler

Her er en liste over mulige forholdsregler å vurdere før du går videre med forskrivning av et tilpasset DMO®-produkt. Dette bør diskuteres med din kvalifiserte lege som kan foreslå et alternativt DMO®-produkt eller endring av foretrukket DMO®-produkt.

Dårlig temperaturregulering

En DMO vil ikke ha noen innvirkning på kroppens temperaturregulering. Imidlertid bør DMO-en behandles som et lag med klær som må justeres for varmt eller kaldt klima i henhold til dette. Man kan gjøre justeringen i forhold til gitt resept, f.eks korte ben og armer for å forbedre varmekontrollen.

Primære sirkulasjonsforstyrrelser

Visse primære luftveisproblemer der musklene blir svakere på grunn av svekkelse av nerver/muskler, vil trenge nøye vurdering og kan kreve diskusjon med pasientens lege. Draktspesifikasjonen kan imidlertid endres for å imøtekomme dette. Sekundære sirkulasjonsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grunn av forbedret holdning av overkropp/kropp og forbedret posisjon av ribbeina.

Hudsykdommer

Hudsykdommer som kan forverres ved nær kontakt med syntetiske materialer over lengre perioder, kan kreve ytterligere konsultasjon med helsepersonell som overvåker pasientens dermatologiske behandling, men dette er sjelden en kontraindikasjon.

Skjelettskjørhet/benskjørhet

Noen tilstander kan få god støtte med et DMO® produkt, men dette bør diskuteres med legen din. Endringer kan gjøres på det foretrukne produktet, som tillegg av glidelåser eller trykknapper eller bruk av korte armer eller ben i stedet for lange armer eller ben.

DMO® måltilpasset erme, hanske og hanske med åpen håndflate

Tiltenkt bruk

Den tiltenkte hensikten med DM11-erme, DM16/17/18 hanske og DM49 hanske med åpen håndflate, er å justere den øvre lemme som inkluderer albuen, håndleddet og hånden (der hanskeseksjonen er inkludert). Disse ermene/hanskene gir svært effektiv støtte med fri bevegelse for å maksimere stabiliteten. Ermet/hansken hjelper også distal kontroll og påvirker muskeltonen positivt for å forbedre funksjonen. Hansken/ermet kan også ha en positiv innvirkning på skulderposisjonen selv om skulderen ikke er inkludert i ortosen.

Barn eller voksne med lav eller høy muskeltonus, sensoriske eller proprioceptive problemer. Barn eller voksne som har smerter forbundet med dårlig justering eller tretthet forårsaket av manglende evne til å opprettholde en stabil stilling i overkropp eller underkropp.

Tiltenkt pasientgruppe

Mannlige og kvinnelige pasienter vanligvis i alderen to år eller eldre. Barn under to år kan imidlertid også ha nytte av hansken/ermet. Den nedre aldersgrensen ble satt på grunn av økt vekst på dette stadiet som ville kreve justering eller ny produksjon av hansken/ermet. Det skyldes ikke manglende evne til å oppnå den tiltenkte bruken. Hansken/ermet har ingen øvre aldersgrense.

En rimelig høy grad av fingerferdighet og muskeltonus er nødvendig for de som skal ta hansken/ermet av og på selv. En omsorgsperson vil bli pålagt å hjelpe med påkledning og avkledning av hansken/ermet der dette ikke er tilfelle.

Tiltenkte brukere

The DM11 erme, DM16/17/18 hanske/erme og DM49 hanske med åpen håndflate vil kreve resept og spesifikasjon av kompetent helsepersonell, vanligvis en kvalifisert ortotist, fysioterapeut eller ergoterapeut, som har fått riktig opplæring i reseptbehandling og bruk av Dynamic Movement Orthoses® (DMO®). Kompetent helsepersonell vil også bli pålagt å vurdere passformen til DM11 erme, DM16/17/18 hanske og DM49 hanske med åpen håndflate, og å gi ytterligere spesifikasjonsråd for å forbedre passformen der det er nødvendig.

Brukeren av DM11 erme, DM16/17/18 hanske og DM49 hanske med åpen håndflate vil vanligvis være en lekmann.

Brukerens omsorgsperson som kan være involvert i påkledning og avkledning, vasking og rapportering av eventuelle problemer med DM11 erme, DM16/17/18 hanske og DM49 hanske med åpen håndflate, vil vanligvis være en lekmann.

Den aktuelle enheten er laget for måling og krever spesifikasjon av helsepersonell som er opplært i bruk av dynamiske bevegelsesortoser (DMO). Dette vil kreve et sett med målinger som helsepersonell vil ha fått opplæring i å utføre fra DM Orthotics.

En rekke forskjellige forsterkningspaneler må også foreskrives etter behov av opplært helsepersonell.



Erme

Effektiv for:

- Cerebral parese
- Funksjonsnedsettelse av øvre lemmer
- Multippel sklerose
- Ehlers-Danlos syndromer
- Høy og lav muskeltonus
- Sensoriske svekkelser

Gir:

- Økt sensorisk bevissthet
- Forbedret holdning
- Forbedret posisjonering (der forsterkninger er lagt til)
- Smertelindring

Tilleggsfunksjoner:

- Kompresjonsstoff for komfort og bevegelse
- Forsterkningspaneler for styrke og stabilitet
- Brukes under klær

Måltilpasset hanske med åpen håndflate (SOPOG)

Effektiv for:

- Cerebral parese
- Hjerneslag
- Dystoni
- Sensoriske svekkelser
- Ataxia

Gir:

- Forbedret justering av fingre, tommel og håndledd
- Påvirker muskeltone
- Forbedret sensorisk bevissthet

Tilleggsfunksjoner:

- Kompresjonsstoff for komfort og bevegelse

Hanske med erme

Effektiv for:

- Cerebral parese
- Hjerneslag
- Multippel sklerose
- Ataxia
- Påført og traumatisk hjerneskade
- Ehlers-Danlos syndromer
- Dystoni
- og mer

Gir:

- Forbedret justering av fingre, tommel og håndledd
- Forbedret justering av albueforlengelsen (med hanske i full lengde)
- Supinasjon av underarmen (eller pronasjon om nødvendig)
- Påvirker muskeltone
- Forbedret sensorisk bevissthet

Tilleggsfunksjoner:

- Kompresjonsstoff for komfort og bevegelse
- Silikonputer for bedre grep
- Forsterkningspaneler for styrke og stabilitet
- Tilgjengelig med lang eller kort arm



DMO® bruksanvisning for hanske

Avhengig av personlig preferanse, er det forskjellige måter å bruke hansken/gauntleten på. Fjern hansken og fingerapplikatoren (hvis den har lange fingre) fra emballasjen og løsne glidelåsen. For DMO® gauntlet, følge alternativ 1 i bruksanvisningen. Du kan også se videoene våre på www.dmorthotics.com/productcare om hvordan du tar på og av DMO®-produktet ditt.

Forholdsregler:

- fjern klokke og ringe til etter at ortosen er tilpasset.
- når du åpner eller lukker glidelåsen, pass på at huden ikke festes i den.
- vær forsiktig når du justerer silikonbånd på toppen av ortosen for å sikre at håret og huden ikke festes i båndet.
- hvis det er bekymringer med passform, dvs. at ekstremiteter blir blå eller føles kalde, må du straks fjerne hansken og informere det kliniske teamet for ytterligere assistanse.

Slik sjekker du passformen:

- røde fingre – hansken skal sitte stramt. Fingrene kan være litt røde i starten mens drakten settes på. Dette er vanlig, og rødheten vil etterhvert forsvinne
- blå fingre – hvis hansken er riktig justert og fingrene er blå, fjern ortosen og ta den med tilbake til klinikken for ytterligere tilpassing.

Alternativ 1. Passer til hansker uten applikator.

DMO® tilpasset gauntlet har ingen separate fingre, men brukes fortsatt på samme måte som en hanske.



1 Putt hånden inn i hansken gjennom den åpne glidelåsen, og sørg for at fingrene og tommelen er i riktig hull. Fortsett å skyve fingrene gjennom hanskehullene til de er helt på. Kontroller at tommelen og pekefingeren (hvis pekefinger er inkludert i designet) er i riktig hull på hansken.



2 Før hånden gjennom den åpne enden av hansken til hånden kommer ut gjennom glidelåsen.



3 Skyv hånden med hansken gjennom hullet.



4 Fortsett å skyve hånden gjennom hullet.



5 Trekk hansken oppover armen (rull silikonbåndet tilbake). Fest glidelåsen og pass på at huden ikke sitter fast i den.



6 Juster hansken. Glidelåsen skal se litt skjev ut når hånden er i hvileposisjon. Hvis glidelåsen er rett, er hansken satt på feil.

Alternativ 2. Passer til hansker med fingerapplikator.



1 Løsne glidelåsen, vri hansken fra innsiden og ut og bruk en blyant for å åpne enden på hanskehullene (dette er for å sikre at fingrene glir inn i hansken).



2 Plasser fingerapplikatoren på langfingeren.



3 Med fingerapplikatoren på den midterste fingeren (langfinger), skyv den inn i det midterste fingerhullet.



4 Trekk fingerapplikatoren av og la hansken sitte på langfingeren.



5 Gjenta trinn 3 og 4 for hver finger i denne rekkefølgen: - midtre finger, fjerde finger (ringfinger) lillefinger, pekefinger (indeksfinger) til alle fingrene er på plass i hansken.



6 Plasser fingerapplikatoren på tommelen og gjenta trinn tre én gang til. Fjern applikatoren med hansken på plass på tommelen.



7 Trekk hansken på plass på håndleddet. Skyv hånden ned gjennom ermet på hansken.



8 Trekk hansken oppover armen og sørg for at sømmen bak tommelen løper opp til den benete fremtredende på utsiden av albuen – den laterale epikondylen. For en lang hanske, trekk den sakte opp til toppen av armen. De to horisontale linjene skal være på hver side av albueleddet. Når hansken er helt på, rull silikonet tilbake for å holde hansken på plass.




9 Fest glidelåsen og pass på at huden ikke festes i den.


Hvordan fjerne DMO® tilpasset gauntlet/hanske

DMO® tilpasset gauntlet har ingen separate fingerhull i motsetning til hansken. Fjerning er den samme for alle DMO®-hansker og metallhansker

Hvordan hansken skal se ut når den er på:

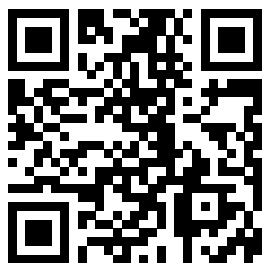

Bruk QR-koden ovenfor for å få tilgang til våre brukervennlige videoer eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare

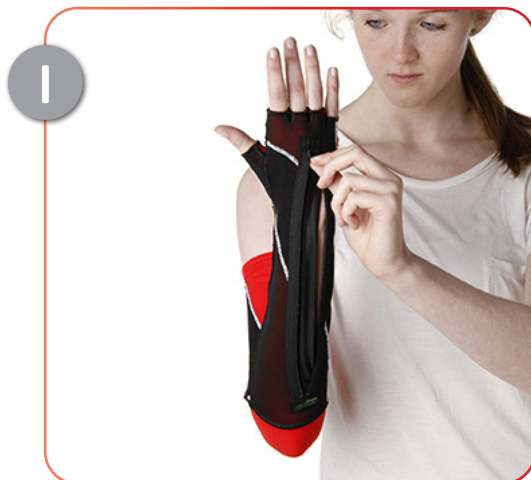

1 IKKE fjern ved å trekke i fingrene. Åpne glidelåsen og pass på at huden ikke festes i den.



2 Trekk toppen av hansken ned mot hånden. Pass på å rulle ut silikonbåndet så hårene på huden ikke trekkes ut.



3 Trekk hansken forsiktig over håndleddet og deretter over fingrene.



4 Hvis du fjerner en hanske, må du løfte fingrene forsiktig ut av hvert fingerhull.

DMO® bruksanvisning for måltilpasset erme

Slik setter du på måltilpasset erme.

Forholdsregler:

- fjern klokker og ringe til etter at ortosen er tilpasset.
- når du åpner eller lukker glidelåsen, pass på at huden ikke festes i den.
- vær forsiktig når du justerer silikonbånd på toppen av ortosen for å sikre at håret og huden ikke festes i båndet.
- hvis det er bekymringer med passform, må du straks fjerne ermet og informere det kliniske teamet for ytterlig assistanse.

Slik sjekker du passformen:

- du bør kunne bevege fingeren rundt kanten på kanten av ortosen ved håndleddet og aksillen. Hvis dette er for løst eller for stramt, kontakt klinikerens din.



1 Ta produktet ut av emballasjen og legg silkeapplikatoren og ermet



2 Plasser hånden i silkeapplikatoren og begynn å plassere ermet over hånden.



3 Når ermet er plassert på armen til barnet, fjern silkeapplikatoren forsiktig fra hånden.



4 Trekk ermet forsiktig opp over albuen til toppen av armen.




5 Påse at ermet er plassert opp til toppen av armen og at silikonbåndet er på plass over huden.

lev livet.

DMO® måltilpasset erme

Slik tar du av DMO® erme

Hvordan ermen skal se ut når den er på:

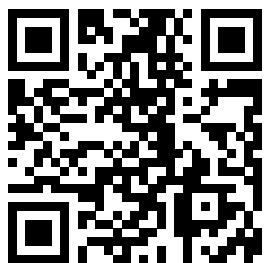

Bruk QR-koden ovenfor for å få
tilgang til våre brukervennlige
videoer eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare



1 Vri toppen av ermet med vrangen ut ved silikonbåndet.



2 Fortsett å trekke ermet forsiktig med innsiden ut, ned over albuen og av over hånden.



3

DMO® bruksanvisning for hanske med åpen håndflate (SOPOG)

Forholdsregler:

- fjern klokker og ringer til etter at ortosen er tilpasset.
- når du lukker/åpner glidelåsen, pass på at huden ikke festes i den.
- hvis det er bekymringer med passform, dvs. at ekstremiteter blir blå eller føles kalde, må du straks fjerne hansken og informere det kliniske teamet for ytterlig assistanse.

Slik sjekker du passformen:

- røde fingre – hansken skal sitte stramt. Fingrene kan være litt røde i starten mens drakten settes på. Dette er vanlig, og rødheten vil etterhvert forsvinne
- blå fingre – hvis hansken er riktig justert og fingre er blå, fjern ortosen og ta den med tilbake til klinikken for ytterligere tilpassing.



Ta hansken ut av emballasjen.



Skyv fingrene gjennom individuelle finger hull unntatt tommelhullet.



Trekk hansken tilbake til tommelhullet og skyv inn tommelen.



Trekk tommelhullet og resten av hansken mot håndleddet som vist på bildene.



Plasser håndflaten med forsiden ned på en flat overflate som vist. Ta klaffen og trekk den rundt baksiden av hånden. Forsikre deg om at armen er plassert vertikalt oppover som i illustrasjonen, ellers vil ikke ortosen fungere.



DMO® bruksanvisning for hanske med åpen håndflate (SOPOG)

Forholdsregler:

- fjern klokker og ringe til etter at ortosen er tilpasset.
- når du lukker/åpner glidelåsen, pass på at huden ikke festes i den.
- hvis det er bekymringer med passform, dvs. at ekstremiteter blir blå eller føles kalde, må du straks fjerne hansken og informere det kliniske teamet for ytterlig assistanse.

Slik sjekker du passformen:

- røde fingre – hansken skal sitte stramt. Fingrene kan være litt røde i starten mens drakten settes på. Dette er vanlig, og rødheten vil etterhvert forsvinne
- blå fingre – hvis hansken er riktig justert og fingre er blå, fjern ortosen og ta den med tilbake til klinikken for ytterligere tilpassing.



Fest klaffen på forsiden av hansken som vist ovenfor.



Hvordan hansken skal se ut når den er på.

lev livet.

Slik fjerner du DMO® måltilpasset hanske med åpen håndflate (SOPOG)

Hvordan hansken skal se ut når den er på:




Løsne klaffen og trekk rundt baksiden av håndleddet.



Trekk hansken mot fingertuppene.



Fjern hansken ved å trekke med vrangen ut, over fingertuppene.

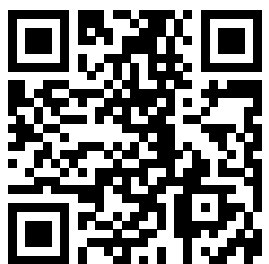

Bruk QR-koden ovenfor for å få
tilgang til våre brukervennlige
videoer eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare

Erklæring om avhending av enhet

Enhetene produsert av DM Orthotics er klasse 1 / tilpassede ortotiske enheter. Ingen forholdsregler kreves for å avhende DMO-enheter. Materialene som brukes til fremstilling kan kastes i samsvar med lokale ordninger for avhending av klær/materialer. Vi ber deg om å vaske enheten før avhending.

Erklæring om alvorlig hendelse

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med DMO®-enheten din, bør du rapportere den umiddelbart til produsenten (DM Orthotics) og den kompetente myndigheten som er ansvarlig for medisinsk utstyr i landet ditt. I Norge til dette være Legemiddelverket.

Produsent



Pasientidentifikasjon



Produkt-/modell-ID




Produsert i Storbritannia



Distributør




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederland

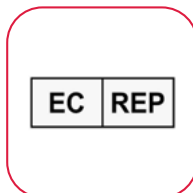

Navn på lege



Bestillingsnummer

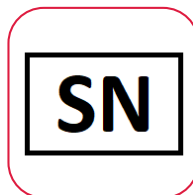

Medisinsk utstyr



Vær oppmerksom på at brukerendring ikke anbefales, og ved å endre ortosen selv, kan garantien bli påvirket eller erklært ugyldig. Kontakt din kliniske spesialist eller DM Orthotics for informasjon om endringer og produktmodifikasjoner.



Produsent:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Storbritannia
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Designet og konstruert i Storbritannia

DM11 – 5054522000104 (UDI-DI)
DM16 – 5054522000111 (UDI-DI)
DM17 – 5054522000128 (UDI-DI)
DM18 – 5054522000135 (UDI-DI)
DM49 – 5054522000265 (UDI-DI)



Produsent: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederland