

lev livet.



Bruksdokument for pasientinformasjon:

DMO® Sensory Vest tilpasset etter mål



www.dmorthotics.com

Våre produkter

DM Orthotics utviklet DMO® Sensory produktutvalg som svar på forespørsler fra leger om et kompresjonsprodukt uten forsterkningspanel som forbedrer proprioceptiv tilbakemelding og kjernestabilitet. Som navnet antyder, er den utviklet for å støtte personer med sensoriske vanskeligheter.

Kompresjonskraften til ortosedesignen kan forbedre den proprioceptive tilbakemeldingen som mottas av hjernen gjennom det nevrosensoriske systemet. Dette kan igjen påvirke muskeltonus og kroppsbevissthet for å forbedre kroppens evne til å oppdage dens plassering, bevegelse og handlinger.

Den dype trykk-effekten kan bidra til å redusere både overaktive og sensoriske presentasjoner med lav utholdenhet, føre til en positiv effekt på kjernestabilitet, kroppstilpasning og forbedret romlig bevissthet. Dette kan i kombinasjon forbedre fin-motorikk og grovmotorikk.

DMO® måltilpassede sensoriske produkter er individuelt måltilpassede, og alle fester og åpninger er individuelt foreskrevet i henhold til de funksjonelle behovene og preferansene til hver enkelt pasient.

Ta kontakt

For å finne ut mer om våre DMO®-produktserier, kontakt din lokale DMO®-leverandør eller distributør eller DM Orthotics direkte for informasjon om hvem det er.

E-post: admin@dmorthotics.com visit: www.dmorthotics.com eller ring: +44 (0) 1209 219205

Hvordan vi har tenkt at produktene våre skal brukes

DM Orthotics spesialtilpassede enheter er ment for eksklusiv bruk av **en enkelt, spesifikk pasient** for å støtte og korrigere holdning og justering av ledd. Den skal ikke bæres av andre personer som den ikke er individuelt målt og foreskrevet for.

Alle tilpassede DM Orthotics ortoser er medisinsk utstyr som definert av EU MDR (2017/745), og er erklært å være i samsvar med forskriftene i henhold til vedlegg II og III EU MDR. De kommer inn under definisjonen av et ortopedisk medisinsk utstyr: en spenne, skinne eller annen kunstig ekstern enhet som har som formål å støtte lemmer eller ryggrad eller for å hindre eller hjelpe relativ bevegelse.

Enheterne er utformet og produsert for å overholde de gjeldende kravene i EU MDR (Medical Device Regulation) (2017/745) og er erklært å være i samsvar med forskriftene i henhold til vedlegg II og III EU MDR.

Utstedelsesdato

Våre tilpassede enheter er produsert etter en spesifisert resept til en individuell pasient og vil bli utstedt med en produksjonsdato på den medfølgende erklæringen. Dette gjelder en resept som er spesifikk for en individuell pasient. Dette er ment som fremtidig referanse for sluttbruker.

Innhold

● Bruksanvisning	S3
● Vaskeanvisninger	S4
● Kontraindikasjoner og forholdsregler	S5

Sensory Vest

● Tiltenkt bruk	S6
● Tiltenkt pasientgruppe	S6
● Tiltenkte brukere	S6
● Effektiv for pasienter	S7
● Kliniske fordeler	S7
● Hvordan sette på og ta av	S8
● Erklæring om enhetsavhending	S10
● Erklæring om alvorlig hendelse	S10
● Forklaring av symboler som brukes	S11

Bruksanvisning

Følg vedlikeholdsrådene nøye. Hvis du tar vare på ortosen vil du **forlenge dens levetid og forhindre skade.**

DU MÅ GJØRE FØLGENDE

- ta ortosen av og på som anbefalt av terapeuten/leverandøren. Se nettsted: www.dmorthotics.com/productcare
- vær forsiktig når du tar den på og av og følg bruksanvisningen. Hardhendt behandling ved av- og påtagning, samt lange negler, kan skade produktet.
- det er viktig at du bygger opp brukstiden i henhold til dine individuelle instruksjoner.
- følg vaskeanvisningene nøye for å forhindre at det oppstår skader på ortosen.

DU MÅ IKKE GJØRE FØLGENDE

- hardhendt behandling ved av- og påtagning av det ferdig tilpassede produktet kan føre til at produktet får skade eller lage rifter eller hull i stoffet.
- ikke ta plagget av/på med lange fingerne, dette kan også skade stoffet.

TILPASNING ELLER SIKKERHETSBEKYMRINGER

Ta kontakt med terapeuten/leverandøren **UMIDDELBART** hvis ortosen blir veldig trang, forårsaker røde merker eller har fått rifter og/eller hull.

DMO® -produktene er designet som et tillegg til terapi og fysisk trening, så de bør ikke fjernes for trening med mindre det er anbefalt av terapeuten din.

Brukstid

DU MÅ GJØRE FØLGENDE

- bygg opp brukstiden sakte i løpet av den første uken, som angitt nedenfor, og doble den daglige tiden frem til ortosen kan brukes under hele arbeidsdagen.

f.eks 1. dag – 1 time

2. dag – 2 timer

3. dag – 4 timer

4. dag – 8 timer

5. dag – hele dagen, i løpet av dagen. Deretter hele dagen, hver dag i løpet av dagen.

DU MÅ IKKE GJØRE FØLGENDE

- bruke ortosen hele dagen umiddelbart. Brukstiden må bygges opp for å sikre at sensoriske inntrykk, biomekaniske endringer og passform overvåkes.
- Må ikke brukes om natten.

Vaskeanvisning

Følg vaskeanvisningene nøye. Ved å ta godt vare på ortosen din, vil du forlenge levetiden og forhindre skader.

GJØR

- Ortosen bør vaskes minst hver 2.–3. dag.
- Ortosen kan håndvaskes i kaldt vann eller maskinvaskes på 30°C.
- Vask separat.
- Kun kort sentrifugering, eller rull den inn i et tørt håndkle for å fjerne overflødig fuktighet.
- La ortosen tørke helt over natten ved å henge den opp innendørs.

GJØR IKKE

- IKKE tørk i sterk sollys eller på en radiator.
- IKKE VRI ORTOSEN – den kan miste fasongen og materialet kan bli skadet.
- IKKE STRYK.
- Ikke bruk blekemiddel eller hvitemidler.
- Ikke bruk tøymykner.
- IKKE RENS.
- IKKE TØRK I TØRKETROMMEL – ortosen vil krympe.

For ytterligere hjelp og støtte har vi lagt ut veiledning om hvordan du tar på og av ortosen på vår nettside. Vennligst besøk: www.dmorthotics.com/productcare

Regelmessig og riktig stell av ortosen vil forhindre at den utvikler lukt og holde materialet mykt og smidig. Hvis ortosen din er sølvbehandlet, må behandlingen påføres på nytt etter 100 vask, ettersom sølvionene begynner å brytes ned etter 50 vask.




Bruke produktene våre

Vi har laget en rekke videoguides for å hjelpe kundene våre med å få mest mulig ut av produktet sitt. Disse guidene inneholder nyttige tips og triks for bruk av produktene våre og hvordan du best kan ta vare på dem når du tar den på eller av.

For å se disse, gå til: www.dmorthotics.com/productcare

DMO® -produktene skal bæres nærmest huden. Det er viktig å bygge opp brukstiden sakte i løpet av den første uken, og doble tiden daglig til den kan brukes hele dagen, f.eks.

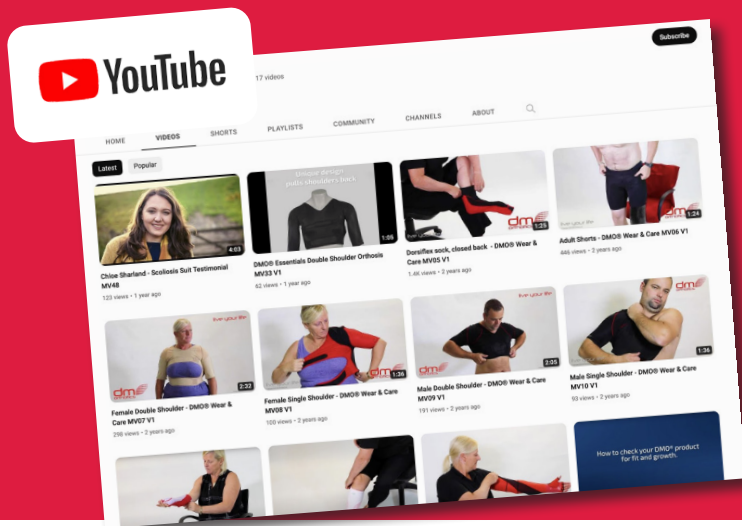

KONTRAINDIKASJONER OG FORHOLDSREGLER

Kontraindikasjoner

Det finnes ingen kontraindikasjoner ved bruk av DMO®. Vurdering av en DMO® Spesialtilpasset produkt skal utføres av en autorisert medisinsk fagperson med riktige faglige kvalifikasjoner.

Forholdsregler

Her er en liste over mulige forholdsregler å vurdere før du går videre med forskrivning av et tilpasset DMO®-produkt. Dette bør diskuteres med din kvalifiserte lege som kan foreslå et alternativt DMO®-produkt eller endring av foretrukket DMO®-produkt.

Dårlig temperaturregulering

En DMO vil ikke ha noen innvirkning på kroppens temperaturregulering. Imidlertid bør DMO-en behandles som et lag med klær som må justeres for varmt eller kaldt klima i henhold til dette. Man kan gjøre justeringen i forhold til gitt resept, f.eks korte ben og armer for å forbedre varmekontrollen.

Primære sirkulasjonsforstyrrelser

Visse primære luftveisproblemer der musklene blir svakere på grunn av svekkelse av nerver/muskler, vil trenge nøye vurdering og kan kreve diskusjon med pasientens lege. Draktspesifikasjonen kan imidlertid endres for å imøtekomme dette. Sekundære sirkulasjonsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grunn av forbedret holdning av overkropp/kropp og forbedret posisjon av ribbeina.

Hudsykdommer

Hudsykdommer som kan forverres ved nær kontakt med syntetiske materialer over lengre perioder, kan kreve ytterligere konsultasjon med helsepersonell som overvåker pasientens dermatologiske behandling, men dette er sjelden en kontraindikasjon.

Skjelettskjørhet/benskjørhet

Noen tilstander kan få god støtte med et DMO® produkt, men dette bør diskuteres med legen din. Endringer kan gjøres på det foretrukne produktet, som tillegg av glidelåser eller trykknapper eller bruk av korte armer eller ben i stedet for lange armer eller ben.

Gastrostomi, stomi og andre medisinske behov

Vi kan produsere det skreddersydde produktet med en spesiell blenderåpning for en gastrostomipinne, stomi, suprapubisk kateter osv. Dette vil bli lagt til på tilpasningsstadiet for å sikre nøyaktig plassering. Diskuter dette med legen din som kan få ytterligere råd fra det erfarne kliniske teamet hos DMO®.

DMO® Sensory Vest tilpasset etter mål

Tiltenkt bruk

Formålet med DM45/DM56 sensoriske vester er å forbedre både proprioceptive og sensoriske tilbakemeldinger. Dette skjer via den medfølgende kompresjonen. På grunn av kompresjonen vil dette også gi en grad av stabilisering til leddene som er dekket av vestene.

Indikasjoner

Voksne og barn med sensoriske prosesseringsforstyrrelser, ADHD, autisme, osv.

Tiltenkt pasientgruppe

Mannlige og kvinnelige pasienter. Det er ingen aldersgrenser for bruken av SENVA/SENVVC sensoriske vester og mange tilstander som presenterer symptomer som påvirker det sensoriske systemet kan ha nytte av leggings.

En rimelig høy grad av fingerferdighet og muskeltonus er nødvendig for de som skal ta ortosen av/på selv. En omsorgsperson vil bli pålagt å hjelpe med påkledning og avkledning av ortosen der dette ikke er tilfelle.

Tiltenkte brukere

Bæreren av ortosen vil vanligvis være en lekmann.

Brukerens omsorgsperson som kan være involvert i påkledning og avkledning, vasking og rapportering av eventuelle problemer med ortosen, vil vanligvis være en lekmann.



DMO® Sensory Vest tilpasset etter mål

Egnet for:

Voksne og barn som trenger kompresjon for å forbedre kroppsbevisstheten og redusere overaktivitet.

Dette kan gi en beroligende effekt og forbedre kjernestabiliteten og midjeorienteringen.

Effektiv for:

- sensoriske vanskeligheter
- noen mennesker med autisme, ADHD og sensorisk prosessforstyrrelse

Gir:

- økt sensorisk bevissthet
- støtte for sensoriske presentasjoner med overaktiv eller lav utholdenhet
- økt romlig bevissthet og konsentrasjon
- redusert taktil følsomhet

Fordeler er blant annet:

- kan brukes hele dagen
- blanding av polybomulls fibre
- pustende og vaskbart materiale
- brukes under klær, men kan også brukes alene hvis ønskelig, spesielt i varmt klima
- utvendige sømmer for å forbedre den innvendige følelsen av produktet og unngå kløende områder
- Oeko-Tex-sertifisering – standard 1



DMO® bruksanvisning for Sensory vest


Hvordan sette på DMO® Sensory vest.

Forholdsregler:


- Forsikre deg om at glidelåsene befinner seg på utsiden av huden før du trekker de opp, og at de ikke ruller tilbake.
- Vesten bør fjernes hvis pasienten er syk eller har feber.
- Hvis det er bekymringer med passform, det vil si at ekstremiteter blir blå eller føles altfor kalde å ta på, må du fjerne og informere det kliniske teamet umiddelbart for ytterligere vurdering.

Slik sjekker du passformen:

- Vesten skal sitte stramt, men du skal kunne plassere indeksfingeren under bunnen på ermet og rundt nakkeutringningen.
- Når du fjerner sømmen/endene av ortosen kan gå det oppstå røde merker i huden. Hvis det fremdeles er før rødt etter 20- 30 minutter etter fjerning, sitter det muligens for stramt.
- Hvis du er i tvil om passformen, gi beskjed til terapeuten din umiddelbart, da ortosen bare kan endres uten kostnad de første seks ukene.

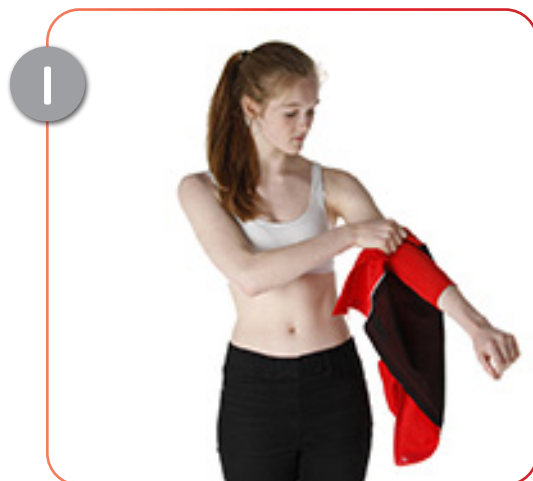

Fjern fra emballasjen og løsne glidelåsen.
Plasser armen i riktig erme.

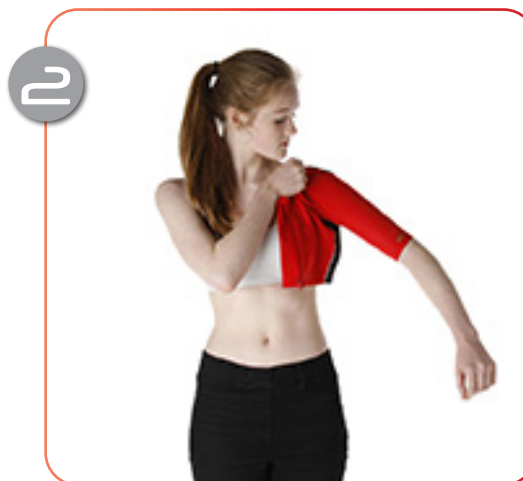

Trekk godt opp til skulderen.



Ta ortosen bak ryggen og trekk den andre armen inn i det andre ermet bak på ryggen.



Trekk frontpanelet rundt.




Fest glidelåsen foran, og pass på at huden ikke festes i den.

Vær oppmerksom på. Ortosen din kan være lengre enn den som er vist her. Når du har festet glidelåsen, pass på at du trekker du ortosen forsiktig ned for å sikre at den dekker kroppen godt.

Sørg også for at glidelåsen er på plass over huden for å sikre at glidelåsen ikke fanger huden.

lev livet.


Slik skal drakten se ut når den er på:

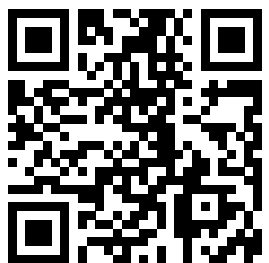


Bruk QR-koden ovenfor for å få tilgang til våre brukervennlige videoer eller gå til:

www.dmorthotics.com/productcare

Hvordan sette på DMO® Sensory vest.

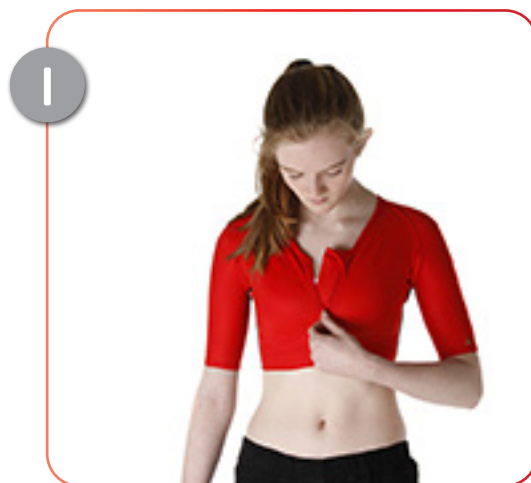


Fest glidelåsen foran og pass på å beskytte så den ikke festes i huden.

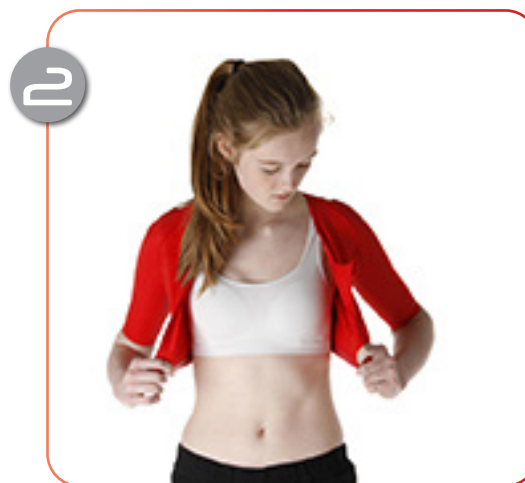

Åpne vesten på framsiden.



Fjern den ene armen fra ortosen.

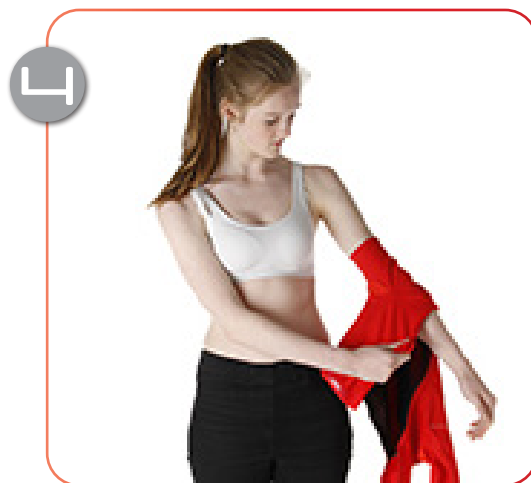

Fjern den andre armen og skyv ortosen over hånden.

Erklæring om avhending av enhet

Enhetene produsert av DM Orthotics er klasse 1 / tilpassede ortotiske enheter. Ingen forholdsregler kreves for å avhende DMO-enheter. Materialene som brukes til fremstilling kan kastes i samsvar med lokale ordninger for avhending av klær/materialer. Vi ber deg om å vaske enheten før avhending.

Erklæring om alvorlig hendelse

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med DMO®-enheten din, bør du rapportere den umiddelbart til produsenten (DM Orthotics) og den kompetente myndigheten som er ansvarlig for medisinsk utstyr i landet ditt. I Norge til dette være Legemiddelverket.

Produsent



Pasientidentifikasjon



Produkt-/modell-ID




Produsert i Storbritannia



Distributør




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederland

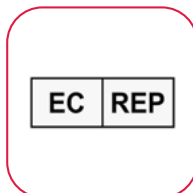

Navn på lege



Bestillingsnummer

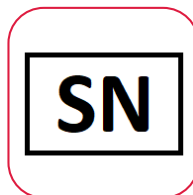

Medisinsk utstyr



Vær oppmerksom på at brukerendring ikke anbefales, og ved å endre ortosen selv, kan garantien bli påvirket eller erklært ugyldig. Kontakt din kliniske spesialist eller DM Orthotics for informasjon om endringer og produktmodifikasjoner.



Produsent:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Storbritannia
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Designet og konstruert i Storbritannia

UDI-DI: 5054522002306



Manufacturer: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederland