

live your life.



Patientens brugsvejledning:

Specialfremstillet DMO® ærme, handske og handske med åben håndflade



www.dmorthotics.com

Vores produkter

Vores specialfremstillede Dynamic Movement Orthoses® anvender et blødt, fleksibelt elastomerstof, der sikrer en tæt pasform og skaber kompressionskraft for at forbedre proprioceptiv feedback. Dette basisstof er let, åndbart og stærkt.

Det kombineres med forstærkningspaneler fremstillet af et powernet-materiale for at give styrke og stabilitet, hvor det er nødvendigt, hvilket forbedrer kropsholdningen og den biomekaniske tilpasning.

Vores specialfremstillede ortoser virker ved hjælp af strategisk placerede forstærkninger, som sørger for, at kroppen placeres i en forbedret kropsholdning. Denne nye biomekaniske tilstand kombineret med øget proprioception stimulerer og justerer det neurosensoriske system ved at genoptræne muskler til at arbejde med forbedret muskelspænding, styrke og ydeevne.

DMO®'er hjælper både voksne og børn med at håndtere de fysiske virkninger af deres neurologiske, muskuloskeletale og genetiske lidelser.

Specialfremstillede DMO®-produkter fremstilles enkeltvis efter mål, og alle fastgørelser, åbninger og forstærkninger følger individuelle anvisninger i henhold til hver enkelt patients funktionelle behov og præferencer.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om vores DMO® produktsortiment, kan du kontakte din stedlige DMO®-forhandler eller distributør eller DM Orthotics direkte for at finde ud af, hvem det er.

E-mail: admin@dmorthotics.com gå til: www.dmorthotics.com
ring til: +44 (0) 1209 219205

Sådan skal patienter bruge vores produkter

DM Orthotics' specialfremstillede ortoser er beregnet til **udelukkende at blive brugt af en enkelt specifik patient** til støtte og korrektion af kropsholdning og ledjustering. Den bør ikke bæres af andre personer, som den ikke er blevet opmålt og ordineret til.

Alle specialfremstillede DMO-ortoser er medicinsk udstyr i henhold til EU's MDR (forordningen om medicinsk udstyr) (2017/745) og er erklæret at stemme overens med reguleringerne i henhold til bilag II og III til EU's MDR, er omfattet af definitionen af en ortose: En støtte, skinne eller anden kunstig ydre anordning, der tjener til at støtte lemmerne eller rygsøjlen eller til at forhindre eller støtte bestemte bevægelser.

Udstyret er specialfremstillet (i henhold til bilag XIII til MDR) og opfylder de gældende krav i MDR (forordningen om medicinsk udstyr) (2017/745)-: Specialfremstillet produkt

Dato for levering

Vores specialfremstillede udstyr er fremstillet efter en specifik recept og vil blive forsynet med en fremstillingsdato på den medfølgende erklæringsformular, der følger med produktet. Dette skal opbevares af slutbrugeren.

Indholdsfortegnelse

●Brugsanvisning	s. 3
●Vaskeanvisninger	s. 4
●Kontraindikationer og forholdsregler	s. 5
●Anvendelsesformål	s. 6
●Påtænkt patientpopulation	s. 6
●Påtænkte brugere	s. 7
●Effektiv for patienter	s. 7
●Kliniske fordele	s. 7
●Brug med andre ortoser	s. 7

Specialfremstillet handske **s. 6**

●Sådan tager du produktet af og på	s. 8
------------------------------------	------

Specialfremstillet ærme **s. 6**

●Sådan tager du produktet af og på	s. 11
------------------------------------	-------

Specialfremstillet handske med åben håndflade (SOPOG) **s. 6**

●Sådan tager du produktet af og på	s. 13
------------------------------------	-------

●Erklæring om bortskaffelse af enheden	s. 10
●Erklæring om alvorlig hændelse	s. 10
●Forklaring af de anvendte symboler	s. 11

Brugsanvisning

Følg plejeanvisningen omhyggeligt. Ved at passe omhyggeligt på din ortose vil du **forlænge holdbarheden og forhindre skader**.

SÅDAN GØR DU

- Tag ortosen på og af som anbefalet af din terapeut/leverandør. Se webstedet: www.dmorthotics.com/productcare
- Vær forsigtig, når du tager den af og på, og følg nøje anvisningerne i dette hæfte. Hvis du trækker den af eller på for hurtigt, eller hvis du har lange negle, kan den blive beskadiget.
- Det er vigtigt at opbygge anvendelsestiden af ortosen i overensstemmelse med dine individuelle instruktioner.
- Følg vaskeanvisningerne omhyggeligt, da ortosen ellers kan blive beskadiget.

UNDLAD

- Undlad at tage dit skræddersyede produkt af eller på med magt - dette kan forårsage skader på produktet, så der løber masker, eller der opstår flænger eller huller i stoffet.
- Undlad at tage den på eller af med lange fingernegle, det kan også beskadige stoffet.

PASFORM ELLER SIKKERHEDSHENSYN

Kontakt **STRAKS** din terapeut/leverandør, hvis ortosen bliver meget stram, forårsager røde mærker, eller hvis maskerne begynder at løbe og/eller får huller.

DMO® produkter er designet som et supplement til terapi og fysisk træning, så de bør ikke fjernes for at træne, medmindre din terapeut anbefaler det, eller du har andre bekymringer, som de kan hjælpe dig med.

Anvendelsestid

SÅDAN GØR DU

- Udvid langsomt anvendelsestiden i løbet af den første uge som angivet nedenfor, så du fordobler varigheden hver dag, indtil ortosen bruges gennem en hel arbejdsdag.

f.eks. 1. dag - 1 time

2. dag - 2 timer

3. dag - 4 timer

4. dag - 8 timer

5. dag - hele dagen i dagtimerne. Herefter anvendes hele dagen og hver dag i dagtimerne.

UNDLAD

- Bær ortosen hele dagen med det samme. Anvendelsen bør opbygges for at sikre sensorisk tolerance, biomekaniske ændringer og -for at holde øje med pasformen.
- Undlad at bruge dine DMO om natten, med mindre det anbefales af din læge eller kliniker, fx i tilfælde af EDS-patienter, hvor det kan være gavnligt.

Vaskeanvisning

Følg vaskeanvisningen nøje. Ved at passe godt på din ortose forlænger du dens levetid og forebygger skader.

GØR

- Ortosen bør vaskes mindst hver 2.-3. dag.
- Ortosen kan håndvaskes i koldt vand eller maskinvaskes ved 30°C.
- Vaskes separat.
- Brug kun kort centrifugering eller rul ortosen ind i et tørt håndklæde for at fjerne overskydende fugt.
- Lad den tørre helt natten over ved at hænge den op indendørs.

GØR IKKE

- TØR IKKE i stærkt direkte sollys eller på en radiator.
- VRED IKKE – det vil strække ortosen og beskadige materialet.
- STRYG IKKE.
- Brug ikke blegemidler eller optisk hvidt.
- Brug ikke skyllemiddel.
- RENS IKKE.
- TØRRETUMBL IKKE – det vil få ortosen til at krympe.

For yderligere hjælp og support har vi tilføjet en vejledning i, hvordan du tager din ortose af og på, på vores hjemmeside. Besøg venligst: www.dmorthotics.com/productcare.

Regelmæssig og korrekt pleje af ortosen forhindrer udvikling af lugt og holder materialet smidigt. Hvis din ortose er sølvbehandlet, skal denne behandling genanvendes efter 100 vaske, da sølvionerne begynder at forsvinde efter 50 vaske.




Anvendelse af vores produkter

Vi har lavet en række videoguides, der skal hjælpe vores kunder med at få det bedste ud af deres produkt. Disse vejledninger indeholder nyttige tips og tricks til brugen af vores produkter, og til, hvordan du bedst passer på dem, når du tager dem af og på.

For at se dem gå til: www.dmorthotics.com/productcare

DMO® produkter bør bæres direkte på huden. Det er vigtigt at opbygge anvendelsestiden langsomt i løbet af den første uge ved at fordoble varigheden hver dag, indtil den bæres dagen igennem, f.eks.

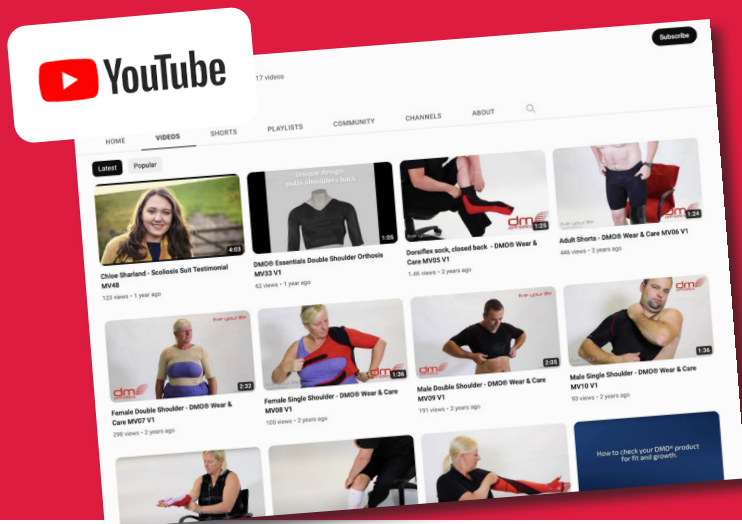

KONTRAINDIKATIONER OG FORHOLDSREGLER/OVERVEJELSER

Kontraindikationer

Der er ingen kendte kontraindikationer for brug af en DMO®. Vurderingen for et specialfremstillet DMO®-produkt skal udføres af en autoriseret læge med de korrekte faglige kvalifikationer.

Forholdsregler/overvejelser

Det følgende er en liste over mulige forholdsregler, der skal tages i betragtning, før du fortsætter med at ordinere et DMO®-produkt. Dette bør drøftes med din fagligt kvalificerede læge, som kan foreslå et alternativt DMO®-produkt eller en ændring af det foretrukne DMO®-produkt.

Dårlig temperaturregulering

En DMO vil ikke have nogen indflydelse på kroppens termoregulatoriske center. DMO bør dog behandles som et lag af tøj, og tøjlæg skal justeres tilsvarende til varmt eller koldt klima. Der kan foretages justeringer af ordinationen, såsom korte ben og ærmer, for at hjælpe med at forbedre varmekontrollen.

Primære kredsløbsforstyrrelser

Visse primære luftvejsproblemer, hvor musklerne bliver svagere på grund af en nedbrydning af nerver/muskler, kræver nøje overvejelser og kan kræve drøftelse med patientens læge - selvom dragtens specifikation kan ændres for at imødekomme dette. Sekundære kredsløbsproblemer forbundet med cerebral parese kan forbedres på grund af forbedret kropsholdning og forbedret position af ribbenene.

Hudlidelser

Hudlidelser, der kan forværres ved tæt kontakt med syntetiske materialer i længere perioder, kan kræve yderligere konsultation med sundhedspersonale, som overvåger patientens dermatologiske behandling, men dette er sjældent en kontraindikation.

Skrøbeligt skelet/knogleskørhed

Nogle tilstande kan godt understøttes af et DMO®-produkt, men dette bør diskuteres med din læge. Der kan foretages ændringer i det foretrukne produkt, såsom tilføjelse af lynlås eller trykknapper eller brug af korte ærmer eller ben i stedet for lange ærmer eller ben.

Specialfremstillet DMO® handske, ærme og handske med åben håndflade

Anvendelsesformål

Anvendelsesformålet med DM11 ærmet, DM16/17/18 handsken og DM49 handsken med åben håndflade er at justere det øvre lem, som omfatter albue, håndled og hånd (inkl. handskesektionen). Ærmet/handsken giver et ikke-restriktivt og støtter yderst effektivt til at maksimere stabiliteten. Ærmet/handsken bidrager også til distal kontrol og påvirker muskeltonus positivt, så funktionen forbedres. Ærmet/handsken kan også have en positiv indvirkning på skulderpositionering, selvom skulderen ikke er omfattet af ortosen.

Børn eller voksne med lav eller høj muskeltonus, sensoriske eller proprioceptionsproblemer. Børn eller voksne, der har smerter forbundet med dårlig tilpasning eller træthed forårsaget af deres manglende evne til at opretholde en korregeret holdning af de øvre lemmer.

Påtænkt patientpopulation

Mandlige og kvindelige patienter er normalt to år eller ældre, selvom børn under to kan have gavn af handskerne. Den lavere alderstærskel blev sat på grund af øget vækst på dette stadium, der ville kræve en justering eller ændring af handsken/ærmet, der ikke skyldes manglende evne til at opnå det tilsigtede formål. Der er ingen øvre aldersgrænse for handsken/ærmet.

En rimelig høj grad af fingerfærdighed og muskelstyrke er påkrævet for dem, der selv skal tage handsken/ærmet af og på. Der vil være brug for en omsorgsperson til at hjælpe med at tage handsken/ærmet på og af, hvor dette ikke er tilfældet.

Påtænkte brugere

DM11-ærmet, DM16/17/18-handsken og DM49-handsken med åben håndflade kræver ordination og specifikation fra en kompetent sundhedsmedarbejder, typisk en kvalificeret orto-, fysio- eller ergoterapeut, som har modtaget passende træning i ordination og brug af ortoser til dynamiske bevægelser. En sådan kompetent sundhedsperson vil også være forpligtet til at vurdere pasformen af DM11 ærmet, DM16/17/18 handsken og DM49 handsken med åben håndflade og til, om nødvendigt, at yde mere rådgivning til forbedring af pasformen.

Bæreren af DM11 ærmet, DM16/17/18 handsken og DM49 handsken med åben håndflade vil typisk være en lægperson.

Bærerens omsorgsperson, som eventuelt inddrages i af- og påtagning, vask og indberetning af problemer med DM11 ærmet, DM16/17/18 handsken og DM49 handsken med åben håndflade vil typisk være en lægperson.

Den pågældende enhed er lavet efter mål og kræver specifikation af en sundhedsmedarbejder, der er uddannet i brugen af ortoser til dynamiske bevægelser. Dette kræver, at der tages en række målinger, hvilket sundhedspersonalet er blevet oplært i af DM Orthotics.

En række forskellige forstærkningspaneler skal også ordineres efter behov af den uddannede sundhedsmedarbejder.



Ærme

Effektiv ved:

- cerebral parese
- funktionsnedsættelser i øvre lemmer
- multipel sklerose
- Ehlers-Danlos-syndrom
- høj og lav muskeltonus
- sensoriske funktionsnedsættelser

Giver:

- øget sensorisk bevidsthed
- forbedret kropsholdning
- forbedret positionering (ved ekstra forstærkninger)
- smertelindring

Yderligere egenskaber:

- kompressionsmateriale for komfort og bevægelse
- forstærkningspaneler giver styrke og stabilitet
- bruges under tøjet

Handske med åben håndflade

Effektiv ved:

- cerebral parese
- slagtilfælde
- dystoni
- sensoriske funktionsnedsættelser
- ataksi

Giver:

- forbedret justering af fingre, tommelfinger og håndled
- påvirker muskeltonus
- bedre sensorisk registrering

Yderligere egenskaber:

- Kompressionsmateriale for komfort og bevægelse

Handske/kravehandske med ærme

Effektiv ved:

- cerebral parese
- slagtilfælde
- multipel sklerose
- ataksi
- erhvervet hjerneskade og hjernetraume
- Ehlers-Danlos-syndrom
- dystoni
- med mere

Giver:

- forbedret justering af fingre, tommelfinger og håndled
- forbedret justering af albueens strækning (med handske i fuld længde)
- supination af underarmen (eller pronation, hvis det er nødvendigt)
- påvirker muskeltonus
- bedre sensorisk registrering

Yderligere egenskaber:

- kompressionsmateriale for komfort og bevægelse
- silikonepuder til bedre greb
- forstærkningspaneler giver styrke og stabilitet
- fås med langt eller kort ærme



DMO® specialfremstillet handske/kravehandske – påføringsvejledning

Der er forskellige måder at tage handsken/kravehandsken på, afhængigt af personlige præferencer. Tag handsken og fingerapplikatoren (hvis det er en handske) ud af emballagen og åbn alle eventuelle lynlåse. Ved DMO® handske gælder version 1 af påføringsanvisningerne. Du kan også se vores videoer på www.dmorthotics.com/productcare af, hvordan du tager dit DMO®-produkt af og på.

Mulighed 1. Egnede til handsker uden fingerapplikator.

Den specialfremstillede DMO® handske har ingen enkelte fingre, men påføres alligevel på samme måde som en handske.

Forholdsregler:

- Fjern ure og ringe indtil ortosen er blevet tilpasset.
- Når du lukker lynlåsene, skal du sørge for at beskytte huden mod at komme i klemme.
- Vær forsigtig, når du justerer silikonebånd øverst på ortosen for at undgå at trække i hud og hår.
- Hvis der er problemer med pasformen (f.eks. hvis fingrene bliver blå eller føles meget kolde at røre ved), skal du straks fjerne den og informere behandlerteamet for yderligere undersøgelse.

Sådan kontrolleres pasformen:

- Røde fingre - handsken skal sidde tæt. Fingrene kan være lidt røde i begyndelsen på grund af påføringsprocessen. Dette er normalt og rødmen vil snart forsvinde.
- Blå fingre - Hvis handske er korrekt justeret, og fingrene er blå, skal du fjerne ortosen og straks returnere den til den ansvarlige behandler til vurdering.



Før hånden ned i handsken gennem den åbne lynlås, og sørg for, at fingre og tommelfinger sidder i det rigtige hul. Fortsæt med at skubbe fingrene gennem handskens fingerhuller, indtil de er helt på plads. Ved handsken skal du sørge for, at tommelfingeren og pegefingeren (hvis pegefingeren er inkluderet i designet) er i den korrekte åbning.



Før hånden gennem den åbne ende af handsken, indtil hånden kommer ud gennem lynlåsen.



Skub hånden med handsken gennem hullet.



Fortsæt med at skubbe hånden gennem hullet.



Træk handsken op ad armen (rul silikonebåndet tilbage). Luk lynlåsen, og pas på, at den ikke får fat i huden.



Korrekt justeret handske. Lynlåsen skal se ud, som om den er skæv, når hånden hviler. Hvis lynlåsen er lige, sidder handsken forkert.

Mulighed 2. Egnet til handsker med fingerapplikator.



1 Åbn lynlåsen, vend handsken på vrangen, og sørg med en blyant for, at enden af handskens huller er helt åbne (dette er for at sikre, at fingrene glider ind i handsken).



2 Placer fingerapplikatoren på langfingeren.



3 Med fingerapplikatoren på langfingeren skubbes den ind i det midterste fingerhul.



4 Træk fingerapplikatoren af og lad handsken blive siddende på langfingeren.



5 Gentag trin 3 og 4 for hver finger i denne rækkefølge:- langfinger
fjerde finger (ringfinger)
lille finger, første finger (pegefinger)
indtil alle fingre er på plads i handsken.



6 Sæt fingerapplikatoren på tommelfingeren, og gentag trin 3 en gang til. Fjern applikatoren med handsken på plads på tommelfingeren.



7 Træk handsken på plads på håndleddet. Skub hånden ned gennem handskens ærme.



8 Træk handsken op ad armen, og sørg for, at sømmen bag tommelfingeren løber op til knoglefremspringet på ydersiden af albuen (lateral epicondylus). Hvis du har en lang handske, skal du trække den langsomt op til toppen af armen. De to vandrette linjer skal være på hver side af albueleddet. Når handsken er helt på, skal du rulle silikonen tilbage for at holde handsken på plads.




9 Luk lynlåsen, idet du sørger for at beskytte huden mod at komme i klemme.

live your life.


Sådan tager den du den specialfremstillede DMO® handske af.

Den specialfremstillede DMO® handske har i modsætning til handsken ingen særskilte fingerhuller. Fjernelsen er den samme for alle DMO® handsker.

Sådan skal handsken se ud, når du har den på:

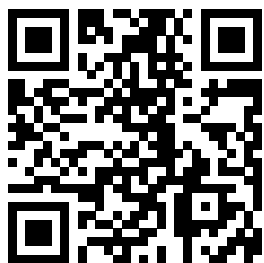

Brug QR-koden ovenfor for at få adgang til vores videoer om brug og pleje, eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare

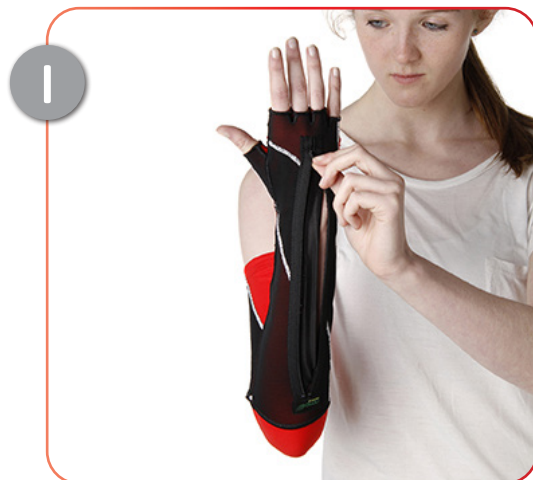

Fjern IKKE handsken ved at trække i fingrene. Åbn lynlåsen, idet du sørger for at beskytte huden mod at komme i klemme.



Træk handskens øvre del ned mod hånden. Sørg for at folde silikonebåndet om, så du ikke trækker i hårene på huden.



Træk forsigtigt handsken med vrangen ud over håndledet og så fingrene.



Hvis du fjerner en handske, skal du sørge for forsigtigt at trække fingrene ud af fingeråbningerne.

DMO® specialfremstillet arm sleeve – påføringsvejledning

Sådan tager du den specialfremstillede ærmet på.

Forholdsregler:

- Fjern ure og ringe indtil ortosen er blevet tilpasset.
- Når du lukker lynlåsene, skal du sørge for at beskytte huden mod at komme i klemme.
- Vær forsigtig, når du justerer silikonebånd øverst på ortosen for at undgå at trække i hud og hår.
- Hvis der er problemer med pasformen, skal du straks fjerne den og informere behandlerteamet for yderligere undersøgelse.

Sådan kontrolleres pasformen:

- Du bør kunne køre fingeren rundt om kanten af ortosen ved håndleddet og armhulen. Hvis den er for løs eller for stram, bedes du kontakte din læge.



1 Fjern fra emballagen, og læg silkeapplikator og ærmet frem



2 Placer hånden i silkeapplikatoren, og begynd at placere ærmet over hånden.



3 Når ærmet er på barnets arm, skal du forsigtigt fjerne silkeapplikatoren fra hånden.



4 Træk forsigtigt ærmet op over albuen til toppen af armen.




5 Sørg for, at ærmet når op til toppen af armen, og at silikonebåndet er på plads på huden.

live your life.

DMO® specialfremstillet arm sleeve

Sådan tager du DMO® ærmet af

Sådan skal ærmet se ud, når det er taget på:

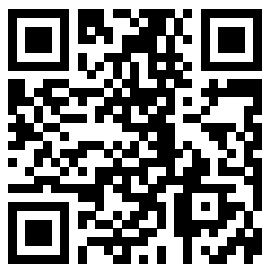

Brug QR-koden ovenfor for at få adgang til vores videoer om brug og pleje, eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare



Drej toppen af ærmet med vrangen udad ved silikonebåndet.



Fortsæt med forsigtigt at trække ærmet med vrangen ud ned over albuen og hen over hånden.



Forholdsregler:

- Fjern ure og ringe indtil ortosen er blevet tilpasset.
- Under fastgørelse/løsning skal du sørge for at beskytte huden mod at komme i klemme.
- Hvis der er problemer med pasformen (f.eks. hvis fingrene bliver blå eller føles meget kolde at røre ved), skal du straks fjerne den og informere behandlerteamet for yderligere undersøgelse.

Sådan kontrolleres pasformen:

- Røde fingre - handsken skal sidde tæt. Fingrene kan være lidt røde i begyndelsen på grund af påføringsprocessen. Dette er normalt og rødmen vil snart forsvinde.
- Blå fingre - Hvis handsken er korrekt justeret, og fingrene er blå, skal du fjerne ortosen og straks returnere den til den ansvarlige behandler til vurdering.



1 Tag handsken ud af emballagen.



2 Skub fingre gennem de enkelte fingeråbninger med undtagelse af åbningen for tommelfingeren.



3 Træk handsken tilbage til åbningen for tommelfingeren, og stik tommelfingeren i.



4 Træk tommelfingeråbningen og resten af handsken mod håndleddet som vist på billederne.



5 Placer håndfladen med håndfladen nedad på en flad overflade som vist. Tag fat i stroppen, og træk den rundt om bagsiden af din hånd. Sørg for, at din arm er placeret lodret opad som i illustrationen, ellers vil ortosen ikke fungere.



Forholdsregler:

- Fjern ure og ringe indtil ortosen er blevet tilpasset.
- Under fastgørelse/løsning skal du sørge for at beskytte huden mod at komme i klemme.
- Hvis der er problemer med pasformen (f.eks. hvis fingrene bliver blå eller føles meget kolde at røre ved), skal du straks fjerne den og informere behandlerteamet for yderligere undersøgelse.

Sådan kontrolleres pasformen:

- Røde fingre - handsken skal sidde tæt. Fingrene kan være lidt røde i begyndelsen på grund af påføringsprocessen. Dette er normalt og rødmen vil snart forsvinde.
- Blå fingre - Hvis handsken er korrekt justeret, og fingrene er blå, skal du fjerne ortosen og straks returnere den til den ansvarlige behandler til vurdering.



Fastgør stroppen på forsiden af handsken som vist ovenfor.




Sådan skal handsken se ud, når den er tilpasset:

live your life.

Sådan tager du den specialfremstillede DMO® handske med åben håndflade (SOPOG) af.

Sådan skal handsken se ud, når du har den på:

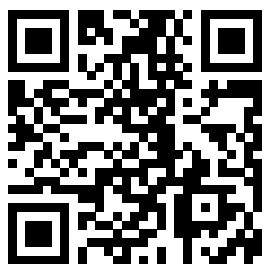

Brug QR-koden ovenfor for at få adgang til vores videoer om brug og pleje, eller gå til:
www.dmorthotics.com/productcare



Tag stroppen af, og træk den rundt om bagsiden af håndledet.



Træk handsken mod fingerspidserne.



Fjern handsken ved at trække den med vrangen ud over fingerspidserne.

Erklæring om bortskaffelse af enheden

De produkter, der fremstilles af DM Orthotics, er klasse 1 / specialfremstillede ortopædiske enheder. Der skal ikke træffes nogen forholdsregler ved bortskaffelse af DMO®-enheder. De materialer, der er anvendt til fremstillingen, kan bortskaffes i overensstemmelse med dine lokale ordninger for bortskaffelse af tøj/materialer. Vi beder dig dog om at vaske enheden, før du bortskaffer det.

Erklæring om alvorlig hændelse

Hvis der sker en alvorlig hændelse i forbindelse med din DMO®-enhed, skal du straks indberette den til producenten (DM Orthotics) og den kompetente myndighed med ansvar for medicinsk udstyr i din medlemsstat, f.eks. i Storbritannien til MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency).

Producent



Patient-id



Produkt-/model-id




Fremstillet i Storbritannien



Distributør




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederlandene

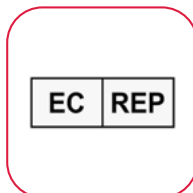

Klinikerens navn



Ordrenummer

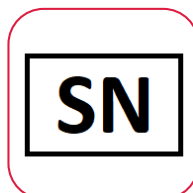

Medicinsk udstyr



Bemærk venligst, at ændringer fra brugerens side ikke anbefales, og at din garanti kan påvirkes eller ugyldiggøres, hvis du selv foretager ændringer på ortosen. Kontakt din kliniske specialist eller DM Orthotics vedrørende oplysninger om ændringer og produktmodifikationer.



Producent:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Storbritannien
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Designet og fremstillet i Storbritannien

© Ophavsrettighed 2024 DM Orthotics Ltd. Patent- og designregistrering gælder.

DM11 – 5054522000104 (UDI-DI)
DM16 – 5054522000111 (UDI-DI)
DM17 – 5054522000128 (UDI-DI)
DM18 – 5054522000135 (UDI-DI)
DM49 – 5054522000265 (UDI-DI)



Producent: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Nederlandene

DM-002725-MK (Issue 2)