

ζήσε τη ζωή σου.



Πληροφορίες Χρήσης για τον Ασθενή

Προσαρμοσμένο μανίκι, γάντι καρπού/καρπού-αντιβραχίου και γάντι ανοιχτής παλάμης DMO®



www.dmorthotics.com

Τα προϊόντα μας

Για τα προϊόντα επί παραγγελία της Dynamic Movement Orthoses® χρησιμοποιείται ένα μαλακό, ελαστικό ελαστομερές ύφασμα, το οποίο εξασφαλίζει στενή εφαρμογή και δημιουργεί δυνάμεις συμπίεσης που βελτιώνουν την ιδιοδεκτική ανατροφοδότηση. Αυτό το βασικό ύφασμα είναι ελαφρύ, διαπνέον και ισχυρό.

Συνδυάζεται με πλαίσια ενίσχυσης, τα οποία κατασκευάζονται με ένα υλικό από ισχυρό πλέγμα, που παρέχει δύναμη και σταθερότητα εκεί όπου απαιτείται βελτίωση της στάσης του σώματος και βιομηχανική ευθυγράμμιση.

Τα ορθωτικά προϊόντα μας που κατασκευάζονται επί παραγγελία λειτουργούν χρησιμοποιώντας ενισχύσεις σε στρατηγικά σημεία, τα οποία βοηθούν το σώμα να πετύχει βελτιωμένη ευθυγράμμιση στάσης. Αυτή η νέα βιομηχανική κατάσταση, σε συνδυασμό με την βελτιωμένη ιδιοδεκτικότητα, διεγείρει και προσαρμόζει το νευρο-αισθητηριακό σύστημα, εκπαιδεύοντας τους μύες να λειτουργούν με βελτιωμένο τόνο, δύναμη και απόδοση.

Τα προϊόντα της DMO® βοηθούν τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά ως προς τη διαχείριση των σωματικών επιπτώσεων νευρολογικών, γενετικών και μυοσκελετικών παθήσεων.

Τα προσαρμοσμένα προϊόντα DMO® φτιάχνονται ειδικά στα μέτρα του κάθε ατόμου και όλα τα κουμπώματα και τα ανοίγματα είναι ατομικά μελετημένα σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε ασθενούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σειρές προϊόντων της DMO®, επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο ή διανομέα της DMO® ή απευθείας με την DM για να μάθετε ποιος είναι.

Email: admin@dmorthotics.com Τοποθεσία web: www.dmorthotics.com

Αριθμός τηλεφώνου: +44 (0) 1209 219205

Σε ποιους ασθενείς απευθύνονται τα προϊόντα μας

Τα προσαρμοσμένα στα μέτρα σας ορθωτικά προϊόντα της DM Orthotics προορίζονται για **αποκλειστική χρήση από έναν μεμονωμένο ασθενή**, για την υποστήριξη και τη διόρθωση της σωματικής στάσης και της ευθυγράμμισης των αρθρώσεών του. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να φοριέται από κάποιο άλλο άτομο για το οποίο δεν έχει μετρηθεί και συνταγογραφηθεί ξεχωριστά.

Όλα τα ορθωτικά βοηθήματα επί παραγγελία της DM Orthotics αποτελούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) και δηλώνεται ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σύμφωνα με τα Παραρτήματα II και III του MDR, και διέπονται από τον ορισμό ενός ορθωτικού προϊόντος: ενίσχυση, νάρθηκας ή άλλη τεχνητή εξωτερική συσκευή που χρησιμεύει στη στήριξη των άκρων ή της σπονδυλικής στήλης ή στην πρόληψη ή την υποστήριξη της σχετικής μετακίνησης.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατασκευάζονται προσαρμοσμένα (σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του MDR) και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του MDR (Κανονισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) (2017/745): Προϊόν Προσαρμοσμένης Κατασκευής

Ημερομηνία έκδοσης

Τα προσαρμοσμένου μεγέθους προϊόντα μας κατασκευάζονται με βάση μια συγκεκριμένη συνταγογράφηση. Στο συνοδευτικό έντυπο δήλωσης που αποστέλλεται μαζί με το προϊόν σας αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του. Ο τελικός χρήστης μπορεί να φυλάξει αυτό το έντυπο για το προσωπικό του αρχείο.

Περιεχόμενα

• Οδηγίες τοποθέτησης	Σελ. 3
• Οδηγίες πλύσης	Σελ. 4
• Αντενδείξεις και προφυλάξεις	Σελ. 5
• Προβλεπόμενη χρήση	Σελ. 6
• Προβλεπόμενη ομάδα ασθενών	Σελ. 6
• Προβλεπόμενοι χρήστες	Σελ. 7
• Αποτελεσματικό για ασθενείς	Σελ. 7
• Κλινικά οφέλη	Σελ. 7
• Χρήση με άλλα ορθωτικά προϊόντα	Σελ. 7

Προσαρμοσμένο γάντι καρπού/καρπού-αντιβραχίου

• Τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης	Σελ. 8
------------------------------------	--------

Προσαρμοσμένο μανίκι

• Τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης	Σελ. 11
------------------------------------	---------

Προσαρμοσμένο γάντι ανοιχτής παλάμης (SOPOG)

• Τρόπος τοποθέτησης και αφαίρεσης	Σελ. 13
------------------------------------	---------

• Δήλωση διάθεσης συσκευής	Σελ. 10
• Δήλωση σοβαρού ατυχήματος	Σελ. 10
• Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται	Σελ. 11

ζήσε τη ζωή σου.

Οδηγίες τοποθέτησης

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας. Φροντίζοντας το ορθωτικό προϊόν σας, **θα παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του και θα αποτρέψετε την καταστροφή του.**

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Φορέστε ή βγάλτε το ορθωτικό βοήθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή/του προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.dmorthotics.com/productcare
- Προσέξτε κατά την εφαρμογή και την αφαίρεσή του, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες στο φυλλάδιο – αν το φοράτε και το βγάζετε τραβώντας το με δύναμη και με μακριά νύχια, ενδέχεται να το καταστρέψετε.
- Είναι σημαντικό να αυξήσετε τη χρήση του σταδιακά, ακολουθώντας τις προσωπικές σας οδηγίες.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες πλύσης, διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το προσαρμοσμένο προϊόν σας με δύναμη - αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν με τραβηγμένους πόντους ή σκισίματα ή οπές στο ύφασμα.
- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το προϊόν με μακριά νύχια διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ύφασμα.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επικοινωνήστε με τον φυσικοθεραπευτή/τον προμηθευτή σας **ΑΜΕΣΑ** αν είναι υπερβολικά στενό, προκαλεί κόκκινα σημάδια ή αν έχει τραβηγμένους πόντους ή/και οπές.

Τα προϊόντα DMO® σχεδιάστηκαν συμπληρωματικά προς τη θεραπεία και τη φυσικοθεραπεία, έτσι δεν θα πρέπει να αφαιρούνται για σωματική άσκηση, εκτός αν σας συμβουλευσει αντίθετα ο φυσικοθεραπευτής σας, ή αν έχετε άλλες ανησυχίες για τις οποίες μπορεί να σας βοηθήσει.

Χρόνος χρήσης

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Αυξήστε αργά και σταδιακά τον χρόνο χρήσης την πρώτη εβδομάδα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, διπλασιάζοντας καθημερινά τον χρόνο, μέχρι να φοράτε το ορθωτικό βοήθημα καθόλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Π.χ., 1η ημέρα - 1 ώρα

2η ημέρα - 2 ώρες

3η ημέρα - 4 ώρες

4η ημέρα - 8 ώρες

5η ημέρα - όλη την ημέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια, φορέστε το όλη μέρα και κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- Μην το φορέσετε όλη την ημέρα αμέσως. Ο χρόνος χρήσης πρέπει να αυξηθεί σταδιακά, για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αισθητηριακής πρόσληψης, των βιομηχανικών μεταβολών και της εφαρμογής.
- Μην φοράτε το DMO σας τη νύχτα, εκτός εάν σας το συστήσει ο ιατρός ή ο κλινικός σας ιατρός π.χ. στην περίπτωση ασθενών με EDS όπου αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό.

Οδηγίες πλύσης

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας. Φροντίζοντας το ορθωτικό προϊόν σας, **θα παρατείνετε τη διάρκεια χρήσης του και θα αποτρέψετε την καταστροφή του.**

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ


- Το ορθωτικό βοήθημα θα πρέπει να πλένεται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες.
- Το ορθωτικό βοήθημα μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή στο πλυντήριο, στους 30 βαθμούς.
- Κάντε σύντομο στύψιμο μόνο ή τυλίξτε με μια στεγνή πετσέτα, για να απομακρύνετε την υπερβολική υγρασία.
- Αφήστε να στεγνώσει εντελώς όλη τη νύχτα, απλώνοντάς το σε εσωτερικό χώρο.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- ΜΗΝ το στεγνώνετε απευθείας σε ισχυρό ηλιακό φως ή επάνω σε ένα καλοριφέρ.
- ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΡΙΒΕΤΕ– θα ξεχειλώσει και θα χάσει το σχήμα του, ενώ θα προκληθεί ζημιά στα υλικά.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ Ή ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΟ.
- ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ.
- ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – θα συρρικνωθεί.

Για περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη, έχουμε προσθέσει στην τοποθεσία web μας οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης του ορθωτικού σας βοηθήματος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.dmorthotics.com/productcare.

Η τακτική και ορθή φροντίδα του ορθωτικού βοηθήματος δεν θα το αφήσει να αναπτύξει δυσάρεστες οσμές και θα διατηρήσει το υλικό απαλό. Αν το ορθωτικό σας βοήθημα έχει υποστεί επεξεργασία με άργυρο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά μετά από 100 πλύσεις, καθώς τα ιόντα αργύρου αρχίζουν να σκορπίζουν μετά από 50 πλύσεις.

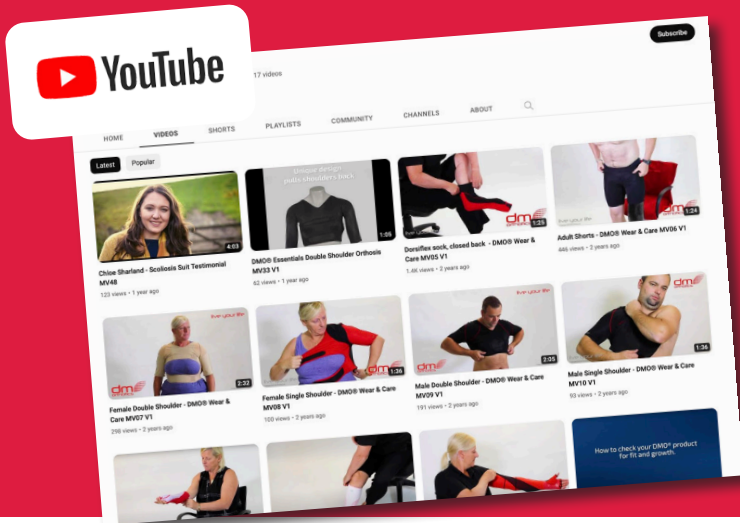

Τοποθέτηση των προϊόντων μας

Δημιουργήσαμε μια σειρά από οδηγούς βίντεο, για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τα ορθωτικά βοηθήματά τους στο μέγιστο. Αυτοί οι οδηγοί περιλαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές και κόλπα για την τοποθέτηση των προϊόντων μας καθώς και για τον καλύτερο τρόπο φροντίδας τους, κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεσή τους.

Για παρακολούθηση επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.dmorthotics.com/productcare

Τα προϊόντα DMO® πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Είναι σημαντικό να αυξάνετε αργά τον χρόνο χρήσης κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, διπλασιάζοντας τον χρόνο ημερησίως μέχρι το προϊόν να φορεθεί όλη την ημέρα. π.χ.

ζήσε τη ζωή σου.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντενδείξεις

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις όσον αφορά τη χρήση ενός προϊόντος DMO®. Η αξιολόγηση ενός προσαρμοσμένου προϊόντος DMO® θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας με τα σωστά προσόντα.

Προφυλάξεις/Ζητήματα

Ακολουθεί μια λίστα με πιθανές προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού προχωρήσετε με τη συνταγογράφηση ενός επί παραγγελία προϊόντος της DMO®. Πρέπει να συζητήσετε με τον επαγγελματία υγείας με τον οποίο συνεργάζεστε ο οποίος μπορεί να σας προτείνει ένα εναλλακτικό προϊόν της DMO® ή να αλλάξει το προτιμώμενο προϊόν DMO®.

Κακή ρύθμιση θερμοκρασίας

Ένα προϊόν DMO δεν θα επηρεάσει το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. Ωστόσο, το προϊόν DMO πρέπει να θεωρείται ως ένα στρώμα ρούχων και τα στρώματα ρούχων θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το αν κάνει κρύο ή ζέστη. Μπορούν να γίνουν προσαρμογές στη συνταγογράφηση, όπως κοντό παντελόνι ή κοντά μανίκια, ώστε να υπάρξει βελτίωση ως προς τον έλεγχο της θερμότητας.

Πρωτοπαθείς διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος Ορισμένα πρωτογενή αναπνευστικά προβλήματα όπου οι μύες εξασθενούν λόγω της επιδείνωσης των νευρών/μυών, θα χρειαστούν προσεκτική εξέταση και μπορεί να απαιτείται συζήτηση με τον ιατρό του ασθενούς σχετικά με την αλλαγή των προδιαγραφών της στολής. Τα δευτερογενή προβλήματα του κυκλοφορικού που σχετίζονται με την εγκεφαλική παράλυση μπορούν να βελτιωθούν λόγω της βελτιωμένης στάσης του κορμού/σώματος και της βελτιωμένης θέσης των πλευρών.

Δερματικές παθήσεις

Για δερματικές παθήσεις που μπορεί να επιδεινωθούν λόγω στενής επαφής με συνθετικά υλικά για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση με έναν επαγγελματία υγείας που επιβλέπει τη δερματολογική θεραπεία του ασθενούς, αλλά αυτό σπάνια αποτελεί αντένδειξη.

Σκελετική ευθραυστότητα/εύθραυστα οστά

Για ορισμένες παθήσεις, ένα προϊόν DMO® μπορεί να προσφέρει επαρκή υποστήριξη, ωστόσο αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσετε με τον ιατρό σας. Μπορούν να γίνουν αλλαγές στο προτιμώμενο προϊόν, όπως να προστεθούν φερμουάρ ή τρουκς ή το παντελόνι και τα μανίκια να είναι κοντά αντί για μακριά.

Προσαρμοσμένο γάντι καρπού/καρπού-αντιβραχίου, μανίκι και γάντι ανοιχτής παλάμης DMO®

Προβλεπόμενη χρήση

Η προβλεπόμενη χρήση του μανικιού DM11, του γαντιού καρπού/καρπού-αντιβραχίου DM16/17/18 και του γαντιού ανοιχτής παλάμης DM49 είναι η ευθυγράμμιση του άνω άκρου που περιλαμβάνει τον αγκώνα, τον καρπό και το χέρι (όπου το τμήμα γαντιού περιλαμβάνεται). Το μανίκι/γάντι καρπού παρέχει ένα μη περιοριστικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό επίπεδο στήριξης για τη μεγιστοποίηση της σταθερότητας. Το μανίκι/γάντι καρπού βοηθά επίσης ως προς τον περιφερικό έλεγχο και επηρεάζει θετικά τον μυϊκό τόνο για τη βελτίωση της λειτουργίας. Το γάντι καρπού/μανίκι μπορεί επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στη θέση του ώμου ακόμα κι αν ο ώμος δεν περιλαμβάνεται στο ορθωτικό βοήθημα.

Παιδιά ή ενήλικες με χαμηλό ή υψηλό μυϊκό τόνο, αισθητηριακά προβλήματα ή προβλήματα ιδιοδεκτικότητας. Παιδιά ή ενήλικες που έχουν πόνο που σχετίζεται με κακή ευθυγράμμιση ή κόπωση λόγω της αδυναμίας τους να διατηρήσουν μια σωστή στάση των άνω άκρων.

Προβλεπόμενη ομάδα ασθενών

Άνδρες και γυναίκες ασθενείς συνήθως ηλικίας δύο ετών και άνω, αν και τα παιδιά κάτω των δύο ετών μπορεί επίσης να επωφεληθούν από τα γάντια καρπού/μανίκια. Το χαμηλότερο όριο ηλικίας ορίστηκε λόγω της αυξημένης ανάπτυξης σε αυτό το στάδιο που θα απαιτούσε προσαρμογή ή τροποποίηση του γαντιού καρπού/μανικιού, όχι λόγω της αδυναμίας επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη χρήση του γαντιού καρπού/μανικιού.

Απαιτείται αρκετά υψηλός βαθμός επιδεξιότητας και μυϊκού τόνου για όσους πρόκειται να τοποθετούν και να αφαιρούν μόνοι τους το γάντι καρπού/μανίκι. Σε αντίθετη περίπτωση, ένας φροντιστής θα ήταν απαραίτητος για να παρέχει βοήθεια ως προς την εφαρμογή και την αφαίρεση του γαντιού καρπού/μανικιού.

Προβλεπόμενοι χρήστες

Για το μανίκι DM11, το γάντι καρπού/καρπού-αντιβραχίου DM16/17/18 και το γάντι ανοιχτής παλάμης DM49 απαιτούνται συνταγογράφηση και προδιαγραφές από κάποιον αρμόδιο επαγγελματία υγείας, συνήθως έναν εξειδικευμένο ορθωτικό, φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στη συνταγογράφηση και χρήση ορθωτικών βοηθημάτων δυναμικών κινήσεων. Ένας τέτοιος ικανός επαγγελματίας υγείας θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την εφαρμογή του μανικιού DM11, του γαντιού καρπού/καρπού-αντιβραχίου DM16/17/18 και του γαντιού ανοιχτής παλάμης DM49 και να δώσει περαιτέρω συμβουλές ως προς τις προδιαγραφές για τη βελτίωση της εφαρμογής όπου αυτό απαιτείται.

Ο χρήστης του μανικιού DM11, του γαντιού καρπού/καρπού-αντιβραχίου DM16/17/18 και του γαντιού ανοιχτής παλάμης DM49 είναι συνήθως μη ειδικός.

Ο φροντιστής του χρήστη που μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες εφαρμογής, αφαίρεσης και πλυσίματος του μανικιού DM11, του γαντιού καρπού/καρπού-αντιβραχίου DM16/17/18 και του γαντιού ανοιχτής παλάμης DM49 καθώς και να αναφέρει τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με το ορθωτικό βοήθημα είναι συνήθως μη ειδικός.

Το εν λόγω προσαρμοσμένο στα μέτρα σας προϊόν απαιτεί προδιαγραφές από επαγγελματία υγείας εκπαιδευμένο στη χρήση ορθωτικών βοηθημάτων δυναμικών κινήσεων. Θα χρειαστούν κάποιες μετρήσεις για τις οποίες ο επαγγελματίας υγείας θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση από την DM Orthotics για να τις κάνει.

Μια σειρά διαφορετικών πλαισίων ενίσχυσης πρέπει επίσης να συνταγογραφηθούν από τον εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας.



Μανίκι

Αποτελεσματικό για:

- Εγκεφαλική παράλυση
- Διαταραχές των άνω άκρων
- Σκλήρυνση κατά πλάκας
- Σύνδρομο Ehlers-Danlos
- Υψηλός και χαμηλός μυϊκός τόνος
- Αισθητηριακές διαταραχές

Παρέχει:

- Αυξημένη αισθητηριακή αντίληψη
- Βελτιωμένη στάση του σώματος
- Βελτιωμένη θέση (αν προστεθούν ενισχύσεις)
- Ανακούφιση από τον πόνο

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Ύφασμα συμπίεσης για άνεση και κίνηση
- Πλαίσιο ενίσχυσης για δύναμη και σταθερότητα
- Φοριέται κάτω από τα ρούχα

Γάντι ανοιχτής παλάμης (SOPOG)

Αποτελεσματικό για:

- Εγκεφαλική παράλυση
- Εγκεφαλικό
- Δυστονία
- Αισθητηριακές διαταραχές
- Αταξία

Παρέχει:

- Βελτιωμένη ευθυγράμμιση δαχτύλων, αντίχειρα και καρπού
- Επηρεάζει τον μυϊκό τόνο
- Βελτιωμένη αισθητηριακή αντίληψη

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Ύφασμα συμπίεσης για άνεση και κίνηση

Γάντι καρπού/καρπού-αντιβραχίου με μανίκι

Αποτελεσματικό για:

- Εγκεφαλική παράλυση
- Εγκεφαλικό
- Σκλήρυνση κατά πλάκας
- Αταξία
- Επίκτητο και μετατραυματικό εγκεφαλικό τραυματισμό
- Σύνδρομο Ehlers-Danlos
- Δυστονία
- και άλλα

Παρέχει:

- Βελτιωμένη ευθυγράμμιση δαχτύλων, αντίχειρα και καρπού
- Βελτιωμένη ευθυγράμμιση της έκτασης του αγκώνα (με το γάντι πλήρους μήκους)
- Υπτιασμός του αντιβραχίου (ή πρηνισμός, αν είναι απαραίτητο)
- Επηρεάζει τον μυϊκό τόνο
- Βελτιωμένη αισθητηριακή αντίληψη

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Ύφασμα συμπίεσης για άνεση και κίνηση
- Επιθέματα από σιλικόνη για να στέκεται σταθερό
- Πλαίσιο ενίσχυσης για δύναμη και σταθερότητα
- Διατίθεται με μακρύ ή κοντό μανίκι



Ζήσε τη ζωή σου.

Προφυλάξεις:

- Αφαιρέστε ρολόγια και δαχτυλίδια, μέχρι να φορεθεί το ορθωτικό βοήθημα.
- Όταν ανεβάζετε/κατεβάζετε φερμουάρ, προσέξτε να προστατεύσετε το δέρμα από οποιαδήποτε εμπλοκή.
- Προσέξτε όταν ρυθμίζετε την ταινία σιλικόνης στο επάνω μέρος του ορθωτικού βοηθήματος, να μην τραβηχτούν οι τρίχες και το δέρμα.
- Αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή (π.χ. τα δάχτυλα παρουσιάζουν κυάνωση ή είναι υπερβολικά κρύα στο άγγιγμα, αφαιρέστε το προϊόν και ενημερώστε άμεσα την ιατρική σας ομάδα, για περαιτέρω αξιολόγηση.

Για να ελέγξετε την εφαρμογή:

- Κόκκινα δάχτυλα - το γάντι θα πρέπει να έχει στενή εφαρμογή. Τα δάχτυλα ενδέχεται να είναι ελαφρώς ερυθρά στην αρχή, λόγω της διαδικασίας εφαρμογής. Αυτό είναι σύνηθες και η ερυθρότητα σύντομα θα εξαφανιστεί.
- Μπλε δάχτυλα - Αν ένα γάντι καρπού/καρπού-αντιβραχίου είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και τα δάχτυλα είναι μπλε, αφαιρέστε το ορθωτικό βοήθημα και επιστρέψτε το στον ιατρό που το συνέστησε αμέσως, για επανεξέταση.

Οδηγίες εφαρμογής προσαρμοσμένου γαντιού καρπού/καρπού-αντιβραχίου DMO®


Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής του γαντιού/του μακριού γαντιού, ανάλογα με την προσωπική προτίμηση. Αφαιρέστε το γάντι καρπού/το γάντι καρπού-αντιβραχίου και τον μηχανισμό δαχτύλου (στην περίπτωση γαντιού καρπού) από τη συσκευασία του και ανοίξτε, ενδεχομένως, τα φερμουάρ. Για το γάντι καρπού-αντιβραχίου DMO®, ακολουθήστε την Επιλογή 1 των οδηγιών εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τα βίντεό μας στη διεύθυνση www.dmorthotics.com/productcare σχετικά με το πώς να φορέσετε και πώς να βγάλετε το προϊόν DMO®.

Επιλογή 1. Κατάλληλη για γάντια καρπού/γάντια καρπού-αντιβραχίου χωρίς μηχανισμό δαχτύλου.

Το Προσαρμοσμένο Γάντι καρπού-αντιβραχίου DMO® δεν έχει μεμονωμένα δάχτυλα, αλλά φοριέται και πάλι με τον ίδιο τρόπο με ένα γάντι καρπού.



Περάστε το χέρι μέσα στο γάντι από το ανοιχτό φερμουάρ, προσέχοντας τα δάχτυλα και ο αντίχειρας να βρίσκονται στη σωστή οπή. Συνεχίστε να σπρώχνετε τα δάχτυλα μέσω των οπών δαχτύλων του γαντιού, μέχρι να εισαχθούν πλήρως. Για το γάντι καρπού/αντιβραχίου, βεβαιωθείτε ότι ο αντίχειρας και ο δείκτης (αν ο δείκτης περιλαμβάνεται στο σχέδιο) βρίσκονται στη σωστή τρύπα.

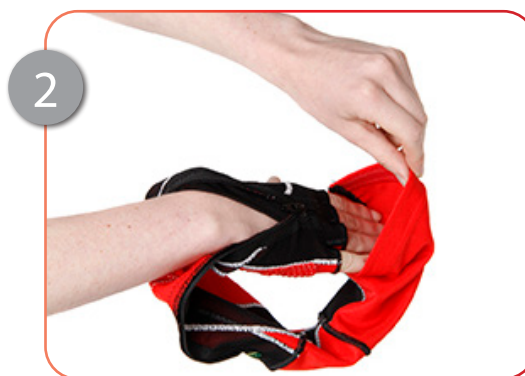

Περάστε το χέρι μέσα από το ανοιχτό άκρο του γαντιού, μέχρι να εμφανιστεί μέσα από το φερμουάρ.



Σπρώξτε το χέρι με το γάντι μέσα από την οπή.



Συνεχίστε να σπρώχνετε το χέρι μέσα από την οπή.



Ανεβάστε το γάντι στο αντιβράχιο, τραβώντας το (ξετυλίξτε την ταινία σιλικόνης). Ανεβάστε το φερμουάρ, προσέχοντας να μην εμπλακεί το δέρμα.



Σωστά ευθυγραμμισμένο γάντι. Το φερμουάρ θα πρέπει να φαίνεται σαν να είναι συνεστραμμένο, όταν το χέρι βρίσκεται σε ηρεμία. Αν το φερμουάρ είναι ίσιο, το γάντι έχει φορεθεί λάθος.

Επιλογή 2. Κατάλληλη για γάντια με μηχανισμό δαχτύλου.

1



Ανοίξτε το φερμουάρ, γυρίστε το γάντι ανάποδα, φροντίζοντας το άκρο των οπών του γαντιού να είναι εντελώς ανοιχτό, με ένα μολύβι (προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλα περνούν ελεύθερα μέσα στο γάντι).

2



Τοποθετήστε τον μηχανισμό δαχτύλου στον μέσο.

3



Με τον μηχανισμό δαχτύλου στον μέσο (στο πιο μακρύ δάχτυλο), σπρώξτε το μέσα στην οπή του μέσου δαχτύλου.

4



Αφαιρέστε τον μηχανισμό δαχτύλου, τραβώντας τον, αφήνοντας το γάντι φορεμένο στο μέσο δάχτυλο.

5




Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για κάθε δάχτυλο, με την εξής σειρά:- μέσος παράμεσος (δάχτυλο δαχτυλιδιού) μικρός, δείκτης μέχρι να βρίσκονται όλα τα δάχτυλα στη σωστή θέση στο γάντι.

6



Τοποθετήστε τον μηχανισμό δαχτύλου στον αντίχειρα και επαναλάβετε το βήμα 3 ακόμα μία φορά. Αφαιρέστε τον μηχανισμό με το γάντι φορεμένο στον αντίχειρα.

7

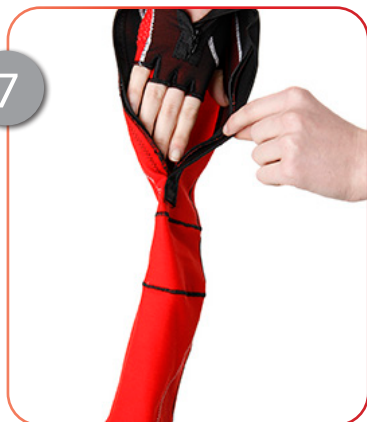

Τραβήξτε το γάντι στη σωστή θέση στον καρπό. Σπρώξτε το χέρι προς τα κάτω, μέσα από το μανίκι του γαντιού.

8



Ανεβάστε το γάντι στο αντιβράχιο, τραβώντας το, φροντίζοντας η ραφή πίσω από τον αντίχειρα να εκτείνεται ως την οστέινη προεξοχή στο εξωτερικό μέρος του αγκώνα - τον πλευρικό επικόνδυλο. Στην περίπτωση μακριού γαντιού, ανεβάστε το τραβώντας το αργά ως το επάνω μέρος του αντιβραχίου. Οι δύο οριζόντιες γραμμές θα πρέπει να βρίσκονται στις δύο πλευρές της άρθρωσης του αγκώνα. Μόλις το γάντι έχει φορεθεί πλήρως, εκτυλίξτε τη σιλικόνη, για να κρατηθεί το γάντι στη θέση του.

9




Κλείστε το φερμουάρ, προσέχοντας να προστατεύσετε το δέρμα από οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ζήσε τη ζωή σου.

Τρόπος αφαίρεσης του γαντιού καρπού/του γαντιού καρπού-αντιβραχίου DMO®


Το προσαρμοσμένο γάντι καρπού-αντιβραχίου DMO® δεν έχει οπές για τα μεμονωμένα δάχτυλα, σε αντίθεση με το γάντι. Όλα τα γάντια καρπού και καρπού-αντιβραχίου DMO® αφαιρούνται με τον ίδιο τρόπο.

Πώς θα πρέπει να φαίνεται το γάντι όταν το φοράτε:

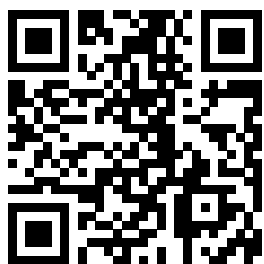

Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω κώδικα QR για πρόσβαση στα βίντεο εφαρμογής και φροντίδας ή πηγαίnete στη διεύθυνση:
www.dmorthotics.com/productcare

1

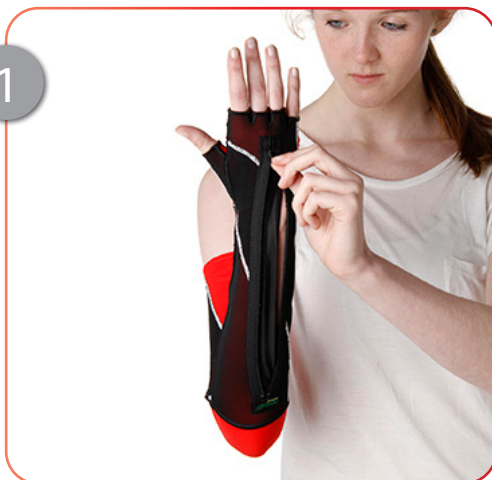


ΜΗΝ το αφαιρείτε τραβώντας το από τα δάχτυλα. Ανοίξτε το φερμουάρ, προσέχοντας να προστατεύσετε το δέρμα από οποιαδήποτε εμπλοκή.

2



Τραβήξτε το επάνω μέρος του γαντιού προς τα κάτω, προς το χέρι. Προσέξτε να διπλώσετε την ταινία σιλικόνης, χωρίς να τραβήξετε τρίχες ή δέρμα.

3

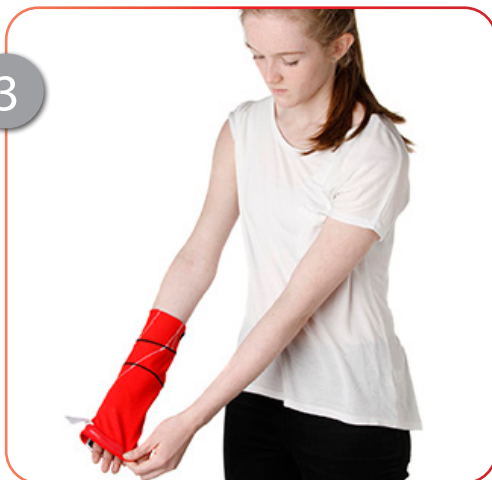

Τραβήξτε απαλά το γάντι από την ανάποδη περάστε το πάνω από τον καρπό και μετά από τα δάχτυλα.

4



Όταν αφαιρείτε το γάντι, φροντίστε να βγάλετε απαλά τα δάχτυλα από κάθε οπή.

Οδηγίες εφαρμογής προσαρμοσμένου μανικιού χεριού DMO®

Τρόπος τοποθέτησης του προσαρμοσμένου μανικιού χεριού.

Προφυλάξεις:

- Αφαιρέστε ρολόγια και δαχτυλίδια, μέχρι να φορεθεί το ορθωτικό βοήθημα.
- Όταν ανεβάζετε/κατεβάζετε φερμουάρ, προσέξτε να προστατεύσετε το δέρμα από οποιαδήποτε εμπλοκή.
- Προσέξτε όταν ρυθμίζετε την ταινία σιλικόνης στο επάνω μέρος του ορθωτικού βοηθήματος, να μην τραβηχτούν οι τρίχες και το δέρμα.
- Αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή, αφαιρέστε το προϊόν και ενημερώστε άμεσα την ιατρική σας ομάδα, για περαιτέρω αξιολόγηση.

Για να ελέγξετε την εφαρμογή:

- Θα πρέπει να μπορείτε να περάσετε το δάχτυλό σας γύρω από το χείλος της άκρης του ορθωτικού βοηθήματος στον καρπό και τη μασχάλη. Εάν αυτό είναι πολύ χαλαρό ή πολύ σφιχτό, επικοινωνήστε με τον κλινικό σας γιατρό.



1 Αφαιρέστε τη συσκευασία του προϊόντος και απλώστε τον εφαρμογέα και το μανίκι χεριού



2 Τοποθετήστε το χέρι μέσα στον εφαρμογέα και ξεκινήστε να τοποθετείτε το μανίκι πάνω από το χέρι.



3 Μόλις το μανίκι φτάσει στο χέρι του παιδιού, αφαιρέστε απαλά τον εφαρμογέα από το χέρι.



4 Τραβήξτε απλά το μανίκι προς τα επάνω, περάστε το πάνω από τον ώμο στο επάνω μέρος του χεριού.




5 Βεβαιωθείτε ότι το μανίκι χεριού έχει τοποθετηθεί στο επάνω μέρος του χεριού και ότι η ταινία σιλικόνης ακουμπά πάνω στο δέρμα.

ζήσε τη ζωή σου.

Προσαρμοσμένο μανίκι χεριού DMO®

Τρόπος αφαίρεσης του μανικιού χεριού DMO®

Πώς θα πρέπει να φαίνεται το μανίκι όταν το φοράτε:

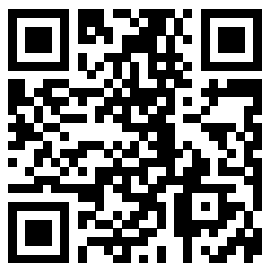

Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω κώδικα QR για πρόσβαση στα βίντεο εφαρμογής και φροντίδας ή πηγαίνετε στη διεύθυνση:
www.dmorthotics.com/productcare



1 Γυρίστε το επάνω μέρος του μανικιού από την ανάποδη πλευρά ώστε να φαίνεται η ταινία σιλικόνης.



2 Συνεχίστε προσεκτικά να τραβάτε από την ανάποδη πλευρά το μανίκι μέχρι να φτάσει κάτω στον αγκώνα και βγάλτε το από το χέρι σας.



3

Προφυλάξεις:

- Αφαιρέστε ρολόγια και δαχτυλίδια, μέχρι να φορεθεί το ορθωτικό βοήθημα.
- Όταν ανεβάζετε/κατεβάζετε το γάντι, προσέξτε να μην πιαστεί το δέρμα σας.
- Αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή (π.χ. τα δάχτυλα παρουσιάζουν κυάνωση ή είναι υπερβολικά κρύα στο άγγιγμα, αφαιρέστε το προϊόν και ενημερώστε άμεσα την ιατρική σας ομάδα, για περαιτέρω αξιολόγηση.

Για να ελέγξετε την εφαρμογή:

- Κόκκινα δάχτυλα - το γάντι θα πρέπει να έχει στενή εφαρμογή. Τα δάχτυλα ενδέχεται να είναι ελαφρώς ερυθρά στην αρχή, λόγω της διαδικασίας εφαρμογής. Αυτό είναι σύνηθες και η ερυθρότητα σύντομα θα εξαφανιστεί.
- Μπλε δάχτυλα - Αν ένα γάντι καρπού είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και τα δάχτυλα είναι μπλε, αφαιρέστε το ορθωτικό βοήθημα και επιστρέψτε το στον ιατρό που το συνέστησε αμέσως, για επανεξέταση.



Βγάλτε το γάντι από τη συσκευασία του.



Ολισθήστε τα δάχτυλά σας μέσα στις ξεχωριστές τρύπες για κάθε δάχτυλο εκτός από τον αντίχειρα.



Τραβήξτε το γάντι για να εμφανιστεί η οπή αντίχειρα και τοποθετήστε μέσα τον αντίχειρά σας.



Τραβήξτε την οπή του αντίχειρα και το υπόλοιπο γάντι προς τον καρπό όπως φαίνεται στις εικόνες.



Τοποθετήστε την παλάμη προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως φαίνεται στην εικόνα. Πάρτε το πτερύγιο και τυλίξτε το πίσω από το χέρι σας. Βεβαιωθείτε ότι το χέρι σας είναι κάθετο και προς τα επάνω όπως στην εικόνα, ειδώς το ορθωτικό βοήθημα δεν θα λειτουργήσει.



Προφυλάξεις:

- Αφαιρέστε ρολόγια και δαχτυλίδια, μέχρι να φορεθεί το ορθωτικό βοήθημα.
- Όταν ανεβάζετε/κατεβάζετε το γάντι, προσέξτε να μην πιαστεί το δέρμα σας.
- Αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή (π.χ. τα δάχτυλα παρουσιάζουν κυάνωση ή είναι υπερβολικά κρύα στο άγγιγμα, αφαιρέστε το προϊόν και ενημερώστε άμεσα την ιατρική σας ομάδα, για περαιτέρω αξιολόγηση.

Για να ελέγξετε την εφαρμογή:

- Κόκκινα δάχτυλα - το γάντι θα πρέπει να έχει στενή εφαρμογή. Τα δάχτυλα ενδέχεται να είναι ελαφρώς ερυθρά στην αρχή, λόγω της διαδικασίας εφαρμογής. Αυτό είναι σύνηθες και η ερυθρότητα σύντομα θα εξαφανιστεί.
- Μπλε δάχτυλα - Αν ένα γάντι καρπού είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και τα δάχτυλα είναι μπλε, αφαιρέστε το ορθωτικό βοήθημα και επιστρέψτε το στον ιατρό που το συνέστησε αμέσως, για επανεξέταση.

6



Ασφαλίστε το περύγιο στο μπροστινό μέρος του γαντιού όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω.

7



Πώς θα πρέπει να φαίνεται το γάντι όταν το φοράτε.

ζήσε τη ζωή σου.

Τρόπος αφαίρεσης του προσαρμοσμένου γαντιού ανοιχτής παλάμης DMO® (SOPOG)

Πώς θα πρέπει να φαίνεται το γάντι όταν το φοράτε:



1



Λύστε το πτερύγιο και περιστρέψτε το πίσω από τον καρπό.

2




Τραβήξτε το γάντι προς τις άκρες των δακτύλων σας.

3



Αφαιρέστε το γάντι τραβώντας το από την ανάποδη πλευρά και περάστε το πάνω από τις άκρες των δακτύλων σας.

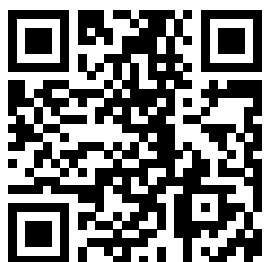

Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω κώδικα QR για πρόσβαση στα βίντεο εφαρμογής και φροντίδας ή πηγαίnete στη διεύθυνση:
www.dmorthotics.com/productcare

Δήλωση διάθεσης ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται από τη DM Orthotics είναι ορθωτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 1/ επί παραγγελία. Δεν απαιτούνται προφυλάξεις κατά τη διάθεση των προϊόντων της DMO®. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανονισμούς για τη διάθεση ενδυμάτων/υλικών. Σας παρακαλούμε να πλύνετε αυτό το προϊόν πριν από τη διάθεση.

Δήλωση σοβαρού ατυχήματος

Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν της DMO® που αγοράσατε, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή (DM Orthotics) και στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στο κράτος μέλος σας, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή η αρχή θα είναι η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας MHRA.

Κατασκευαστής



Ταυτοποίηση ασθενούς



Αναγνωριστικό προϊόντος/ μοντέλου




Κατασκευάζεται στη Βρετανία



Διανομέας




MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Netherlands

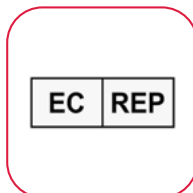

Όνομα ιατρού



Αριθμός παραγγελίας

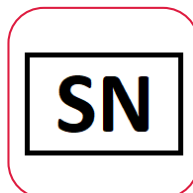

Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Λάβετε υπόψη ότι τυχόν τροποποίηση από τον χρήστη δεν συνιστάται και, σε περίπτωση που κάνετε αλλαγές στο ορθωτικό βοήθημα, η εγγύησή σας μπορεί να επηρεαστεί ή να θεωρηθεί άκυρη. Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο κλινικό ιατρό σας ή την DM Orthotics για πληροφορίες σχετικά με αλλαγές και τροποποιήσεις προϊόντων.



Κατασκευαστής:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, UK
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Σχεδιασμός και κατασκευή: HB

DM11 – 5054522000104 (UDI-DI)
DM16 – 5054522000111 (UDI-DI)
DM17 – 5054522000128 (UDI-DI)
DM18 – 5054522000135 (UDI-DI)
DM49 – 5054522000265 (UDI-DI)



Κατασκευαστής: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Netherlands