

live your life.



Instrucciones de uso para el paciente:

Manga, guante/manopla y guante con la palma abierta personalizado DMO®



www.dmorthotics.com

Nuestros productos

Nuestras ortesis de movimiento dinámico* personalizadas utilizan un tejido elastomérico flexible y suave que garantiza un ajuste perfecto y crea fuerzas de compresión para mejorar la respuesta propioceptiva. Este tejido básico es ligero, transpirable y resistente,

y se combina con paneles de refuerzo fabricados con un material Powernet (tela elástica con mezcla de poliamida y elastano) para proporcionar fuerza y estabilidad cuando es necesario, además de mejorar la postura y la alineación biomecánica.

Nuestras ortesis a medida funcionan mediante unos refuerzos estratégicamente situados que colocan el cuerpo en una alineación postural mejorada. Esta nueva categoría biomecánica combinada con una propiocepción mejorada estimula y ajusta el sistema neurosensorial al entrenar a los músculos para que trabajen con un mejor tono, fuerza y rendimiento.

Los productos DMO* ayudan tanto a adultos como a niños a gestionar los efectos físicos de sus afecciones neurológicas, musculoesqueléticas y genéticas.

Los productos DMO® personalizados se fabrican de forma individual a medida, y todos los cierres, aberturas y refuerzos se prescriben individualmente según las necesidades funcionales y las preferencias de cada paciente.

Contacto

Para obtener más información sobre nuestras gamas de productos DMO*, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local de DMO* o directamente con DM Orthotics.

Correo: admin@dmorthotics.com Sitio web: www.dmorthotics.com

Tel.: +44 (0) 1209 219205

Uso previsto de nuestros productos

Las ortesis personalizadas de DM Orthotics están previstas para el **uso exclusivo por un solo paciente específico** con el fin de mantener y corregir la postura, además de alinear las articulaciones. No deben llevarlas ninguna otra persona a la que no se le haya medido y prescrito individualmente.

Todas las ortesis personalizadas de DM Orthotics se consideran productos sanitarios según la definición del Reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745 y se ha declarado que cumplen con las normativas según lo establecido en los Anexos II y III de dicho reglamento y se engloban dentro de la definición de ortesis médica: un dispositivo ortopédico, una férula u otro dispositivo externo artificial para sujetar las extremidades o la columna vertebral, o para evitar el movimiento relativo o favorecerlo.

Los dispositivos son personalizados (según el anexo III del Reglamento de productos sanitarios [RPS] y cumplen los requisitos correspondientes del RPS (2017/745): Producto personalizado

Fecha de emisión

Nuestros productos sanitarios personalizados se fabrican según una prescripción específica y se emiten con una fecha de fabricación en el formulario de declaración adjunto que se envía con su producto. El usuario final debe conservar este documento.

Índice

● Instrucciones de uso	pág. 3
● Instrucciones de lavado	pág. 4
● Contraindicaciones y precauciones	pág. 5
● Finalidad prevista	pág. 6
● Población de pacientes prevista	pág. 6
● Usuarios previstos	pág. 7
● Eficaz para los pacientes	pág. 7
● Beneficios clínicos	pág. 7
● Uso con otras ortesis	pág. 7

Guante/manopla personalizada **pág. 6**

● Cómo ponérselo y quitárselo	pág. 8
Manga personalizada	pág. 6
● Cómo ponérsela y quitársela	pág. 10
Guante con la palma abierta personalizado (SOPOG)	pág. 6
● Cómo ponérselo y quitárselo	pág. 13

● Declaración sobre la eliminación de los productos	pág. 10
● Declaración de incidente grave	pág. 10
● Explicación de símbolos utilizados	pág. 11

Instrucciones de uso

Siga meticulosamente las instrucciones de mantenimiento. Para que su ortesis **dure más tiempo y no se estropee**, cuídela bien.

SÍ

- Póngase y quítese la ortesis según le indique el terapeuta o el proveedor. Consulte la página web: www.dmorthotics.com/productcare
- Tenga cuidado cuando se la ponga o se la quite y siga las instrucciones de este folleto. Hacer movimientos bruscos al ponérsela o quitársela y tener las uñas largas pueden dañarla.
- Es importante aumentar progresivamente el tiempo de uso conforme a las instrucciones recibidas.
- Siga meticulosamente las instrucciones de lavado. De lo contrario, se puede dañar.

NO

- No se ponga ni se quite el producto de forma brusca, ya que podría provocar carreras, desgarros o agujeros en el tejido.
- No se ponga ni se quite el producto con las uñas largas, ya que esto también puede dañar el tejido.

PROBLEMAS DE AJUSTE O SEGURIDAD

Póngase en contacto con el terapeuta o el proveedor **DE INMEDIATO** si le empieza a apretar y le salen marcas rojas o han aparecido carreras o agujeros.

Los productos DMO® están diseñados para complementar el tratamiento y el ejercicio físico, por lo que no deberán quitarse durante el ejercicio a menos que se lo aconseje su terapeuta.

Tiempo de uso

SÍ

- Aumente lentamente el tiempo de uso durante la primera semana, tal y como aparece más abajo, de manera que se duplique el tiempo día tras día hasta que pueda utilizar la ortesis el día entero.

p.ej., 1.º día: 1 hora

2.º día: 2 horas

3.º día: 4 horas

4.º día: 8 horas

5.º día: todo el día, durante el día. A partir de entonces, todos los días durante del día.

NO

- Usar el día entero desde el primer momento. El uso se debe aumentar progresivamente para garantizar que se controla la percepción sensorial, los cambios biomecánicos y la adaptación.
- No se ponga la ortesis DMO por la noche a menos que se lo recomiende su médico. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, su uso por la noche puede ser beneficioso.

Instrucciones de lavado

Siga meticulosamente las instrucciones de mantenimiento. Para que su ortesis **dure más tiempo y no se estropee**, cuídela bien.

sí


- Debe lavarla al menos cada 2 o 3 días.
- Puede lavarla a mano con agua fría o en la lavadora a 30°.
- Para eliminar el exceso de humedad, use un centrifugado corto o envuélvala en una toalla seca.
- Tiéndala por la noche en el interior de una habitación para dejar que se seque del todo.

NO

- NO la seque directamente con la luz solar o encima de un radiador.
- NO LA ESCURRA porque se da de sí y se estropean los materiales.
- NO LA PLANCHE.
- NO UTILICE LEJÍA.
- NO LA LIMPIE EN SECO.
- NO LA SEQUE EN LA SECADORA porque encoge.

Para obtener más ayuda y asistencia, hemos añadido información en nuestra web y en YouTube sobre cómo ponerse y quitarse la ortesis. Visite: www.dmorthotics.com/productcare.

El cuidado regular y correcto de la ortesis evitará que esta huela de forma desagradable y mantendrá el material en buen estado. Si la ortesis lleva un tratamiento de plata, tendrá que volver a someterse a este tras 100 lavados, ya que los iones de plata comienzan a desaparecer tras 50 lavados.

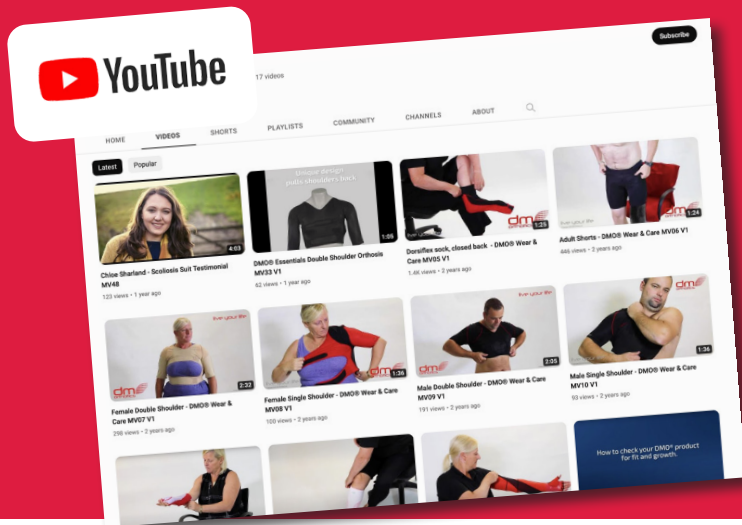

Usar nuestros productos

Hemos creado varias guías en vídeo para ayudar a los clientes a sacar el máximo provecho del producto. En estas guías se incluyen trucos y consejos prácticos para usar nuestros productos y la mejor forma de cuidarlos al ponérselos o quitárselos.

Para verlos, visite la página www.dmorthotics.com/productcare

Los productos DMO[®] deben llevarse pegados a la piel. Es importante aumentar el tiempo de uso paulatinamente durante la primera semana y duplicar la cantidad de tiempo diario hasta llevarlo durante todo el día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES/CONSIDERACIONES

Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones para la utilización del producto DMO[®]. Un profesional médico autorizado con la cualificación profesional adecuada debe ser quien se encargue de la evaluación de cualquier producto DMO[®] personalizado.

Precauciones/consideraciones

A continuación, figura una lista de posibles precauciones que hay que tener en cuenta antes de seguir adelante con la prescripción de un producto DMO[®] a medida. Esto debe discutirse con un profesional médico cualificado, ya que puede recomendarle otro producto DMO[®] o modificar el producto DMO[®] elegido.

Control deficiente de la regulación de la temperatura

El producto DMO no afectará al centro regulador de la temperatura del cuerpo. Sin embargo, este debe considerarse una capa de ropa y las capas de ropa deberán ajustarse en consecuencia para climas cálidos o fríos. Se pueden realizar ajustes en la prescripción, como utilizar perneras y mangas cortas, para ayudar a mejorar el control del calor.

Trastornos circulatorios primarios

Si el paciente sufre de problemas respiratorios primarios en los que los músculos se están debilitando debido al deterioro de los nervios/músculos, habrá que considerarlo detenidamente y se deberá consultar al médico del paciente, aunque las especificaciones del producto pueden modificarse para adaptarse a ello. Los problemas respiratorios secundarios asociados con la parálisis cerebral se pueden mitigar mediante una postura mejorada del tronco/cuerpo y una mejor disposición de las costillas.

Afecciones cutáneas

Las afecciones cutáneas que puedan agravarse por el contacto estrecho con materiales sintéticos durante periodos prolongados pueden requerir una consulta adicional con un profesional sanitario que supervise el tratamiento dermatológico del paciente, pero esto no suele ser una contraindicación.

Fragilidad esquelética/huesos frágiles

Algunas afecciones son compatibles con el producto DMO[®], pero esto debe consultarse con el médico. Se pueden realizar modificaciones en el producto elegido, como añadir cremalleras o botones a presión, o utilizar mangas o perneras cortas en lugar de largas.

Manga, guante/manopla y guante con la palma abierta personalizado DMO®

Finalidad prevista

La finalidad prevista de la manga DM11, el guante/manopla DM16/17/18 y el guante con la palma abierta DM49 es alinear la extremidad superior que incluye el codo, la muñeca y la mano (en los casos en los que se incluye la parte del guante). La manga/guante ofrece un nivel de soporte sin restricciones y resulta altamente eficaz para maximizar la estabilidad. La manga/guante también ayuda al control distal e influye positivamente en el tono muscular para mejorar la capacidad funcional. El guante/manga también puede influir positivamente en la colocación del hombro incluso aunque no se incluya en la ortesis.

Está destinado a niños o adultos que presentan hipo o hipertonía problemas sensoriales o de propiocepción. También a niños o adultos que presentan dolor asociado a una mala alineación o fatiga causada por su incapacidad para mantener una postura correcta de las extremidades superiores.

Población de pacientes prevista

Pacientes de ambos sexos de dos años o más, aunque los niños menores de dos años también podrían beneficiarse de los guantes/mangas. Este límite de edad se fijó debido a un mayor crecimiento en esta etapa que requeriría un ajuste o nueva confección de la ortesis, no debido a la incapacidad de lograr el propósito previsto. No existe un límite de edad superior para la manga/camiseta.

Se requiere un grado razonablemente alto de destreza y tono muscular para quienes vayan a ponerse y quitarse el guante/manga por sí mismos. En caso contrario, se necesitará la ayuda de un cuidador para ponerse o quitarse la ortesis.

Usuarios previstos

La manga DM11, el guante/manopla DM16/17/18 y el guante con la palma abierta DM49 deberán haber sido

prescritos y especificados por un profesional sanitario competente, normalmente un ortopeda, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional cualificado que haya recibido la formación adecuada en la prescripción y el uso de ortesis de movimiento dinámico. Dicho profesional sanitario también deberá evaluar el ajuste de la manga DM11, del guante/manopla DM16/17/18 y del guante con la palma abierta DM49 para ofrecer un asesoramiento adicional para mejorarlo cuando sea necesario.

El usuario de la manga DM11, el guante/manopla DM16/17/18 y el guante con la palma abierta DM49 normalmente será una persona no profesional.

El cuidador del usuario, que puede ayudar a poner y quitar la ortesis, lavarla y notificar de cualquier problema con la manga DM11, el guante/manopla DM16/17/18 y el guante con la palma abierta DM49, será normalmente una persona no profesional.

El producto en cuestión está hecho a medida y requiere la especificación de un profesional sanitario formado en el uso de ortesis de movimiento dinámico. Para ello, DM Orthotics habrá formado al profesional sanitario en la toma de medidas.

El profesional sanitario capacitado también debe prescribir los paneles de refuerzo necesarios dentro de la gama de paneles disponibles.



Manga

Es eficaz para:

- Parálisis cerebral
- Disfunciones de las extremidades superiores
- Esclerosis múltiple
- Síndrome de Ehlers Danlos
- Hipertonía e hipotonía muscular
- Discapacidad sensorial

Beneficios:

- Aumento de la percepción sensorial
- Mejora de la postura
- Mejora de la colocación (donde se hayan añadido refuerzos)
- Alivio del dolor

Otras características:

- Tejido de compresión que aporta comodidad y permite el movimiento
- Paneles de refuerzo para mayor resistencia y estabilidad
- Se puede llevar debajo de la ropa

Guante con la palma abierta (SOPOG)

Es eficaz para:

- Parálisis cerebral
- Ictus
- Distonía
- Discapacidad sensorial
- Ataxia

Beneficios:

- Mejora de la alineación de los dedos, el pulgar y la muñeca
- Actúa en el tono muscular
- Mejora de la percepción sensorial

Otras características:

- Tejido de compresión que aporta comodidad y permite el movimiento

Guante/manopla con manga

Es eficaz para:

- Parálisis cerebral
- Ictus
- Esclerosis múltiple
- Ataxia
- Traumatismo craneoencefálico o daño cerebral adquirido
- Síndrome de Ehlers Danlos
- Distonía
- Otras dolencias

Beneficios:

- Mejora de la alineación de los dedos, el pulgar y la muñeca
- Mejora de la alineación de la extensión del codo (con el guante de manga larga)
- Supinación del antebrazo (o pronación si procede)
- Actúa en el tono muscular
- Mejora de la percepción sensorial

Otras características:

- Tejido de compresión que aporta comodidad y permite el movimiento
- Almohadillas de silicona para facilitar el agarre
- Paneles de refuerzo para mayor resistencia y estabilidad
- Disponible en manga larga o corta



Instrucciones de uso del guante o la manopla personalizada DMO®

Hay varias formas de ponerse el guante o la manopla según la preferencia personal. Extraiga el guante o la manopla y el aplicador de dedo (en el caso del guante) de su embalaje y baje las cremalleras. Para la manopla DMO® siga la opción 1 de las instrucciones de uso. También puede ver los vídeos en www.dmorthotics.com/productcare sobre cómo ponerse y quitarse el producto DMO®.

Precauciones:

- Quítese el reloj y los anillos hasta después de colocarse la ortesis.
- Cuando suba y baje las cremalleras tenga cuidado de no pellizcar la piel.
- Tenga cuidado al ajustar la banda de silicona de la parte superior de la ortesis que protege de tirones en el vello y en la piel.
- Si hay problemas con el ajuste (es decir, las extremidades se vuelven moradas o se están muy frías al tacto), quítese la ortesis e informe de inmediato al equipo médico para una nueva evaluación.

Para comprobar el ajuste:

- Dedos rojos: el ajuste del guante debe ser cómodo. Al principio, los dedos pueden estar un poco enrojecidos debido al proceso de colocación. Esto es habitual y el enrojecimiento desaparecerá pronto.
- Dedos morados: si el guante o la manopla están alineados de forma correcta y los dedos están morados, quítese la ortesis y devuélvala de inmediato al médico que se la entregó para que la revise.

Opción 1. Adecuado para guantes o manopla sin aplicador de dedo

La manopla DMO® personalizada no tiene dedos individuales, pero se pone de la misma forma que el guante.



Coloque la mano dentro del guante a través de la cremallera abierta de modo que los dedos y el pulgar se sitúen en el orificio correcto. Continúe deslizando los dedos por los orificios del guante hasta que esté totalmente puesto. En el caso de la manopla, asegúrese de que el pulgar y el índice (si se incluye el índice en el diseño) están colocados en el orificio correcto.



Introduzca la mano por el extremo abierto del guante hasta que la mano aparezca a través de la cremallera.



Deslice la mano con el guante por el orificio.



Continúe deslizando la mano por el orificio.



Estire el guante hacia arriba por el brazo (desenrolle la banda de silicona). Suba la cremallera teniendo cuidado de no atrapar la piel.



Guante alineado de forma correcta. La cremallera debe parecer torcida cuando la mano está en reposo. Si la cremallera está recta, el guante está mal puesto.

Opción 2. Adecuado para guantes con aplicador de dedo



Baje la cremallera, vuelva el guante del revés y compruebe que los extremos de los orificios del guante están totalmente abiertos con un lápiz (de este modo se garantiza que los dedos se deslizan dentro del guante).



Coloque el aplicador de dedo en el dedo corazón.



Con el aplicador de dedo en el dedo corazón (el dedo más largo), introdúzcalo en el orificio del dedo corazón.



Tire del aplicador de dedo dejando el guante colocado en el dedo corazón.



Repita los pasos 3 y 4 en cada dedo en el siguiente orden: dedo corazón, cuarto dedo (dedo anular), meñique, primer dedo (dedo índice) hasta que todos los dedos estén colocados en el guante.



Coloque el aplicador de dedo en el pulgar y repita el paso 3 una vez más. Retire el aplicador con el guante colocado en el pulgar.



Tire del guante hasta alcanzar la muñeca. Introduzca la mano a través de la manga del guante.



Estire del guante hacia arriba comprobando que la costura situada detrás del pulgar llegue hasta la prominencia ósea de la parte externa del codo (el epicóndilo lateral). Si el guante es más largo, estírelo lentamente hacia arriba hasta la parte superior del brazo. Las dos líneas horizontales deben estar a cada lado de la articulación del codo. Una vez el guante está puesto por completo, desenrolle la banda de silicona para mantener el guante en su posición.




Suba la cremallera teniendo cuidado de no atrapar la piel.

live your life.

Cómo quitarse el guante o la manopla DMO® personalizados


La manopla DMO® personalizada no tiene orificios para dedos individuales como el guante. La extracción es igual para todos los guantes y las manoplas DMO®.

Aspecto que debe tener el guante al llevarlo puesto:

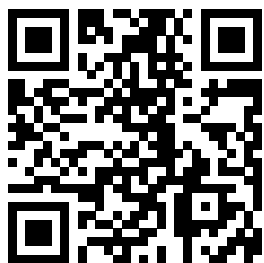

Utilice el código QR de arriba para acceder a los vídeos de instrucciones de uso y cuidado o visite:

www.dmorthotics.com/productcare

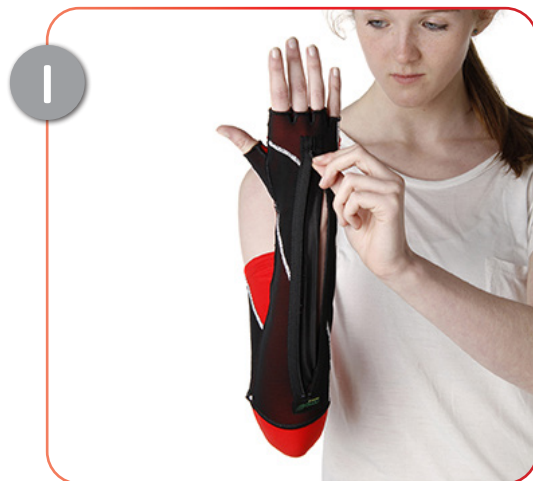

NO tire de los dedos para quitarlo. Baje la cremallera teniendo cuidado de no atrapar la piel.



Tire de la parte superior del guante hacia abajo en dirección a la mano. Enrolle la banda de silicona para que no tire del vello de la piel.



Tire con cuidado del guante de adentro hacia afuera primero por la muñeca y después por los dedos.



Si está retirando un guante, asegúrese de que saca con cuidado cada dedo de su orificio.

Instrucciones de uso de la manga personalizada DMO®

Cómo ponerse la manga personalizada

Precauciones:

- Quítese el reloj y los anillos hasta después de colocarse la ortesis.
- Cuando suba y baje las cremalleras tenga cuidado de no pellizcar la piel.
- Tenga cuidado al ajustar la banda de silicona de la parte superior de la ortesis que protege de tirones en el vello y en la piel.
- Si hay problemas con el ajuste, quítese la ortesis e informe de inmediato al equipo médico para una nueva evaluación.

Para comprobar el ajuste:

- Debería poder meter el dedo por el borde de la ortesis tanto en la muñeca como en la axila. Si queda demasiado suelta o ajustada, póngase en contacto con su médico.



1 Saque la manga y el aplicador de seda del envoltorio y estírelos.



2 Coloque la mano en el aplicador de seda y comience a meter la manga por la mano.



3 Una vez que la manga está sobre el brazo del niño, quite con cuidado el aplicador de seda.



4 Tire con cuidado de la manga por encima del codo hacia la parte superior del brazo.




5 Asegúrese de que la manga se encuentra colocada en la parte superior del brazo y la banda de silicona sobre la piel.

live your life.

Manga personalizada DMO®

Cómo quitarse la manga DMO®

Cómo debe quedar puesta la manga:

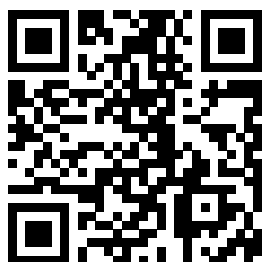

Utilice el código QR de arriba para acceder a los vídeos de instrucciones de uso y cuidado o visite:

www.dmorthotics.com/productcare



Gire hacia afuera la parte superior de la manga por el borde de silicona.



Tire con cuidado de adentro hacia afuera, pasando por el codo y por la mano.



Instrucciones de uso del guante con la palma abierta (SOPOG) personalizado DMO®

Precauciones:

- Quítese el reloj y los anillos hasta después de colocarse la ortesis.
- Cuando abroche y desabroche la ortesis tenga cuidado de no pellizcar la piel.
- Si hay problemas con el ajuste (es decir, las extremidades se vuelven moradas o se están muy frías al tacto), quítese la ortesis e informe de inmediato al equipo médico para una nueva evaluación.

Para comprobar el ajuste:

- Dedos rojos: el ajuste del guante debe ser cómodo. Al principio, los dedos pueden estar un poco enrojecidos debido al proceso de colocación. Esto es habitual y el enrojecimiento desaparecerá pronto.
- Dedos morados: si el guante está alineado de forma correcta y los dedos están morados, debe quitar la ortesis y devolverla de inmediato al médico que se la entregó para que la revise.



Saque el guante de su embalaje.



Pase los dedos por los orificios correspondientes excepto el pulgar.



Recoja un poco de guante por la parte del pulgar e introduzca este en su orificio.



Tire del orificio y del resto del guante hacia la muñeca tal y como se muestra en las imágenes.



Coloque la palma boca abajo en una superficie plana tal y como se muestra. Tire de la lengüeta y enróllela alrededor del dorso de la mano. Asegúrese de que el brazo esté colocado verticalmente tal y como aparece en la ilustración. De lo contrario, la ortesis no funcionará.



Precauciones:

- Quítese el reloj y los anillos hasta después de colocarse la ortesis.
- Cuando abroche y desabroche la ortesis tenga cuidado de no pellizcar la piel.
- Si hay problemas con el ajuste (es decir, las extremidades se vuelven moradas o se están muy frías al tacto), quítese la ortesis e informe de inmediato al equipo médico para una nueva evaluación.

Para comprobar el ajuste:

- Dedos rojos: el ajuste del guante debe ser cómodo. Al principio, los dedos pueden estar un poco enrojecidos debido al proceso de colocación. Esto es habitual y el enrojecimiento desaparecerá pronto.
- Dedos morados: si el guante está alineado de forma correcta y los dedos están morados, debe quitar la ortesis y devolverla de inmediato al médico que se la entregó para que la revise.



Abroche la lengüeta en la parte delantera del guante tal y como se muestra arriba.




Aspecto que debe tener el guante al llevarlo puesto.

live your life.

Cómo quitarse el guante con la palma abierta (SOPOG) personalizado DMO®

Aspecto que debe tener el guante al llevarlo puesto:

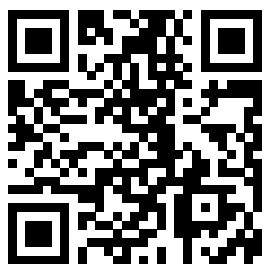

Utilice el código QR de arriba para acceder a los vídeos de instrucciones de uso y cuidado o visite:

www.dmorthotics.com/productcare



Desabroche la lengüeta y desenrolle la parte del dorso de la muñeca.



Tire del guante hacia las puntas de los dedos.



Quítese el guante tirando de dentro hacia afuera pasando por la punta de los dedos.

Declaración sobre la eliminación de dispositivos

Los productos fabricados por DM Orthotics son ortesis personalizadas de clase 1. No es necesario tomar precauciones para eliminar los productos de DMO®. Los materiales utilizados para la fabricación se pueden eliminar según las disposiciones locales para la eliminación de ropa y materiales. Antes de desechar el dispositivo, lávelo.

Declaración de incidente grave

Si se produce algún incidente grave relacionado con el dispositivo DMO®, deberá notificarlo de inmediato al fabricante (DM Orthotics) y a la autoridad competente responsable de los productos sanitarios en el correspondiente Estado miembro; por ejemplo, en el Reino Unido sería la MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios).

Fabricante



Identificación del paciente



Identificador del producto/modelo




Fabricado en Gran Bretaña



Distribuidor



MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Países Bajos

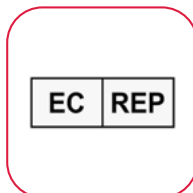

Nombre del médico



Número de pedido



Producto sanitario



Por favor, tenga en cuenta que no se recomienda la modificación por parte del usuario y que la alteración de la ortesis puede afectar a la garantía o anularla. Póngase en contacto con su especialista clínico o con DM Orthotics para obtener información sobre alteraciones y modificaciones del producto.



Fabricante:
DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth
Cornwall, Reino Unido
TR15 1SS

+44 (0) 1209 219205
www.dmorthotics.com
admin@dmorthotics.com



Diseñadas y fabricadas en Reino Unido.

DM11 – 5054522000104 (UDI-DI)
DM16 – 5054522000111 (UDI-DI)
DM17 – 5054522000128 (UDI-DI)
DM18 – 5054522000135 (UDI-DI)
DM49 – 5054522000265 (UDI-DI)



Fabricante: DM Orthotics Ltd
Unit 2 Cardrew Way
Cardrew Industrial Estate
Redruth, Cornwall, UK
TR15 1SS



EC

REP

MedEnvoy Global BV
Pr. Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Den Haag
Países Bajos